



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**BILANCIA DIGITALE IN VETRO**  
**GLASS DIGITAL SCALE**  
**PÈSE-PERSONNES EN VERRE À AFFICHAGE NUMÉRIQUE**  
**GLASPERSONENWAAGE**  
**BÁSCULA DIGITAL DE CRISTAL**  
**BALANÇA DIGITAL DE VIDRO**  
**ΨΗΦΙΑΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ**  
**SZKLANA WAGA CYFROWA**  
**چاگز ن م یلای جید نازی م**  
**DIGITAALINEN LASIVAAKA**  
**STAKLENA DIGITALNA VAGA**  
**ÜVEGBŐL KÉSZÜLT DIGITÁLIS MÉRLEG**  
**CÂNTAR DIGITAL DIN STICLĂ**  
**DIGITAL GLASVÁG**

**MANUALE D'USO E MANUTENZIONE**  
**USE AND MAINTENANCE BOOK**  
**INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN**  
**BETRIEBS UND WARTUNGS ANWEISUNGEN**  
**MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO**  
**MANUAL DE USO E MANUTENÇÃO**  
**ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ**  
**PODRĘCZNIK EKSPLOATACJI I KONSERWACJI**  
**KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS**  
**PRIRUČNIK ZA UPOTREBU I ODRŽAVANJE**  
**HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ**  
**MANUAL DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE**  
**ANVÄNDNINGSG- OCH UNDERHÅLLSMANUAL**

**REF** GBS-810D (GIMA 27248 - 27249)

Fabbricato da/Made by/Faite par/Hecho por/Feito por/Hergestellt von/Zrobione przez/Ἐτιασμένο από/  
**GUANGDONG TRANSTEK MEDICAL ELECTRONICS.CO.LTD.**  
Jin'an Road , Minzhong, Zhongshan 528441, China  
Made in China


Importato e distribuito da/Imported and distributed by  
**GIMA S.p.A.**  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
www.gimaitaly.com



## CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES


- Auto ON
- Auto OFF
- Unidad de medida del peso: kg, lb, st:lb
- Capacidad: 150kg/330lb/23st:8lb
- Escala: 0.1kg/0.2lb/0.2lb(1lb,  $\geq 20$ st)
- Mensaje de sobrecarga: “ \_ \_ \_ \_ \_ ”
- Mensaje de pila agotada “Lo”
- Alimentación: 1 x pila CR2032

PANTALLA LCD

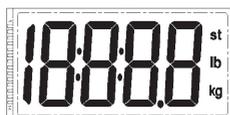

## REEMPLAZAR LA PILA

- Asegúrese de que los polos +/- sean correctos.
- Utilice una herramienta adecuada para retirar más fácilmente la pila de su sede si es necesario. Retire la tira aislante antes del uso.

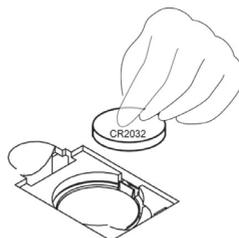

## TECLAS FUNCIÓN



## INSTRUCCIONES DE USO

1. Pulse la tecla UNIT para encender y seleccionar la unidad.
2. Coloque la báscula en una superficie sólida y llana, deje que la báscula se apague automáticamente.
3. Suba directamente sobre la base de la báscula. La pantalla parpadea hasta que el peso se establezca. Al cabo de 10 segundos se apaga automáticamente.
4. Si no se utiliza, se apaga automáticamente.
5. Cuando no se utiliza, se debe guardar en posición horizontal sin apoyar ningún objeto encima.



### ADVERTENCIAS:

*No utilice la báscula sobre una alfombra*

*Para asegurar una medición precisa del peso, cuando desplace la báscula recomendamos encenderla (o tocarla) y esperar que se apague. A continuación podrá subir a la báscula para medir su peso. De lo contrario, podría detectar un peso superior.*



### ELIMINACIÓN:

*El producto no ha de ser eliminado junto a otros residuos domésticos. Los usuarios tienen que ocuparse de la eliminación de los aparatos por desguazar llevándolas al lugar de recogida indicado por el reciclaje de los equipos eléctricos y electrónicos.*

*Para más información sobre los lugares de recogida, contactar el propio ayuntamiento de residencia, el servicio de eliminación de residuos local o la tienda en la que se compró el producto. En caso de eliminación equivocada podrían ser aplicadas multas, en base a las leyes nacionales.*

## CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.