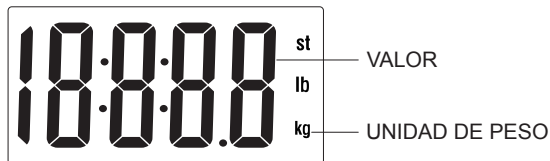



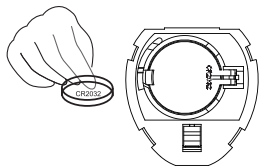
**BILANCIA IN PLASTICA ULTRASOTTILE
ULTRA SLIM PLASTIC BODY SCALE
BALANCE EN PLASTIQUE ULTRA MINCE
ULTRADÜNNE PERSONENWAAGE
BÁSCULA DE PLÁSTICO ULTRA FINA
BALANÇA DE PLÁSTICO SUPER FINA
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΛΕΠΤΗ
WAGA PLASTIKOWA ULTRACIENKA**

ميزان من البلاستيك رقيق جدا

**MANUALE D'USO E MANUTENZIONE
USE AND MAINTENANCE BOOK
INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN
BETRIEBS UND WARTUNGS ANWEISUNGEN
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO
MANUAL DE USO E MANUTENÇÃO
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
PODRĘCZNIK EKSPLOATACJI I KONSERWACJI
دليل الإستعمال والرعاية****ATTENZIONE:** Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.**ATTENTION:** The operators must carefully read and completely understand the present manual before using the product.**AVIS:** Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d'utiliser le produit.**ACHTUNG:** Die Bediener müssen vorher dieses Handbuch gelesen und verstanden haben, bevor sie das Produkt benutzen.**ATENCIÓN:** Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual antes de utilizar el producto.**ATENÇÃO:** Os operadores devem ler e entender completamente este manual antes de usar o produto.**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Οι χειριστές αυτού του προϊόντος πρέπει να διαβάσουν και να καταλάβουν πλήρως τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από την χρήση του.**UWAGA:** przed rozpoczęciem użytkowania wyrobu operatorzy muszą przeczytać podręcznik i upewnić się, iż wszystko to, co jest w nim napisane jest dla nich jasne i zrozumiałe**الحذر:** على العمال قراءة وفهم هذا الدليل بكامله قبل البدء باستعمال المنتج.**REF** 27262Teme l'umidità
Keep away from humidityConservare al riparo della luce solare diretta
Protect against direct sunlightFabbricante
ManufacturerGima S.p.A. - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
Made in P.R.C.


PANTALLA LCD FULL**CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES**

- Auto ON
- LCD Extra Large 76x40mm
- Unidad de Peso: kg, lb, st:lb
- Capacidad: 150kg/330lb/23st:8lb
- Escala: 0.1kg/0.2lb/0.2lb (1lb, ≥ 20 st)
- Mensaje de sobrecarga: “”
- Mensaje de batería agotada “Lo”
- Batería: 1 x CR2032

REEMPLAZAR LA BATERÍA

- Asegúrese de que los polos +/- sean correctos.
- Utilice una herramienta adecuada para retirar más fácilmente la batería de su sede, si es necesario.

Retire la tira aislante antes del uso.

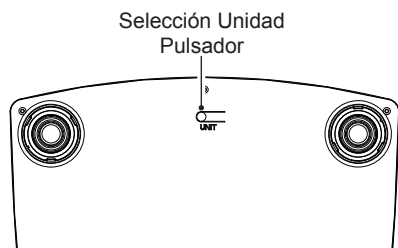TECLAS FUNCIÓN**INSTRUCCIONES DE USO**

- 1) Pulse la tecla **UNIT** para encender y seleccionar la unidad.
- 2) Coloque la báscula en una superficie sólida y llana, deje que la báscula se apague automáticamente.
- 3) Suba directamente sobre la base de la báscula. La pantalla parpadea hasta que el peso se establece. Al cabo de 10 segundos se apaga automáticamente.
- 4) Si no se utiliza, se apaga automáticamente
- 5) Cuando no se utiliza, se debe guardar en posición horizontal sin apoyar ningún objeto encima.

**Advertencias:**

- *No utilice la báscula sobre una alfombra*
- *Para asegurar una medición precisa del peso, cuando desplace la báscula recomendamos encenderla (o tocarla) y esperar que se apague. A continuación podrá subir a la báscula para medir su peso. De lo contrario, podría detectar un peso superior.*



Eliminación: El producto no ha de ser eliminado junto a otros residuos domésticos. Los usuarios tienen que ocuparse de la eliminación de los aparatos por desguazar llevándolos al lugar de recogida indicado por el reciclaje de los equipos eléctricos y electrónicos. Para más información sobre los lugares de recogida, contactar el propio ayuntamiento de residencia, el servicio de eliminación de residuos local o la tienda en la que se compró el producto. En caso de eliminación equivocada podrían ser aplicadas multas, en base a las leyes nacionales.

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Enhorabuena por haber comprado un producto nuestro.

Este producto cumple con elevadas normas cualitativas, tanto en el material como en la fabricación. La garantía es válida por un plazo de 12 meses a partir de la fecha de suministro GIMA. Durante el periodo de vigencia de la garantía se procederá a la reparación y/o sustitución gratuita de todas las partes defectuosas por causas de fabricación bien comprobadas, con exclusión de los gastos de mano de obra o eventuales viajes, transportes y embalajes.

Están excluidos de la garantía todos los componentes sujetos a desgaste.

La sustitución o reparación efectuada durante el periodo de garantía no tienen el efecto de prolongar la duración de la garantía. La garantía no es válida en caso de: reparación efectuada por personal no autorizado o con piezas de recambio no originales, averías o vicios causados por negligencia, golpes o uso impropio. GIMA no responde de malfuncionamientos en aparatos electrónicos o software derivados de agentes externos como: oscilaciones de tensión, campos electromagnéticos, interferencias radio, etc. La garantía decae si no se respeta lo indicado arriba y si el número de matrícula (si está presente) se ha quitado, borrado o cambiado.

Los productos considerados defectuosos tienen que devolverse solo al revendedor al que se le compró. Los envíos realizados directamente a GIMA serán rechazados.