



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**BILANCIA PESANEONATI DIGITALE
ELECTRONIC BABY SCALE
PÈSE-BÉBÉ ÉLECTRONIQUE
ELEKTRONISCHE BABYWAAGE
PESA BEBÉS ELECTRÓNICO
BALANÇA PARA RECÉM-NASCIDOS ELETRÔNICA
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ ΓΙΑ ΒΕΟΓΕΝΝΗΤΑ
إلكتروني لأطفال نازيم**

GIMA 27313

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Hersteller
Fabricante / Fabricante / Παραγωγός / الشركة المصنعة

Shenzhen Healthcare Electronic Technology Co., Ltd.
1F~3F of Block 48, 1F~3F of Block 46, Changxing Industrial Zone,
Changzhen Community, Gongming Street, Guangming District,
Shenzhen City, Guangdong Province, P.R. China
elaine.li@healthscale.com
Made in China


REF TH996A-V1

Importato da / Imported by / Importé par / Eingeführt von
Importado por / Importado por / Εισαγωγή από / مستورد عن طريق:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



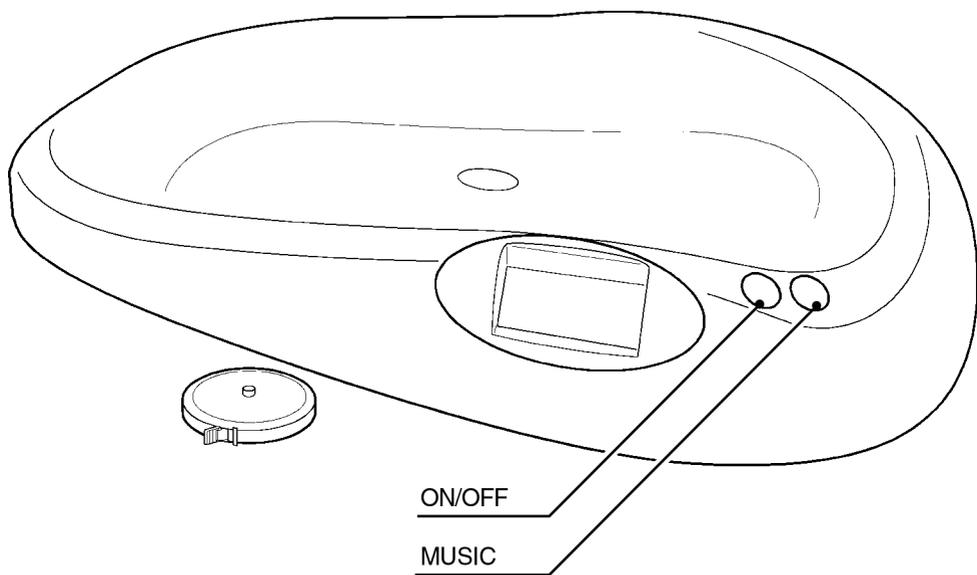

CARACTERÍSTICAS

El pesa bebés electrónico GIMA es un dispositivo útil para medir peso y altura de los recién nacidos. La balanza es de gran precisión y está dotada de configuración automática del cero y apagado automático después de 30 segundos sin utilizarla. Junto al producto se suministra un pequeña sábana lavable para cubrir la bandeja durante la medición y una rueda métrica para las mediciones de la estatura.

Características Técnicas

Capacidad Máxima: 20 Kg / 44 lbs

Precisión: 10 g

Temperatura de trabajo: 5°C - 35°C

Alimentación: 4 pilas AA 1,5V

Capacidad Mínima: 20 g

Medida altura: 0-150 cm / 0-60 in

Temperatura de almacenamiento: -10°C -60°C

Tolerancia: <5.00kg/±0.02kg, ≥5.00kg/±0.2%+0.01kg

PRESCRIPCIONES

No utilice el producto si advierte algún defecto. Diríjase a su proveedor.

Evitar cualquier arreglo provisorio. Los arreglos han de efectuarse exclusivamente con partes de repuesto originales que han de ser instalados según el uso previsto.

Siendo el producto construido con materiales resistentes a la corrosión y a las condiciones ambientales previstas para su normal uso, no necesita particular atención; sin embargo se tiene que conservar en un ambiente cerrado y oscuro protegiéndola de la luz, del polvo y de la suciedad para poder garantizar las condiciones higiénicas. Se recomienda no dejar al recién nacido sin vigilar sobre la balanza y no dejar la rueda métrica a su alcance.

DESEMBALAJE



Recordamos que los elementos del embalaje (papel, celofán, grapas metálicas, cinta adhesiva, etc..) pueden cortar y/o herir si no se manipulan con cuidado. Han de quitarse con oportunos medios y no dejados en manos de personas no responsables; lo mismo vale para las herramientas utilizadas para remover los embalajes (tijeras, cuchillas, etc.).

La primera operación que se tiene que efectuar, una vez abiertos los embalajes, es un control general de las piezas y de las partes que componen el producto; averiguar que estén presentes todos los componentes necesarios y también que sus condiciones sean perfectas.

INSTALACIÓN

La primera operación a realizar, después de desembalar el producto es la instalación de las pilas.

El compartimiento de las pilas se halla debajo de la base de la balanza. Instalar 4 nuevas pilas observando que las polaridades sean correctas y volver a cerrar la tapa del compartimiento.

El pesa bebés no requiere calibrado pero es necesario que esté perfectamente horizontal.

FUNCIONAMIENTO

Asegurase siempre de que no hayan cuerpos extraños debajo del pesa bebés y que los pies se apoyen en la superficie de soporte.

Pulsar la tecla ON/OFF y esperar algún segundo sin apoyar pesos sobre la bandeja. Cuando se activa la escala, se mostrará el último valor de medición (no menos de 0,5 kg y bloqueado), si lo hay, y luego se restablecerá a 0,00. Cuando en el visor digital aparece la inscripción "0.00" el pesa bebés está listo para el uso.

La balanza está normalmente configurada en kg. Para cambio la unidad de medida, después de encender la báscula, presione la tecla de encendido / apagado nuevamente antes de que muestre 0.0.

Cada vez que se presiona será posible seleccionar alternativamente entre kg o lb, en el visor digital se visualizará la unidad de medida seleccionada.

Para distraer al recién nacido y facilitar las operaciones de pesaje es posible activar una melodía pulsando la tecla "MUSIC", para desactivar la melodía pulsar otra vez la misma tecla.

Lea el valor del peso que parpadea en la pantalla. Si el pesa bebés supera la capacidad máxima en el visor digital aparece "0-LD". Cuando se elimina el peso, se restablece a 0.00.



No golpees.

No apile artículos diversos en la báscula.

No sumergir en agua.

¡No pesar cargas excesivas y evitar que los niños se muevan sobre la bandeja, la célula de carga se puede dañar!

Si el pesa bebés no se utiliza se apaga automáticamente después de unos 30 segundos, para apagar manualmente la balanza pulsar la tecla ON/OFF con la balanza descargada.

Quitar las pilas cuando el producto no se utiliza por mucho tiempo.

Para efectuar la medición de la altura, posicionar al recién nacido estirado encima de una superficie estable y utilizar la rueda métrica suministrada.

MANTENIMIENTO

Cuando en el visor digital aparece la indicación de baja tensión "Lo", es necesario sustituir las pilas.

El producto no necesita un mantenimiento especial. La vida útil depende del empleo, para limpiarlo no sumergirlo en agua o líquidos; usar un trapo suave embebido con detergentes y/o desinfectantes que no corroan el producto.

	Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente		Siga las instrucciones de uso		Disposición WEEE
	Conservar en un lugar fresco y seco		Conservar al amparo de la luz solar		Límite de temperatura
	Código producto		Número de lote		Fecha de fabricación
	Producto conforme a la Directiva Europea				



Eliminación: *El producto no ha de ser eliminado junto a otros residuos domésticos. Los usuarios tienen que ocuparse de la eliminación de los aparatos por desguazar llevándolas al lugar de recogida indicado por el reciclaje de los equipos eléctricos y electrónicos.*

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.