

**seca 210**

**seca**  
Precision for health

## Cordiales felicitaciones

Con la esterilla métrica seca 210 ha adquirido un exacto al mismo tiempo que sólido equipo de medición longitudinal para bebés.

La esterilla métrica seca 210 ha sido concebida para su aplicación en consultorios médicos de pediatría, hospitales o para la visita a domicilio de obstetras y médicos pediatras.

La esterilla métrica puede enrollarse, por lo que necesita sólo muy poco espacio. Además, en el tope de cabeza se encuentran orificios que sirven para colgarla de una pared.

## Seguridad

Antes de proceder al uso de la esterilla métrica, rogamos sirva tomarse un poco de tiempo para leer las siguientes notas sobre la seguridad.

Sírvase observar las notas y advertencias expuestas en las instrucciones de servicio.


- No deje jamás sin supervisión al bebé sobre la esterilla métrica.
- Mida la talla longitudinal sólo sobre bases de las que el bebé no pueda caerse.
- Preste atención a que la esterilla métrica se limpie y desinfecte en períodos regulares para prevenir la transmisión de enfermedades infecciosas.
- Para una medición longitudinal exacta es ideal la asistencia de una segunda persona.

## Servicio

### Proceso de medición:

1. Tender el bebé sobre la esterilla métrica. La cabeza del mismo debe tocar el tope de cabeza (1) de la esterilla métrica.
2. Con la mano derecha, correr el tope de pie (2) en dirección hacia los pies del bebé. La mano izquierda sujeta al mismo.

3. Estirar las piernas presionando suavemente las rodillas del bebé contra la esterilla.
4. Con la mano derecha, aplicar el tope de pie (2) en ángulo recto contra los talones de los pies del infante.
5. Leer la longitud del cuerpo en la graduación del fondo de la esterilla métrica (3).  
Observando los pasos precedentes se consigue una exactitud superior a  $\pm 5$  mm.

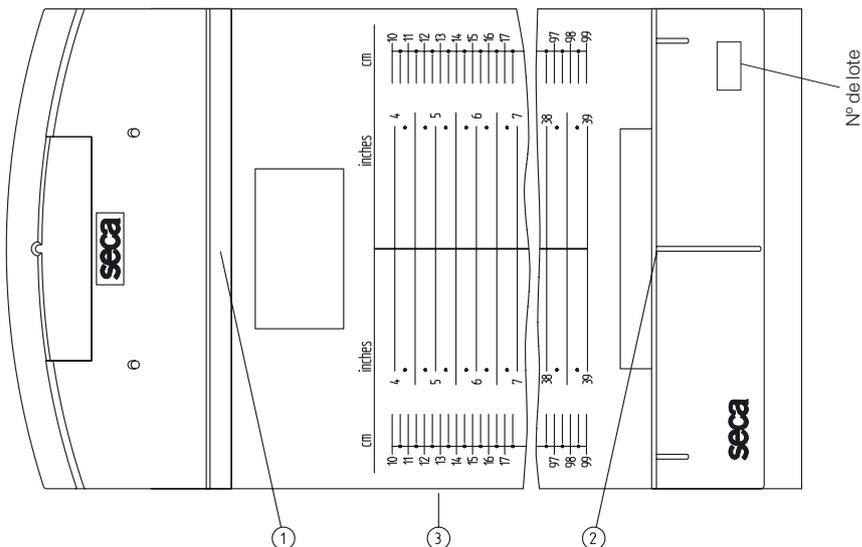

## Limpieza

Limpiar la esterilla métrica según la necesidad con un detergente doméstico o un producto desinfectante usual. Sírvase observar las advertencias dadas por el productor.

## Datos técnicos

Gama de medición:	100 - 990 mm / 4 - 39 pulgadas
Graduación:	5 mm / 1/4 de pulgada
Precisión:	mejor de $\pm 5$ mm
Peso propio:	aprox. 500 gr.
Gama de temperatura:	+10°C hasta +40°C
Producto médico-sanitario conforme a la directiva 93/42/CE:	Clase I con función métrica

## Eliminación

Una vez que la esterilla métrica no pueda usarse más, los servicios municipales para la recogida de desechos le informarán sobre la forma adecuada para eliminarla reglamentariamente.

## Garantía

Garantizamos 2 años de garantía a partir de la fecha de entrega por los fallos debidos a fallos de material o de fabricación. Se excluyen todas las piezas móviles como p. ej. pilas, cables, equipos de alimentación, acumuladores, etc. Los fallos que recaigan durante el período de garantía se subsanarán gratis presentando el recibo de compra. Otros derechos no pueden tenerse en consideración. El transporte de ida y vuelta corre a cargo del cliente, si el aparato se encuentra en otro lugar de la sede del cliente. Sólo se concederán derechos de garantía en casos de daños de transporte, si en el transporte se usó el embalaje original y la mercancía se aseguró y sujetó tal como en su estado original. Por lo tanto, conserve todas las piezas de embalaje.

La garantía caduca si el aparato es abierto por personas que no han sido autorizadas expresamente para ello por seca.

Rogamos a los clientes extranjeros que se dirijan ante un caso de garantía al vendedor del país respectivo.

## Declaración de conformidad

Equipo mecánico para medición longitudinal

Modelo seca 210

Nº de lote: véase esterilla métrica

La esterilla métrica cumple los requisitos vigentes de la directiva 93/42/CE para productos médico-sanitarios.

seca gmbh & co. kg.



Sönke Vogel  
– Geschäftsführer Finanzen & Technik –

Hamburg

: [www.seca.com](http://www.seca.com)

## **seca** deutschland

Medical Scales and Measuring Systems

seca gmbh & co. kg.

Hammer Steindamm 9-25

22089 Hamburg • Germany

Phone • +49 (0)40 20 00 00 0

Fax • +49 (0)40 20 00 00 50

E-mail • [info@seca.com](mailto:info@seca.com)

All contact data under [www.seca.com](http://www.seca.com)

17-10-02-222 h/08 L

**seca**  
group

**seca** deutschland

**seca** france

**seca** united kingdom

**seca** north america

**seca** schweiz

**seca** zhong guo

**seca** nihon

**seca** mexico

**seca** austria