



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**CARRELLO EXCEL
EXCEL TROLLEY
CHARIOT EXCEL
CARRO EXCEL
CARRINHO EXCEL
WAGEN "EXCEL"
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ EXCEL**

**Manuale d'uso - User manual - Manuel de l'utilisateur - Guía de uso
Guia para utilização - Gebrauchs ungsanleitung - Οδηγίες χρήσης**

REF 27440 - 27441



Distribuito da / distributed by / distribué par / distribuido por /
vertrieben von / distribuído por / Διανέμεται από:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

Made in Italy

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante
/ Hersteller / Κατασκευαστής:

SCROSATI ARREDAMENTI METALLICI SRL

Via Vittorio Veneto 95, 21015 Lonate Pozzolo (VA)
scrosati@scrosati.com

INTRODUCCIÓN

Se aconseja leer atentamente el siguiente manual antes de utilizar la instalación sanitaria.

DESCRIPCIÓN


Este artículo es un carro de productos de acero pintado con 3 ó 4 estantes fijos. Es un carro de servicio para uso hospitalario. El carro Excel es un práctico carrito adecuado al soporte y/o transporte de pequeños electromedicales.

COMPONENTES

- 3 estantes cód.27440
- 4 estantes cód.27441
- 2 patas

Bolsa con material de montaje:

- 4 ruedas

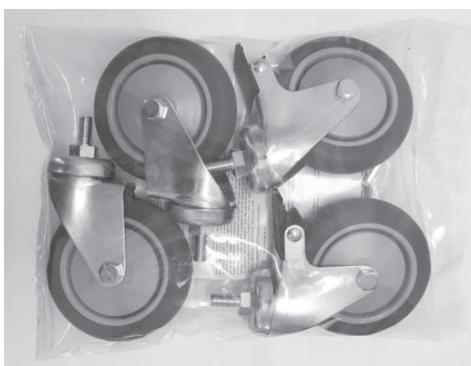


- 12 tornillos TTBE 8X25 cód.27440
- 16 tornillos TTBE 8x25 cód.27441

- 12 arandelas 8X16 cód.27440
- 16 arandelas 8X16 cód.27441

- 12 tornillos TT 8X16 FE cód.27440
- 16 tornillos TT 8X16 FE cód.27441

- 2 LLAVES ALLEN

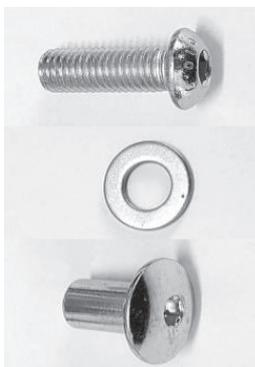



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Comenzar la fase de montaje preparando una superficie horizontal de trabajo estable.

Atornillar las ruedas a la base de ambas patas.

Para fijar los estantes a la estructura, empezar por un lado y tomar los tornillos de unión.

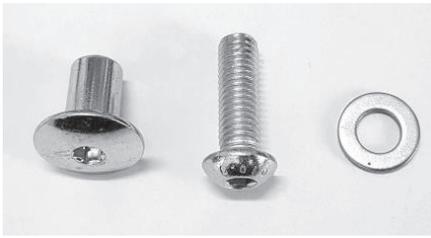Tornillos de unión	Tornillo y arandela para insertar en el interior del estante	Tornillo TT para insertar en la estructura en la parte exterior de la pata
		

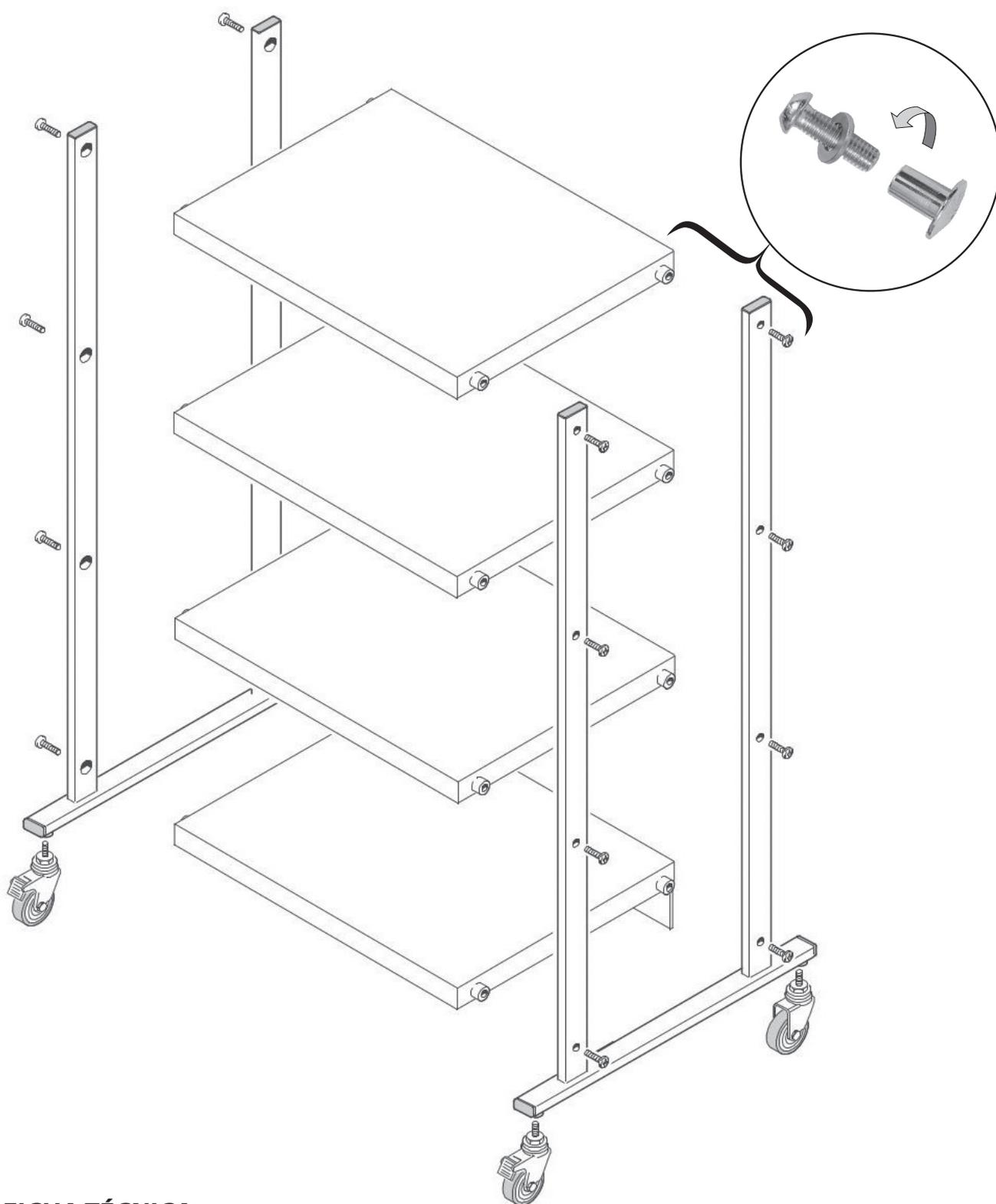

FICHA TÉCNICA

Medidas	Carro 3 estantes: 66x68x h 81 cm Carro 4 estantes: 66x68x h 111 cm Estante: 60 x 45 x h 2,5 cm Caja: 96,5 x 18,5 x h 74 cm
Peso	Carro 3 estantes: 27 kg (28,8 kg con caja) Carro 4 estantes: 35,5 kg (37,3 kg con caja)
Capacidad máxima	80 kg

ADVERTENCIAS DE USO

- Comprobar que las tuercas del bloqueo estén bien ajustadas.
- Atenerse a las capacidades máximas indicadas en las fichas técnicas.
- Evitar el contacto directo con heridas abiertas.
- No adecuada para el uso en ambientes abiertos.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Utilizar sólo recambios originales.
- Controlar periódicamente todos los puntos de fijación.
- Para conservarlo del mejor modo, se aconseja evitar la exposición prolongada a los rayos solares; el contacto con ambientes salinos; el depósito en ambientes muy húmedos.
- Lavar las superficies de acero inox con agua con jabón y usar desinfectantes adecuados.
- Enjuagar con un paño mojado y secar con cuidado.
- No derramar en las superficies detergentes a base de cloro o amoníaco, sustancia grasas y oleosas.
- No usar para la limpieza herramientas que contengan hierro. Si es necesaria la desinfección, usar sólo productos idóneos no corrosivos.

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.