



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Gima S.p.A. - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
Italia: tel. 199 400 401 - fax 199 400 403
Export: tel. +39 02 953854209/221/225 - fax +39 02 95380056
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

LETTINO 3 PEZZI POLIVALENTE

3-SECTION MULTIFUNCTIONAL BED

DIVAN POLYVALENT 3 PIÈCES

CAMILLA 3 PIEZAS POLIVALENTE

Manuale utente - User manual - Notice d'utilisation - Manual del usuario

ATTENZIONE: *Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.*

ATTENTION: *The operators must carefully read and completely understand the present manual before using the product.*

AVIS: *Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d'utiliser le produit.*

ATENCIÓN: *Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual antes de utilizar el producto.*



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1
20060 Gessate (MI) Italy

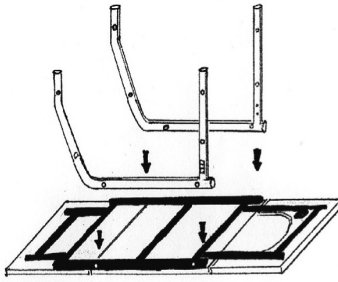


Fig. 1



ARANDELA GROWER



ARANDELA LLANA

Fig. 2

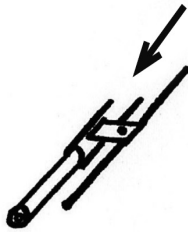


Fig. 3

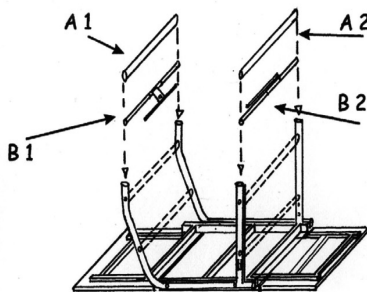


Fig. 4

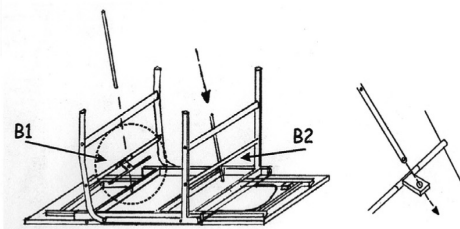


Fig. 5

Fig. 5.1

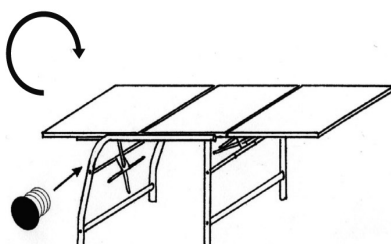


Fig. 6

ESPAÑOL

Fig. 1

- Retire de la caja las patas y los travesaños.
- Coloque las patas frente a los casquillos roscados en el armazón de la plataforma mullida manteniendo el agujero con diámetro mayor en el exterior del camilla.

Fig. 2

- Inserte los tornillos (asegurándose de que las arandelas se coloquen correctamente en el tornillo allen).

NB: los tornillos se deben apretar enérgicamente al final del montaje.

Fig. 3

- Inserte el accesorio para el bloqueo de los cojines en el travesaño galvanizado.

Fig. 4

- Coloque los travesaños como en el dibujo: B1 bloqueo con placa larga. B2 bloqueo con placa corta.
- Inserte los tornillos (fig. 2).

N.B.: para un funcionamiento excelente se aconseja mantener el casquillo galvanizado de b1 y b2 con el diámetro mayor dirigido hacia la plataforma mullida..

Fig. 5

- Inserte la barra galvanizada larga en B1 y la barra corta en B2 (Fig. 5 y 5.1)
- Fije las barras a los cojines con los tornillos adecuados después de controlar que el accesorio para el bloqueo (Fig. 3) esté dirigido hacia el centro de la camillas.

Fig. 6

NB: Para poner la camilla en posición de trabajo es bueno tener la ayuda de una segunda persona ya que el art. 27505 tiene un peso considerable.

- Apriete enérgicamente los tornillos.
- Inserte los 12 cubrecabeza de plástico con la ayuda de un martillo

NB: la rotación de la camilla podría causar movimientos bruscos a los cojines, por favor tenga cuidado.

