



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Gima S.p.A. - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
Italia: tel. 199 400 401 - fax 199 400 403
Export: tel. +39 02 953854209/221/225 - fax +39 02 95380056
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

LETTINO VISITA KING EXAMINATION COUCH KING DIVAN D'EXAMEN KING CAMILLA VISITA KING

Manuale utente - User manual - Notice d'utilisation - Manual del usuario

ATTENZIONE: *Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.*

ATTENTION: *The operators must carefully read and completely understand the present manual before using the product.*

AVIS: *Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d'utiliser le produit.*

ATENCIÓN: *Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual antes de utilizar el producto.*



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1
20060 Gessate (MI) Italy

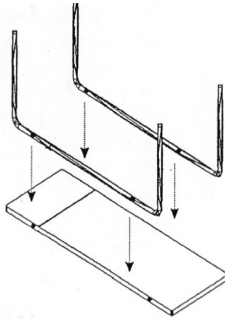


Fig. 1

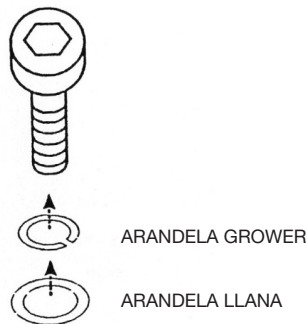


Fig. 2

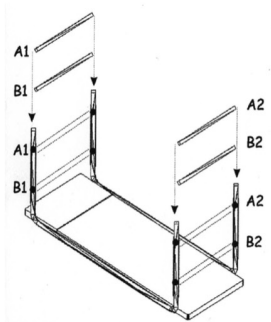


Fig. 3

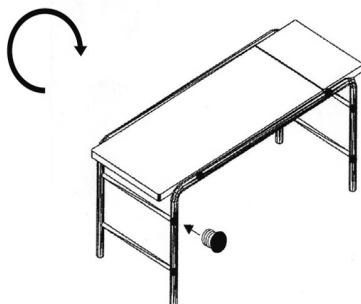


Fig. 4

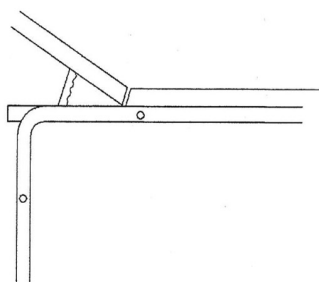


Fig. 5

ESPAÑOL

Fig. 1

- Retire de la caja las patas y los travesaños.
- Coloque las patas frente a los casquillos roscados en el armazón de la plataforma mullida manteniendo el agujero con diámetro mayor en el exterior del camilla.

Fig. 2

- Inserte los tornillos (asegurándose de que las arandelas se coloquen correctamente en el tornillo allen).

NB: los tornillos se deben apretar enérgicamente al final del montaje.

Fig. 3

- Inserte los travesaños en el siguiente orden: B1, A1, B2, A2 como se indica en la figura.
- Inserte los tornillos (Fig. 3).

A1/A2 Tubo ovalado 50x25x1.5
B1/B2 Tubo redondo 30x2

Fig. 4

NB: Para poner la camilla en posición de trabajo es bueno tener la ayuda de una segunda persona ya que el artículo tiene un peso considerable. Durante la rotación mantenga en posición longitudinal el cojín de cabecera a fin de evitar una apertura brusca.

- Apriete enérgicamente los tornillos.
- Inserte los 12 cubrecabeza de plástico con la ayuda de un martillo (Fig. 4).

Fig. 5

MODO DE USO

La cabecera es ajustable por medio de una cremallera.

Después de llevar el cojín a la altura deseada, si se desea ponerlo en posición horizontal es necesario que la cremallera llegue hasta el final de su carrera (Fig. 5).

