



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

LETTINI PER CENTRI BENESSERE

BEAUTY BEDS

LITS DE SOINS ESTHÉTIQUES

CAMILLAS DE BELLEZA

REF 2205 (GIMA 28005, 28006)

Fabbricante / Manufacturer/Fabricant/Fabricante/Fabricante

SILVERFOX CORPORATION LIMITED

No. 18, 1st TongLe Road, TangXia Town, Pengjiang District, JiangMen City, GuangDong Province, China

amy.liang@silverfox.cn

Made in China

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com



1 ACERCA DE ESTE MANUAL


Este manual solo se utilizará como referencia de funcionamiento de este modelo en específico. Si el manual se utiliza para otros fines, no asumiremos las consecuencias y responsabilidades correspondientes. Toda la información de este manual estará protegida por los derechos de autor y no se copiará ni traducirá en ninguna de sus partes sin el consentimiento escrito del fabricante.

2 ADVERTENCIAS

- No se pare sobre este equipo.
- No permita que los niños jueguen con el equipo y colóquelo en un lugar donde los niños no puedan tocarlo. Por favor, ajuste el respaldo a la posición más alta cuando salga.
- No coloque el producto en un ambiente húmedo, para evitar fallos.
- No coloque ni opere el equipo en lugares donde se esté pintando/recubriendo o suministrando oxígeno.
- A menos que sean supervisados o instruidos por personal responsable de su seguridad personal, las personas que tengan impedimentos físicos, trastornos táctiles, trastornos mentales, no estén familiarizados con el equipo, no utilicen el sentido común o los niños, no están autorizados a utilizar el equipo.
- Asegúrese de que no haya nada que impida la carrera durante el funcionamiento de la camilla.
- La operación debe ser procesada por profesionales capacitados.

3 PRECAUCIONES

- El equipo debe ser utilizado por una persona experimentada que debe estar familiarizada con la estructura, las características y los métodos de uso del producto. Haga un mantenimiento regular.
- Lea este manual cuidadosamente antes de la instalación, operación y ajuste. Conserve este manual de manera adecuada.
- Este producto no debe ser utilizado poniendo todo el peso en un solo lado o en un solo punto.
- Cumpla con las normas de operación de seguridad, no sobrecargue el producto, asegúrese de que el equipo de protección de seguridad del producto esté completo y sea confiable, para eliminar a tiempo los factores inseguros.
- Apriete los pernos y las tuercas con regularidad para evitar fallos causados por piezas sueltas, deslizamiento, vibración y caída de piezas.
- Durante el mantenimiento, el operador no debe desmontar ninguna parte de la camilla a voluntad.
- No se permite el funcionamiento de este producto cuando tenga fallas. Si se encuentra un fenómeno anormal o un sonido anormal, debe ser detenido para su inspección inmediata, y el trabajo puede ser reanudado después de la resolución de problemas.
- El operador debe estar familiarizado con las precauciones descritas en cada sección del manual para garantizar la seguridad de la persona y del producto.
- Por favor, haga funcionar el equipo estrictamente de acuerdo con la etiqueta de advertencia pegada en los productos.
- Solo profesionales capacitados deben realizar el mantenimiento.
- Después de cada tratamiento, por favor, use un reactivo neutro para limpiar el polvo, las manchas en el cuero o en las piezas de madera.
- Cuando ajuste el respaldo, el cojín del asiento, el reposapiés o al levantar toda la camilla mediante el mando de mano o el mando de pie instalado, por favor, mantenga las manos, los pies y la cabeza alejados de la posición como muestra la siguiente flecha. (Por favor, vea la figura de la derecha)

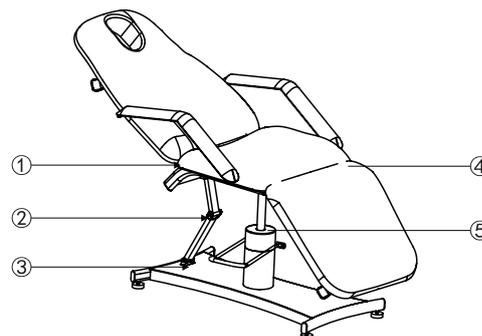

4 RANGO APLICABLE


Estas camillas de belleza son adecuadas para los tratamientos de belleza, masaje y manicura.

5 INSTALACIÓN


1. Coloque la camilla en un lugar adecuado, de acuerdo con la distribución general, la iluminación natural o artificial y las condiciones de funcionamiento del salón o de la casa. Y manténgala en un ambiente limpio, seco y fresco.
2. Abra la caja de embalaje para comprobar si la camilla está intacta y si los accesorios o repuestos están completos. Por favor, póngase en contacto con el distribuidor o con nosotros si hay algún problema.
3. Guía de instalación de la Camilla de Belleza
Coloque la camilla en la posición correcta. Tenga en cuenta que no es necesario fijar la camilla al suelo con un tornillo adicional, el diseño original prevé una buena estabilidad. Asegúrese de que la camilla esté colocada en un suelo firme y plano, a fin de evitar cualquier accidente. Si la camilla gira o se inclina debido a un piso irregular, se deben ajustar las cuatro patas de plástico (M10x30) por medio de las tuercas (M10) con una llave fija hexagonal en el panel inferior, para asegurarse de que la camilla sea estable.

Procedimiento de instalación sin motor


Pic 1

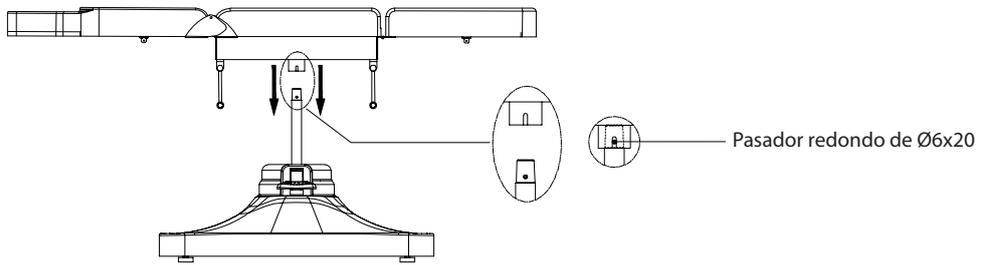


Pic 2

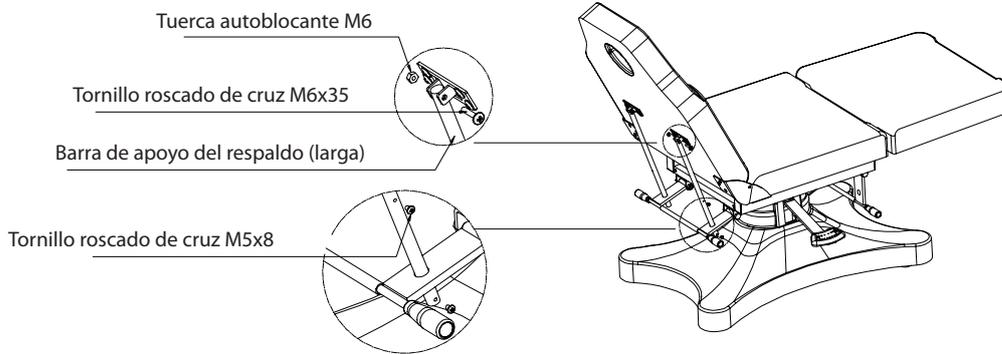


Pic 3

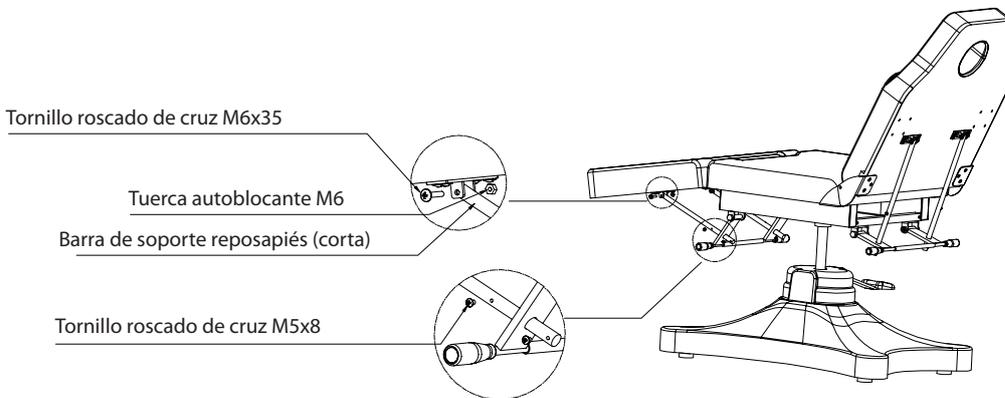

Pic 4

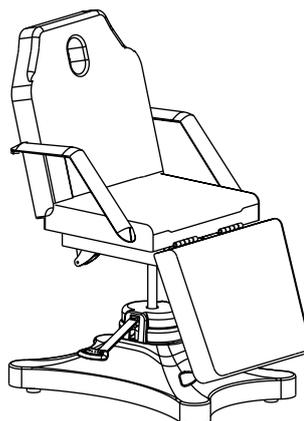


Instale el reposabrazos como se muestra en la ilustración siguiente.

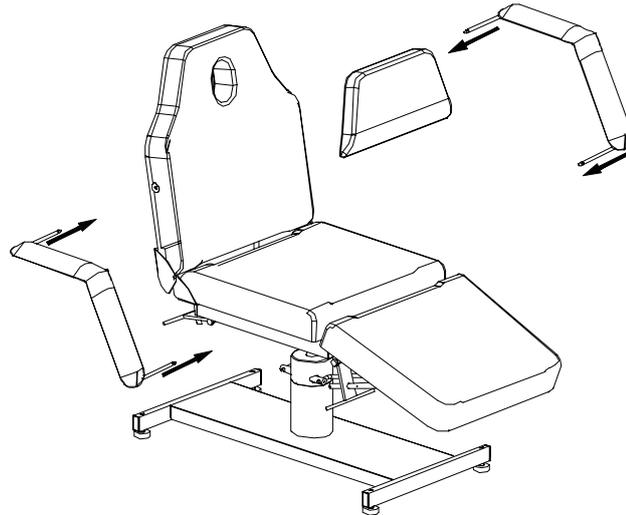

Ajuste de altura



1. Pise el pedal ligeramente para levantar toda la camilla. Pise el pedal constantemente para bajar toda la camilla.
2. Presione el pedal hasta la posición más alta para hacer la camilla fija.

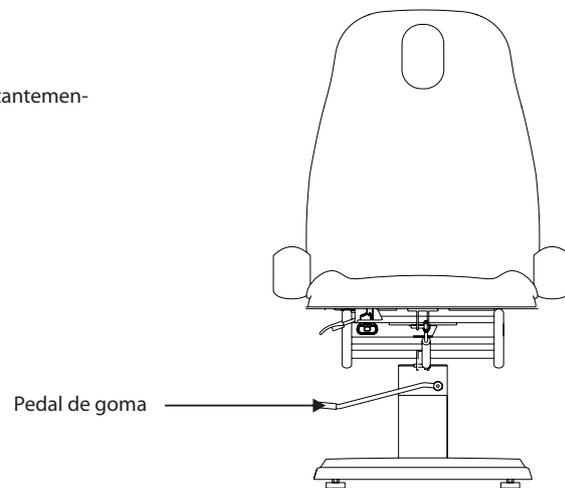

6 Parámetros técnicos

Temperatura ambiente	0°C--+40°C
Humedad relativa	30%^-90%
Carga nominal de elevación	175 kg

Tamaño del paquete

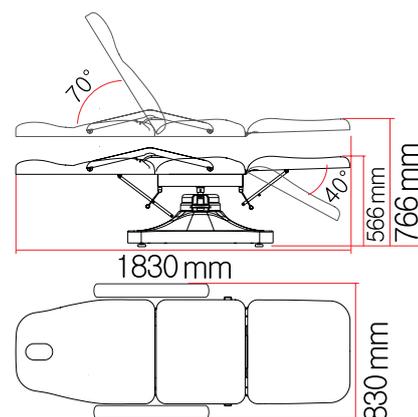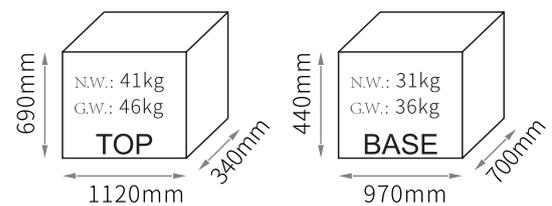

7 MANTENIMIENTO

1. Después de cada tratamiento, utilice un reactivo neutro para eliminar el polvo, las manchas en el cuero o la cubierta de plástico de la camilla. Esto es para prevenir el envejecimiento prematuro de la cubierta de piel y plástico.
2. Lubrique las partes móviles regularmente (una vez al año)

8 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Sonido anormal	1. Las piezas giratorias carecen de aceite lubricante	1. Añada aceite lubricante
	2. Las posiciones de rotación (como la bisagra, los juegos de POM) carecen de aceite lubricante	2. Añadir aceite lubricante

Si el problema sigue sin resolverse después de la operación anterior, por favor, póngase en contacto con el centro de mantenimiento o con el proveedor para resolverlo.

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.