

## SINUS A

### LAVADO NASAL

Botella 120 ml + 12 bolsitas de solución salina

# SINUS A


**Composición:** Sodium Cloride, Sodium Bicarbonate

**Características:** los lavados nasales eliminan los síntomas debidos a las alergias, a la inflamación de la mucosa nasal, a la congestión nasal, a la sequedad de las fosas nasales, al frío común y a la rinitis del embarazo. Se ha demostrado clínicamente que pueden proporcionar un alivio eficaz en todas las condiciones difíciles de las vías respiratorias y ayudan a restaurar una mejor respiración. La solución salina ayuda a lavar los conductos nasales. Es un remedio totalmente natural y seguro para todas las personas a partir de 12 años, incluso las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia y los pacientes en tratamiento con otros medicamentos. Es necesario diluir el contenido de una bolsita de solución salina en agua caliente dentro de la botella, mezclar y apretar la botella para lavar a fondo la nariz.

**Indicaciones:** elimina los síntomas, tales como inflamación de la mucosa nasal, congestión nasal y sequedad de las fosas nasales. Combate las alergias, la irritación nasal debida a polvo, humo, pelo animal, hierba, polen y smog.

### NO APTO PARA NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS

**Instrucciones:** poner el contenido de una bolsita en la botella (02). Rellenar con 120 ml de agua y mezclar (03 & 04). Poner la boquilla en cada fosa nasal (05). Apretar la botella (06). Repetir este paso hasta que se sienta el flujo de la solución en la otra fosa nasal; repetir los dos pasos anteriores para limpiar la nariz. Véase las ilustraciones siguientes.

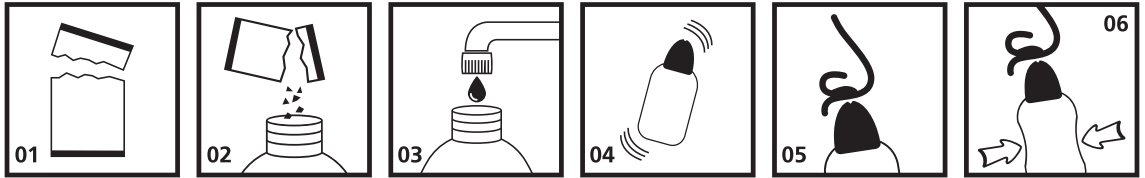

**Dosis:** adultos y niños mayores de 12 años. 1-2 bolsitas cada mínimo dos horas para toda la duración necesaria.

**Advertencia:** interrumpir inmediatamente el tratamiento y consultar a su médico si el lavado es molesto o si los síntomas persisten. El producto debe ser utilizado por una sola persona.

Lavar con agua y jabón después de cada uso.

**Efectos secundarios:** los casos de eventos adversos tras el uso correcto del producto son considerados menores y mínimos.

Generalmente corresponden a picor y a una ligera sensación de hormigueo en la nariz. Pare el uso y consulte a su médico si usted nota una reacción alérgica debida al uso del producto.

E lavado nasal Sinus es seguro, incluso en el periodo de embarazo y de lactancia.

**Conservación:** mantener el producto alejado del calor excesivo y de la humedad, entre 5 y 30°C.

Usar dentro de los 12 meses después de su apertura.

### Mantener alejado del alcance de los niños

**Embalaje:** Botella 120 ml + 12 bolsitas de solución salina (3g).

En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados, durante al menos 15 minutos. Si la irritación persiste, consultar a su médico.




**REF** T1015.428.0001 (GIMA 28084)



Turkuaz Sağlık Hizmetleri Medikal Temizlik Kimyasal  
Ürünler San. ve Tic. A.Ş. Akçaburgaz Mah. Muhsin  
Yazicioğlu Cad. No: 45/5 - 34522 Esenyurt / İSTANBUL / TURKEY



Gima S.p.A. Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
www.gimaitaly.com

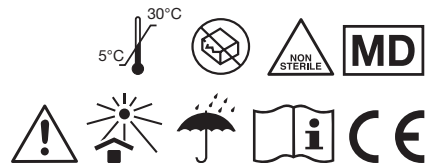

















# SINUS **A**

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

	<b>IT</b> Codice prodotto <b>GB</b> Product code <b>FR</b> Code produit <b>ES</b> Código producto		<b>IT</b> Fabbricante <b>GB</b> Manufacturer <b>FR</b> Fabricant <b>ES</b> Fabricante
	<b>IT</b> Numero di lotto <b>GB</b> Lot number <b>FR</b> Numéro de lot <b>ES</b> Número de lote		<b>IT</b> Limite di temperatura <b>GB</b> Temperature limit <b>FR</b> Limite de température <b>ES</b> Límite de temperatura
	<b>IT</b> Conservare in luogo fresco ed asciutto <b>GB</b> Keep in a cool, dry place <b>FR</b> À conserver dans un endroit frais et sec <b>ES</b> Conservar en un lugar fresco y seco		<b>IT</b> Data di fabbricazione <b>GB</b> Date of manufacture <b>FR</b> Date de fabrication <b>ES</b> Fecha de fabricación
	<b>IT</b> Conservare al riparo dalla luce solare <b>GB</b> Keep away from sunlight <b>FR</b> À conserver à l'abri de la lumière du soleil <b>ES</b> Conservar al amparo de la luz solar		<b>IT</b> Dispositivo medico <b>GB</b> Medical Device <b>FR</b> Dispositif médical <b>ES</b> Producto sanitario
	<b>IT</b> Leggere le istruzioni per l'uso <b>GB</b> Consult instructions for use <b>FR</b> Consulter les instructions d'utilisation <b>ES</b> Consultar las instrucciones de uso		<b>IT</b> Non utilizzare se l'imballaggio è danneggiato <b>GB</b> <b>GB</b> Don't use if package is damaged <b>FR</b> Ne pas utiliser si le colis est endommagé <b>ES</b> No usar si el paquete está dañado
	<b>IT</b> Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso <b>GB</b> Caution: read instructions (warnings) carefully <b>FR</b> Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements) <b>ES</b> Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente		<b>IT</b> Dispositivo monouso, non riutilizzare <b>GB</b> Disposable device, do not re-use <b>FR</b> Dispositif pour usage unique, ne pas réutiliser <b>ES</b> Dispositivo monouso, no reutilizable
	<b>IT</b> Data di scadenza <b>GB</b> Expiration date <b>FR</b> Date d'échéance <b>ES</b> Fecha de caducidad		<b>IT</b> Non sterile <b>GB</b> Non-sterile <b>FR</b> Pas stérile <b>ES</b> No estéril
	<b>IT</b> Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745 <b>GB</b> Medical Device compliant with Regulation (EU) 2017/745 <b>FR</b> Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745 <b>ES</b> Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745		<b>IT</b> Distribuito da <b>GB</b> Distributed by <b>FR</b> Distribué par <b>ES</b> Distribuido por