

MANUAL DE USO

MNPG371-04 Edición 30/06/2023

TAP2000

I.A.C.E.R. Srl

www.itechmedicaldivision.com

Introducción

El dispositivo **TAP2000** es un aplicador con 6 solenoides para magnetoterapia de baja frecuencia.

Diseñado para tratar la zona de la columna vertebral colocándolo en el respaldo de una silla o sillón.

El dispositivo está clasificado como clase I, de acuerdo con la regla 1 (4.1) prevista en el anexo VIII del Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo del 5 de abril de 2017 sobre productos sanitarios.

UDI-DI básico: 8019781PEMFLFTAPQS

UDI-DI: 08019781472090

Información técnica

Características técnicas:

- Tamaño del aplicador: 40x40cm;
- 6 solenoides;
- 2 cables de conexión;
- Compatible con los modelos MAG2000 y LaMagneto.





Etiquetado

Etiqueta 1
(detrás del dispositivo)

Etiqueta 1






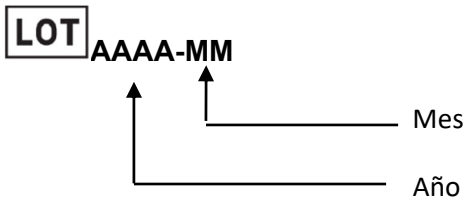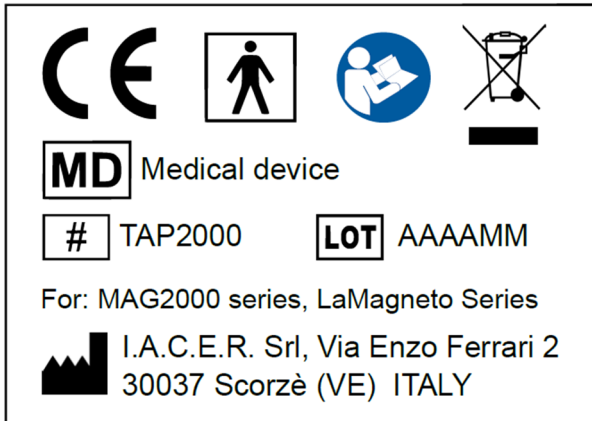


Etiqueta cable

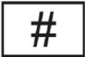

Símbolos:

Símbolo	Significado
	Logotipo del fabricante
	De acuerdo con el Reglamento (UE) núm. 2017/745
	Datos del Fabricante
	Numero de lote (AAAA-MM)
	Producto sanitario

Símbolo	Significado
	Modelo
	Siga las instrucciones de uso
	Directiva RAEE para la eliminación de residuos electrónicos
	Parte aplicada tipo BF
	Temperaturas permitidas (temperaturas de almacenamiento, en el embalaje)
	Humedad relativa (humedad relativa de almacenamiento, en embalaje)

Transporte y almacenamiento

No se requieren cuidados particulares durante el transporte. En cuanto al almacenamiento, el equipo está protegido hasta las siguientes condiciones ambientales:

temperatura ambiente de +5 a + 40 °C

humedad relativa del 15 al 93%

Modo de empleo

Instrucciones de uso de TAP2000


Siga las instrucciones del Manual de Uso que acompaña al dispositivo. Conecte la almohadilla a los dos canales del dispositivo.

Siga las advertencias expuestas en los manuales de uso de los productos MAG2000 o LaMagneto.

Limpieza de TAP2000

Para la limpieza de TAP2000 se recomienda desconectar el aplicador con 6 solenoides del dispositivo antes de realizar cualquier operación. Limpie la tela con un paño humedecido simplemente con agua y jabón neutro y espere que se seque por completo antes de volver a utilizar el aplicador con tres solenoides para una sesión terapéutica.

Información para la eliminación

El producto está sujeto a la normativa RAEE (presente en la etiqueta con el símbolo ) sobre recogida selectiva: para desechar el producto, use áreas especiales equipadas para la recogida de material electrónico contactando con las autoridades competentes de su país o directamente con el fabricante.

Mantenimiento y asistencia

El dispositivo no requiere ningún mantenimiento ordinario particular. Póngase en contacto con el fabricante para que se compruebe la funcionalidad del dispositivo cada dos años.

El fabricante es el agente exclusivo para intervenciones de asistencia técnica en el aplicador TAP2000. Para cualquier intervención de asistencia técnica, comuníquese con:

I.A.C.E.R. S.r.l.

Via Enzo Ferrari, 2 • 30037 Scorzè (VE)

Tel. +39 041.5401356 • Fax +39 041.5402684

Garantía

TAP2000 está cubierto por una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra. La garantía queda anulada en caso de manipulación, falta de cuidado y uso inadecuado del aplicador, y en caso de intervención en el mismo por parte de personal no autorizado por el fabricante o por el distribuidor autorizado.

Notificación de incidentes

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2017/745, el fabricante señalará al usuario la necesidad de notificar cualquier incidente grave que se haya producido en relación con el producto.

- La notificación deberá dirigirse al fabricante del producto:

I.A.C.E.R. Srl
Via Enzo Ferrari 2 – 30037
Scorzè (VE) ITALY
Tel. +39 041 5401356 – Fax +39 041 5402684
e-mail: iacer@iacer.it

Todos los derechos reservados. TAP2000 y el logo  son propiedad exclusiva de I.A.C.E.R. Srl y están registrados.



I.A.C.E.R. S.r.l.

Via Enzo Ferrari 2 - 30037, Scorzè (VE) – Italy
Tel.: (+39) 041 540 13 56 | Email: iacer@iacer.it

www.itechmedicaldivision.com

Share Capital: € 1.000.000 fully paid-up
Tax Code / VAT Number: IT 00185480274
Certified email: iacer@pec.it | SDI: SUBM70N