


ELECTRODOS

Electrodo Auto-Adhesivo Para Estimulación Eléctrica

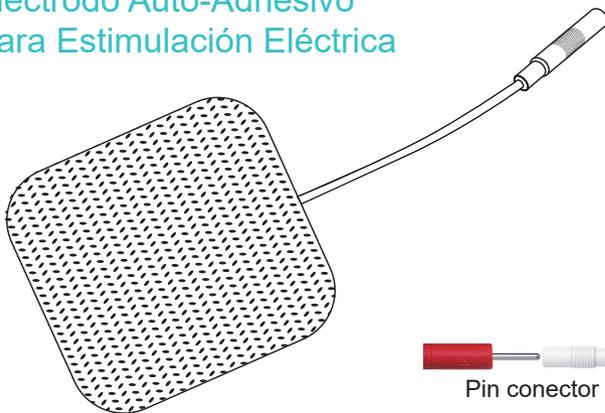

Pin conector de 2mm

Uso previsto

El Electrodo Auto-adhesivo está destinado a ser utilizado como interfaz adhesiva conductora reutilizable entre la piel del paciente y los estimuladores eléctricos comercializados, es decir, TENS (Estimulación Nerviosa Eléctrica Transcutánea), EMS (Estimulación Muscular Eléctrica), IF u OFC (Corriente Interferencial) o PGF (Estimulación Galvánica Pulsada) para la transmisión de corriente eléctrica, para uso OTC (Over-The-Counter) o de Prescripción



Instrucciones de uso

Aplicación

1. Limpiar bien la piel antes de aplicar los electrodos. Los electrodos no se adhieren bien si hay restos de lociones, aceite, maquillaje, suciedad, etc., en la piel.
2. Apagar el estimulador antes de aplicar los electrodos a su piel.
3. Insertar las clavijas del cable del dispositivo en los conectores del cable del electrodo.
4. Retirar los electrodos del revestimiento protector y aplicarlos firmemente sobre la piel.

Retirada

1. Apagar el estimulador antes de retirar los electrodos de la piel.
2. Levantando una esquina del electrodo, retirar el revestimiento protector del electrodo y despegarlo. No retirar el revestimiento protector tirando del cable.
3. Colocar los electrodos en el revestimiento y desconectar el cable conductor retorciendo y tirando de los conectores del cable del electrodo.

Cuidado y almacenamiento

1. Entre usos, guardar los electrodos en la bolsa con cierre en un lugar fresco y seco.
2. La vida útil de los electrodos varía en función de las condiciones de la piel, el almacenamiento, la cantidad de uso, el tipo de estimulación y el sitio de estimulación. La vida de los electrodos puede prolongarse siguiendo cuidadosamente las instrucciones de aplicación anteriores y posteriores.
3. Evitar que los electrodos estén expuestos a la luz solar directa o a una humedad extrema. Condiciones de almacenamiento recomendadas: 5°C - 27°C. Humedad relativa: 40% - 70%.
4. NO dejar los electrodos al descubierto en contacto con el aire, ya que esto disminuirá la viscosidad y el rendimiento del producto.

Precaución

1. Leer atentamente las instrucciones antes de utilizarlo.
2. Los electrodos están destinados a un solo paciente.
3. NO aplicar sobre la piel dañada. Si se produce una erupción cutánea, interrumpir su uso y ponerse en contacto con su médico. NO utilizar mientras se conduce un vehículo motorizado o se maneja maquinaria.
4. NO desmontar ni alterar los electrodos.
5. Solo para uso con dispositivos de tipo de estimulación eléctrica.
6. NO utilizar en niños o bebés. Estos electrodos no han sido evaluados para uso pediátrico.



SIN
LÁTEX

EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany



LOT