



GIMA


PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

CINGHIE MONITOR FETALE RIUTILIZZABILI
REUSABLE FOETAL TRANSDUCER BELTS
SANGLES RÉUTILISABLES POUR TRANSDUCTEUR FOETAL
CORREAS PACIENTE INDIVIDUAL PARA SONDA FETAL
CORREIA FETAL TRANSDUTORA REUTILIZÁVEL
EINWEG-GÜRTEL FÜR FETALEN SCHALLKOPF
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΖΩΝΗ ΜΟΡΦΟΤΡΟΠΕΑ
ΕΜΒΡΥΪΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
EENMALIGE FOETALE TRANSDUCER RIEM
PASEK PRZETWORNIKA PŁODU DO WIELOKROTNEGO
UŻYTKU
CUREA ABDOMINALĂ PENTRU MONITORIZARE FETALĂ,
REFOLOSIBILĂ
ÅTERANVÄNDBART FOSTERGIVAREBÄLTE

REF B08 (GIMA 29545)

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante / Hersteller /
Κατασκευαστής / Fabrikant / Producent / Producător / Tillverkare:
Dongguan Belcare Medical Technology Co., Ltd.
405, Building 5, #8 of Qingfeng South Road, Tangxia Town,
Dongguan, Guangdong, China 523710.
Made in China

Importato da/Imported by/ Importé par/ Importiert von/ Importado
por/ Importado por/ Εισάγεται από/ Geïmporteerd door /
Importowane przez / Importat de / Importerad av:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

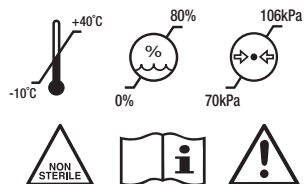

Uso previsto:

- Este producto funciona de acuerdo con el ajuste de la hebilla en el cinturón para fijar el transductor fetal.

Instrucciones del producto:

- Nombre del producto: Cinturón transductor fetal reutilizable.
- Estructura del producto: Se compone de cinturón elástico y hebilla.

Gama del producto:

- Se utiliza el transductor fetal durante el embarazo en la monitorización fetal para fijar el transductor fetal.

Condiciones del uso:

- Temperatura: 0°C ~ 40°C
- Humedad relativa: 15% ~ 95%
- Presión atmosférica: 70kpa ~ 106kpa

Paquete y almacenamiento:

- El cinturón fetal se debe empaquetar individualmente, y el producto empaquetado debe almacenarse en una sala de gas no corrosivo y con buena ventilación.

Entorno de tienda es siguiente:

- Temperatura: -10°C ~ 40°C
- Humedad relativa: ≤80%
- Presión atmosférica: 70kpa ~ 106kpa

Instalaciones/uso:

- Fije un lado del cinturón al transductor engananchando uno de los agujeros del cinturón sobre el botón en la parte superior del
- Manteniendo el transductor en su posición,

tense el otro lado del cinturón y colóquelo sobre el botón, asegurándose de tener suficiente tensión para mantener el transductor de firme con el abdomen.

- Evite apretar demasiado ya que esto causará molestias innecesarias al paciente.

Limpio del producto:

- Lave el cinturón con agua tamlado, no frote el borde del cinturón fetal para evitar quitarlo, no lo esponga.

Período de validez:

- Período de validez: 2 años.

Reemplazo y abandono:

- Reemplazo: en estas situaciones como fractura, daño elástico, fecha de vencimiento, por favor cambie el nuevo cinturón fetal para usar.
- Abandono: El cinturón abandonado puede procesarse como un desecho normal.

Contraindicaciones, precauciones, advertencias y declaraciones de precaución:

- Contraindicaciones: Los cinturones no deben fijarse en el lugar de la lesión.
- Si tiene alergia a spandex, deje de usar.
- Por favor, lea las instrucciones antes de usar.

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses

