




www.led.it

(ES) KIT ASPIRACION del EVACUADOR DE HUMOS QUIRURGICOS

REF 00900.02

LED SpA
Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

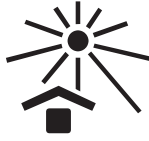

50°C
0°C
RH
20% - 80%



IT EN ES FR DE PT TR

IA00900-01Ar2
ed.05/2012 2012 (C) LED SpA

Verificar el estado del producto antes del utilizzo.

Producto monouso. No reutilizable.

No aspirar liquidos.

El producto tiene que ser eliminado de acuerdo con los procedimientos para el control de los residuos hospitalarios.

La conexiones tienen que ser efectuadas por personal entrenado.

El producto es suministrado para la aspiración de los humos en las intervenciones cirúrgicas a "cielo abierto" (es. laparotomía).


La típica conexión es:

-conexión al código 00900.01 (disponible por separado) (im. A -part. 4)

-conexión al código serie XXX00900.XXX (disponible por separado) (im. A -part. 2)

Para la conexión a un accesorio endoscópico (ej. intervento de laparoscopia) o otro sistema de captación compatible para diámetro de enchufe (22mm).

FIG.-IM.-BILD-GRAFIC A

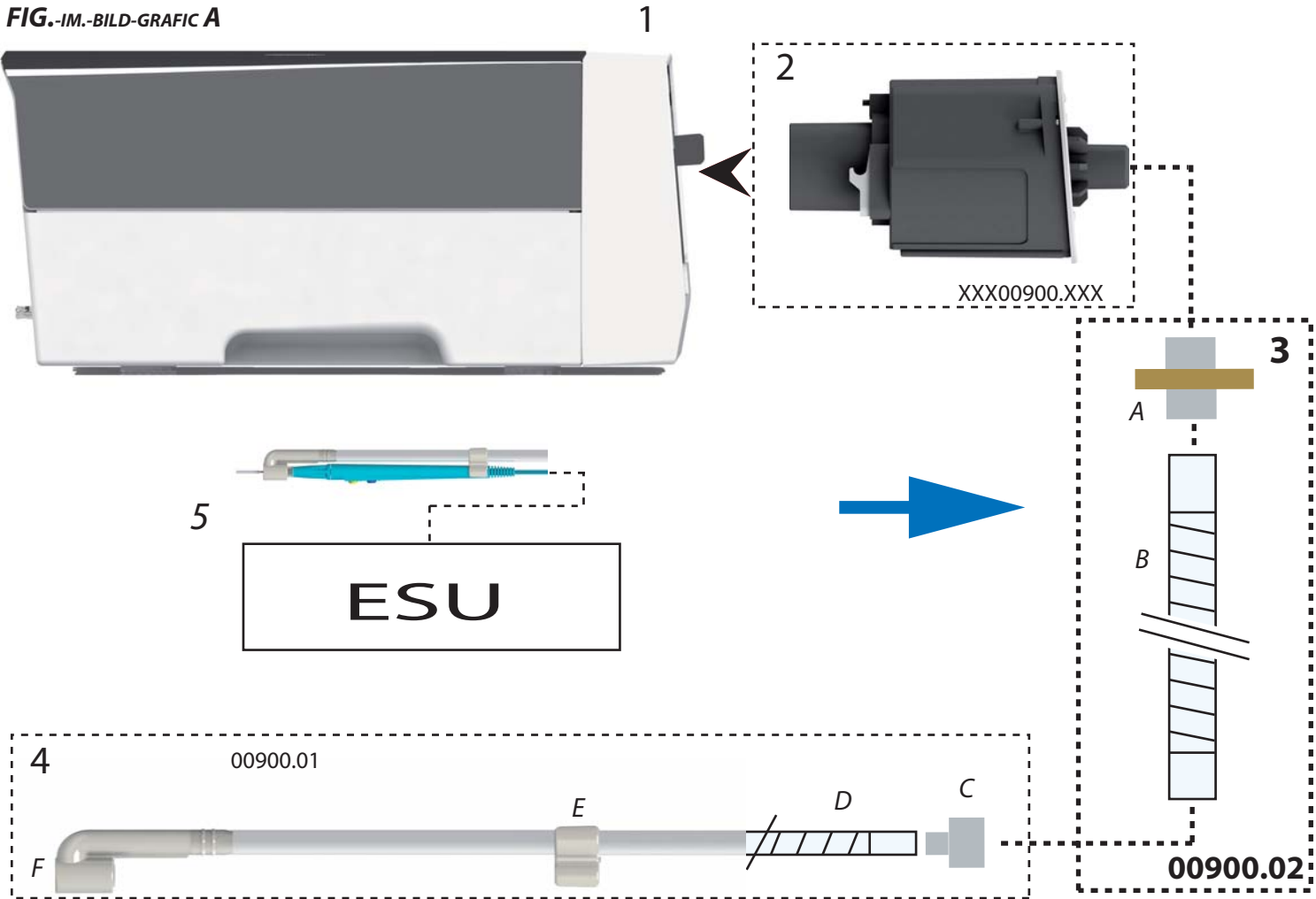

1 EVACUADOR DE HUMOS* serie XXX10200.10 - XXX10200.10/115V **(ES)**
 2 FILTRO* serie XXX00900.XXX
3 KIT ASPIRACION (00900.02) - A Filtro - B Tubo dia. 22mm largura 2,4 mt
 4 KIT ASPIRACION MANGO (00900.01)* - C Adaptador 10mm/22mm - D Tubo dia. 10mm Largura 1,8 mt- E Clip ara fisaje tubo sobre el mango - F Adaptador para mango
 5 Particular del mango* con 00900.01, el mango tiene que ser conectado a vuestra unidad electrocirurgica (ESU)*. *no incluido



REF 00900.02

LED SpA
Via Selciatella 40
04011 Aprilia (LT) - ITALY

IA00900-02Ar2
ed.05/2012 2012 (C) LED SpA