

FOOTSWITCH

REF 00305.06_S

1-2 cut
2-3 coag
4-5 cc
6 nc



LED SpA
Via M.T.Cicerone 138
03100 Frosinone (LT) - ITALY

IT EN ES FR DE PT PL


SURGEON

IP 67
WATER PROOF



EXPLOSION PROOF

cable 5 mt
MADE IN ITALY

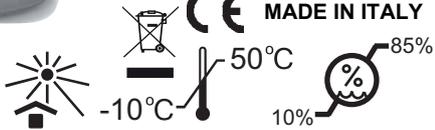

IA00305-06_Sc_ML1
ed. 2022-1& 2022 (C) LED SpA

(ES) DOBLE PEDAL ESTANCO (TOUCH / TOUCH HP 300-400)

El producto es concebido para el mando a pedal de unidades electronicas compatibles.

Verificar el estado del producto antes del utilizo. Deshacerce de los productos defectuosos.

El presente producto es compatible con las versiones de equipos que lo preveen, consultar las instrucciones de la unidad.

La conexiones tienen que ser efectuadas por personal entrenado.

Instalación:

- insertar el conector de productos en el conector de la unidad electrónica específica, prestando atención a la dirección de inserción (fig. A -parte 1-2).
- para fijar el producto en la unidad girar la contera (fig. A -parte 3).

Encender la unidad para efectuar las pruebas de funcionamiento activando el pedal. (fig. A -parte 4).

FIG.-IM.-BILD-GRAFIC-RYS. A



(ES) PISAR = ACTIVACIÓN / SIN PISAR = NO ACTIVACIÓN
AMARILLO = CORTE / AZUL = COAGULACIÓN