


LIGHTED FORCEPS FOR FOREIGN BODY REMOVAL - USER INSTRUCTIONS
BELEUCHTETE PINZETTE ZUR FREMDKÖRPERENTFERNUNG - GEBRAUCHSANWEISUNG
FÓRCEPS ILUMINADOS PARA EXTRACCIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS - INSTRUCCIONES DE USO
PINCE ÉCLAIRÉE POUR L'ÉLIMINATION DE CORPS ÉTRANGERS - MODE D'EMPLOI
PINZA CON LUCE PER LA RIMOZIONE DI CORPI ESTRANEI - ISTRUZIONI PER L'USO
PINÇA COM LUZ PARA A REMOÇÃO DE CORPOS ESTRANHOS - INSTRUÇÕES PARA O UTILIZADOR

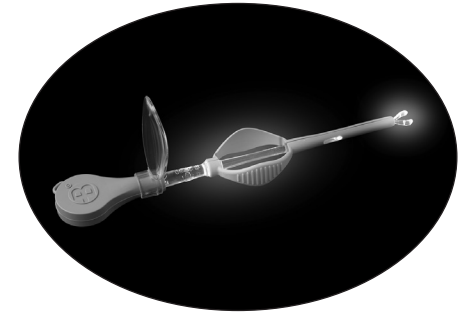

B **BIONIX**[®]

+1 419 727 8997

www.Bionix.com

©2016 Bionix Development Corp.
Rev. 12/5/2016 • RM95-XXXX • Patent Pending



EC REP

Obelis s.a • Boulevard Général Wahis 53
1030 Brussels, BELGIUM • Tel: +(32) 2.732.59.54
Fax: +(32) 2.732.60.03 • E-Mail: mail@obelis.net

Bionix Development Corp. • 5154 Enterprise Blvd.
Toledo, OH, 43612 • U.S.A. • Phone: 800-551-7096
Fax: 800-455-5678 • www.Bionix.com

FÓRCEPS ILUMINADOS PARA EXTRACCIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS - INSTRUCCIONES DE USO

Montaje y desmontaje:

1. Para montar los Fórceps iluminados para extracción de cuerpos extraños, introduzca el extremo de los fórceps en la fuente de luz alineando las clavijas del extremo de los fórceps con los huecos que hay en el interior de la fuente de luz. Empuje hacia abajo y gire FIRMEMENTE en sentido horario hasta que no pueda girar más. De esta forma bloqueará los fórceps en su sitio y activará la luz. NOTA: Este dispositivo funciona con un resorte; un montaje incorrecto podría provocar la eyección de la punta de los fórceps.
2. Para acoplar la lente de aumento, encájela al cuello de la fuente de luz, de forma que la parte superior de la lente forme un ángulo en dirección a la punta de los fórceps.
3. Para desmontarlos, empuje los fórceps hacia abajo y gírelos en sentido antihorario para retirarlos de la fuente de luz. La luz se apagará una vez haya retirado los fórceps.

Instrucciones para la extracción de cuerpos extraños

1. Examine el oído o la nariz para determinar la ubicación del cuerpo extraño.
2. Monte los Fórceps iluminados para extracción de cuerpos extraños de acuerdo con las instrucciones.
3. Introduzca la punta de los Fórceps iluminados hasta alcanzar el cuerpo extraño. Una vez hecho esto, apriete el mango del resorte para atrapar el objeto y tire con cuidado hacia la salida del orificio.
4. Repita el examen y determina la ubicación de cualquier resto del cuerpo extraño.
5. Repita el procedimiento hasta retirar por completo el cuerpo extraño.
6. Retire y deseche los fórceps de un solo uso.

La punta de los Fórceps iluminados para extracción de cuerpos extraños está diseñada para su uso en un único paciente.

La fuente de luz y la lente de aumento están diseñadas para su uso en múltiples procedimientos. No deseche la fuente de luz ni la lente de aumento. Se suministra una fuente de luz y una lente en cada caja del producto.