



# Littmann<sup>®</sup> CORE Stethoscope

Connects to Eko Software

Eko

3M



(en)	English	pp. 1	(sl)	Slovenski	pp. 33
(fr)	Français	pp. 3	(et)	Eesti	pp. 35
(de)	Deutsch	pp. 5	(lv)	Latviesu	pp. 37
(it)	Italiano	pp. 7	(lt)	Lietuviškai	pp. 39
(es)	Español	pp. 9	(ro)	Romana	pp. 41
(nl)	Nederlands	pp. 11	(hr)	Hrvatski	pp. 43
(sv)	Svenska	pp. 13	(bg)	Български	pp. 45
(da)	Dansk	pp. 15			
(no)	Norsk	pp. 17			
(fi)	Suomi	pp. 19			
(pt)	Português	pp. 21			
(el)	Ελληνικά	pp. 23			
(pl)	Polski	pp. 25			
(hu)	Magyar	pp. 27			
(cs)	Čeština	pp. 29			
(sk)	Slovensky	pp. 31			

# Estetoscopio digital 3M™ Littmann® CORE

## Guía de inicio rápido

Descárguese la aplicación Eko de Apple App Store® o Google Play Store®.

es

Active la tecnología inalámbrica Bluetooth® en el teléfono o tableta, inicie la aplicación y encienda el estetoscopio CORE.


Eko

## Contenido de la caja

- Accesorio digital Eko CORE y estetoscopio 3M™ Littmann® Cardiology IV™
- Juego adicional de olivas 3M Littmann de sellado blando (pequeñas)
- Cubrecampana antifrío
- Cable de carga USB
- Guía de inicio rápido

## Olivas

Inserte las olivas en dirección hacia delante.

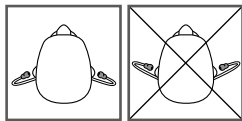

## Volumen

Utilice los botones (+) y (-) para ajustar el volumen. Hay 7 opciones de volumen.

## Encendido y apagado

Cuando el estetoscopio CORE está apagado, funciona como un estetoscopio no amplificado.

Para encender el estetoscopio CORE, presione el interruptor de encendido. La luz comenzará a titilar. Ahora escuchará el sonido amplificado y filtrado a través de las olivas.

## Telemedicina y funciones de IA

Eko ofrece telemedicina y funciones de IA que requieren la suscripción a un software (si se encuentra disponible, se vende por separado).

Podrá configurar la suscripción en línea en [ekohealth.com](http://ekohealth.com).

## Cancelación del ruido activo

El estetoscopio CORE incluye la cancelación del ruido activo para eliminar el ruido ambiental del entorno. Puede activar o desactivar la cancelación del ruido activo a través de la aplicación Eko.



## Notificaciones

((⦿)) (parpadeando)

● (amarillo)

(●●) (amarillo)

El estetoscopio CORE está encendido y buscando el dispositivo.

El estetoscopio CORE está apagado y cargándose.

Al estetoscopio CORE le queda poca batería.

○

● (verde)

(●●) (azul)


El estetoscopio CORE está encendido y conectado.

El estetoscopio CORE está totalmente cargado.

El estetoscopio CORE está grabando.

## Grabación

Cuando se haya conectado a la aplicación Eko, presione el botón (○) para comenzar a grabar.

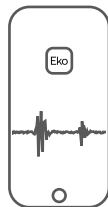

## Carga

Conecte el cable micro USB al estetoscopio CORE y utilice un cargador USB 5 V de pared certificado por UL o con marcado CE. El estetoscopio CORE tardará unas 2 horas en cargarse por completo. La luz se tornará verde cuando esté cargado por completo.

## Manual del usuario

Lea detenidamente el manual del usuario antes de usar su estetoscopio Littmann CORE. Para acceder al manual, visite la siguiente página:  
[ekohealth.com/getstarted](http://ekohealth.com/getstarted)  
Si desea más información sobre los dispositivos 3M, consulte [HCBRegulatory.3M.com](http://HCBRegulatory.3M.com).

ES

## Servicio y soporte técnico

En los EE. UU., visite [littmann.com/service](http://littmann.com/service) o llame al 1-800-228-3957. Si se encuentra fuera de los EE. UU., visite [littmann.com](http://littmann.com) para conocer los datos de contacto de su oficina local de 3M.

Apple App Store es una marca registrada de Apple Inc.  
Google Play y el logotipo de Google Play son marcas registradas de Google LLC.  
Bluetooth® es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.  
LBL 143 Rev B

System assembled by 3M Company



**3M Deutschland GmbH**  
Health Care Business

[www.littmann.com](http://www.littmann.com)



Made in USA with  
Globally Sourced Materials

 **3M Company**  
2510 Conway Ave.  
St. Paul, MN 55144 USA


**MD**

**CE**

 **3M Deutschland GmbH**  
Health Care Business  
Carl-Schurz-Str. 1  
41453 Neuss, Germany




Made in Malaysia

 **Eko Devices, Inc.**  
1212 Broadway, Suite 100  
Oakland, CA 94612 USA

**MD**

**CE**

**0537**

 **Emergo Europe**  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

©2020 3M; Eko Devices Inc. All rights reserved.

3M, Littmann, the L Littmann logo, the L, and Cardiology IV are marks and/or registered marks of 3M.  
Unauthorized use prohibited.

Eko trademarks, including CORE, are marks and/or registered marks of Eko Devices Inc.

Issue Date: 2020-11  
34-8726-3344-0