

QUICK SPLINT

SET

REF PNE244




I ISTRUZIONI PER L'USO

GB INSTRUCTIONS

F MODE DE EMPLOI


E MODO DE EMPLEO

P INSTRUÇÕES

 PVS SPA VIA LEONARDO DA VINCI 18 20051 CASSINA DE PECCHI (MI) ITALY


2021-7-30(A/1)
EU Regulation 2017/745(MDR)



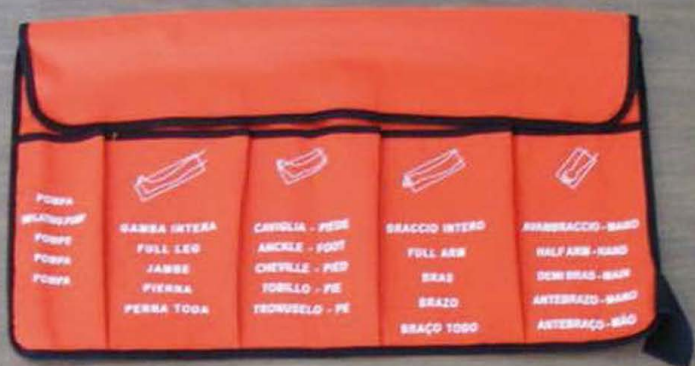

INDICACIONES : las ferulas QUICK SPLINT sirven para inmovilizar rápidamente las extremidades en caso de fracturas , contusiones y distorsiones. Este sistema limita los movimientos durante el transporte de la persona herida y le permite mas comodidad gracias al cojin d'aire que se forma alrededor de la parte lesionada. La presion de la ferula sirve tambien a controlar eventuales salida de sangre.Los materiales son transparentes a los rayos X.

DESCRIPCION : QUICK SPLINT esta producido en PVC y tiene que ser hinchado a traves de una pompa. Las ferulas QUICK SPLINT son disponibles en cuatro modelos :

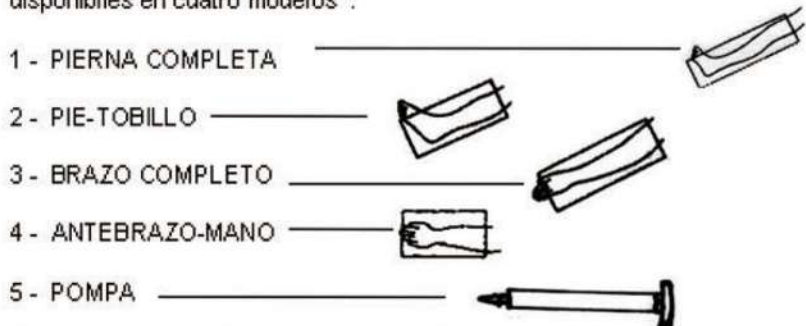

MODO DE EMPLEO : para inmovilizar dejar deslizar bajo del miembro accidentado , enrollar y encerrar la cremallera. Hinchar a traves de la pompa . Para liberar avrir la cremallera dejar fluir l'aire ejercitando pression a la base de la valvula y a la ferula misma. Desfilas el miembro accidentado.



ATENCIÓN : la operacion tiene que ser cumplida por parte de personal experimentado. deje de usarlo si encuentra daños materiales o fugas de aire.

LIMPIEZA : Despues de su utilizacion lavar con agua y sabon . Se puede desinfectar con liquido bactericida producido de acuerdo con el nuevo MDR 745/2017.

CONSERVACION : guardar en un lugar seco al reparo del polvo, de los rayos del sol y fuentes de calor

Es necesario comunicar cualquier accidente grave que se produzca en relación con el DM proporcionado por PVS SPA al Fabricante y a las autoridades competentes.