


SHOWER STOOL WITH TRAY
SGABELLO DA DOCCIA CON VASSOIO
TABOURET DE DOUCHE AVEC TABLETTE
DUSCHHOCKER MIT TABLETT
TABURETE DE DUCHA CON BANDEJA
BANQUETA DE CHUVEIRO COM PRATELEIRA
ΣΚΑΜΠΟΝ ΜΠΑΝΙΟΥ ΜΕ ΔΙΣΚΟ

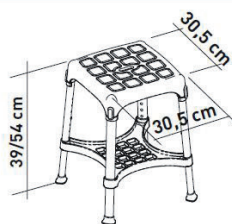

ESPAÑOL**USO PREVISTO:**

Los productos de la línea Taburetes permiten al usuario una mayor autonomía e independencia en el uso de la ducha durante su aseo personal diario, reduciendo la fatiga muscular debida a la bipedestación, así como el riesgo de resbalones y accidentes. Las versiones equipadas con patas de goma antideslizantes garantizan una mayor adherencia al suelo, mientras que los modelos con patas ajustables en altura permiten al usuario modificar fácilmente la altura total del taburete según las necesidades. Las versiones con disco giratorio garantizan una mayor libertad de movimiento sin tener que levantarse del taburete. Gracias también a su flexibilidad, los taburetes pueden colocarse en suelos irregulares, típicos de muchos platos de ducha. Los taburetes están disponibles en tres formas diferentes. Los taburetes se pueden mover fácilmente gracias a su peso ligero. Los taburetes pueden completarse con un cojín blando que los hace más cómodos de usar. Los cojines blandos y los discos giratorios se venden por separado como accesorios.

INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES:

Los productos de la línea Taburetes son una valiosa ayuda para las personas mayores, para los usuarios de sillas de ruedas, para las personas con movilidad reducida en la zona lumbar, las rodillas y las caderas, y para cualquier persona que tenga dificultad para mantener una posición de pie durante el aseo personal diario en la ducha. El usuario debe tener autonomía de equilibrio durante los movimientos necesarios para desplazarse a una posición sentada y de pie, y también debe tener la capacidad adecuada para permanecer sentado. No se recomienda el uso de taburetes si el usuario

tiene problemas de equilibrio o percepción.

PESO MÁXIMO DEL USUARIO: 170Kg

ADVERTENCIAS E INDICACIONES DE SEGURIDAD:

- No debe superarse el peso máximo del usuario, indicado en estas instrucciones de montaje.
- Antes de cada uso, el usuario debe comprobar que el taburete está correctamente montado y en posición estable.
- El taburete sólo debe utilizarse en superficies libres de obstáculos.
- Durante el montaje del producto, deben respetarse escrupulosamente las instrucciones del manual de uso.
- Durante el montaje puede aumentar el riesgo de lesiones en los dedos.
- No se balancee mientras utiliza el taburete; esto puede causar resbalones, vuelcos o desplome de las patas.
- Mantenga siempre el taburete sobre 4 patas.
- No modifique de ninguna manera el taburete ni ninguno de sus componentes.
- No utilice el taburete si está dañado o alterado de alguna manera.
- Después de su uso, el taburete debe retirarse del plato de ducha para evitar posibles obstrucciones.
- No utilice el taburete para fines distintos de los previstos.
- El taburete no debe almacenarse al aire libre.
- Evite el contacto directo con heridas abiertas o piel lesionada para prevenir posibles infecciones.

INFORMACIONES SOBRE EL MANTENIMIENTO:

El mantenimiento del producto consiste en procedimientos de limpieza e desinfección. Para garantizar un uso seguro y adecuado para cumplir las normas de higiene, el usuario debe realizar estos procedimientos antes de cada uso. El usuario debe comprobar la integridad estructural del dispositivo y de todos sus componentes, y controlar la fijación de los tornillos. Para la limpieza y desinfección, deben respetarse los siguientes procedimientos:

1. Utilizar guantes
2. Antes de realizar una desinfección meticulosa, elimine la suciedad evidente.
3. Utilizar agua o detergentes no agresivos para el procedimiento de limpieza.
4. Limpiar con un paño seco y limpio.

Como alternativa, el producto puede desinfectarse en el lavavajillas doméstico a la temperatura máxima. El cojín blando debe lavarse estrictamente a mano.

CONDICIONES DE REUTILIZACIÓN :

El producto es apto para ser reutilizado por otros usuarios. Antes de ser utilizado por otros usuarios, el producto debe limpiarse y desinfectarse adecuadamente. Antes de pasar el producto a otras personas, debe ser revisado por distribuidores cualificados.

PROCEDIMIENTO CORRECTO DE ELIMINACIÓN:

Si se produce un accidente grave relacionado con el uso de este dispositivo, póngase en contacto con el fabricante en la dirección info@imglobaldesign.com y con la autoridad responsable de su país.

NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES:


Se si verifica un incidente grave che legato all'uso del presente dispositivo, contattare il produttore all'indirizzo info@imglobaldesign.com e l'autorità re- sponsabile nel proprio paese.

REF	Código producto	LOT	Número de lote
	Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745		Fabricante
SN	Número de serie		Fecha de fabricación
MD	Producto sanitario		Consultar las instrucciones de uso.

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.


1

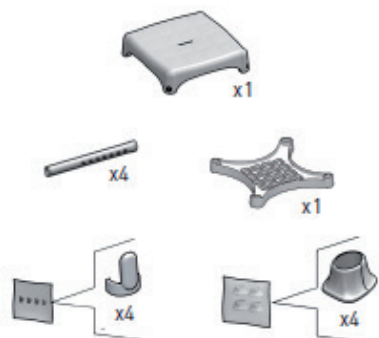

2




3

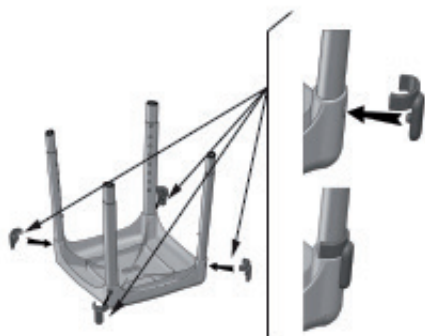


4



5

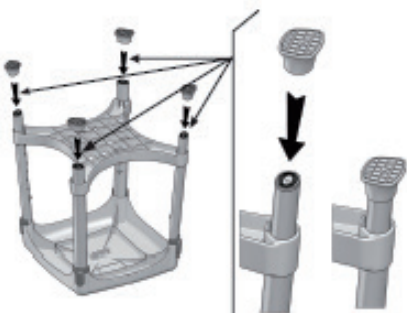

6

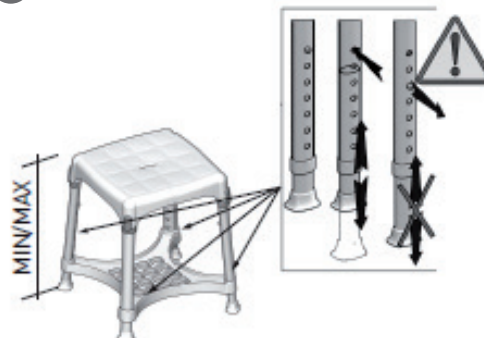

7



MAX USER WEIGH:
PESSO MASSIMO UTILIZZATORE:
POIDS MAXIMUM UTILISATEUR:
MAXIMALES BENUTZERGEWICHT:
PESSO MÁXIMO DEL USUARIO:
PESSO MÁXIMO DO UTILIZADOR
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ:

170 Kg
375 lb



LM GLOBAL DESING Ltd.
Suite 123, The Capel Building
Mary's Abbey Dublin 7, D07VY68, Ireland
Made in Italy

GIMA 42904

REF KING-STAT-74

