

LEER TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO. CONSULTE A UN MÉDICO ANTES DEL USO.

CONTRAINDICACIONES: No apto para personas de más de 242 lbs (110 kg) de peso - No apto para condiciones de suelo helado o resbaladizo. - No apto para personas con alergia al látex.

GUÍA DE INSTRUCCIONES: Para desplegar el bastón, sujete el mango y deje que los segmentos plegables del eje se desplieguen hacia el suelo. Para evitar caídas, compruebe siempre que los segmentos individuales del eje (fig. 1) estén debidamente sujetos en su sitio.


ADVERTENCIA: NO desmonte el cuerpo del bastón Trusty TM. El bastón contiene un cable elástico en su interior. La liberación incontrolada del cable elástico interior puede causar lesiones graves en partes desprotegidas del cuerpo, particularmente en los ojos. Si el cable elástico se corta, se deshila o se daña interrumpir el uso. NO estire el cable más de lo necesario para desensamblar o ensamblar los segmentos.

Para ajustar la altura de su Bastón Trusty TM: Afloje el bloqueo giratorio (Fig. 2) dándole varias vueltas en sentido horario. Apriete el botón de bloqueo (Fig. 3) y tire del mango hacia arriba para alargarlo o empujelo hacia abajo para acortarlo. Recuerde volver a apretar el bloqueo giratorio después de ajustar el bastón Trusty TM a la altura deseada.

ADVERTENCIA: Para evitar caídas, asegúrese siempre de que los segmentos individuales del eje están debidamente sujetos en su sitio y de que el tope de bloqueo está bien apretado.

Para plegar el bastón Trusty TM: Su bastón Trusty TM se puede plegar fácilmente en un cómodo tamaño de viaje separando los 4 segmentos individuales del eje entre sí. Sujete cada conjunto de segmentos del eje cerca de la junta y sepárelos (Fig. 4). Los segmentos individuales del eje se plegarán perfectamente (Fig. 5).

Para usar las luces de su Bastón Trusty TM: El botón situado en la parte superior del mango del bastón Trusty TM (Fig. 6) activa las luces. Al pulsar una vez el botón se activan las luces, y volviendo a pulsar se apagan. Las luces se apagan automáticamente después de 20 minutos.

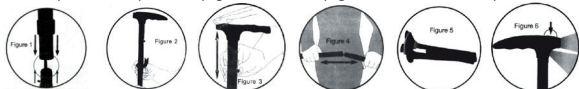

Mantenimiento de su bastón Trusty TM: Para sustituir las pilas, utilice un destornillador de estrella para desatornillar el compartimento de las pilas situado bajo el mango del bastón Trusty TM. Retire las pilas agotadas y elimínelas correctamente. Utilice 3 pilas AAA, alinee + y - como se indica, de lo contrario las luces no funcionarán. Vuelva a colocar y apriete el tornillo en la tapa del compartimento de pilas. Inspeccione periódicamente el bastón en busca de signos de desgaste, incluido el deshilachado del cable elástico o el desgaste de los pies de goma. Si observa signos de desgaste, deje de usarlo inmediatamente.

ADVERTENCIA: No mezcle pilas nuevas y usadas. No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).

CONDICIONES DE LA GARANTÍA GIMA: Se aplica la garantía estándar B2B de 12 meses de Gima.

Gima 43044 - 43045 REF GB-801 (SV) GB-801 (BK)

Fabricato da/Manufactured by/Fabrique par/Fabricado por/Hergestellt von/
Fabricado por/Κατασκευάστηκε από/Произведено от/Vyrobce/Fremstillet af/
Tootja/Vaalistaja/Proizvodat/Gyártó/Ražots/Gamintojas/Produsert av/
Getfabriceerd door/Wyprodukowane przez/Fabricat de/Vyrába/Proizvajalec/
Tilberladd av/تصنيعها بواسطة
Ningbo Gaobo Sports Co., Ltd
No.1, Xiajin, Dali, Shenzhen Town, Ninghai County
Ningbo 315514, China
Made In China

Importato da/imported by/importé par/importado por/importiert von/
Importado por/Εισαγυγής από/Dovezeno od strane/Dovezeno uživatelem/importeret
af/importēja/Tuoja/Uvezeno od strane/importálta/importēja/importavo/
Importert av/Geimporteerd door/importowane przez/importat de/Dovážal/
Uvozi/importerad av/توزيع بواسطة
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

