



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

BILANCIA DIGITALE IN VETRO
GLASS DIGITAL SCALE
PÈSE-PERSONNES EN VERRE À AFFICHAGE NUMÉRIQUE
GLASPERSONENWAAGE
BÁSCULA DIGITAL DE CRISTAL
BALANÇA DIGITAL DE VIDRO
ΨΗΦΙΑΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ
SZKLANA WAGA CYFROWA
جاجز نم يلاتي جيدي نازيم
DIGITAALINEN LASIVAAKA
STAKLENA DIGITALNA VAGA
ÜVEGBŐL KÉSZÜLT DIGITÁLIS MÉRLEG
CÂNTAR DIGITAL DIN STICLĂ
DIGITAL GLASVÁG

MANUALE D'USO E MANUTENZIONE
USE AND MAINTENANCE BOOK
INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN
BETRIEBS UND WARTUNGS ANWEISUNGEN
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO
MANUAL DE USO E MANUTENÇÃO
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
PODRĘCZNIK EKSPLOATACJI I KONSERWACJI
KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS
PRIRUČNIK ZA UPOTREBU I ODRŽAVANJE
HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ
MANUAL DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE
ANVÄNDNINGS- OCH UNDERHÅLLSMANUAL

REF **GBS-810D (GIMA 27248 - 27249)**

Fabbricato da/Made by/Faite par/Hecho por/Feito por/Hergestellt von/Zrobione przez/Φτιαγμένο από/
GUANGDONG TRANSTEK MEDICAL ELECTRONICS.CO.LTD.
Jin'an Road , Minzhong, Zhongshan 528441, China
Made in China

Importato e distribuito da/Imported and distributed by
GIMA S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



OMINAISUUDET JA TEKNISET TIEDOT


- Automaattinen käynnistyminen
- Automaattinen sammutus
- Mittayksiköt: kg, lb, st:lb
- Kantokyky: 150 kg / 330 lb / 23 st:8lb
- Asteikko: 0,1 kg / 0,2 lb / 0,2 lb (1 lb, ≥ 20 st)
- Ylikuormitusilmoitus: "—" — — — —
- Alhaisen akun ilmoitus "Lo"
- Virransyöttö: 1 x CR2032-paristo

Nestekristallinäyttö




PARISTON VAIHTO

- Varmista, että navat +/- ovat oikein päin.
 - Käytä sopivaa työkalua irrottaaksesi pariston kotelosta tarvittaessa.
- Irrota eristyskiekkeit ennen käyttöä.

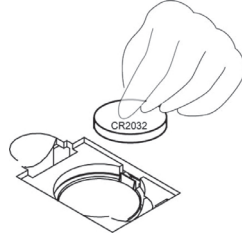

TOIMINTONÄPPÄIMET

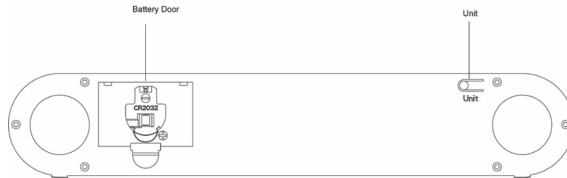

KÄYTTÖOHJEET

1. Paina UNIT-näppäintä laittaaksesi päälle ja valitaksesi mittayksikön.
2. Aseta vaakatasaiselle ja vakaalle alustalle: anna sen sammua automaattisesti.
3. Kun käyttäjä astuu vaaalle, tämä vilkkuu ja näyttää näytöllä painon, minkä jälkeen se sammuu 10 sekunnin kuluessa.
4. Jos mitään ei tehdä, se sammuu automaattisesti.
5. Kun et käytä vaakaa, aseta se vakaaseen vaakasuoraan asentoon äläkä laita mitään sen päälle.



MUISTATHAN:

Älä käytä vaakaa matolla

Jotta punnitustulos olisi oikein, vaakaa siirtäessäsi laita se ensin päälle (tai napauta sitä) ja odota, että se sammuu. Sitten voit astua sen päälle jälleen ja punnita itsesi. Muuten se lisää oman painonsa lukemaan.



HÄVITTÄMINEN:

Tuotetta ei tule hävittää kotitalousjätteen mukana. Käyttäjien tulee hävittää tämä laite viemällä se erityiseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyspisteeseen. Jos haluat tietää enemmän kierrätyspisteistä, ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, paikalliseen kierrätyskeskukseen tai kauppaan, josta tuote ostettiin. Jos laitetta ei hävitetä oikeaoppisesti, sakkoja tai rangaistuksia voidaan antaa kansallisen lainsäädännön ja määräysten mukaisesti.

GIMAN TAKUUEHDOT

Giman 12 kuukauden B2B-perustakuuta sovelletaan.