



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

BILANCIA VETERINARIA - MEDIA
DIGITAL VET SCALE - MEDIUM
BALANCE VÉTÉRINAIRE DIGITALE - MOYENNE
BÁSCULA VETERINARIA - MEDIA
ESCALA VETERINÁRIA - MÉDIA
VETERINÄRSKALA – DURCHSCHNITT
ΒΕΤΕΡΙΝΑΡΕΗ ΚΑΙΤΑΡ - ΣΡΕΔΕΗ
VETERINÁRNÍ MĚŘÍTKO - PRŮMĚR
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ - ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
ELÄINLÄÄKINVÄLINEN ASAKA - KESKIMÄÄRIN
ÁLLATORVOSI MÉRLEG - ÁTLAGOS
SKALA WETERYNARYJNA - ŚREDNIA
SCALA VETERINARĂ – MEDIE
VETERINÁRNA STUPEŇ - PRIEMER

REF 6680 (Gima 27258) - 6681 (Gima 27259)

Manufacturer/Fabbricante/Fabricant/Fabricante/ Hersteller/ производител/
Výrobce/ Κατασκευαστής/ Valmistaja/ Gyártó/ Producent/ Producător

Výrobca:

Momert Zrt.

2400 Dunaújváros - HUNGARY, Papírgyári út 12-14

Made in Hungary


Distribuito da/Distributed by/Distribué par/Distruido por/ Vertrieben von/ Разпространява се от/
Distribuovaný/Διανέμονται από/ Jakelija/Forgalmazza/ Dystrybuowane przez/ Distribuit de/ Distribuovaný

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

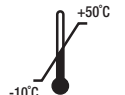

Tutustu koko käyttöoppaaseen huolella ennen tuotteen käyttöä. Pidä opas tallessa tulevaa tarvetta varten. Varmista, että muut tuotteen käyttäjät tuntevat nämä ohjeet.

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA:

- Muista noudattaa paristoon merkittyjä napaisuuksia, kun laitat ja poistat sen.
- Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, poista paristo.
- Älä jätä yksikköä valvomatta käytön aikana.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lasten) käytettäväksi, joiden fyysiset, aisteihin liittyvät tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo heitä tai ole antanut heille ohjeita laitteen käytöstä. Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät pääse leikkimään laitteella.
- Käytä laitetta vain käyttöoppaassa kerrottuun tarkoitukseen.
- Käytä yksikköä vain vakaalla vaakasuoralla tasolla.
- Sammuta yksikkö ja irrota paristo ennen puhdistusta, kokoonpanoa tai kannen purkamista!
- Älä käytä hankaavia tai kemiallisesti voimakkaita aineita yksikön puhdistuksessa.
- Älä käytä yksikköä, jos se ei toimi kunnolla tai jos se on pudonnut, vaurioitunut tai altistunut nesteille. Vie yksikkö valtuutettuun huoltokeskukseen testausta ja korjauksia varten.
- Yksikkö soveltuu vain kotitalouskäyttöön. Sitä ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön.
- Pidä yksikkö kaukana lämmönlähteistä, kuten lämmittimestä, uunista jne. Älä altista yksikköä suoralle auringonvalolle tai kosteudelle.
- Älä koske yksikköön märillä tai kosteilla käsillä.
- Tuote on herkästi rikkoontuvat mittauslaite. Vältä siihen kohdistuvat iskut ja sen putoaminen.
- Älä korjaa laitetta itse. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltokeskukseen.

VALMISTAJAN OHJEIDEN LAIMINLYÖNTI SAATTAA JOHTAA TAKUUN PIIRISSÄ TAPAHTUVAN KORJAUKSEN KIELTÄMISEEN!

TEKNISET TIEDOT:

- Tarkkuusmittausjärjestelmä
- Automaattinen nollaus
- Automaattinen sammutus
- Alhaisen tehon ilmaisin
- Ylikuormituksen ilmaisin

TEKNISET PARAMETRIT

Jännite: 1 kpl 3V, CR2032 litiumparisto (sisältyy)
 Maks. mitattava paino: 3–100 kg
 Mittausväli: 100 g
 Näytön koko: halkaisija LCD = 8,0 cm, 3,15 tuumaa
 Alusta: 6680 (GIMA 27258): 635×355 mm; 6681 (GIMA 27259): 830×620 mm
 Mittayksiköt: kg, lb, st
 Työskentely-/säilytyslämpötila: 10–40°C/-10–50°C

KÄYTTÖOHJE

Ennen vaa'an ensimmäistä käyttökertaa irrota pariston eristyskieleke vaa'an takapuolelta. Aseta vaaka tasaiselle ja lujalle alustalle. Jos vaaka on pehmeällä alustalla (kuten maton päällä), sen näyttämä arvo saattaa olla epätarkka. Käynnistä vaaka napauttamalla alustan keskiosa jalallasi. Ensimmäisellä kerralla näytössä näkyy "8", minkä jälkeen siinä näkyy "0,0". Odota, että näkyy "0,0"! Aseta lemmikkieläin vaa'alle. Nyt lemmikkieläimesi paino näkyy näytössä viikkuen kaksi kertaa. Mitattu paino näkyy noin 10 sekunnin ajan. Jos punnitusta ei tapahdu vaa'an käynnistyksen jälkeen, vaaka sammuu automaattisesti 60 sekunnin jälkeen.

VAIHDA PARISTO

Paristo tulee vaihtaa, kun näytössä näkyy:



Avaa vaa'an takapuolen akkukotelo ja ota paristo varoen ulos vetäen sisään mustan muovisen pidikekielekkeen. Kiinnityskieleke sijaitsee pariston yläosassa. Älä taita metallikielekettä. Vaihda paristo uuteen. Tyhjä paristo tulee hävittää asianmukaisesti.

PARISTOT EIVÄT KUULU TAKUUN PIIRIIN!

IYLIKUORMITUSVAROITUS

Kun vaaka on ylikuormitettu, näkyviin tulee:



PUHDISTUS JA HUOLTO

Yksikön pinta voidaan puhdistaa vain märällä liinalla. Älä käytä pesuaineita tai kovia esineitä, sillä ne voivat vaurioittaa yksikön pintaa! Älä koskaan puhdistaa yksikköä juoksevalla vedellä äläkä huuhtelee tai upota sitä veteen!

KORJAUS JA HUOLTO

Kaikki laajat huollot tai korjaukset, jotka edellyttävät pääsyä tuotteen sisäosiin, on teetettävä asiantuntevassa huoltokeskuksessa.

YMPÄRISTÖNSUOJELU

- Pakkausmateriaalit ja vanhentuneet laitteet tulee kierrättää.
- Kuljetuslaatikko tulee hävittää lajiteltuna jätteenä.
- Polyeteleenipussit on toimitettava kierrätykseen

 **Hävittäminen:** Tuotetta ei tule hävittää kotitalousjätteiden mukana. Käyttäjien tulee hävittää tämä laite viemällä se erityiseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyspisteeseen.

GIMAN TAKUUEHDOT

Giman 12 kuukauden B2B-vakiotakuuta sovelletaan.