

seca 210

seca
Precision for health

Sydämelliset onnittelet

Ostamalla seca 210 -mittausmaton olet hankkinut tarkan ja samalla kestäväen imeväisikäisille tarkoitetun pituudenmittauslaitteen.

seca 210 -mittausmatto on suunniteltu käytettäväksi lastenlääkäreiden vastaanotoilla, lastensairaaloissa tai kättilöiden ja lastenlääkäreiden kotikäynneillä.

Mittausmaton voi rullata kokoon, joten se tarvitsee vain vähän tilaa. Tämän lisäksi maton päävasteessa on reiät, joista matto voidaan ripustaa riippumaan seinälle.

Turvallisuus

Ennen kuin otat uuden mittausmaton käyttöön, varaa vähän aikaa seuraavien turvallisuusohjeiden lukemiseen.

Noudata käyttöohjeessa annettuja ohjeita.

- Älä koskaan jätä vauvaa mittausmatolle ilman valvontaa.
- Suorita mittaus vain sellaisella alustalla, jolta vauva ei voi pudota.
- Puhdista mittausmatto säännöllisesti ja desinfioi se tartuntatautien varalta.
- Jotta mittaus olisi mahdollisimman tarkkaa, siinä olisi ihanteellisesta olla mukana kaksi henkilöä.


Käyttö

Mittaaminen:

1. Aseta vauva mittausmatolle. Vauvan pään täytyy olla kiinni mittausmaton päävasteessa (1).
2. Työnnä oikealla kädellä jalkavastetta (2) vauvan jalkaterien suuntaan ja pidä samalla vauvasta kiinni vasemmalla kädellä.

3. Suorista vauvan jalat painamalla vasemmalla kädellä vauvan polvia varovasti mittausmattoa vasten.
4. Aseta oikealla kädellä jalkavaste (2) suoras- sa kulmassa vauvan jalkapohjia vasten.
5. Lue pituus mittausmaton pohjassa olevasta merkistä (3).

Toimimalla näiden ohjeiden mukaisesti saavutat paremmin +/- 5 mm:n tarkkuuden.

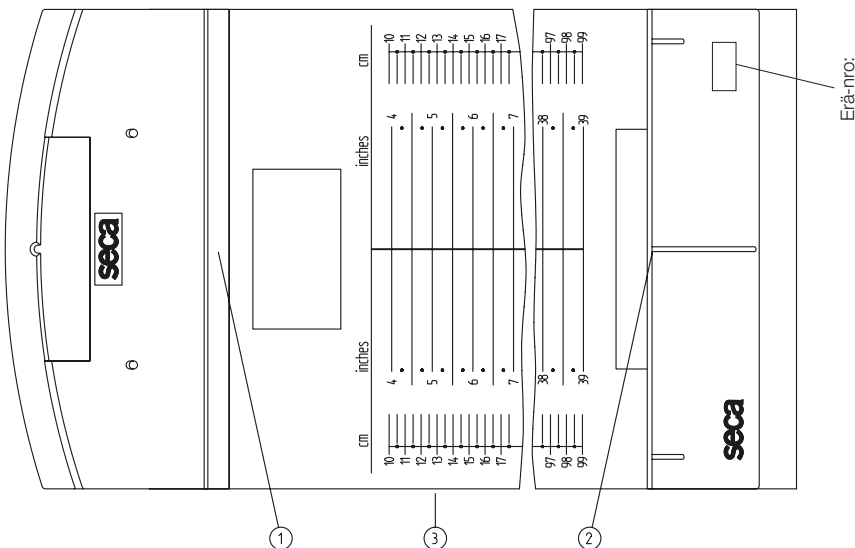

Puhdistus

Puhdista mittausmatto tarvittaessa kotitaloudessa käytettävällä pesuaineella tai tavanomaisella desinfiointiaineella. Noudata aineen valmistajan antamia ohjeita.

Tekniset tiedot

Mittausalue: 100 - 990 mm / 4 - 39 tuumaa
Jako: 5 mm / 1/4 tuumaa
Tarkkuus: parempi kuin ± 5 mm
Mitat (L x K x S): 300 mm x 140 mm x 1340 mm
Omapaino: n. 500 g
Lämpötila-alue: +10°C - +40°C
Lääketieteellinen tuote direktiivin 93/42/ETY mukaan: Luokka I mittausstoiminnolla

Hävittäminen

Jos mittausmatto tulee käyttökeltvottomaksi, voit kysyä paikalliselta jätehuolloilta, kuinka se hävitetään asianmukaisesti.

Takuu

Myönnämme puutteista, jotka johtuvat materiaali- tai valmistusvirheistä, kahden vuoden takuun toimitusajankohdasta alkaen. Kaikki liikkuvat osat, kuten esim. paristot, sähköjohdot, verkkolaitteet, akut jne., eivät kuulu takuun piiriin. Takuun piiriin kuuluvat puutteet poistetaan asiakkaalle maksutta esitettäessä ostokuitti. Muita vaatimuksia ei ole mahdollista ottaa huomioon. Edestakaisesta kuljetuksesta syntyvät kulut menevät asiakkaan laskuun, jos laite on muulla kuin asiakkaan paikkakunnalla. Kuljetusvahingoista voidaan esittää korvausvaatimuksia vain, kun kuljetukseen on käytetty kokonaista alkuperäispakkausta ja tavara on varmistettu ja kiinnitetty pakkaukseen tavalla kuin alkuperäisessä toimituksessa. Kaikki pakkaukosat tulee säilyttää tallella tästä syystä.

Takuu ei ole voimassa, jos laitteen avaa henkilö, jota seca ei ole nimenomaisesti valtuuttanut tähän.

Ulkomailla olevia asiakkaita pyydämme kääntymään takuutapauksessa suoraan kyseisen maan myyntiliikkeen puoleen.

CE-yhdenmukaisuusvakuutus

Mekaaninen pituudenmittauslaite

malli seca 210

Erä-nro: ks. mittausmaton


Mittausmatto täyttää lääketieteellisistä tuotteista annetun direktiivin 93/42/ETY voimassa olevat vaatimukset.

seca gmbh & co. kg.



– Geschäftsführer Finanzen & Technik –

Hamburg

: www.seca.com

seca deutschland

Medical Scales and Measuring Systems

seca gmbh & co. kg.

Hammer Steindamm 9-25

22089 Hamburg • Germany

Phone • +49 (0)40 20 00 00 0

Fax • +49 (0)40 20 00 00 50

E-mail • info@seca.com

All contact data under www.seca.com

17-10-02-222 h/08 L

seca
group

seca deutschland

seca france

seca united kingdom

seca north america

seca schweiz

seca zhong guo

seca nihon

seca mexico

seca austria