



GIMA

Gima S.p.A.


Via Marconi, 1 – 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com – export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

TRANSABDOMINAL AMNIOCENTESIS NEEDLE

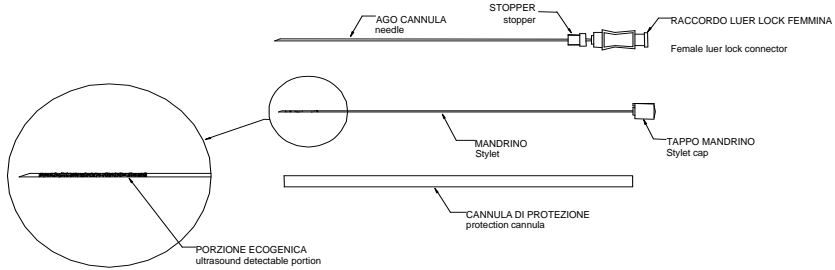

Käyttöohje

Tarkista, että mandriini on suljettu. Vie neula sisään kohtisuorasti ultraäänikuvan mukaan lapsivesipussiin. Poista mandriini ja liitä neulaan 20 cc:n ruisku.

Ime neste hitaalla, kohtuullisella negatiivisella paineella. Aseta mandriini takaisin ja poista sekä neula että mandriini. Siirrä lapsivesinäyte kuivaan, steriiliin koeputkeen ja säilytä 37 0c:n lämpötilassa.

Varoitus: Käytä ainoastaan lääkärin tiukan valvonnan alaisena. Käytä heti pakkauksen aukaisemisen jälkeen.

Saattaa sisältää vähäisiä määriä nikkeliä.

REF 770228 (Gima code 29636) - 770222 (Gima code 29637) -
770201 (Gima code 29638) - 770201 (Gima code 29639) -
770223 (Gima code 29640) - 770202 (Gima code 29641)

CE 0476

STERILE R



RI.MOS s.r.l.

viale Gramsci, 29

41037 Mirandola (MO) Italy

