



Littmann® CORE Stethoscope

Connects to Eko Software

Eko

3M

(en)	English	pp. 1	(sl)	Slovenski	pp. 33
(fr)	Français	pp. 3	(et)	Eesti	pp. 35
(de)	Deutsch	pp. 5	(lv)	Latviesu	pp. 37
(it)	Italiano	pp. 7	(lt)	Lietuviskai	pp. 39
(es)	Español	pp. 9	(ro)	Romana	pp. 41
(nl)	Nederlands	pp. 11	(hr)	Hrvatski	pp. 43
(sv)	Svenska	pp. 13	(bg)	Български	pp. 45
(da)	Dansk	pp. 15			
(no)	Norsk	pp. 17			
(fi)	Suomi	pp. 19			
(pt)	Português	pp. 21			
(el)	Ελληνικά	pp. 23			
(pl)	Polski	pp. 25			
(hu)	Magyar	pp. 27			
(cs)	Čeština	pp. 29			
(sk)	Slovensky	pp. 31			

3M™ Littmann® CORE digitaalinen stetoskooppi

Pikaopas

Lataa Eko-Sovellus Apple App Store®- Google Play Store® -kaupasta.

Kytke langaton Bluetooth®-teknologia päälle puhelimesasi tai tablettilasi, käynnistä sovellus ja kytke CORE-stetoskooppi päälle.


Eko

Laatikossa

- Digitaalinen Eko CORE -lisäosa ja 3M™ Littmann® Cardiology IV™ -stetoskooppi
- Lisäsarja 3M Littmann Snap Tight Soft-Sealing -korvakappaleet (pienet)
- Nonchill-kelloholkki
- USB-latausjohto
- Pikaopas

Korvakappaleet

Laita korvakappaleet sisään korvakäytäviin eteenpäin suunnattuina.

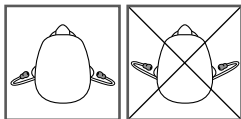

Äänenvoimakkuus

Säädä äänenvoimakkuutta painikkeilla (+) ja (-). Äänenvoimakkuudessa on 7 tasoa.

Kytkeä päälle ja pois

Kun CORE-stetoskooppi on pois päältä, se toimii vahvistamattomana stetoskoopina.

Kytke CORE-stetoskooppi päälle painamalla virtakytkintä. Valo alkaa vilkkua. Kuulet nyt korvakappaleissa vahvistetun ja suodatetun äänen.

Telelääketiede- ja tekoälyominaisuudet

Eko tarjoaa telelääketiede- ja tekoälyominaisuuksia, jotka edellyttävät ohjelmiston tilausta (jos saatavilla, myydään erikseen).

Voit tehdä tilauksen verkossa osoitteessa ekohealth.com

Aktiivinen vastamelu

CORE-stetoskooppi sisältää aktiivisen vastamelutoiminnon, joka poistaa ympäristön melun. Aktiivinen vastamelu voidaan kytkeä päälle tai pois Eko-sovelluksen kautta.



Ilmoitukset

(●●●) (vilkkuva)

CORE-stetoskooppi on päällä ja etsii laitetta

● (keltainen)

CORE-stetoskooppi on pois päältä ja latautuu

(●●) (keltainen)

CORE-stetoskoopin akun varaus on alhainen

○

CORE-stetoskooppi on päällä ja yhdistetty

● (vihreä)


CORE-stetoskooppi on täysin ladattu

(●●) (sininen)

CORE-stetoskooppi tallentaa

Tallennus

Kun yhteys Eko-sovellukseen on muodostettu, aloita tallennus painamalla painiketta (o).

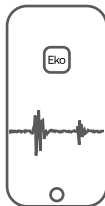

Lataaminen

Yhdistä micro-USB-johdot CORE-stetoskooppiin ja käytä UL-sertifioitua tai CE-merkittyä 5 V USB-seinälaturia. CORE-stetoskoopin latautuminen täyteen kestää noin 2 tuntia. Kun akkuvaraus on täysi, valo muuttuu vihreäksi.

Käyttöopas

Tutustu käyttöohjeeseen, ennen kuin käytät Littmann CORE-stetoskooppia. Tutustu ohjeeseen käymällä osoitteessa: ekohealth.com/getstarted
Lisätietoja 3M-laitteista on osoitteessa HCBRegulatory.3M.com

Huolto ja tuki

Käy Yhdysvalloissa osoitteessa littmann.com/service tai soita numeroon 1-800-228-3957. Jos olet Yhdysvaltojen ulkopuolella, etsi paikallisen 3M-toimiston yhteystiedot osoitteesta littmann.com.



Apple App Store on Apple Inc. -yhtiön tavaramerkki.
Google Play ja Google Play -logo ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.
Bluetooth® on Bluetooth SIG:n rekisteröity tavaramerkki.
LBL 143 versio B

System assembled by 3M Company



3M Deutschland GmbH
Health Care Business

www.littmann.com



Made in USA with
Globally Sourced Materials

 **3M Company**

2510 Conway Ave.
St. Paul, MN 55144 USA



 **EC REP**

3M Deutschland GmbH
Health Care Business
Carl-Schurz-Str. 1
41453 Neuss, Germany



Made in Malaysia

 **Eko Devices, Inc.**

1212 Broadway, Suite 100
Oakland, CA 94612 USA



0537

 **EC REP**

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

©2020 3M; Eko Devices Inc. All rights reserved.

3M, Littmann, the L Littmann logo, the L, and Cardiology IV are marks and/or registered marks of 3M.

Unauthorized use prohibited.

Eko trademarks, including CORE, are marks and/or registered marks of Eko Devices Inc.

Issue Date: 2020-11

34-8726-3344-0