

FI - KERTAKÄYTTÖÖN KÄYTTÖOHJEET

KÄYTTÖOHJEET: kertakäyttöiset suukappaleet on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä keuhkojen toiminnan testauslaitteiden kanssa ja niiden avulla potilas voi ottaa tutkimuksen ilman suoraa kosketusta laitteeseen.

Potilas käsittelee suukappaletta henkilökohtaisesti työntämällä sen laitteeseen. Suukappaleita tulee käyttää vain ehjälle, puhtaalle ja terveelle iholle.

TUOTTEEN TUNNISTUS: Tunnistustiedot (viite, erä ja valmistuspäivä) ovat laatikon etiketissä.

KÄYTTÖ:

- Noudata aina spirometrin ohjeita.
- Aseta suukappale laitteen anturiin (turbiini tai pneumotakometri) pakottamatta. Älä koskaan käytä suukappaletta uudelleen, jotta potilas ei altistu ristikontaminaatiolle.
- Älä avaa ennen käyttöä.
- Älä käytä, jos pakkaus on vaurioitunut.
- Laitte ei sovellu käyttäväksi vastasyntyneiden lastenlääketieteessä.
- Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa.

HÄVITTÄMINEN JA TURVALLISUUS: Tuote on käytön jälkeen hävitettävä tavallisiin myrkyttömän kiinteän jätteen säiliöihin tai yleiseen sairaalajätteeseen.

VASTA-AIHEET: Erilaisten analyysien kokemusten ja tulosten perusteella tuotteen oikeasta käytöstä ei ole haittavaikutuksia.



SÄILYTYS: säilytä viileässä ja kuivassa paikassa.

VAROITUS:

- Pakkaus yksittäisiin lämpösaumattuihin kirjekuoriin (yksikääreisiin) takaa bakteerien puuttumisen, jota valvotaan säännöllisesti valmistajan laatujärjestelmän mukaisesti. Jos lääketieteellistä laitetta käytetään uudelleen, sitä uudelleen käyttävä potilas voi saada ristiininfektion.

- Jos laitetta käytetään uudelleen, sitä uudelleen käyttävä potilas voi saada ristiininfektion.

Manuale d'uso LUMED Rev. 4.0 01/09/2023

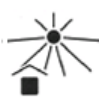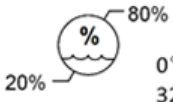

LUMED Srl
Via Staffora 18/9
20073 Opera ITALIA
www.lumed.com
tel +39 (0)2 57606750