


MINIPYÖRÄN KÄYTTÖOHJEET

1. Ota minipyörä laatikosta ja käsittele sitä varoen. Katso kuva 1.
2. Aseta minipyörän runko maahan tasaisesti, laita siihen sitten nuppiruuvi A kuvassa näytetysti. Katso kuva 2.
3. Käännä nuppiruuvia A siten, että akselin B paine on sopiva (vasemmalle paine kasvaa, toiseen suuntaan se vähenee). Laita päälle laskuripainike C ja käännä akselia B, jolloin se välittömästi toimii käytössä. Katso kuvaa 3. (Tutustu laskurin ohjeisiin lisätietoja varten.)
4. Vedä nastaa 0 sisään päin käytön jälkeen ja taita se huolellisesti kuvan 5 mukaisesti.
5. Huomio:
 - (1) Tarkista se ja varmista, että se on asetettu varmasti ja samalle tasolle ennen käyttöä;
 - (2) Älä unohda antaa paineen olla minimissä käyttöä aloitettaessa, lisää sitä sitten tarpeen mukaan;
 - (3) Soveltuvat käyttäjät: aikuiset, lapset, vanhukset;

VAROITUS: Älä yritä seistä minipyörällä: muuten laite vaurioituu.

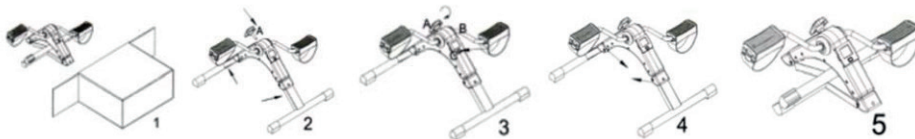

HARJOITTELUTIETOKONEEN KÄYTTÖOHJE

TEKNISET TIEDOT:

TIME -----00: 00-99:59MIN
COUNT-----0-9999
REPS/MIN-----0-9999
CALORIE -----0-9999KAL

NÄPPÄINTOIMINTO:

MODE: Tästä näppäimestä voit valita tietyn haluamasi toiminnon, jota käytetään. Jos pidät näppäintä painettuna 4 sekunnin ajan, kaikki toimintoarvot nollaantuvat.


TOIMINTAMENETELMÄT:

AUTO ON/OFF: Järjestelmä kytkeytyy päälle kun mitä tahansa näppäintä painetaan tai kun vastaanotetaan ärsyke nopeusanturista. Näyttö sammuu automaattisesti, jos mitään signaaleja ei vastaanoteta 4 minuuttiin.


TOIMINTO:

TIME Paina MODE-näppäintä, kunnes ">" osoittaa TIME-tekstiä. Kun nopeusanturi vastaanottaa signaaliärsyksen, se aloittaa laskennan ja kerryttää automaattisesti harjoitusaikaa, kun liikunta aloitetaan. **COUNT** Kun kohta ">" osoittaa COUNT-tekstiä, tietokone näyttää askeleet. Kun nopeusanturi vastaanottaa signaaliärsyksen, se aloittaa laskennan ja kerryttää automaattisesti harjoituslaskentaa, kun liikunta aloitetaan. **REPS/MIN** Paina MODE-näppäintä, kunnes ">" osoittaa REPS/MIN-tekstiä. Kun nopeusanturi vastaanottaa signaaliärsyksen, se aloittaa laskennan ja kerryttää automaattisesti harjoituslaskentaa, kun liikunta aloitetaan. **CALORIE** Paina MODE-näppäintä, kunnes kohdassa ">" näkyy CAL. Kun nopeusanturi vastaanottaa signaaliärsyksen, se aloittaa laskennan ja kerryttää automaattisesti harjoittelukaloreita, kun liikunta aloitetaan. **SCAN** Kun ">" osoittaa SCAN-tekstiä, tietokone näyttää automaattisesti seuraavat toiminnot seuraavassa järjestyksessä: TIME-----COUNT-----STRIDES-----CALORIES


HUOMIO 1. Akun tekniset tiedot: 1,5V, LR44 (1 kpl) - 2. Jos näyttö ei näy kunnolla, laita paristot uudelleen. - 3. Pariston asennusmenetelmä:

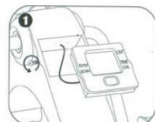


Löysää ja irrota ruuvit näyttöyksikön molemmilta puolilta ja irrota sitten näyttöyksikkö varovasti pistorasiastaan.

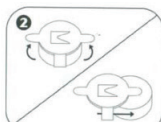

Nosta näyttöyksikön takana olevat akun kielekkeet ylös ja luo uutta akku ulos.

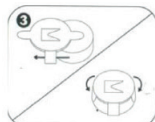

Aseta uusi 1,5 V:n AG13 paristo paikalleen positiivisen puolen alapäin ja sulje kielekkeet.

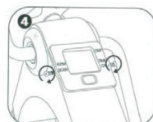

Aseta sihtyyskko takaisin paikalleen ja kiinnitä ruuvilla

GIMAN TAKUUEHDOT

Giman 12 kuukauden B2B-perustakuuta sovelletaan.

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante
Hersteller / Producent / Producător / Gyártó / Παραγωγός:
ZHEJIANG TODO HARDWARE MANUFACTURE CO., LTD
No.31th Floor, Jinmao Building, CBD Centre,
Yongkang, Zhejiang, China
Made in China

REF TD001P-3

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importado por/ Ein-
geführt von / Importowane przez / Importat de / Importálta / Εισαγόμενα από:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

GIMA 43151