



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

CARRELLO D'EMERGENZA NEO
NEO EMERGENCY TROLLEY
CHARIOT D'URGENCE NEO
CARRO DE EMERGENCIAS NEO
CARRINHO DE EMERGÊNCIA NEO
NEO NOTFALLWAGEN
NEO ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
WÓZEK AWARYJNY NEO
CĂRUCIOR MEDICAL DE URGENȚĂ NEO

NEO NOUZOVÝ VOZÍK
NEO NÖDLÄGESVAGN
NEO TROLLEY - ANESTHESIEWAGEN
NEO KOLICA ZA HITNE SLUČAJEVE
NEO ÉRZÉSTELENÍTŐ KOCSI
NEO КОЛИЧКА ЗА СПЕШНО
ОТДЕЛЕНИЕ
NEO-ELVYTYSKÄRRY
NEO SKUBIOS PAGALBOS VEŽIMĖLIS

MANUALE D'USO – USER MANUAL – MODE D'EMPLOI – MANUAL DE USO - MANUAL DO USUÁRIO -
BENUTZERHANDBUCH - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ - INSTRUKCJA OBSŁUGI - MANUAL DE UTILIZARE - UŽIVATELSKÝ
MANUÁL - ANVÄNDARMANUAL - HANDLEIDING - KORISNIČKI PRIRUČNIK - HASZNÁLATI UTASÍTÁS -
РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА - ΟΗΓΕΚΙΡΙΑ - VARTOTOJO VADOVAS



Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante
/ Hersteller / Κατασκευαστής / Producent / Producent / Výrobce /
Tillverkare / Fabrikant / Proizvođači / Gyártó / производител / Valmistaja
/ Gamintojas: **Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd**
No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture Demonstration Park,
Zhangjiagang City, Jiangsu Province, China
export@saikangmedical.com
Made in China

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importado
por / Importiert von / Εισάγεται από / Importowane przez / Importat de /
Importováno / Importerad av / Geïmporteerd door / Uvezao / Importálja
/ Внесен от / Maahantuoja / Importavo / :

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



SKR054-ET

Gima 45722

1. PYÖRIEN ASENNUS

Kohdista pyörän pultti kärryn pohjan asennusreikään ja laita pyörä. Laita ruuvi asennusreikään ja kiristä sitä myötäpäivään.




1

2


3

2. PYÖRIEN KÄYTTÖ

Lukitse pyörä: Kun olet työntänyt emergenza kärryn haluttuun kohtaan, paina ON-painiketta jalallasi ja lukitse pyörä, kun kuulet "klik"-äänen alla olevassa kuvassa näytetysti.

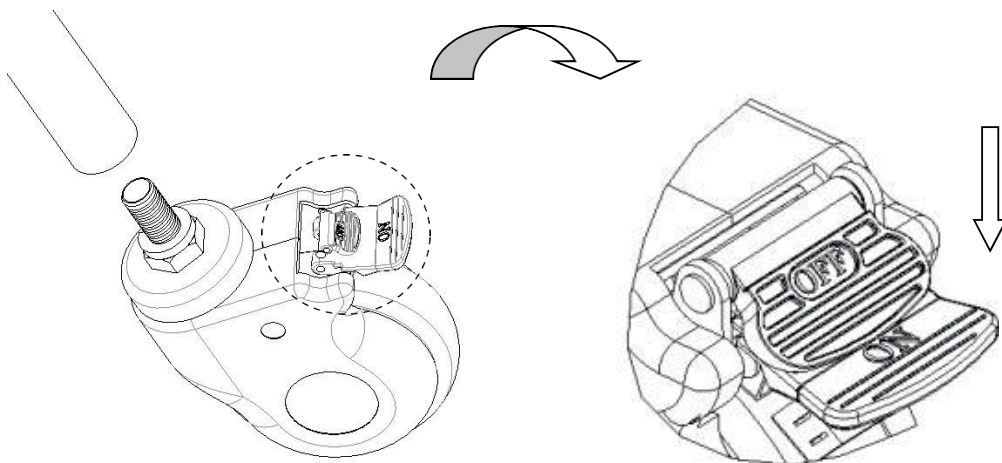

Avaa pyörän lukitus: Paina OFF-painiketta jalallasi ja vapauta pyörä, kun kuulet "klik"-äänen.

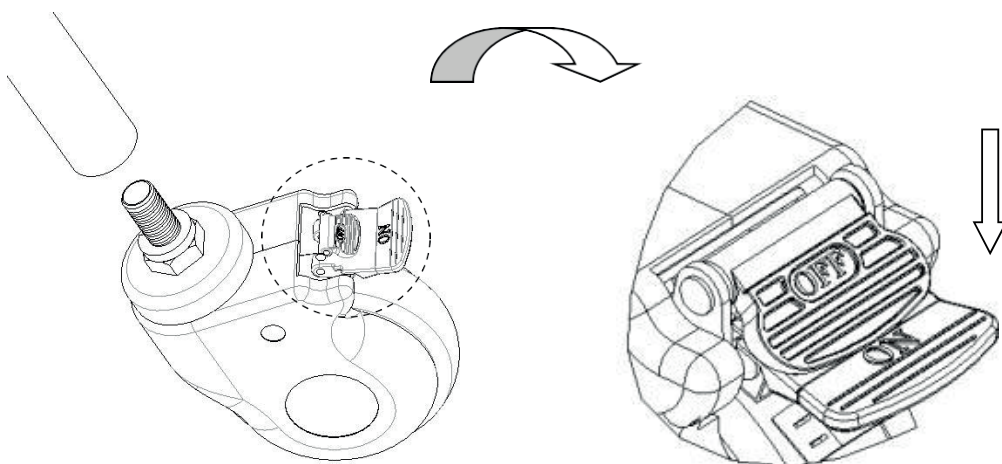

3. VIKOJEN POISSULKEMINEN

Yleiset viat	Mahdolliset syyt	Poissulkemistavat
Koko kärry on vaikea liikuttaa	1. Pyörä on lukittu ilman että jarrua on vapautettu 2. Pyörä on vaurioitunut	1. Vapauta jarru 2. Vaihda pyörä

4. HUOLTO

- Jotta emergenzakärryä voitaisiin käyttää turvallisesti, sen turvallisuus tulee tarkistaa säännöllisesti. Suosituksena on tarkistaa se kuuden kuukauden välein, jotta voidaan varmistaa, että liitännät eivät ole höllentyneitä ja että kaikki toimenpiteet sujuvat normaalisti.
- Kun emergenzakärryn runko vanhenee ja saavuttaa tietyn käyttöiän, emergenzakärryn metalliosat ja emergenzakärryn kehikon muoviosat voidaan kierrättää.
- Vältä paneelin naarmuttamista teräväreunaisilla laitteilla tai veitsillä käytön aikana ja puhdistaa se usein pitääksesi sen puhtaana ja kuivana.
- Jos paneeli on vahingossa likaantunut, se tulee puhdistaa. Älä käytä emäksisiä tai syövyttäviä kemikaaleja emergenzakärryn puhdistuksessa, sillä ne johtavat ruostumattoman teräspinnan ruostumiseen.
- Tarkista pyörät säännöllisesti ja vältä niihin kohdistuvia iskuja tai ylikuormituksia, sillä nämä vaurioittavat pyöriä.
- Pyöriä ei saa pakottaa jarruttamaan jarrutuksen aikana, sillä muuten tuloksena on jarrujärjestelmän vaurioituminen.
- Pyörän rengaspinnan kulumisen voidaan havaita silmämääräisellä tarkistuksella. Säikeitä ja muuta aineita voi kietoutua pyörän ympärille. Jos näin käy, irrota pyörän pultit ja mutterit, poista lika ja tarkista, onko pyörän laakeri vaurioitunut. Jos osat eivät ole vaurioituneet, ne voidaan koota uudelleen ja niitä voidaan käyttää.
- Arvioi pyörän vaihtotarve käyttöajan ja kulumisen perusteella ja vaihda pyörät tarvittaessa: varmista, että akselien pultit ja mutterit on koottu ja liitetty hyvin. Jos mahdollista, käytä lukkoaluslevyjä tai lukkomuttereitä tässä menettelyssä.
- Jos pyörissä on jarrut, jarrujen oikeaoppinen toiminta tulee tarkistaa säännöllisesti. Tarkista jarrut kerran päivässä ennen kutakin käyttökertaa. Jos emergenzakärry on varustettu monilla pyöräjarruilla, yhden pyörän jarru voidaan lukita kerrallaan, jolloin voit yrittää työntää emergenzakärryä tarkistaaksesi, toimiiko kunkin pyörän jarru kunnolla. Jos jarrun ei toimi pyörien kulumisen tai vaurioitumisen vuoksi, vaihda pyörät välittömästi ja testaa jarrujärjestelmä sitten uudelleen.
- Jos pyörän jarrujärjestelmän mekanismi on vaurioitunut ja jarru tulee korjata tai vaihtaa, ota yhteyttä jälkimyyntipalveluumme tai valtuutettuun jälleenmyyjään, jonka tiedot yrityksemme antaa. Pyörien jarrujen tehokkuus tulee aina testata uudelleen, kun jarrut vaihdetaan.

5. PAKKAUS, KULJETUS JA VARASTOINTI

- Kärry on pakattu sopimuksen tai tuotestandardin mukaan.
- Vältä äkillistä liikettä ja voimakasta tärinää kärryn käytön aikana ja pidä kärry suojassa auringonvalolta ja sateelta.
- Kärryn varastointiolosuhteet:
 - Ympäristön lämpötila: +5°C ~ +40°C.
 - Suhteellinen kosteus: ≤ 85 %.
 - Ilmanpaine: 70 kPa ~ 106 kPa.
 - Maksimikuorma on 50 kg.

GIMAN TAKUUEHDOT

Giman 12 kuukauden B2B-perustakuuta sovelletaan