

CARRELLO PORTAMEDICINALI
MEDICINE TROLLEY
CHARIOT MÉDICAL
CARRO DE MEDICAMENTO
CARRINHO DE MEDICAMENTOS
MEDIZINWAGEN
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
WÓZEK MEDYCZNY
ČARUCIOR MEDICAL

VOZÍK NA LÉKY
MEDICINTEKNISK VAGN
MEDICIJNWAGEN
MEDICINSKA KOLICA
GYÓGYSZERES KOCSI
МЕДИЦИНСКА КОЛИЧКА
LÄÄKEVAUNU
MEDICININIS VEŽIMĖLIS

MANUALE D'USO – USER MANUAL – MODE D'EMPLOI – MANUAL DE USO - MANUAL DO USUÁRIO -
BENUTZERHANDBUCH - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ - INSTRUKCJA OBSŁUGI - MANUAL DE UTILIZARE - UŽIVATELSKÝ
MANUÁL - ANVÄNDARMANUAL - HANDLEIDING - KORISNIČKI PRIRUČNIK - HASZNÁLATI UTASÍTÁS -
РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА - ΟΗΓΕΚΙΡΙΑ - VARTOTOJO VADOVAS



Gima 45725

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante
/ Hersteller / Κατασκευαστής / Producent / Producent / Výrobce /
Tillverkare / Fabrikant / Proizvođač / Gyártó / производител / Valmistaja
/ Gamintojas:

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd

No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture Demonstration Park, Zhangjia-
gang City, Jiangsu Province, China
export@saikangmedical.com
Made in China

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importado
por / Importiert von / Εισάγεται από / Importowane przez / Importat de /
Importovano / Importerad av / Geïmporteerd door / Uvezao / Importálja
/ Внесен от / Maahantuoja / Importavo / :

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

REF SKR054-MT

1. PYÖRIEN ASENNUS

Kohdista pyörän pultti kärryn pohjan asennusreikään ja laita pyörä. Laita ruuvi asennusreikään ja kiristä sitä myötäpäivään.



1




2




3

2. PYÖRIEN KÄYTTÖ

Lukitse pyörä: Kun olet työntänyt anestesiakärryn haluttuun kohtaan, paina ON-painiketta jalallasi ja lukitse pyörä, kun kuulet "klik"-äänen alla olevassa kuvassa näytetysti.

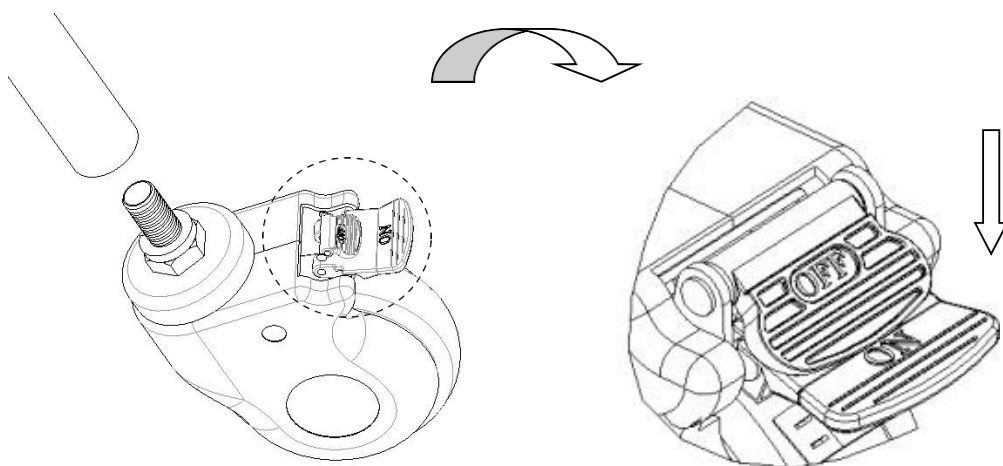

Avaa pyörän lukitus: Paina OFF-painiketta jalallasi ja vapauta pyörä, kun kuulet "klik"-äänen.

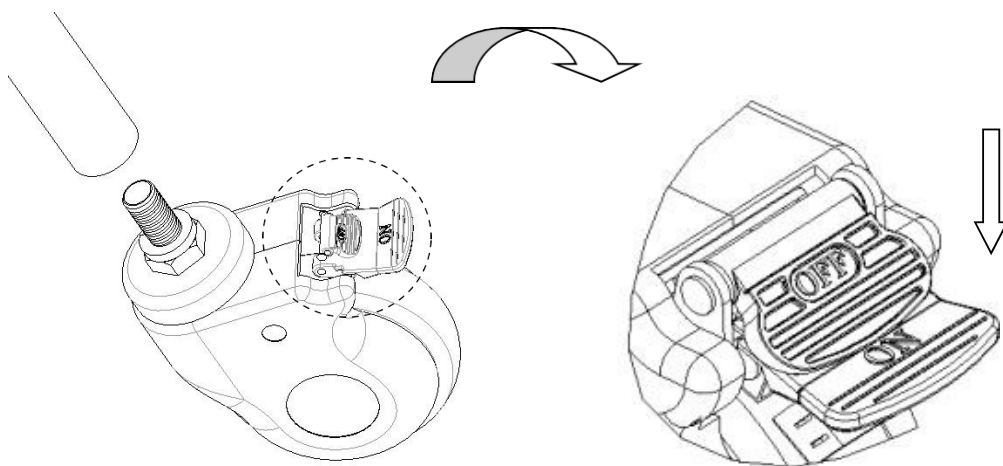

3. VIKOJEN POISSULKEMINEN

Yleiset viat	Mahdolliset syyt	Poissulkemistavat
Koko kärry on vaikea liikuttaa	1. Pyörä on lukittu ilman että jarrua on vapautettu 2. Pyörä on vaurioitunut	1. Vapauta jarru 2. Vaihda pyörä

4. HUOLTO

- Jotta anestesiakärryä voitaisiin käyttää turvallisesti, sen turvallisuus tulee tarkistaa säännöllisesti. Suosituksena on tarkistaa se kuuden kuukauden välein, jotta voidaan varmistaa, että liitännät eivät ole höllentyneitä ja että kaikki toimenpiteet sujuvat normaalisti.
- Kun anestesiakärryn runko vanhenee ja saavuttaa tietyn käyttöiän, anestesiakärryn metalliosat ja anestesiakärryn kehikon muoviosat voidaan kierrättää.
- Vältä paneelin naarmuttamista teräväreunaisilla laitteilla tai veitsillä käytön aikana ja puhdista se usein pitääksesi sen puhtaana ja kuivana.
- Jos paneeli on vahingossa likaantunut, se tulee puhdistaa. Älä käytä emäksisiä tai syövyttäviä kemikaaleja anestesiakärryn puhdistuksessa, sillä ne johtavat ruostumattoman teräspinnan ruostumiseen.
- Tarkista pyörät säännöllisesti ja vältä niihin kohdistuvia iskuja tai ylikuormituksia, sillä nämä vaurioittavat pyöriä.
- Pyöriä ei saa pakottaa jarruttamaan jarrutuksen aikana, sillä muuten tuloksena on jarrujärjestelmän vaurioituminen.
- Pyörän rengaspinnan kulumisen voidaan havaita silmämääräisellä tarkistuksella. Säikeitä ja muuta aineita voi kietoutua pyörän ympärille. Jos näin käy, irrota pyörän pultit ja mutterit, poista lika ja tarkista, onko pyörän laakeri vaurioitunut. Jos osat eivät ole vaurioituneet, ne voidaan koota uudelleen ja niitä voidaan käyttää.
- Arvioi pyörän vaihtotarve käyttöajan ja kulumisen perusteella ja vaihda pyörät tarvittaessa: varmista, että akselien pultit ja mutterit on koottu ja liitetty hyvin. Jos mahdollista, käytä lukkoaluslevyjä tai lukkomuttereita tässä menettelyssä.
- Jos pyörissä on jarrut, jarrujen oikeaoppinen toiminta tulee tarkistaa säännöllisesti. Tarkista jarrut kerran päivässä ennen kutakin käyttökertaa. Jos anestesiakärry on varustettu monilla pyöräjarruilla, yhden pyörän jarru voidaan lukita kerrallaan, jolloin voit yrittää työntää anestesiakärryä tarkistaaksesi, toimiiko kunkin pyörän jarru kunnolla. Jos jarrun ei toimi pyörien kulumisen tai vaurioitumisen vuoksi, vaihda pyörät välittömästi ja testaa jarrujärjestelmä sitten uudelleen.
- Jos pyörän jarrujärjestelmän mekanismi on vaurioitunut ja jarru tulee korjata tai vaihtaa, ota yhteyttä jälkimyyntipalveluumme tai valtuutettuun jälleenmyyjään, jonka tiedot yrityksemme antaa. Pyörien jarrujen tehokkuus tulee aina testata uudelleen, kun jarrut vaihdetaan.

5. PAKKAUS, KULJETUS JA VARASTOINTI

- Kärry on pakattu sopimuksen tai tuotestandardin mukaan.
- Vältä äkillistä liikettä ja voimakasta tärinää kärryn käytön aikana ja pidä kärry suojassa auringonvalolta ja sateelta.
- Kärryn varastointiolosuhteet:
 - Ympäristön lämpötila: +5°C ~ +40°C.
 - Suhteellinen kosteus: ≤ 85 %.
 - Ilmanpaine: 70 kPa ~ 106 kPa.
 - Maksimikuorma on 50 kg

GIMAN TAKUUEHDOT

Giman 12 kuukauden B2B-perustakuuta sovelletaan