

BIOPSY PUNCH




(FR) Lire attentivement la notice avant utilisation.




(FR) Stérile. A USAGE UNIQUE.
Si de multiples biopsies ou échantillons sont nécessaires pour un même patient, utiliser un nouveau dispositif médical à chaque fois.
→ Ne pas re-stériliser ou ré-utiliser en raison du risque d’infection.
→ Ne pas utiliser si l’emballage stérile est altéré ou endommagé.

(FR) Diamètres disponibles:
2; 3; 3.5; 4; 5; 6 & 8 mm


1.
(FR) Le Punch à biopsie (ou biopsy punch) est une méthode standardisée pour réaliser des biopsies cutanées.

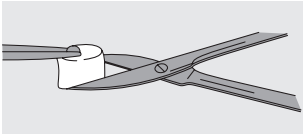


c.
(FR) Saisir et soulever doucement l’échantillon de peau avec une petite pincette anatomique, en évitant tout écrasement. Si nécessaire, couper avec des ciseaux ou un scalpel à la base de l’échantillon.

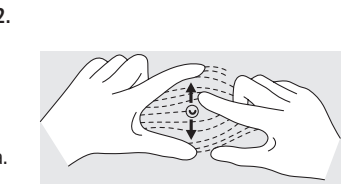

a.
(FR) Étirer la peau pour détendre les lignes de tension cutanée.

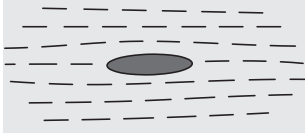

d.
(FR) Pour les plaies ≤ 4 mm, comprimer doucement ou fermer avec un pansement hydrocolloïde. Pour les plaies ≥ 4 mm, suturer ou fermer avec des agrafes ou des bandes adhésives (strip) en utilisant la technique cliniquement appropriée.

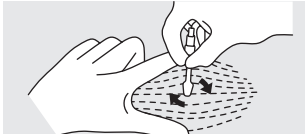

b.
(FR) Tenir le biopsy punch entre le pouce et l’index. Le placer à la surface de la peau, appuyer modérément et tourner dans le sens des aiguilles d’une montre.

3.



(FR) Stérilisé avec de l’oxyde d’éthylène par:
sfm medical devices GmbH, Brückenstrasse 5, D-63607 Wächtersbach.



GSK Consumer Healthcare (GMDT)
Clocherane, Youghal Road,
Dungarvan,
Co. Waterford,
Ireland



4.
(FR) Consulter la boîte pour:



5.
(FR) Laboratoire GlaxoSmithKline,
23, rue François Jacob
92500 RUEIL-MALMAISON, FRANCE.