

# **PAD ESERCITAZIONE SUTURA - SUTURE TRAINING PAD**

## **COUSSIN D'ENTRAÎNEMENT AUX SUTURES**


### **ALMOHADILLA DE ENTRENAMIENTO DE SUTURA**

### **ALMOFADA PARA TREINO DE SUTURA**

**Material:** Silicone  
**Material:** Silicone  
**Matériau:** Silicone  
**Material:** Silicona  
**Material:** Silicone

**Size:** 17.2x12x1.2cm  
**Dimensions:** 17,2x12x1,2 cm  
**Dimensions:** 17,2x12x1,2 cm  
**Dimensiones:** 17,2x12x1,2 cm  
**Dimensões:** 17,2x12x1,2 cm

**Weight:** 240g  
**Peso:** 240 g  
**Poids:** 240 g  
**Peso:** 240 g  
**Peso:** 240 g

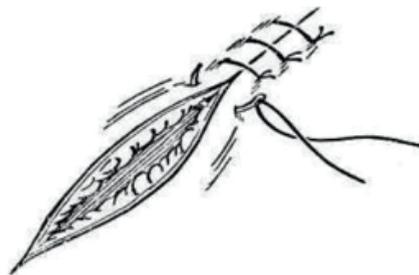


#### **Techniques de suture**

Le coussin d'entraînement aux sutures prévoit plusieurs types de blessures. On peut s'entraîner aux suivantes techniques de suture:


- 1. Suture à points simples séparés:** simple, appliquée dans la plupart des cas; chaque point est fermé par un nœud individuel; utilisée dans la peau, dans le tissu cutané, sous-cutané et musculaire et dans l'aponévrose, surtout pour les blessures qui présentent des infections.

- 2. Suture en surjet simple:** après le premier point, le bout long du fil n'est pas coupé, mais est utilisé pour former une série continue de boucles jusqu'à l'extrémité opposée de la blessure, où le fil est interrompu par un nœud final épais.




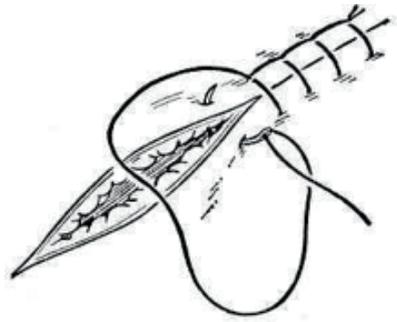

- 3. Suture en surjet passé:** cette méthode rapide et offrant un bon effet hémostatique consiste à entrelacer le fil au boucle précédent pendant le procès de suture et est utilisée principalement pour fermer le tube digestif et pour la suture lors des transplantations cutanées.

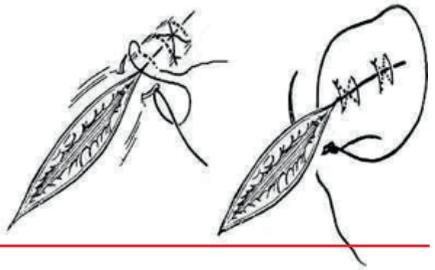

- 4. Suture en 8:** constituée de deux sutures intermittentes, fiables et rapides, telles que les sutures du fascia.

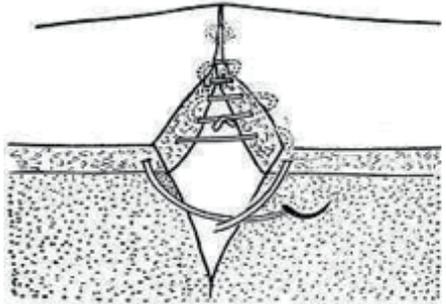

- 5. Suture subcuticulaire:** l'aiguille est insérée à une extrémité de l'incision et traverse ensuite alternativement le bord intérieur de l'incision sur les deux côtés jusqu'à l'extrémité opposée de l'incision; à la fin, le fil est fixé par un nœud. Couramment utilisée pour suturer les incisions exposées de la peau, par exemple au cas de thyroïdectomie cervicale.

**CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA**

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

**GIMA WARRANTY TERMS**

The Gima 12-month standard B2B warranty applies.

**CONDITIONS DE GARANTIE GIMA**

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.

**CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA**

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.

**CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA**

Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses.

**Gima 23020**

Fabbricante/Manufacturer/Fabricant/Fabricante/Fabricante  
Hangzhou Haizhu MIM products Co., Ltd.

No.868 shixin north Road, Hangzhou, 311215

Made in China

**REF B3361**

Importato da / Imported by / Importé de

Importado de / importado por:

**Gima S.p.A.** Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

[gima@gimaitaly.com](mailto:gima@gimaitaly.com) - [export@gimaitaly.com](mailto:export@gimaitaly.com)

[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com) - Made in China

