



# iHealth<sup>®</sup> Edge

otivez-vous. Bougez. Contrôlez



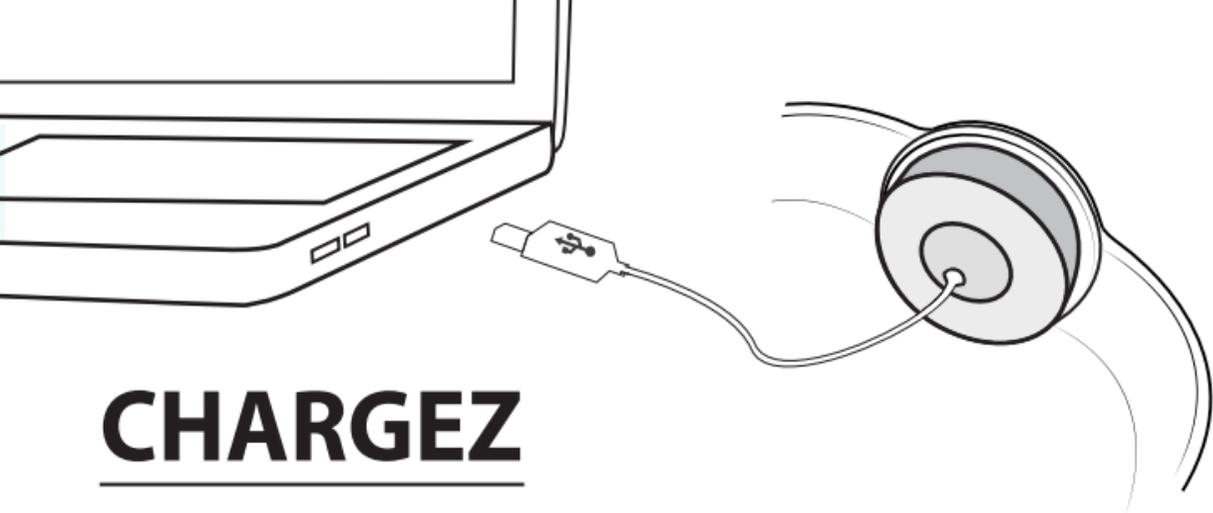


**CHARGEZ**

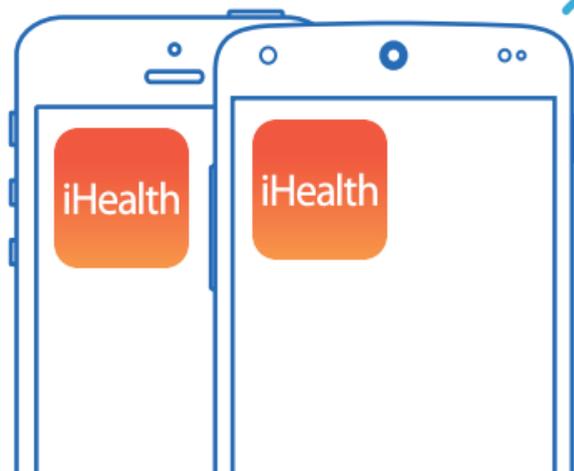


Voire appareil mobile est-il compatible?  
Rendez-vous sur [www.ihealthlabs.com](http://www.ihealthlabs.com)  
pour vérifier !

**PRENEZ** L'APPLICATION

# 1 Activez la Bluetooth

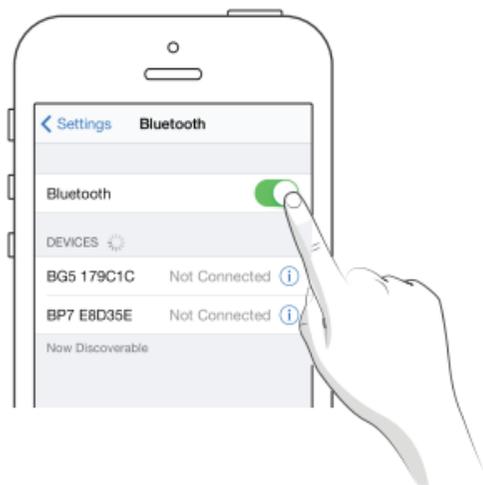


# 2 Ouvrez l'application

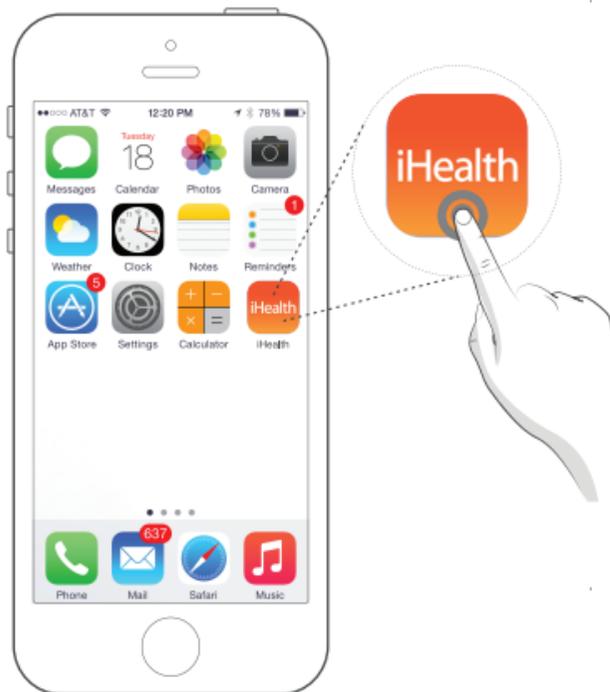


**CONNECTEZ-VOUS**


**3** Dans le menu, sélectionnez *Activité*

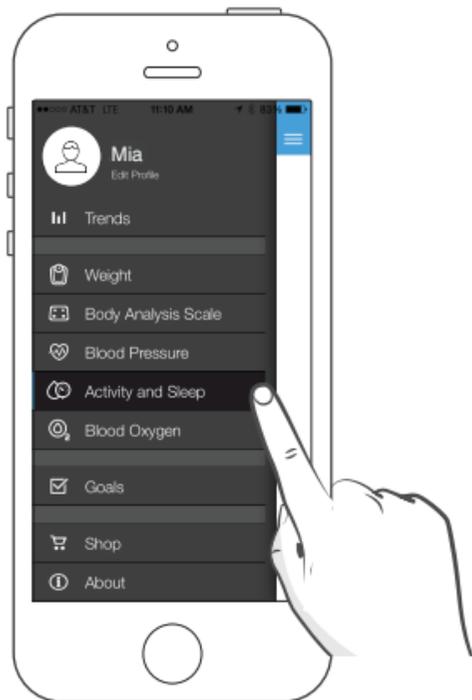


**4** Cliquez sur le bouton « + »

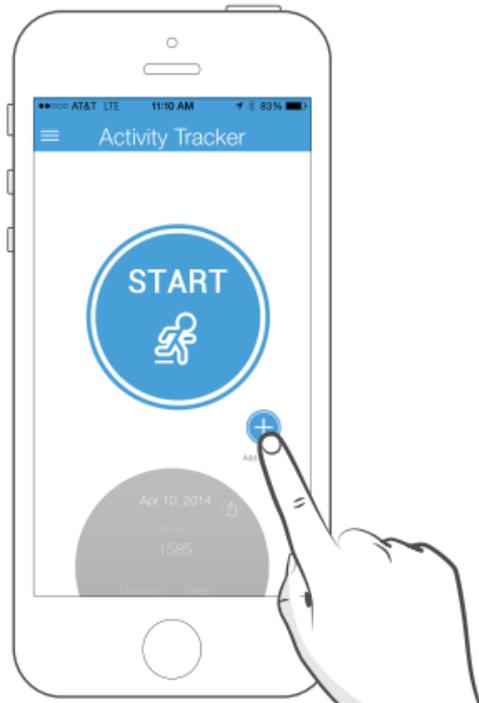


# 5 Sélectionnez « Edge »

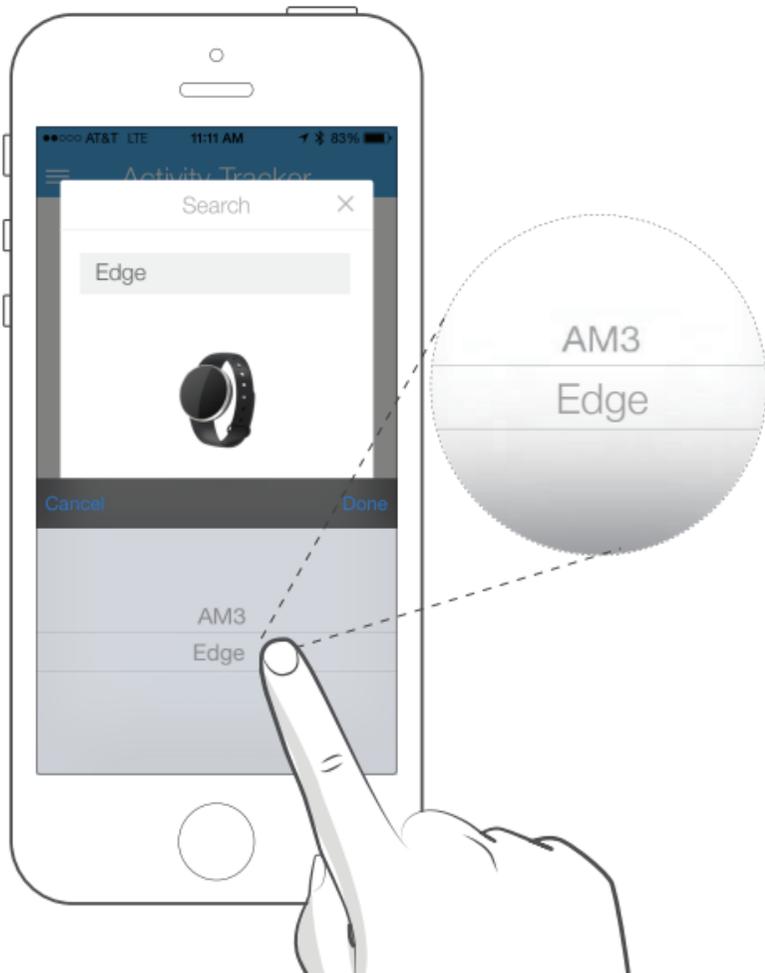

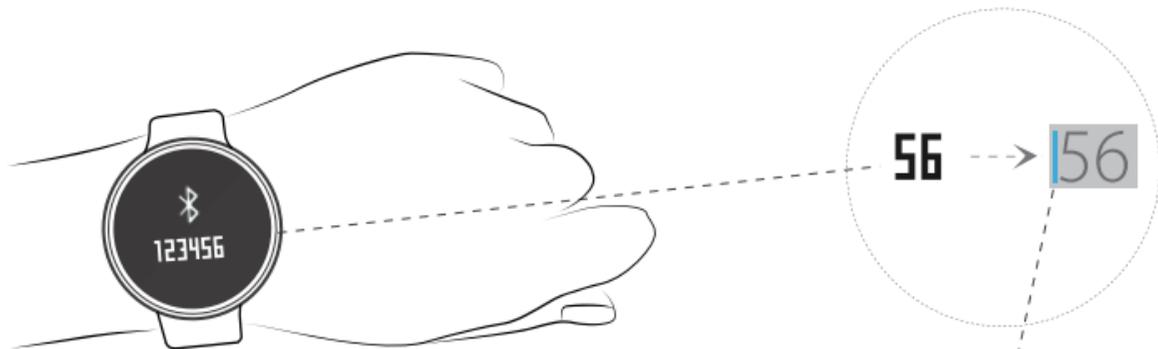


**6** Saisissez les 2 ou les 6 derniers chiffres qui s'affichent dans le suiveur

Si vous ne voyez pas les 6 chiffres, désactivez et réactivez Bluetooth ou double-cliquez sur le bouton « Accueil » (iOS), ou allez au menu de l'application (Android), et balayez l'application pour la fermer complètement. Recommencez à partir de l'étape 2.

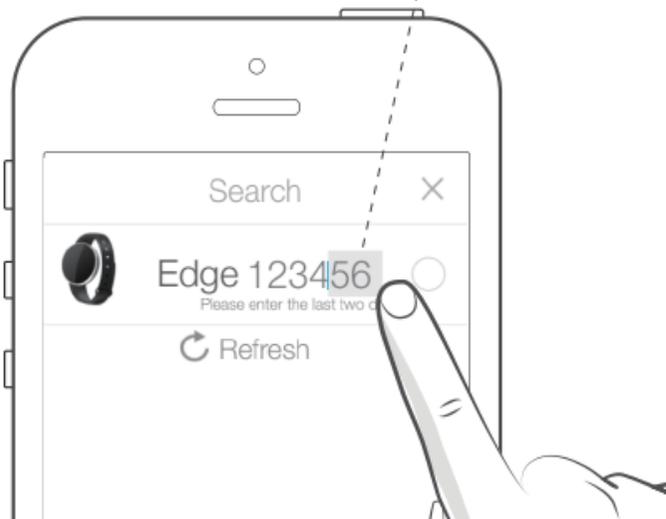

**7** L'appairage a été réalisé  
avec succès

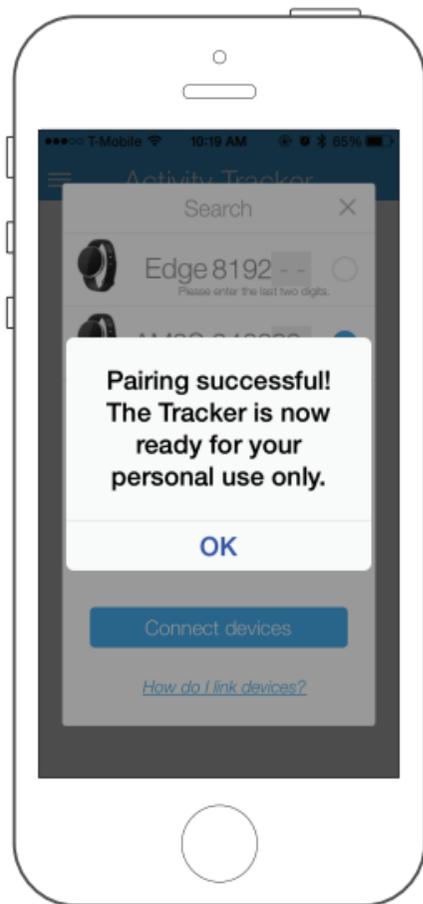

# AFFICHAGES

Heure/Date

Mon 05-05  
08:30 am

Objectif/Progression



Pas effectués



Levez le poignet ou  
déclipez au niveau  
de votre taille  
et

Appuyez pour naviguer

Calories brûlées



Distance parcourue



# MODE

Mode Sommeil



Mode Exercice



Suit automatiquement la qualité de votre sommeil et de vos exercices.

# PERSONNALISEZ

Mode Sommeil



Mode Exercice



Votre attitude a changé ?  
Dans les paramètres de l'application,  
modifiez le personnage à afficher.

## IMPORTANTES INFORMATIONS REQUISES PAR LA FCC

Cet appareil se conforme aux normes fixées par l'article 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence pouvant entraîner un dysfonctionnement.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par iHealth Lab Inc. annulera le droit de l'utilisateur d'utiliser ce produit.

Remarque : Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limites applicables à un dispositif numérique de Classe B, conformément à la section 15 des règlements de la FCC. Ces

limitations ont pour objectif d'assurer une protection adéquate contre les interférences nuisibles dans les installations domestiques. Ce produit génère, utilise et peut émettre des ondes radio, et s'il n'est pas installé ni utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles pouvant gêner les communications radio. Toutefois, rien ne garantit qu'il n'y ait pas d'interférences dans une installation donnée. Si ce produit engendre effectivement de telles interférences lors de la réception d'émissions radiophoniques ou télévisées, ce qui peut être confirmé en éteignant puis en rallumant l'appareil, l'utilisateur peut corriger ces interférences au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur
- Brancher l'équipement dans une prise différente de celle du récepteur.
- Consulter le fournisseur ou un technicien agréé en radio/télévision.

Cet appareil est conforme aux normes RSS d'Industrie Canada avec exonération de licence. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences
- (2) Cet appareil doit supporter toute interférence, y compris celles qui pourraient entraîner un fonctionnement non souhaité de l'appareil



# ATTENTION

RISQUE D'EXPLOSION EN CAS D'UTILISATION DE PILES INADÉQUATES.  
ÉLIMINEZ LES PILES USAGÉES CONFORMÉMENT  
AUX INSTRUCTIONS.

Par la présente, [iHealth Lab Inc.] déclare que cet [AM3S EDGE] est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité à la directive 1999/5/CE et tous les documents réglementaires et de certification d'iHealth peuvent être téléchargés à travers le lien : <https://www.ihealthlabs.eu/support/certifications>


Coordonnées de contact et service clientèle

Fabriqué pour iHealth Lab Inc.

iHealth Lab Inc.

719N Shoreline Blvd., Mountain View, CA 94043, États-Unis

Tel:+1-855-816-7705 [www.ihealthlabs.com](http://www.ihealthlabs.com)

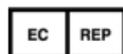

Fabriqué pour iHealth Lab Europe  
3 rue Tronchet, 75008 Paris, France  
[www.ihealthlabs.eu](http://www.ihealthlabs.eu)

Fabriqué par iHealth Lab Inc..

No. 3 Jinping Street, Ya An Road, Nankai District, Tianjin 300190, Chine

**Veillez consulter le site  
[www.ihealthlabs.com](http://www.ihealthlabs.com)  
pour plus de détails**

---

**iHealth<sup>®</sup> Edge**