



TOISE PROFESSIONNELLE POUR NOURRISSONS
MOD. WH80



Lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'instrument

INDEX

1. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET UTILISATION.....	2
2. MONTAGE DE LA TOISE DE PESAGE POUR NOURRISSONS BABYTWO	2
3. MESURE.....	3



ATTENTION!

Les opérateurs doivent lire attentivement ce manuel, se conformer aux instructions qu'il contient et se familiariser avec les procédures correctes d'utilisation et d'entretien de l'instrument.

- Conserver ce manuel pour consultation et comme support de formation du personnel.
- Pour une meilleure et plus longue durée du produit il est conseillé d'effectuer périodiquement un nettoyage général soigné.
- Le nettoyage de l'instrument doit être effectué avec un chiffon doux, humidifié avec de l'eau ou avec un détergent neutre, en évitant d'utiliser des solvants ou des substances abrasives.
- En cas d'inutilisation prolongée de l'instrument, retirer les piles du terminal.
- Pendant le transport, faire attention à ne pas soumettre l'instrument à des chocs ou sollicitations mécaniques excessives.
- En cas de réparation ou d'assistance, s'adresser à son revendeur ou à un centre autorisé, en contactant **service2@wunder.it** ou **sales@wunder.it**

1. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET UTILISATION


DÉTAILS TECHNIQUES

PLAGE DE MESURE	35~80cm
DIVISION	1mm
DIMENSIONS	W87 x L30 x H7cm
POIDS	700g
TEMPÉRATURE OPÉRATIONNELLE	10°C~40°C


2. MONTAGE DE LA TOISE DE PESAGE POUR NOURRISSONS BABYTWO

Pour installer la toise de mesure de la taille, procéder comme suit:.

A) Fixer le support de la toise à la surface de pesage à l'aide des 2 vis cruciformes fournies (Fig.a).	Fig.A	
B) Introduire la toise sur le support préalablement fixé à la surface de pesage. (Fig. b)	Fig.B	
C) L'installation est terminée. (Fig. c)	Fig.C	

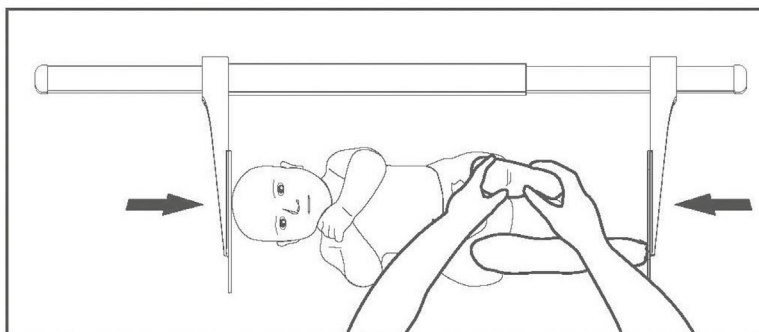3. MESURE

1. Appuyer légèrement la tête de l'enfant sur la palette située à gauche
2. Étirer les pieds de l'enfant

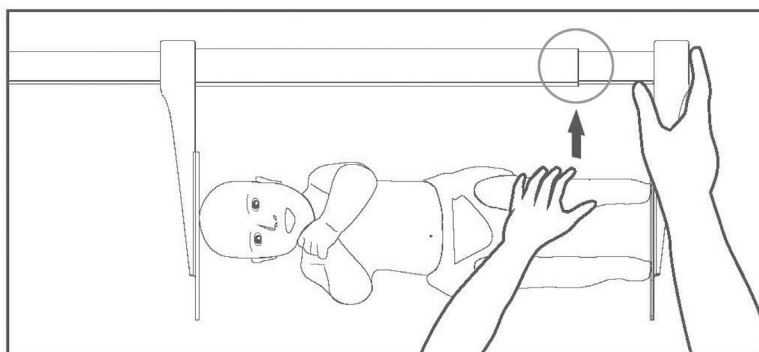

3. Muovere la paletta di destra fino a toccare i piedi del bambino
4. La taille de l'enfant est lue au niveau de la ligne rouge sur la toise



Wunder Sa.Bi. S.r.l.
Via Vecchia per Monza, 20
20056 Trezzo sull'Adda (MI)
Tel. +39 02 90964566
www.wunder.it