




# Throat Scope®

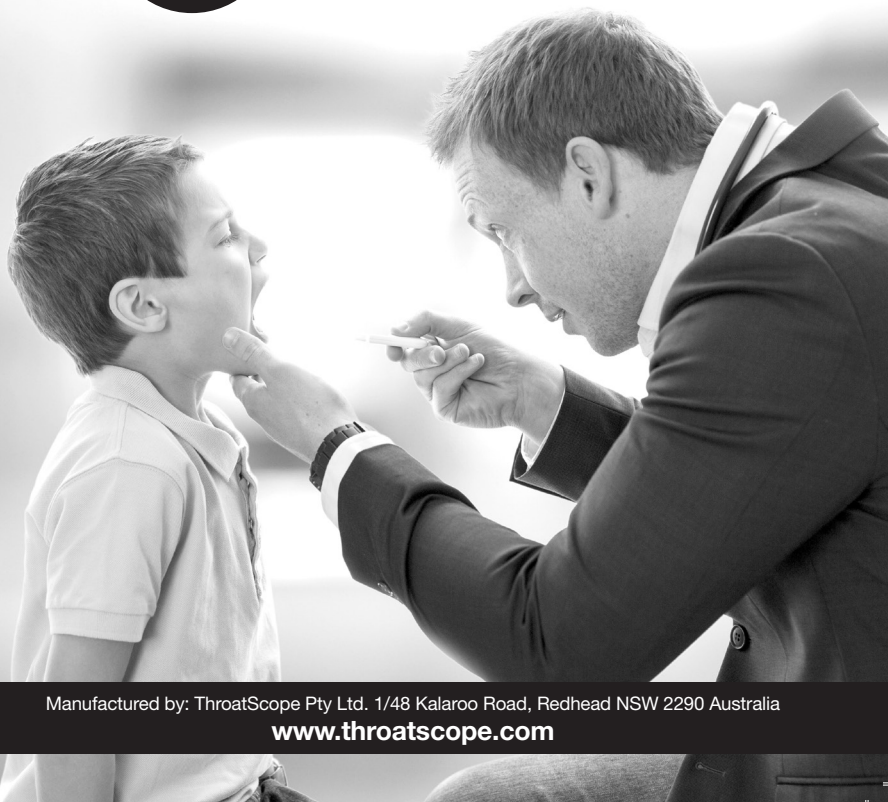

Manufactured by: ThroatScope Pty Ltd. 1/48 Kalaroo Road, Redhead NSW 2290 Australia

[www.throatscope.com](http://www.throatscope.com)

# Throat Scope

## Abaisse-langue à usage unique avec lampe

### Caractéristiques particulières

- Lampe et abaisse-langue combinés qui permettent simultanément d'abaisser la langue et d'illuminer la cavité buccale
- Appareil mince et léger
- La lampe s'active automatiquement
- Maniement à une seule main
- Lampe réutilisable
- Abaisse-langue à usage unique jetable
- 3 x lumières LED puissantes à longue durée

### Mode d'emploi

Merci d'avoir acheté une boîte de 50 abaisse-langues à usage unique, à utiliser avec une lampe équipée d'un support complémentaire. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation.

Nota : La lampe à support est vendue séparément.

### Précautions d'emploi

- L'abaisse-langue jetable est destiné à l'usage unique. NE LE REUTILISEZ PAS. N'essayez pas de nettoyer l'abaisse-langue, ni de le mettre dans un lave-vaisselle. Veuillez jeter l'abaisse-langue après usage.
- Après usage, nettoyez la lampe en l'essuyant avec de l'alcool isopropylique à 70% afin de réduire les risques de contamination croisée.
- A usage buccal seulement. L'appareil a été conçu pour abaisser la langue et pour éclairer la cavité buccale.
- L'appareil est destiné à être utilisé par des professionnels de la santé. Si vous avez des doutes sur sa bonne utilisation, consultez un professionnel de la santé.
- Evitez de plier ou de mordre la lampe.
- N'essayez pas de démonter la lampe.
- Jetez la lampe quand la pile sera épuisée.
- Gardez l'appareil hors de portée d'enfants sans supervision.

### Mode d'emploi

1. Insérer l'abaisse-langue à usage unique dans le support de la lampe. La lampe s'allume automatiquement.
2. Introduire l'appareil dans la cavité buccale.
3. Après l'examen, enlever l'abaisse-langue en appuyant sur les supports de l'abaisse-langue. Jeter l'abaisse-langue. La lampe s'éteint automatiquement.
4. Après usage, nettoyer la lampe en l'essuyant bien partout avec un tampon imbibé d'alcool isopropylique à 70%.

