

seca 745

seca
Precision for health

Félicitations !

En achetant le pèse-bébé seca 745, vous êtes devenu le propriétaire d'un appareil de haute précision et robuste.

Depuis plus de 745 ans, seca met son expérience au service de la santé et, en sa qualité de leader du marché dans de nombreux pays du monde, définit sans cesse de nouvelles normes grâce à ses innovations dans le domaine du pesage et de la mesure.

Le pèse-bébé mécanique seca 745 a été conçu pour être utilisé dans les hôpitaux et les cabinets des pédiatres.

Il est constitué d'un bâti métallique peint en blanc et d'un plateau incurvé. Ces pièces peuvent être nettoyées aisément et garantissent un pesage du nourrisson sur le pèse-bébé en toute sécurité.

En outre, l'appareil seca 745 est équipé d'une barre à poids curseur à graduation par 10 g permettant une lecture facile.

Installation et mise en service du pèse-bébé.

Consignes de sécurité


Avant d'utiliser votre nouveau pèse-bébé, prenez le temps de lire les consignes de sécurité suivantes.

- Veuillez respecter les instructions du mode d'emploi.
- Ne laissez en aucun cas un nourrisson sans surveillance sur le pèse-bébé.
- Veillez à ce que le plateau soit nettoyé et désinfecté régulièrement afin d'éviter la propagation de maladies contagieuses.
- Ne laissez pas tomber le pèse-bébé et évitez les chocs.
- Ne faites effectuer les réparations que par du personnel autorisé.
- Faites effectuer régulièrement l'entretien et les vérifications d'étalonnage.

Installation et mise en service du pèse-bébé


1. Déballage

Ouvrez la boîte et enlevez le plateau et le pèse-bébé.

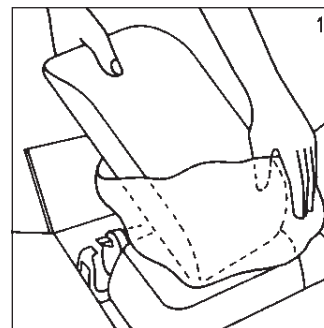


2. Enlèvement de la protection pour le transport

Enlevez le joint torique destiné à la fixation du poids mobile. Conservez ce joint pour les transports ultérieurs.

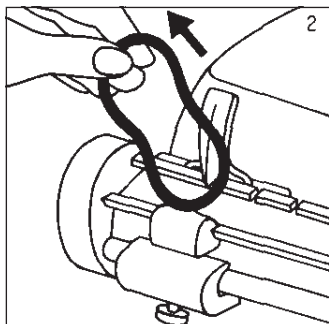


3. Fixation de la barre à poids curseur

Fixez la barre à poids curseur en faisant pivoter le dispositif de serrage vers le bas.

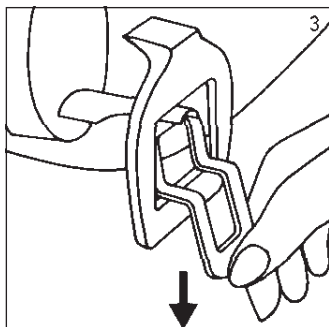


4. Installation du plateau sur le pèse-bébé

Placez le plateau au milieu du pèse-bébé. Les leviers de verrouillage doivent arriver sous le bâti.

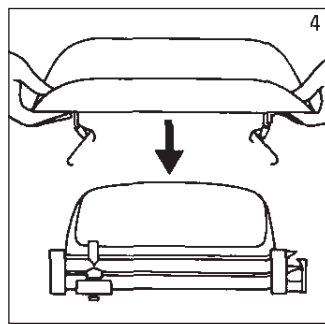


5. Fixation du plateau

Fixez le plateau au pèse-bébé en poussant les leviers de verrouillage vers le bas.

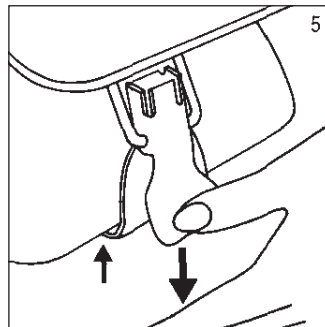


6. Relâchement du dispositif d'arrêt

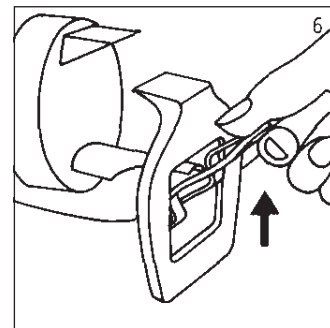

7. Tarage approximatif


Pour que le pèse-bébé indique le poids exact, il doit au préalable être réglé à la valeur de 0 kg.

A cette fin, faites coulisser les deux poids mobiles jusqu'à la position 0 le long de la barre à poids curseur. Si à ce moment l'indicateur et le contre-indicateur ne se trouvent pas l'un en face de l'autre, la valeur 0 doit être réglée à l'aide du poids de tarage. Pour ce faire, desserrez l'écrou moleté (voir schéma 8) et faites coulisser le poids de tarage le long de la barre jusqu'à ce que l'indicateur et le contre-indicateur se trouvent l'un en face de l'autre.

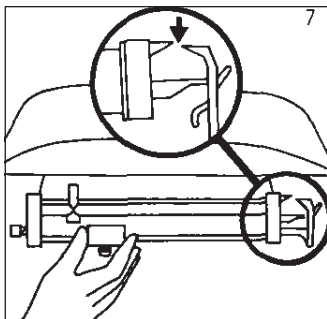

8. Fixation du poids de tarage


Fixez le poids de tarage à l'aide de l'écrou moleté. Le poids de tarage permet de tarer les objets posés sur le pèse-bébé, tels que les supports, etc., jusqu'à environ 3 000 g.

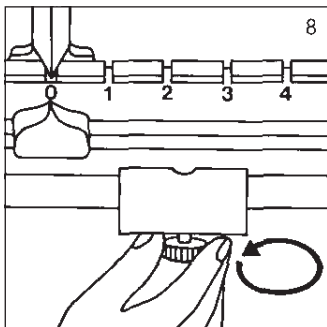

9. Réglage affiné

L'indicateur et le contre-indicateur peuvent être réglés avec précision en faisant tourner la vis de tarage affiné. Pour ce faire, il faut faire tourner la vis de tarage affiné vers la gauche ou vers la droite jusqu'à ce que l'indicateur et le contre-indicateur se trouvent précisément l'un en face de l'autre.

Utilisation

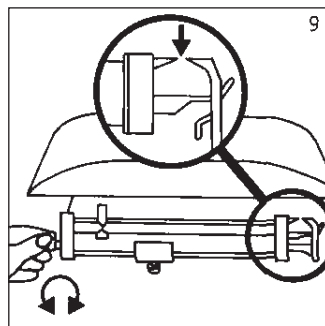

Lorsque le pèse-bébé a été installé conformément aux instructions du chapitre „Installation et mise en service du pèse-bébé“, la procédure de pesage peut commencer. A cette fin, installez le nourrisson sur le plateau et faites d'abord coulisser le poids mobile le plus grand jusqu'au poids exact approximatif. A l'aide du petit poids mobile, vous pouvez ensuite déterminer avec précision le poids exact. Il vous suffit pour cela de faire coulisser le petit poids mobile jusqu'à ce que l'indicateur et le contre-indicateur se trouvent l'un en face de l'autre. Pour terminer, lisez le poids indiqué sur la graduation de la barre à poids curseur.

Nettoyage

Nettoyez le bâti et le plateau si nécessaire à l'aide d'un nettoyant ménager ou d'un désinfectant courant. Veuillez respecter les indications du fabricant.

Que faire si...

... aucun poids ne s'affiche lorsque le pèse-bébé est chargé ?

- Vérifiez si le levier de protection pour le transport (voir schéma 6) est relâché.
- Vérifiez si la protection pour le transport, c'est-à-dire le joint torique, a été enlevée.

Entretien

Faites effectuer un entretien et un étalonnage à intervalles de 4 ans. Les entretiens et les étalonnages doivent être réalisés exclusivement par un personnel autorisé. Adressez-vous à cette fin à votre prestataire de services ou au service clientèle de seca.

Données techniques

Charge maximale :	16 kg
Graduation :	10 g
Dimensions (lxhxp) :	550 mm 190 mm 305 mm
Poids:	env. 6 kg
Limites de température :	+ 10° C à + 40° C
Étalonnage en vertu de la directive 90/384/CEE :	Étalonnage médical classe III
Dispositif médical suivant la directive 93/42/CEE :	Classe I
Précision au premier étalonnage :	Jusqu'à 5 kg : +/- 5 g Plus de 5 kg : +/- 10 g

Elimination

Si le pèse-bébé ne peut plus être utilisé, l'organisme d'enlèvement des déchets compétent pourra vous renseigner sur les mesures nécessaires à prendre pour une élimination appropriée.

Garantie

Une garantie de deux ans à compter de la date de livraison est accordée pour les défauts de matière et de fabrication. Cette garantie ne s'applique pas aux pièces amovibles, telles que les batteries, les câbles, les adaptateurs secteur, les accumulateurs etc. Les défauts couverts par la garantie sont réparés gratuitement sur présentation de la quittance d'achat par le client. Aucune autre demande de réparation ne peut être prise en compte. Les frais de transport sont à la charge du client si l'appareil n'est pas installé à la même adresse que celle du client. En cas d'endommagements dus au transport, le cas de garantie peut être invoqué uniquement si l'emballage d'origine complet a été utilisé pour les transports et si la balance a été immobilisée et fixée conformément à l'emballage initial. Tous les éléments de l'emballage doivent par conséquent être conservés.

Aucun cas de garantie ne peut être invoqué si l'appareil est ouvert par des personnes qui ne sont pas explicitement autorisées par seca.

Nous prions nos clients à l'étranger de bien vouloir contacter directement le revendeur de leur pays respectif pour les cas de garantie.

seca deutschland

Medical Scales and Measuring Systems

seca gmbh & co. kg.

Hammer Steindamm 9-25

22089 Hamburg • Germany

Phone • +49 (0)40 20 00 00 0

Fax • +49 (0)40 20 00 00 50

E-mail • info@seca.com

All contact data under www.seca.com

seca
group

seca deutschland

seca france

seca united kingdom

seca north america

seca schweiz

seca zhong guo

seca nihon

seca mexico

seca austria