



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

CALIBRO PER ORTOPEDIA ORTHOPAEDIC CALIPER PIED À COULISSE ORTHOPÉDIQUE CALIBRE ORTOPÉDICO MEDIDOR PARA ORTOPEDIA ORTHOPÄDIE-MESSSCHIEBER SUWMIARKA ORTOPEDYCZNA

Manuale utente - User manual - Mode d'emploi - Manual de uso - Manual do utilizador - Benutzerhandbuch - Instrukcja użytkownika

ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.
ATTENTION: The operators must carefully read and completely understand the present manual before using the product.
AVIS: Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d'utiliser le produit.
ATENCIÓN: Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual antes de

utilizar el producto.
CUIDADO: Os operadores devem ler e compreender este manual completamente antes de usar o produto.
VORSICHT: Bediener müssen dieses Handbuch vollständig lesen und verstehen, bevor sie das Produkt verwenden.
UWAGA: Operatorzy muszą w całości przeczytać i zrozumieć niniejszą instrukcję przed użyciem produktu.

REF 10460 (GIMA 27325)



Metrica S.p.A.,
Via A. Grandi 18, 20097
San Donato Milanese (MI) - Italy
Made in Italy



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



INTRODUCTION

L'objectif de ce manuel est celui de fournir au client toutes les indications possibles sur le PIED À COULISSE ORTHOPÉDIQUE, ainsi que les instructions d'utilisation et d'entretien qui permettent de maintenir les performances mais aussi l'efficacité du PIED À COULISSE ORTHOPÉDIQUE dans la durée.


Le mode d'emploi doit être conservé en bon état et conservé dans un lieu accessible pour être consulté rapidement.

USAGE PRÉVU

Le PIED À COULISSE ORTHOPÉDIQUE est un instrument qui sert à mesurer en cm, avec une **résolution de ± 1 mm**, le diamètre ou la longueur osseuse du corps humain.

Plage de mesure 0-150 mm, écart 1 mm, tolérance ± 5 mm

Le PIED À COULISSE ORTHOPÉDIQUE utilise, pour la mesure, un système coulissant et est formé d'une tige millimétrée en **aluminium anodisé** et de deux « becs » en plastique.

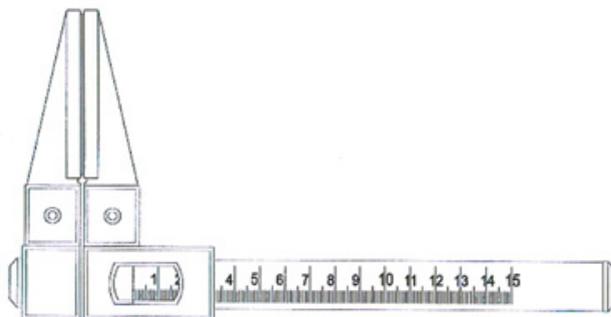

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Approcher les deux becs du pied à coulisse sur la partie du corps à mesurer, en faisant glisser le bec mobile jusqu'à le positionner en contact avec l'os, et lire la valeur indiquée par le repère du vernier

QUELQUES EXEMPLES D'APPLICATION



Diamètre de l'os du genou



Diamètre de l'os du coude

MISES EN GARDE / ENTRETIEN

Le PIED À COULISSE ORTHOPÉDIQUE doit exclusivement être utilisé par un personnel qualifié.

N'utilisez pas le dispositif s'il est endommagé. N'effectuez pas les réparations vous-même, contactez le fabricant si nécessaire.

Après avoir ouvert l'emballage, vérifiez toutes les parties et pièces qui composent le produit. Vérifiez qu'elles sont toutes présentes et en parfait état.

Le nettoyage du PIED À COULISSE ORTHOPÉDIQUE doit être effectué avec un chiffon humidifié avec des substances qui n'abiment pas l'aluminium (ex. alcool – nettoyants vitres). La JAUGE est conçue pour durer : elle résiste à la plupart des produits chimiques, à l'exception des méthyléthylcétones (M.E.K.), des diluants et des dissolvants pour vernis à ongles.

Le PIED À COULISSE ORTHOPÉDIQUE doit toujours être conservé dans sa housse dans un environnement non humide. Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

DESCRIPTION DES PIÈCES DE RECHANGE (non incluses)

N. Détail	Description de la pièce
1	Becs
2	Support mobile
3	Support fixe
4	Tige en aluminium graduée
5	Bouchon de fermeture en plastique

Pour le remplacement des composants, il faut envoyer l'instrument à notre siège.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Le PIED À COULISSE ORTHOPÉDIQUE est conforme au règlement (UE) 2017/745

	Code produit		Numéro de lot		Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements)
	À conserver à l'abri de la lumière du soleil		À conserver dans un endroit frais et sec		Numéro de série
	Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745		Fabricant		Consulter les instructions d'utilisation
	Dispositif médical		Date de fabrication		Importé par

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.