

**seca 210**

**seca**  
Precision for health

## Félicitations !

En achetant le tapis de mesure seca 210, vous avez acquis un appareil de mesure pour les nourrissons à la fois précis et robuste.

Le tapis de mesure seca 210 a été conçu pour être utilisé dans les cabinets de pédiatres, dans les hôpitaux pour enfants ou lors des visites à domicile des sages-femmes.

Le tapis de mesure peut s'enrouler et ne prend donc que peu de place.

En outre, le haut du tapis est muni de trous permettant de suspendre le tapis à un mur.

## Sécurité

Avant d'utiliser le nouveau tapis de mesure, prenez le temps de lire les consignes de sécurité suivantes.


Veillez respecter les instructions du mode d'emploi.

- Ne laissez jamais le nourrisson sur le tapis de mesure sans surveillance.
- Ne procédez à la mesure que sur des supports desquels le nourrisson ne risque pas de tomber.
- Veillez à ce que le tapis de mesure soit régulièrement nettoyé et désinfecté afin d'éviter la transmission de maladies contagieuses.
- Afin d'effectuer une mesure exacte, l'aide d'une deuxième personne est recommandée.

## Utilisation

### Comment mesurer correctement:

1. Poser le nourrisson sur le tapis de mesure. La tête du nourrisson doit toucher le haut (1) du tapis.
2. Avec la main droite, faire glisser le support de pieds (2) en direction des pieds du nourrisson. Maintenir le nourrisson en place avec la main gauche.
3. Tendre les jambes en poussant délicatement sur les genoux du nourrisson avec la main gauche.
4. Avec la main droite, pousser le support de pieds (2) contre la plante des pieds du nourrisson.
5. Lire la taille sur la graduation du tapis (3). En respectant les étapes citées ci-dessus, on atteint une précision de mesure d'environ +/- 5 mm.

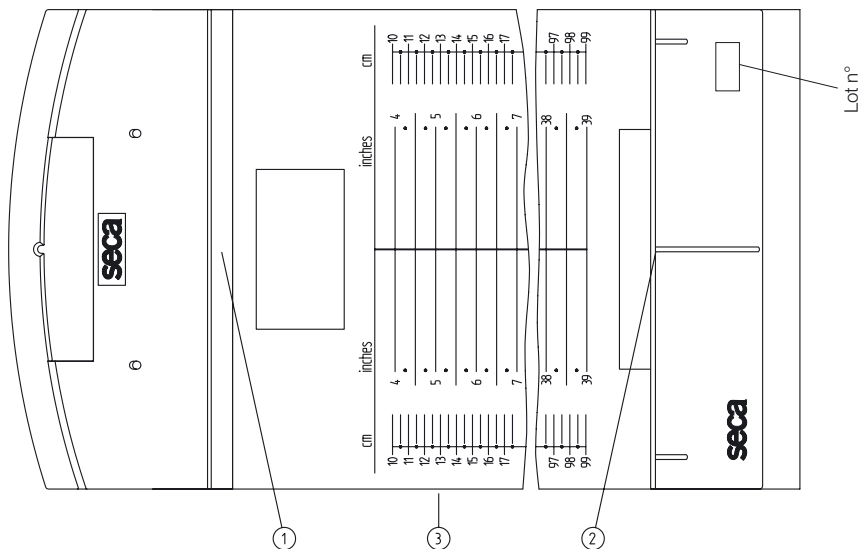

## Nettoyage

Nettoyez le tapis de mesure si nécessaire avec un nettoyant ménager ou un désinfectant courant. Respectez les instructions du fabricant.

## Données techniques

Plage de mesure: 100 - 990 mm /  
4 - 39 pouces  
Graduation: 5 mm / 1/4 pouce  
Précision: supérieure à ± 5 mm  
Dimensions (L x H x Pr.): 300 mm x 140 mm x  
1340 mm  
Poids: environ 500 g  
Limites de température: +10 °C à +40°C  
Produit médical en vertu de la directive 93/42/CEE: Classe I avec fonction de mesure

## Élimination

Si le tapis de mesure ne peut plus être utilisé, l'organisme d'enlèvement des déchets pourra vous renseigner sur les mesures nécessaires à prendre pour une élimination appropriée.

## Garantie

Une garantie de deux ans à compter de la date de livraison est accordée pour les défauts de matière et de fabrication. Cette garantie ne s'applique pas aux pièces amovibles, telles que les batteries, les câbles, les adaptateurs secteur, les accumulateurs etc. Les défauts couverts par la garantie sont réparés gratuitement sur présentation de la quittance d'achat par le client. Aucune autre demande de réparation ne peut être prise en compte. Les frais de transport sont à la charge du client si l'appareil n'est pas installé à la même adresse que celle du client. En cas d'endommagements dus au transport, le cas de garantie peut être invoqué uniquement si l'emballage d'origine complet a été utilisé pour les transports et si la marchandise a été immobilisée et fixée conformément à l'emballage initial. Tous les éléments de l'emballage doivent par conséquent être conservés.

Aucun cas de garantie ne peut être invoqué si l'appareil est ouvert par des personnes qui ne sont pas explicitement autorisées par seca.

Nous prions nos clients à l'étranger de bien vouloir contacter directement le revendeur de leur pays respectif pour les cas de garantie.

## Certificat de conformité

Appareil de mesure à fonctionnement  
mécanique

Modèle seca 210

Lot n°: voir tapis de mesure

Le tapis de mesure satisfait aux exigences de la directive 93/42/CEE sur les produits et appareils médicaux.

seca gmbh & co. kg.



Sönke Vogel

– Geschäftsführer Finanzen & Technik –

Hamburg

 : [www.seca.com](http://www.seca.com)

## **seca** deutschland

Medical Scales and Measuring Systems

seca gmbh & co. kg.

Hammer Steindamm 9-25

22089 Hamburg • Germany

Phone • +49 (0)40 20 00 00 0

Fax • +49 (0)40 20 00 00 50

E-mail • [info@seca.com](mailto:info@seca.com)

All contact data under [www.seca.com](http://www.seca.com)

17-10-02-222 h/08 L

**seca**  
group

**seca** deutschland

**seca** france

**seca** united kingdom

**seca** north america

**seca** schweiz

**seca** zhong guo

**seca** nihon

**seca** mexico

**seca** austria