



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**LETTINI DA VISITA MODELLO CLASSICO**  
**CLASSIC EXAMINATION COUCHS**  
**LITS ACCOMPAGNANTS CLASSIQUES**  
**CAMILLAS CONSULTA CLÁSICA**  
**MARQUESAS DE CONSULTA CLÁSSICAS**  
**UNTERSUCHUNGSBETT KLASSISCHES**  
**ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΡΕΒΑΤΙΑ κλασικα**

- È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.
- All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.
- Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.
- Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.
- É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.
- Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.
- Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε.

**REF**

**27404 – 27405 – 27445**

Gima S.p.A.  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
www.gimaitaly.com  
Made in Italy



**MD**



## PRODUITS

- 27404 LIT CLASSIQUE - chromé - matelas beige
- 27405 LIT CLASSIQUE - chromé - matelas bleu -dossier avec cavité
- 27445 LIT CLASSIQUE - chromé - matelas abricot

## INTRODUCTION

Aux fins du règlement (UE) 2017/745, le produit fait partie des DISPOSITIFS MÉDICAUX DE CLASSE I. Il est conseillé de lire attentivement le manuel suivant avant d'utiliser l'équipement

## DESCRIPTION

Le Lit classique accompagnant est destiné à être utilisé dans les hôpitaux, les collectivités, les maisons de retraite et les cabinets médicaux. Lit accompagnant avec structure et pieds entièrement en acier chromé brillant. Les 2 sections du matelas sont en mousse résistante recouverte d'une matière plastique lavable et résistante au feu. La partie dossier est totalement inclinable.

## COMPOSANTS:

- Matelas revêtu d'un tissu lavable et ignifuge déjà fixé à la structure, chromé avec dossier
- Tige pour dossier
- Pieds chromés
- Sur demande: support draps chrome

## Sachet avec matériel de montage


- 4 TBE 8x16 (vissées à la structure)
- CLÉ ALLEN

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE:


Le lit est fourni partiellement monté : le matelas est déjà fixé au bâti de la structure.

**Commencez la phase de montage en aménageant un plan de travail horizontal stable.**

Prendre le lit et le poser sur un plan de travail du côté du matelassage (matelas déjà fixé à la structure - **NE PAS DÉVISSER**). Utiliser la clé Allen fournie pour visser/dévisser les pieds.

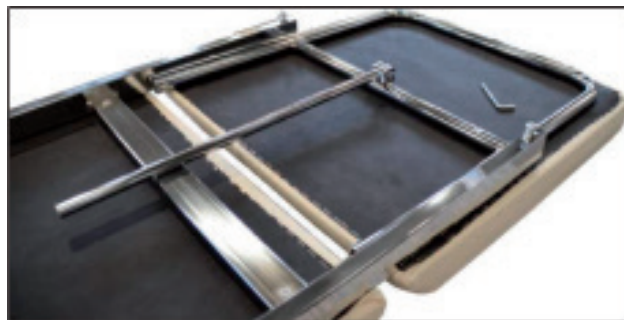


Dévisser le tube du dossier inclinable à travers la vis hexagonale et son écrou.

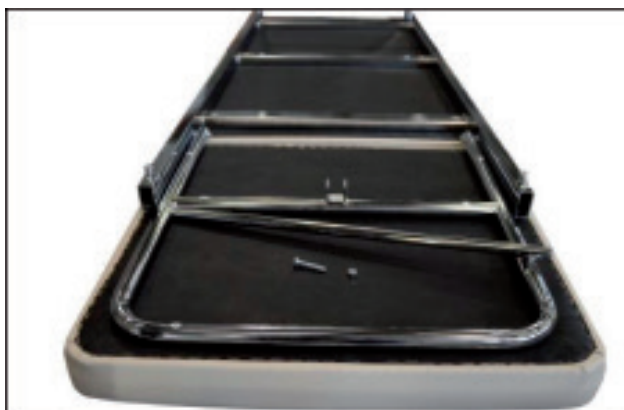



Après avoir desserré les vis TBE 8X16 correspondantes, insérer les pieds dotés d'une traverse pour dossier inclinable dans le logement du bâti fixé à la structure et toujours revisser avec la clé Allen fournie.

Procéder de la même façon avec les pieds opposés du lit.

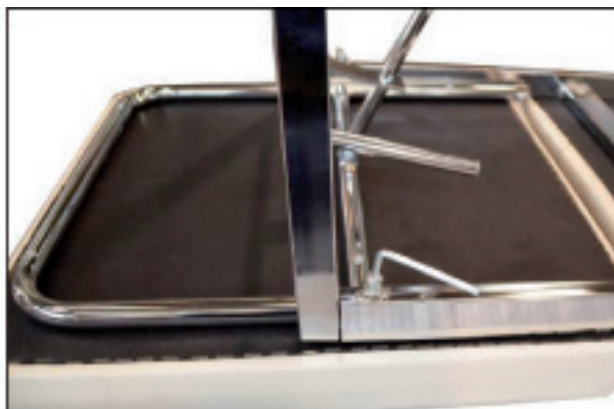

Insérer la tige de réglage du dossier inclinable dans son logement (trou dans la petite plaque).

Revisser avec la vis hexagonale et son écrou.

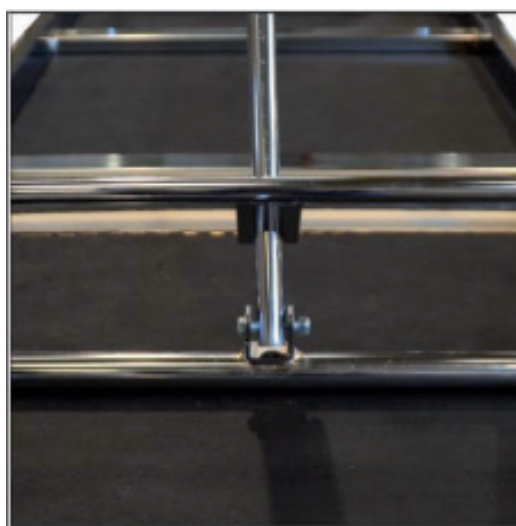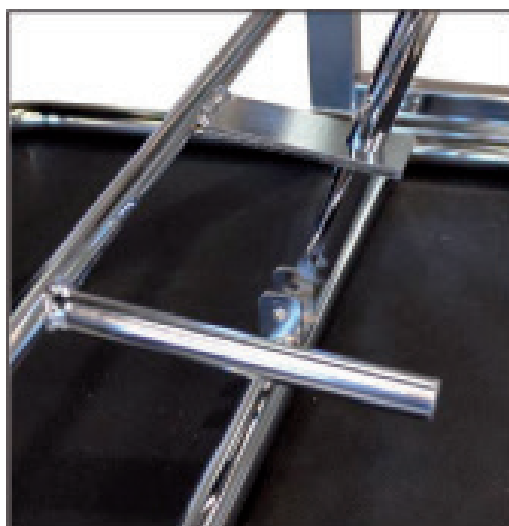

Détail du dossier inclinable une fois le montage terminé.



## FICHE TECHNIQUE

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Dimensions</b>                  | 188 x 57,5 x h 73,5 cm<br>boîte 198 x 17 x 64 h |
| <b>Poids</b>                       | 28 kg   |
| <b>Capacité de charge maximale</b> | 120 kg  |

### AVERTISSEMENTS POUR L'UTILISATION

- Vérifiez que les écrous de blocage sont serrés.
- Respecter la capacité de charge maximale indiquée dans les fiches techniques.
- Éviter le contact direct avec des blessures ouvertes.
- Ne convient pas pour une utilisation en plein air.
- Lors du réglage de la hauteur du canapé et du dossier, veillez à ce que personne n'insère les mains, les jambes ou d'autres personnes dans la zone de déplacement: **RISQUE D'ÉCRASEMENT!**
- Déplacer le lit sans le soulever du sol.
- Si le lit est équipé de roulettes, vérifier avant tout déplacement que les roulettes ne sont pas freinées.

### ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.
- Contrôlez périodiquement tous les points de fixation.
- Pour le garder au mieux, il est conseillé d'éviter toute exposition prolongée au soleil; le contact avec des milieux salins et l'entrepose dans des environnements très humides.
- Lavez les surfaces en acier inoxydable avec de l'eau savonneuse et utilisez des désinfectants spéciaux.
- Rincez avec un chiffon humide et séchez soigneusement.
- Ne versez pas sur les surfaces des détergents à base de chlore ou d'ammoniac, de substances grasses et huileuses.
- N'utilisez pas d'outils contenant du fer pour le nettoyage. Si une désinfection s'avère nécessaire, utiliser uniquement des produits adaptés non corrosifs.

### INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE DU TISSU :

Nettoyez avec un chiffon humidifié et savonné et rincer soigneusement à l'eau propre. N'utilisez pas de solvants d'eau de javel ni de détergents chimiques ou sprays pour faire briller.

Attention: En général, les couleurs claires du faux cuir ne peuvent pas être mises en contact avec des vêtements contenant des colorants non fixés (par exemple, des jeans et des dérivés) pour éviter les taches ou les auréoles impossibles à nettoyer.

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  | À conserver à l'abri de la lumière du soleil                     |  | Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745 |  | À conserver dans un endroit frais et sec |
|  | Code produit   |  | Consulter les instructions d'utilisation               |  | Fabricant                                |
|  | Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements) |  | Numéro de lot  |  | Dispositif médical                       |
|  | Identifiant unique de l'appareil                                 |  |  |  |  |

### CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.