



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

CARRELLI DELUXE
DELUXE TROLLEYS
CHARIOTS DELUXE
CARROS DELUXE
CARRINHOS DELUXE
DELUXE WAGEN
ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΔΙΑ DELUXE

REF

27460 - 27461 - 27422

Distribuito da / distributed by / distribué par / distribuido por / distribuído por / Vertrieben von / Διανέμεται από:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

Made in Italy

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante / Hersteller / Κατασκευαστής:

SCROSATI ARREDAMENTI METALLICI SRL

Via Vittorio Veneto 95, 21015 Lonate Pozzolo (VA)
scrosati@scrosati.com



PRODUITS

- 27460 CHARIOT DELUXE
- 27461 CHARIOT DELUXE avec tiroir
- 27422 CHARIOT DELUXE avec 2 tiroirs








INTRODUCTION


Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d'utiliser le produit.

DESCRIPTION

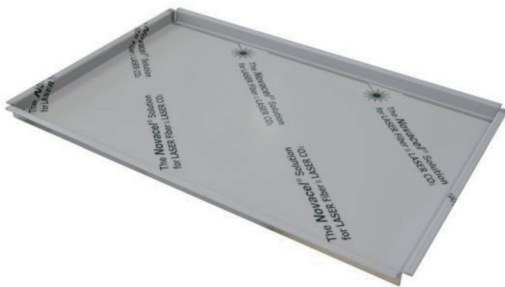Le présent article est un chariot de qualité élevée, réalisé en alliage léger d'aluminium anodisé avec plateaux amovibles en acier inoxydable. C'est un chariot à pansements pour une utilisation hospitalière.

COMPOSANTS:


<p>N.1 cadre supérieur avec tiroir (27461) 2 tiroirs (27422) ou bien seulement support avec 2 trous traversants (27460)</p>	
<p>N.1 cadre inférieur en aluminium</p>	
<p>N.2 plateaux en acier inoxydable</p>	
<p>N.2 jambes antérieures courtes en aluminium</p>	
<p>N.2 jambes postérieures en aluminium avec courbure pour le montage de la poignée de poussée</p>	
<p>N.1 tube en aluminium à introduire dans les 2 jonctions angulaires pour assembler la poignée de poussée</p>	
<p>N.2 jonctions angulaires pour assembler la poignée de poussée</p>	

N.4 roues ø 80	
N.10 vis 6x20	
Clé Allen pour le montage	


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Préparer une surface d'appui suffisamment large pour travailler.


Introduire les jambes antérieures dans les trous borgnes du cadre du tiroir / du plateau supérieur.

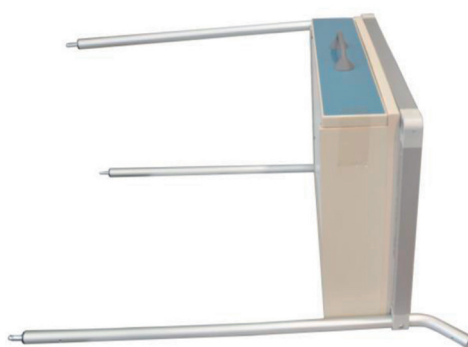

Introduire les jambes postérieures courbées dans le cadre supérieur et fixer avec les vis en utilisant la clé spéciale.

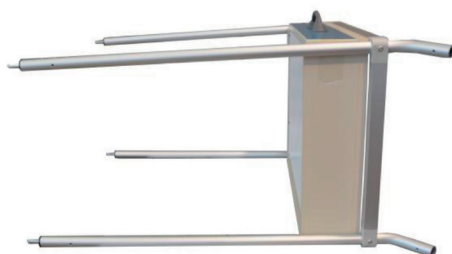


Introduire le cadre inférieur dans les jambes et visser, **en prenant garde de positionner les rivets visibles vers la roue.**

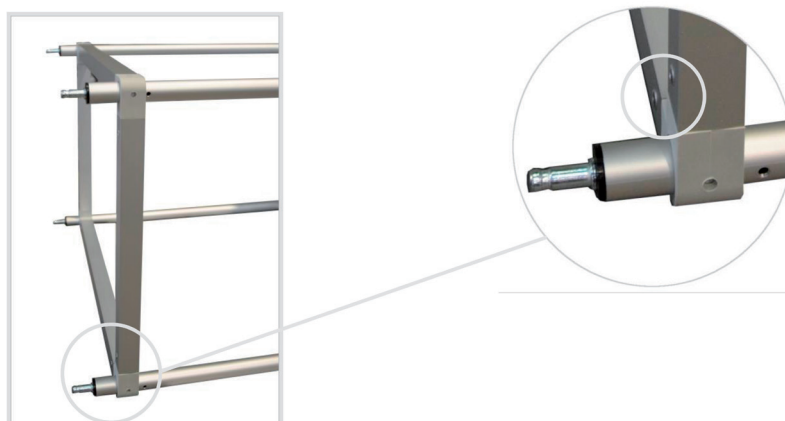

Monter les 4 roues, en comprimant jusqu'au déclic.

Monter la poignée de poussée en introduisant le tube dans les 2 jonctions angulaires en plastique, ensuite

introduire ces dernières dans le côté supérieur des jambes courbées.

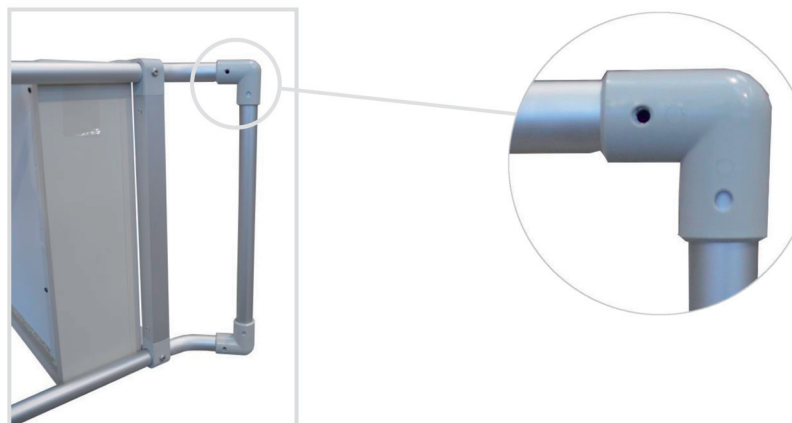

Enfin, positionner le chariot par terre et poser les plateaux dans leurs cadres d'appui.

FICHE TECHNIQUE

	Cod. 27460	Cod. 27461	Cod. 27422
Dimensions	Cm 50,5 x 73 x 97,5 h Plateau 41 x 61 x 2,5 h Boîte cm 10,5 x 90,5 x 56	Cm 50,5 x 73 x 97,5 h Plateau 41 x 61 x 2,5 h Tiroir 62x42x10h Boîte cm 26 x 76 x 58	Cm 50,5 x 73 x 97,5 h Plateau 41 x 61 x 2,5 h Tiroir 62x42x10h Boîte cm 36 x 76 x 58
Poids	8,4 kg 9,4 kg avec boîte	18.9 kg 20 kg avec boîte	24.1 kg 25.4 kg avec boîte
Capacité de charge maximale	40 kg (20 kg charge max pour chaque plateau)	40 kg (20 kg charge max pour chaque plateau)	40 kg (20 kg charge max pour chaque plateau)

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Fixer soigneusement les vis en utilisant la clé Allen fournie.
- S'assurer que les écrous de blocage sont étroitement serrés.
- Ne pas dépasser la capacité de charge maximale spécifiée dans les fiches techniques.
- Éviter le contact direct avec des blessures ouvertes.
- Ne convient pas pour l'usage en plein air.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Utiliser seulement des pièces détachées d'origine.
- Contrôler périodiquement tous les points de fixation.
- Pour une conservation optimale, il est recommandé d'éviter l'exposition prolongée aux rayons du soleil; le contact avec des milieux salins; le stockage dans des milieux très humides.
- Extraire les plateaux avant de nettoyer.
- Nettoyer les surfaces en acier inoxydable avec de l'eau savonneuse et utiliser des désinfectants spéciaux.
- Rincer avec un chiffon mouillé et sécher soigneusement.
- Ne pas verser de détergents à base de chlore ou d'ammoniaque, ni de substances grasses et huileuses, sur les surfaces.
- Ne pas utiliser d'instruments contenant fer pour le nettoyage. Si la désinfection est nécessaire, utiliser seulement des produits convenables non corrosifs.

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.