

**MANUEL D' UTILISATION - ANNEXE
MANUEL FACILE VNYS ED610/EDM**

Rev. 00 del 14/01/2016



**Azienda con Sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008 and UNI EN ISO 13485:2012
Company with Quality System Certificate UNI EN ISO 9001:2008 and UNI EN ISO 13485:2012**

MEDI-CARE SOLUTIONS S.R.L

SEDE LEGALE: Via Dante 34 - 40125 Bologna (BO) Italy/SEDE OPERATIVA: Via dell'Artigianato 305/319 - 48014 Castel Bolognese (RA) Italy
TEL. ++39 0546 656031 - FAX ++39 0546 656691 - WEBSITE: www.euroclinic.it - E-MAIL: info@euroclinic.it
Capitale Sociale Versato: € 12.500,00 I.V. - Iscrizione N° 03390661209 al Registro Imprese di Bologna - P.I. e C.F. 03390661209 - R.E.A. N° 515493

INSTALLATION RAPIDE

S'IL VOUS PLAÎT DE PRENDRE L'UNITÉ DE COMMANDE DU ED610/EDM ET LA CONNECTER
COMME CI DESSOUS INDICUÉE :



CABLE CAMERA



CABLE VIDEO RCA-BNC



CABLE USB A/min B
POUR PC OU ADAPTATEUR DE
RESEAU / USB



Azienda con Sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008 and UNI EN ISO 13485:2012
Company with Quality System Certificate UNI EN ISO 9001:2008 and UNI EN ISO 13485:2012

MEDI-CARE SOLUTIONS S.R.L

SEDE LEGALE: Via Dante 34 - 40125 Bologna (BO) Italy/SEDE OPERATIVA: Via dell'Artigianato 305/319 - 48014 Castel Bolognese (RA) Italy
TEL. ++39 0546 656031 - FAX ++39 0546 656691 - WEBSITE: www.euroclinic.it - E-MAIL: info@euroclinic.it
Capitale Sociale Versato: € 12.500,00 I.V. - Iscrizione N° 03390661209 al Registro Imprese di Bologna - P.I. e C.F. 03390661209 - R.E.A. N° 515493

MEDI-CARE SOLUTIONS S.r.l.

VUE D'ENSEMBLE (ED610 AVEC ORDINATEUR)



Azienda con Sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008 and UNI EN ISO 13485:2012
Company with Quality System Certificate UNI EN ISO 9001:2008 and UNI EN ISO 13485:2012

MEDI-CARE SOLUTIONS S.R.L

SEDE LEGALE: Via Dante 34 - 40125 Bologna (BO) Italy/SEDE OPERATIVA: Via dell'Artigianato 305/319 - 48014 Castel Bolognese (RA) Italy
TEL. ++39 0546 656031 - FAX ++39 0546 656691 - WEBSITE: www.euroclinic.it - E-MAIL: info@euroclinic.it
Capitale Sociale Versato: € 12.500,00 I.V. - Iscrizione N° 03390661209 al Registro Imprese di Bologna - P.I. e C.F. 03390661209 - R.E.A. N° 515493

UTILISATION DU LOGICIEL EDM CLASSIC LITE.

<https://www.dropbox.com/sh/tc1ze2xvf0cajpl/AADAKAoQczjbmyBZMTtGsL5Pa?dl=0>

PREMIERES OPERATIONS

Dans le CD envoyé avec les équipements Euroclinic vous allez voir un file txt (ED600/610 README REV0.TXT) que vous devez suivre pour l'installation.

Après avoir faites les opérations indiquées vous pouvez utiliser le logiciel pour visualiser et/ou enregistrer les vidéos.

DESCRIPTION DU LOGICIEL

1== Ouvrir le file DRIVER E et sélectionner le Grabber PRO

2== Brancher le Grabber à le PC/Notebook et attendre le reconnaissance (CHECK IN GESTIONE DISPOSITIVI)

Suivre les instruction ci-dessous pur installer le logiciel:

00== ouvrir le file: EDMCLASSICSETUP7_12_402

01== exécuter le file: setup.exe

02== installer le logiciel contenu dans le file EDM

03== copier dans le dossier EDM le contenu du dossier: TO COPY INTO EDM FOLDER

05== exécuter le file "ini ED600/610.reg" et répondre "SI" à la question"CONTINUARE?"

06== Lancer le programme EDM par le lien sur le desktop EDM CLASSIC (double Click sur l'icône)




Azienda con Sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008 and UNI EN ISO 13485:2012
Company with Quality System Certificate UNI EN ISO 9001:2008 and UNI EN ISO 13485:2012

MEDI-CARE SOLUTIONS S.R.L

SEDE LEGALE: Via Dante 34 - 40125 Bologna (BO) Italy/SEDE OPERATIVA: Via dell'Artigianato 305/319 - 48014 Castel Bolognese (RA) Italy
TEL. ++39 0546 656031 - FAX ++39 0546 656691 - WEBSITE: www.euroclinic.it - E-MAIL: info@euroclinic.it
Capitale Sociale Versato: € 12.500,00 I.V. - Iscrizione N° 03390661209 al Registro Imprese di Bologna - P.I. e C.F. 03390661209 - R.E.A. N° 515493

Le setup du système doit être effectué seulement pendant le première usage.
Après avoir sélectionné le test **Videonistagmoscopia** et avoir appuyé le bouton **Esegui**, (ou en alternative après avoir effectuée un double click sur le test) on peut voir une nouvelle fenêtre :

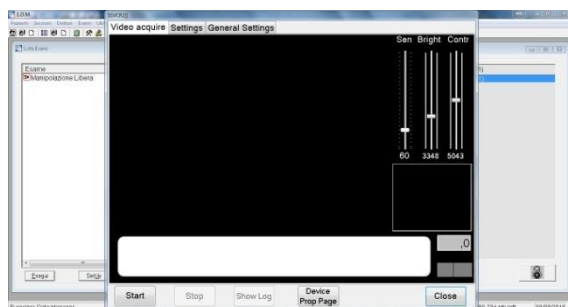


The screenshot displays the 'VideoProc 2.0.0' application window, specifically the 'Video acquire' settings. The interface is divided into several sections:

- Camera:** A list of available cameras including 'CyberLink Webcam Splitter', 'OBSBOT PRO Video Capture', 'HP Television HD', 'Point Gray Camera', and 'Kion Medical Cam'.
- Format:** A list of video formats and their specifications:
 - 720x576 YUVY, 16 bit
 - 720x576 YUY2, 16 bit
 - 720x480 YUVY, 16 bit
 - 720x576 Y8, 8 bit
 - 360x240 YUVY, 16 bit
 - 360x240 YUY2, 16 bit
- Video Frame Rates:** A list of frame rates including '25' and '30'.
- Codec:** A list of video codecs including 'None', 'Codec Cinepak @ Radius', 'Codec Intel IYUV', 'Codec Intel IYUV', 'DV Video Encoder', 'Hidshow Video Codec', 'Hidshow video encoder', 'Lagarim Lossless Codec' (highlighted), and 'Microsoft RLE'.

At the bottom of the window, there are buttons for 'Apply', 'Save', 'Refresh', 'Export Log', 'Prop', and 'About'. Below these buttons is a status bar with 'Start', 'Stop', 'Show Log', 'Device', 'Frame Rate', and 'Close'.

SEDE LEGALE: Via Dante 34 - 40125 Bologna (BO) Italy/SEDE OPERATIVA: Via dell'Artigianato 305/319 - 48014 Castel Bolognese (RA) Italy
TEL. ++39 0546 656031 - FAX ++39 0546 656691 - WEBSITE: www.euroclinic.it - E-MAIL: info@euroclinic.it
Capitale Sociale Versato: € 12.500,00 I.V. - Iscrizione N° 03390661209 al Registro Imprese di Bologna - P.I. e C.F. 03390661209 - R.E.A. N° 515493


Maintenant il est nécessaire de sélectionner le bouton **DeviceProp Page** placé dans la partie postérieure de la fenêtre.

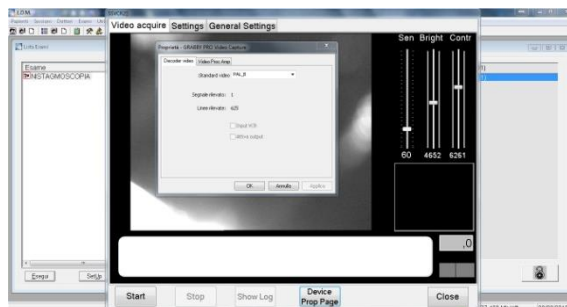

Standard Vidéo DOIT ETRE Pal B.

Après avoir fermé cette fenêtre, s'il vous plait de fermer aussi la fenêtre SETTING and lancer un nouveau test.

Dès que la nouvelle fenêtre sera ouverte, il est possible de voir l'image qui vient de la camera. S'il vous plait de déplacer les curseurs de la luminosité (Bright) et du contraste (Contr) pour obtenir la meilleur visualisation possible.

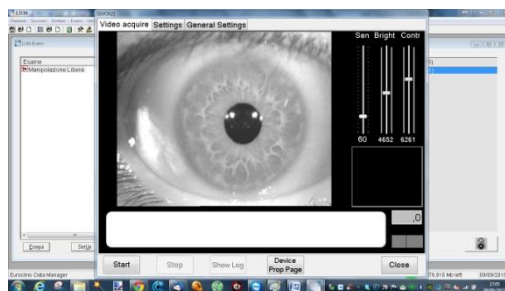


Azienda con Sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008 and UNI EN ISO 13485:2012
Company with Quality System Certificate UNI EN ISO 9001:2008 and UNI EN ISO 13485:2012

MEDI-CARE SOLUTIONS S.R.L

SEDE LEGALE: Via Dante 34 - 40125 Bologna (BO) Italy/SEDE OPERATIVA: Via dell'Artigianato 305/319 - 48014 Castel Bolognese (RA) Italy
TEL. ++39 0546 656031 - FAX ++39 0546 656691 - WEBSITE: www.euroclinic.it - E-MAIL: info@euroclinic.it
Capitale Sociale Versato: € 12.500,00 I.V. - Iscrizione N° 03390661209 al Registro Imprese di Bologna - P.I. e C.F. 03390661209 - R.E.A. N° 515493

SETUP DU TEST

Après avoir sélectionné le test, ou avec le bouton droit du mouse, cliquer sur le bouton **Setup** placé en bas dans la fenêtre **Lista Esami**, et on peut voir le fenêtre pour définir la durée du test et du vidéo.

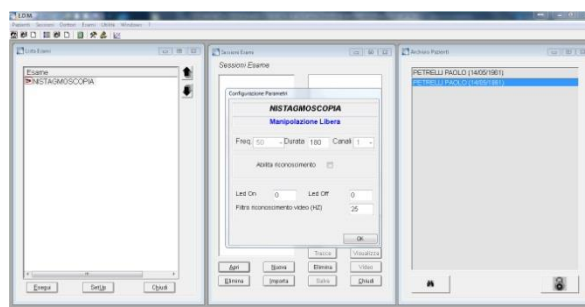

Presser **OK** pour confirmer les données et fermer la fenêtre.

Azienda con Sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008 and UNI EN ISO 13485:2012
Company with Quality System Certificate UNI EN ISO 9001:2008 and UNI EN ISO 13485:2012


MEDI-CARE SOLUTIONS S.R.L

SEDE LEGALE: Via Dante 34 - 40125 Bologna (BO) Italy/SEDE OPERATIVA: Via dell'Artigianato 305/319 - 48014 Castel Bolognese (RA) Italy
TEL. ++39 0546 656031 - FAX ++39 0546 656691 - WEBSITE: www.euroclinic.it - E-MAIL: info@euroclinic.it
Capitale Sociale Versato: € 12.500,00 I.V. - Iscrizione N° 03390661209 al Registro Imprese di Bologna - P.I. e C.F. 03390661209 - R.E.A. N° 515493


EXECUTION D'UN EXAMEN

Le premier menu à notre disposition est **Archivio pazienti**, qu'on permet de sélectionner par le mouse un patient et son **liste d'examens**, si déjà présent dans notre data base.

On peut voir une liste (ordre alphabétique) des patients avec la date de naissance (pour éviter des erreurs en cas d'homonyme).

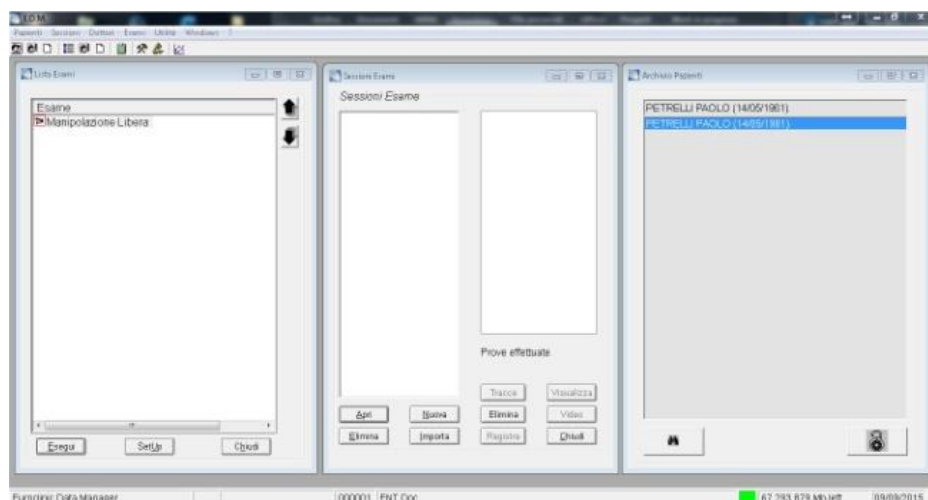

Pour **créer une nouvelle fiche patient** il est nécessaire sélectionner: **NuovoPaziente** dans le menu **Pazienti**, taper les informations et les sauver avec le bouton **Salva**. Enfin, sélectionner **Chiudi** afin de terminer la **fiche patient**.

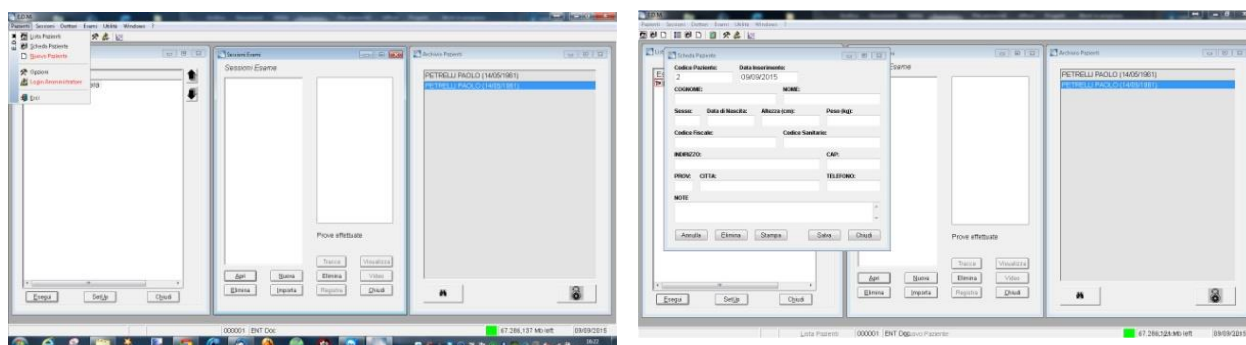


Azienda con Sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008 and UNI EN ISO 13485:2012
Company with Quality System Certificate UNI EN ISO 9001:2008 and UNI EN ISO 13485:2012


MEDI-CARE SOLUTIONS S.R.L

SEDE LEGALE: Via Dante 34 - 40125 Bologna (BO) Italy/SEDE OPERATIVA: Via dell'Artigianato 305/319 - 48014 Castel Bolognese (RA) Italy
TEL. ++39 0546 656031 - FAX ++39 0546 656691 - WEBSITE: www.euroclinic.it - E-MAIL: info@euroclinic.it
Capitale Sociale Versato: € 12.500,00 I.V. - Iscrizione N° 03390661209 al Registro Imprese di Bologna - P.I. e C.F. 03390661209 - R.E.A. N° 515493


Pour effectuer un examen on va choisir le patient et on va sélectionner le bouton avec **un cadenas** (en bas) pour active l'option **PazienteAttivo**,

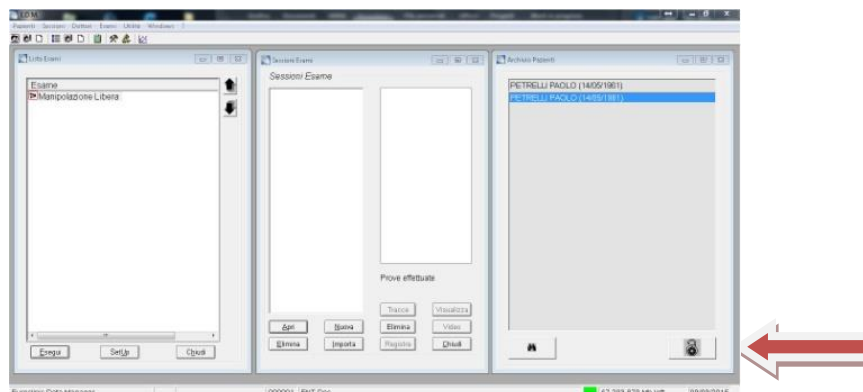

Maintenant il est possible d'enregistrer les examens et sauver aussi les vidéos. Pour créer une nouvelle session il est suffisant d'appuyer le bouton **Nuova** dans la fenêtre **SessioniEsame**. (sessions d'examen)

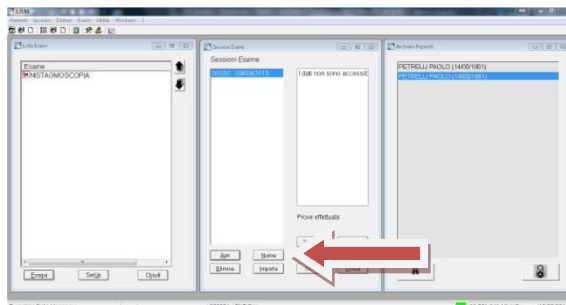

Après avoir sélectionné le test, on peut voir la fenêtre d'acquisition.

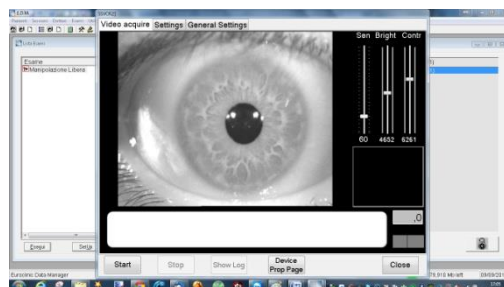

Azienda con Sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008 and UNI EN ISO 13485:2012
Company with Quality System Certificate UNI EN ISO 9001:2008 and UNI EN ISO 13485:2012

MEDI-CARE SOLUTIONS S.R.L

SEDE LEGALE: Via Dante 34 - 40125 Bologna (BO) Italy/SEDE OPERATIVA: Via dell'Artigianato 305/319 - 48014 Castel Bolognese (RA) Italy
 TEL. ++39 0546 656031 - FAX ++39 0546 656691 - WEBSITE: www.euroclinic.it - E-MAIL: info@euroclinic.it
 Capitale Sociale Versato: € 12.500,00 I.V. - Iscrizione N° 03390661209 al Registro Imprese di Bologna - P.I. e C.F. 03390661209 - R.E.A. N° 515493

MEDI-CARE SOLUTIONS S.r.l.

Nous vous conseillons de vérifier que l'image soit claire et nette, et si tout est ok, on peut appuyer sur le bouton **Start** pour commencer l'acquisition vidéo.

Nous vous rappelons que l'acquisition a la durée prédéfinie dans le setup du test (définie au début de l'usage du ED610)

On peut arrêter l'acquisition en appuyant sur le bouton **Stop** et après **Chiudi** placé en bas.

Dès que vous avez fermé la fenêtre pour l'acquisition, il est possible de retourner à la page principale où il y a la possibilité de sauver le test (bouton **Salva**)

Pour voir le vidéo il est nécessaire de sélectionner le test (fenêtre **SessioniEsame**) et appuyer le bouton **Video**.

Azienda con Sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008 and UNI EN ISO 13485:2012
Company with Quality System Certificate UNI EN ISO 9001:2008 and UNI EN ISO 13485:2012

MEDI-CARE SOLUTIONS S.R.L

SEDE LEGALE: Via Dante 34 - 40125 Bologna (BO) Italy/SEDE OPERATIVA: Via dell'Artigianato 305/319 - 48014 Castel Bolognese (RA) Italy
TEL. ++39 0546 656031 - FAX ++39 0546 656691 - WEBSITE: www.euroclinic.it - E-MAIL: info@euroclinic.it
Capitale Sociale Versato: € 12.500,00 I.V. - Iscrizione N° 03390661209 al Registro Imprese di Bologna - P.I. e C.F. 03390661209 - R.E.A. N° 515493