



Littmann® CORE Stethoscope

Connects to Eko Software

Eko

3M

(en)	English	pp. 1	(sl)	Slovenski	pp. 33
(fr)	Français	pp. 3	(et)	Eesti	pp. 35
(de)	Deutsch	pp. 5	(lv)	Latviesu	pp. 37
(it)	Italiano	pp. 7	(lt)	Lietuviskai	pp. 39
(es)	Español	pp. 9	(ro)	Romana	pp. 41
(nl)	Nederlands	pp. 11	(hr)	Hrvatski	pp. 43
(sv)	Svenska	pp. 13	(bg)	Български	pp. 45
(da)	Dansk	pp. 15			
(no)	Norsk	pp. 17			
(fi)	Suomi	pp. 19			
(pt)	Português	pp. 21			
(el)	Ελληνικά	pp. 23			
(pl)	Polski	pp. 25			
(hu)	Magyar	pp. 27			
(cs)	Čeština	pp. 29			
(sk)	Slovensky	pp. 31			

Stéthoscope numérique 3M™ Littmann® CORE

Guide de démarrage rapide

Téléchargez l'application Eko depuis l'Apple App Store® ou le Google Play Store®.

Activez la technologie sans fil Bluetooth® sur votre téléphone ou tablette, lancez l'application et activez le stéthoscope CORE.


Eko

Dans la boîte

- Eko CORE Digital Attachment et stéthoscope 3M™ Littmann® Cardiology IV™
- Jeu supplémentaire d'embouts auriculaires souples et étanches (petits) de 3M Littmann
- Bague anti-froid
- Câble de charge USB
- Guide de démarrage rapide

Embouts auriculaires

Insérez les embouts auriculaires en les maintenant vers l'avant.

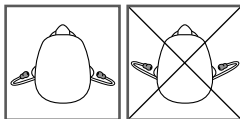

Volume

Utilisez les boutons (+) et (-) pour régler le volume. Il y a 7 niveaux de volume.

Mise sous et hors tension

Lorsque le stéthoscope CORE est hors tension, il fonctionne comme un stéthoscope non amplifié.

Pour mettre le module stéthoscope CORE sous tension, appuyez sur le bouton d'alimentation. Le voyant commence à clignoter. Vous entendrez un son amplifié et filtré dans les embouts auriculaires.

Fonctions de télémedecine et d'IA

Eko propose des fonctions de télémedecine et d'IA qui nécessitent une licence logicielle (dans certaines régions, vendue séparément).

Vous pouvez souscrire un abonnement en ligne sur le site ekohealth.com

Suppression active des bruits

Le stéthoscope CORE inclut la suppression active des bruits afin de supprimer les bruits ambiants de l'environnement. La suppression active des bruits peut être activée ou désactivée depuis l'application Eko.



Notifications

((●●)) (clignotant)

Le stéthoscope CORE est activé et recherche un dispositif

● (jaune)

Le stéthoscope CORE est hors tension et en charge

(●●) (jaune)

Le stéthoscope CORE a un faible niveau de batterie

○

Le stéthoscope CORE est activé et connecté

● (vert)


Le stéthoscope CORE est complètement chargé

(●●) (bleu)

Le stéthoscope CORE est en train d'enregistrer

Enregistrement

Lorsque vous êtes connecté à l'application Eko, appuyez sur le bouton (o) pour commencer l'enregistrement.

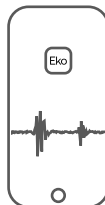

Chargement

Connectez le câble micro USB au stéthoscope CORE et utilisez un chargeur mural USB 5 V avec marquage CE certifié UL. Il faudra environ 2 heures pour recharger complètement le stéthoscope CORE. Le voyant deviendra vert une fois le stéthoscope complètement chargé.

Manuel d'utilisation

Consultez le manuel d'utilisation avant d'utiliser votre stéthoscope Littmann CORE. Pour consulter le manuel, rendez-vous à l'adresse : ekohealth.com/getstarted
Pour de plus amples informations sur les dispositifs de 3M, consulter HCBGRegulatory.3M.com

Entretien et assistance

Aux États-Unis, consultez le site littmann.com/service ou appelez le 1-800-228-3957. Hors des États-Unis, consultez le site littmann.com pour connaître les coordonnées de votre agence 3M locale.



Apple App Store est une marque déposée d'Apple Inc.
Google Play et le logo Google Play sont des marques déposées de Google LLC.
Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG
LBL 143 Rév B

System assembled by 3M Company



3M Deutschland GmbH
Health Care Business

www.littmann.com



Made in USA with
Globally Sourced Materials

 **3M Company**

2510 Conway Ave.
St. Paul, MN 55144 USA





3M Deutschland GmbH
Health Care Business
Carl-Schurz-Str. 1
41453 Neuss, Germany



Made in Malaysia

 **Eko Devices, Inc.**

1212 Broadway, Suite 100
Oakland, CA 94612 USA



0537



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

©2020 3M; Eko Devices Inc. All rights reserved.

3M, Littmann, the L Littmann logo, the L, and Cardiology IV are marks and/or registered marks of 3M.

Unauthorized use prohibited.

Eko trademarks, including CORE, are marks and/or registered marks of Eko Devices Inc.

Issue Date: 2020-11

34-8726-3344-0