

DP-50/DP-50T

Echographe numérique

Manuel d'utilisation

[Volume de base]

Table des matières

Avis relatif à la propriété intellectuelle	I
Responsabilité du fabricant	I
Garantie	II
Limites de garantie	II
Contacts	III
Informations importantes	III
A propos de ce manuel	IV
Conventions de notation	IV
Manuels d'utilisation	IV
Copie papier des manuels	IV
Copies électroniques sur CD-ROM des manuels	V
Interfaces logicielles illustrées dans ce manuel	V
Conventions	V
Différences au niveau du produit	V
1 Consignes de sécurité	1-1
1.1 Classification de sécurité	1-1
1.2 Signification des termes de signalisation	1-2
1.3 Signification des symboles de sécurité	1-2
1.4 Consignes de sécurité	1-3
1.5 Latex	1-11
1.6 Etiquettes de mise en garde	1-12
2 Présentation de l'échographe	2-1
2.1 Indications	2-1
2.2 Contre-indication	2-1
2.3 Codes du produit et du modèle	2-1
2.4 Caractéristiques techniques du produit	2-1
2.4.1 Mode d'imagerie	2-1
2.4.2 Alimentation électrique	2-1
2.4.3 Conditions ambiantes	2-2
2.4.4 Taille et poids	2-2
2.5 Configuration du système	2-2
2.5.1 Configuration standard	2-2
2.5.2 Sondes disponibles	2-2
2.5.3 Options	2-3
2.5.4 Périphériques pris en charge	2-4
2.6 Présentation de chaque composant	2-5
2.6.1 Panneau E/S	2-7

2.6.2	Panneau d'alimentation électrique.....	2-7
2.6.3	Panneau de commande	2-8
2.7	Symboles.....	2-11
3	Préparation de l'échographe	3-1
3.1	Déplacement et mise en place de l'échographe	3-1
3.2	Alimentation électrique.....	3-1
3.2.1	Branchement à l'alimentation externe	3-1
3.2.2	Alimentation par batterie.....	3-1
3.3	Mise sous tension/hors tension de l'échographe	3-2
3.3.1	Mise sous tension.....	3-2
3.3.2	Mise hors tension.....	3-3
3.4	Connexion/déconnexion d'une sonde	3-4
3.4.1	Connexion d'une sonde	3-4
3.4.2	Déconnexion d'une sonde	3-5
3.5	Connexion de la pédale	3-5
3.6	Connexion/déconnexion d'un périphérique de stockage USB.....	3-6
3.7	Imprimante graphique/texte	3-6
3.8	Imprimante vidéo numérique.....	3-8
3.9	Imprimante vidéo analogique	3-9
3.10	DVD externe.....	3-9
3.11	Ecran initial et opérations élémentaires	3-10
3.11.1	Ecran initial	3-10
3.11.2	Opérations élémentaires des écrans.....	3-14
4	Préparation de l'examen	4-1
4.1	Commencer un examen.....	4-1
4.2	Informations patient.....	4-2
4.2.1	Nouvelles informations patient	4-2
4.2.2	Récupération des informations patient.....	4-5
4.3	Sélection de la sonde et du mode d'examen	4-8
4.3.1	Modes d'examen pris en charge	4-8
4.3.2	Sélection de la sonde et du mode d'examen.....	4-8
4.3.3	Changement de sonde double	4-9
4.3.4	Sonde endocavitaire biplan (65EB10EA).....	4-9
4.4	Sélection du mode d'imagerie.....	4-9
4.5	Activation et poursuite d'un examen	4-10
4.5.1	Activation d'un examen.....	4-10
4.5.2	Poursuite d'un examen	4-10
4.6	Suspension et fin d'un examen	4-10
4.6.1	Suspension d'un examen	4-10

4.6.2	Fin d'un examen	4-11
5	Optimisation des images	5-1
5.1	Changement de mode d'image	5-1
5.2	Opérations élémentaires	5-2
5.3	Mode B	5-3
5.3.1	Protocole d'examen en mode B	5-3
5.3.2	Paramètres du mode B.....	5-3
5.3.3	Optimisation des images en mode B.....	5-4
5.4	Mode M	5-10
5.4.1	Protocole d'examen en mode M.....	5-10
5.4.2	Paramètres du mode M.....	5-10
5.4.3	Optimisation des images en mode M	5-11
5.5	Prédéfin image	5-14
5.5.1	Prédéfin image	5-14
6	Affichage et revue ciné	6-1
6.1	Affichage des images	6-1
6.1.1	Partage de l'affichage	6-1
6.1.2	Agrandissement des images	6-1
6.1.3	Figeage/libération de l'image.....	6-2
6.2	Revue ciné	6-3
6.2.1	Activation/Désactivation de la revue ciné.....	6-4
6.2.2	Revue ciné en mode 2D	6-4
6.2.3	Revue ciné en mode M.....	6-5
6.2.4	Revue Ciné associée.....	6-5
6.3	Mémoire ciné.....	6-6
6.3.1	Réglage de la mémoire ciné.....	6-6
6.3.2	Effacement de la mémoire ciné	6-6
6.4	Prédéfiniion	6-7
7	Mesure	7-1
7.1	Opérations de base	7-1
7.2	Mesures générales.....	7-2
7.2.1	Mesures générales2D	7-2
7.2.2	Mesures générales en mode M	7-2
7.3	Mesure d'application	7-3
7.4	Précision des mesures	7-4
8	Commentaires et repères corporels	8-1
8.1	Commentaires	8-1
8.1.1	Procédures de base du mode commentaire.....	8-1

8.1.2	Menu Commentaire	8-2
8.1.3	Ajout de commentaires	8-2
8.1.4	Déplacement des commentaires	8-3
8.1.5	Modification de commentaires	8-4
8.1.6	Suppression des commentaires	8-4
8.2	Body Mark	8-5
8.2.1	Procédures d'utilisation des repères corporels.....	8-5
8.2.2	Menu	8-5
8.2.3	Ajout de repères corporels	8-5
8.2.4	Déplacement des repères corporels.....	8-6
8.2.5	Suppression des repères corporels.....	8-6
9	Gestion des données patient.....	9-1
9.1	Gestions des informations patient.....	9-1
9.1.1	Saisie des informations patient.....	9-1
9.1.2	Réglage des informations patient.....	9-1
9.2	Gestion des fichiers d'image	9-2
9.2.1	Supports de stockage	9-2
9.2.2	Formats des fichiers d'image.....	9-2
9.2.3	Prédéfini tion du stockage des images.....	9-3
9.2.4	Enregistrement des images sur l'échographe	9-3
9.2.5	Enregistrement rapide des images sur mémoire flash USB	9-4
9.2.6	Enregistrement rapide d'image plein écran sur le système.....	9-4
9.2.7	Vignettes.....	9-4
9.2.8	Revue et analyse d'images	9-5
9.2.9	iVision	9-7
9.2.10	Envoi d'un fichier image.....	9-9
9.3	Gestion des rapports	9-10
9.4	Gestion des données patient (iStation)	9-11
9.4.1	Recherche d'un patient.....	9-12
9.4.2	Affichage et gestion des données patient.....	9-13
9.5	Sauvegarde et suppression des fichiers via le lecteur de DVD	9-15
9.6	Gestionnaire des tâches patient.....	9-16
9.7	Contrôle d'accès.....	9-17
9.7.1	Contrôle d'accès	9-17
9.7.2	Contrôle d'accès	9-17
9.7.3	Connexion au système	9-18
9.7.4	Ajout/suppression d'un utilisateur.....	9-19
9.7.5	Modification du mot de passe.....	9-20

10 DICOM	10-1
10.1 Prédéfinition de DICOM	10-2
10.1.1 Prédéfinition réseau.....	10-2
10.1.2 Prédéfinition de DICOM.....	10-3
10.1.3 Service DICOM.....	10-4
10.2 Vérification de la connectivité.....	10-12
10.3 Service DICOM	10-12
10.3.1 Stockage DICOM.....	10-12
10.3.2 Impr. Dicom.....	10-13
10.3.3 Liste de travail DICOM	10-14
10.3.4 Confirmation de stockage.....	10-16
10.4 Stockage sur supports externes DICOM.....	10-16
10.5 Visionnage d'enregistrements	10-18
10.6 Gestionnaire des tâches DICOM	10-18
11 Configuration	11-1
11.1 Prédéfinition du système.....	11-2
11.1.1 Région	11-3
11.1.2 Général	11-4
11.1.3 Prédéf image	11-5
11.1.4 Param mes.	11-6
11.1.5 Ob	11-6
11.1.6 Config tch.....	11-6
11.1.7 Biopsie	11-8
11.1.8 Admin.....	11-8
11.2 Prédéf des examens	11-9
11.2.1 Sélection des examens	11-9
11.2.2 Configuration des examens.....	11-10
11.3 Prédéf image	11-11
11.4 Prédéfinition des mesures.....	11-11
11.5 Prédéfinition des repères corporels	11-11
11.5.1 Prédéfinition des repères corporels pour le mode d'examen.....	11-11
11.5.2 Personnalisation des repères corporels	11-13
11.6 Prédéfinition des commentaires.....	11-13
11.6.1 Commentaires personnalisés	11-13
11.7 Prédéfinition du service d'impression.....	11-15
11.8 Prédéfinition réseau	11-16
11.9 Configuration de la station de travail.....	11-16
11.10 Gestion des prédefinitons.....	11-16
11.10.1 Exportation des données de configuration	11-16

11.10.2	Importation des données de configuration	11-17
11.11	Maintenance.....	11-17
11.12	Infos système	11-17
12	Sondes et biopsie	12-1
12.1	Probe.....	12-1
12.1.1	Nom et fonction de chaque partie de la sonde.....	12-3
12.1.2	Orientation de l'image échographique et de la tête de la sonde	12-4
12.1.3	Procédures d'utilisation.....	12-5
12.1.4	Usure du couvre-sonde	12-8
12.1.5	Nettoyage et désinfection des sondes.....	12-9
12.1.6	Stockage et transport.....	12-11
12.2	Guide de biopsie	12-12
12.2.1	Procédures de base du guidage de la biopsie	12-15
12.2.2	Guide-aiguilles	12-16
12.2.3	Prédéfini�on de la biopsie	12-22
12.2.4	Inspection et installation du guide-aiguille.....	12-22
12.2.5	Menu Biopsie	12-27
12.2.6	Vérification de la ligne de guide-aiguille pour biopsie.	12-27
12.2.7	Retrait du guide-aiguille.....	12-28
12.2.8	Nettoyage et stérilisation du guide-aiguille.....	12-31
12.2.9	Stockage et transport.....	12-32
12.2.10	Mise au rebut.....	12-32
13	Batterie	13-1
13.1	Présentation	13-2
13.2	Précautions	13-2
13.3	Installation et retrait des batteries	13-3
13.4	Témoin d'état de la batterie.....	13-4
13.5	Un cycle déchargement/chargement complet.....	13-4
13.6	Vérification des performances de la batterie.....	13-4
13.7	Elimination des batteries	13-4
14	Sortie sonore.....	14-1
14.1	Impact biologique	14-1
14.2	Principe de précaution	14-1
14.3	Principe ALARA (valeur la plus faible qu'il soit raisonnablement possible d'atteindre).....	14-1
14.4	Explication de l'IM/IT	14-2
14.4.1	Connaissance élémentaire de l'IM et de l'IT.....	14-2
14.4.2	Affichage de l'IM/IT	14-3
14.5	Configuration de la puissance sonore.....	14-3

14.6	Contrôle de la puissance sonore.....	14-4
14.7	Sortie sonore	14-5
14.7.1	Compensation des paramètres de sortie des ultrasons	14-5
14.7.2	Limites de sortie sonore	14-5
14.7.3	Différences entre l'IM et l'IT réels et affichés.....	14-6
14.8	Incertitude des mesures.....	14-6
14.9	Références relatives à la puissance sonore et à la sécurité.....	14-7
15	Directives et déclaration du fabricant.....	15-1
16	Maintenance du système	16-1
16.1	Maintenance quotidienne	16-1
16.1.1	Nettoyage de l'échographe.....	16-1
16.1.2	Vérification de la sonde	16-3
16.1.3	Sauvegarde du disque dur de l'échographe.....	16-3
16.2	Contrôles du technicien de maintenance.....	16-3
16.3	Remplacement périodique des consommables et des pièces.....	16-4
16.4	Dépannage.....	16-4



©2011 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Tous droits réservés.
Ce manuel d'utilisation a été publié en 2011-06.







La version 1.0 de MindrayVNC contenue dans ce produit a été révisée par MINDRAY en août 2009, sur la base de la version 1.0.5.5 d'UltraVNC, et est conforme à la licence publique générale GNU. SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD. détient les droits de propriété intellectuelle relatifs à la section révisée. Veuillez contacter Ultrasound1.rd@mindray.com.cn pour MindrayVNC version 1.0.


Avis relatif à la propriété intellectuelle

La société SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD (ci-après dénommée Mindray) détient les droits de propriété intellectuelle relatifs au présent manuel ainsi qu'au produit Mindray qui y est décrit. Ce manuel fait référence à des informations protégées par des droits d'auteur ou des brevets et ne confère aucune licence relative aux brevets détenus par Mindray ou par un tiers.

Mindray considère le contenu du présent manuel comme strictement confidentiel. La divulgation des informations contenues dans ce manuel, sous quelque forme que ce soit, est strictement interdite sans l'autorisation écrite de Mindray.

La publication, la modification, la reproduction, la distribution, la location, l'adaptation, la traduction ou toute autre opération dérivée du présent manuel, sous quelque forme que ce soit, sont strictement interdites sans l'autorisation écrite de Mindray.

 ,  ,  ,  ,  ,  , BeneView, WATO,

BeneHeart,  sont des appellations commerciales, des marques déposées ou autres de Mindray en Chine et dans d'autres pays. Toutes les autres appellations commerciales apparaissant dans ce manuel sont utilisées uniquement à titre d'information ou pour les besoins de rédaction. Elles sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Responsabilité du fabricant

Le contenu de ce manuel est sujet à modifications sans préavis.

Toutes les informations contenues dans le présent manuel sont réputées exactes. Mindray ne pourra être tenue pour responsable des éventuelles erreurs contenues dans le présent manuel, ni des dommages accessoires ou indirects en relation avec la fourniture, l'interprétation ou l'utilisation de ce manuel.

Mindray est responsable de la sécurité, de la fiabilité et des performances de ce produit dans le seul cas où toutes les conditions ci-après sont satisfaites :

- Toutes les opérations d'installation, d'extension, de modification, de remplacement et de réparation du produit sont exécutées par des techniciens agréés par Mindray.
- l'installation électrique du local utilisé est conforme aux réglementations nationales et locales applicables ;
- Le produit est utilisé conformément aux instructions d'utilisation.
- MindrayVNC 1.0 est un logiciel libre. Les performances de MindrayVNC 1.0 ne sont pas garanties par MINDRAY.

Remarque

Cet équipement doit être utilisé par des professionnels de la santé qualifiés/formés.

Avertissement

Il est important que l'établissement ou l'organisation qui utilise cet équipement applique un programme adéquat de maintenance et d'entretien technique. Toute négligence en la matière peut entraîner une défaillance de l'équipement ou des blessures corporelles.

Garantie

LA PRESENTE GARANTIE EST EXCLUSIVE. ELLE ANNULE ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE VALEUR MARCHANDE OU D'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER.

Limites de garantie

Dans le cadre de la présente garantie, les obligations ou responsabilités de Mindray excluent toute forme de transport, toute autre charge ou responsabilité pour des dommages directs ou indirects ou pour tout retard pouvant découler de l'utilisation ou de l'application impropre de ce produit, toute utilisation de pièces ou d'accessoires non approuvés par Mindray, ainsi que toute réparation effectuée par des personnes autres que les techniciens agréés par Mindray.

La présente garantie ne couvre pas :

- **tout dysfonctionnement ou dommage résultant d'une utilisation inappropriée ou d'une erreur humaine ;**
- **tout dysfonctionnement ou dommage résultant d'une entrée d'alimentation instable ou en dehors de la plage ;**
- **tout dysfonctionnement ou dommage résultant d'un cas de force majeure, comme un incendie ou un tremblement de terre ;**
- **tout dysfonctionnement ou dommage résultant d'une utilisation inappropriée ou d'une réparation par du personnel de maintenance non qualifié ou non autorisé ;**
- **tout dysfonctionnement de l'appareil ou d'une pièce dont le numéro de série ne serait pas assez lisible ;**
- **tous les autres dommages ne résultant pas de l'appareil ou d'une pièce à proprement parler.**

Contacts

Fabricant : Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.

Adresse électronique : service@mindray.com

Tél. : +86 755 26582479 26582888

Fax : +86 755 26582934 26582500

Représentant pour la CE : Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)

Adresse : Eiffestraße 80, Hambourg 20537, Allemagne

Tél. : 0049-40-2513175

Fax : 0049-40-255726

Informations importantes

1. La responsabilité de la maintenance et de la gestion du produit après sa livraison incombe au client.
2. La garantie ne s'applique pas aux éléments répertoriés ci-dessous, même pendant la période de validité de la garantie :
 - (1) Dommages ou pertes dus à une utilisation impropre ou abusive.
 - (2) Dommages ou pertes consécutifs à des cas de force majeure tels que des incendies, séismes, inondations, foudre, etc.
 - (3) Dommages ou pertes dus au non-respect des conditions de fonctionnement spécifiées pour cet appareil, telles qu'une alimentation électrique inadéquate, une installation ou des conditions ambiantes impropres.
 - (4) Dommages ou pertes dus à une utilisation hors du territoire dans lequel le système a été initialement acquis.
 - (5) Dommages ou pertes concernant un système acquis auprès d'un fournisseur autre que Mindray ou l'un de ses mandataires.
3. Cet échographe ne doit pas être utilisé par des personnes autres que des membres du personnel médical, diplômés et dûment qualifiés.
4. Vous ne devez apporter aucun changement ou modification au logiciel ou au matériel de l'échographe.
5. Mindray ne sera en aucun cas tenue pour responsable des problèmes, dommages ou pertes consécutifs au déplacement, à la modification ou à la réparation du produit effectués par du personnel autre que celui désigné par Mindray.
6. Cet échographe est conçu pour fournir aux médecins des données de diagnostic clinique. La responsabilité des procédures diagnostiques incombe aux médecins. Mindray ne sera pas tenu pour responsable du résultat des procédures diagnostiques utilisées.
7. Les données importantes doivent être sauvegardées sur des supports de stockage externes.
8. Mindray ne sera pas tenue pour responsable de la perte de données mémorisées sur le système du fait d'un effacement accidentel ou d'une erreur de l'opérateur.
9. Ce manuel comporte des avertissements relatifs aux dangers potentiels prévisibles, mais vous devez toujours rester vigilant afin de prévenir les risques qui ne sont pas indiqués ici. Mindray ne sera pas tenue pour responsable des dommages ou perte découlant de la négligence ou du non-respect des précautions et des directives décrites dans le présent Manuel d'utilisation.
10. En cas de changement de gestion du système, assurez-vous de transmettre ce Manuel d'utilisation au nouveau responsable.

A propos de ce manuel

Ce manuel décrit les procédures de fonctionnement pour cet échographe DP-50/DP-50T et les sondes compatibles. Afin de garantir le fonctionnement correct et sûr de l'échographe, la lecture intégrale ainsi que la parfaite compréhension de ce manuel sont un préalable à toute utilisation.

Conventions de notation

Dans ce manuel d'utilisation, les mots suivants viennent compléter les consignes de sécurité (reportez-vous à la section "Consignes de sécurité"). Nous vous recommandons de lire le manuel préalablement à l'utilisation du système.

 ATTENTION : Cet échographe n'est pas conçu pour un usage ophtalmique. Son utilisation dans cette spécialité est contre-indiquée.

Manuels d'utilisation

Nous vous recommandons de lire les manuels d'utilisation attentivement avant d'utiliser le système.

Les manuels d'utilisation comprennent les manuels relatifs à l'unité principale et les manuels des sondes. Les manuels en anglais sont fournis en copie papier alors que les manuels traduits en d'autres langues sont fournis sur CD-ROM (Disque compact).

Les informations contenues dans le Manuel d'utilisation, tels que les écrans, les menus ou les descriptions peuvent ne pas être parfaitement identiques à ce que vous voyez sur votre échographe. Elles peuvent varier en fonction de la version logicielle, des options et de la configuration du système.

Copie papier des manuels

- Manuel d'utilisation [Volume de base] : Ce manuel décrit les fonctions et les opérations élémentaires de l'échographe, les consignes de sécurité, les modes d'examen, les modes d'imagerie, les prédéfinitions, la maintenance et la sortie sonore, etc.
- Manuel d'utilisation [Volume avancé] : Décrit les prédéfinitions des mesures, les mesures et les calculs, etc.
- Manuel d'utilisation [Données de sortie sonore et température de surface] : Ce manuel contient les tableaux de données sur la sortie sonore des sondes.
- Guide de référence rapide : Guide rapide sur les opérations élémentaires de l'échographe.

Copies électroniques sur CD-ROM des manuels

- Manuel d'utilisation [Volume de base]
- Manuel d'utilisation [Volume avancé]
- Guide de référence rapide

REMARQUE :

1. Les manuels enregistrés sur CD-ROM sont les traductions en d'autres langues des manuels originaux rédigés en anglais.
2. Si le contenu des manuels enregistrés sur le CD-ROM NE CORRESPONDAIT PAS à l'échographe ou aux manuels en anglais, reportez-vous UNIQUEMENT aux manuels anglais correspondants.
3. Les manuels livrés avec l'échographe peuvent varier en fonction du système spécifique que vous avez acquis. Reportez-vous à la liste d'emballage.

Interfaces logicielles illustrées dans ce manuel

Selon la version logicielle dont vous disposez, les paramètres prédéfinis et la configuration en option, les interfaces affichées à l'écran peuvent différer de celles illustrées dans le manuel.

Conventions

Dans ce manuel, les conventions suivantes sont utilisées. Elles permettent d'identifier les boutons du panneau de commande, les options de menu, les boutons de boîte de dialogue et certaines opérations basiques :

- <Buttons> : ces crochets identifient les touches, boutons et autres commandes du panneau de commande.
- [Options de menu et boutons de boîte de dialogue] : ces crochets désignent les options de menu ou les boutons de boîte de dialogue.
- Cliquez sur [Options ou Bouton] : déplacez le curseur sur l'option ou le bouton et appuyez sur la touche <Set>, ou bien cliquez sur l'option du menu.
- [Options de menu]→[Options de sous-menu] : indique le chemin à suivre pour sélectionner une option de sous-menu.
- [Plage dyn. (valeur)] : indique une option de menu associée à un paramètre ; (valeur) indique la valeur actuelle de cette option.

Différences au niveau du produit




DP-50T : la sonde 35C20EA n'est pas disponible (cette sonde n'est pas livrée avec la version actuelle).




1 Consignes de sécurité

1.1 Classification de sécurité





- Type de protection contre les électrocutions :
EQUIPEMENT DE CLASSE I
- Degré de protection contre les électrocutions :
Pièce appliquée de type BF
- Degré de protection contre la pénétration nuisible de liquide :
Unité principale : IPX0
Sondes : IPX7
- Degré de sécurité d'utilisation en présence d'un MELANGE ANESTHESIQUE INFLAMMABLE A BASE D'AIR, D'OXYGENE OU DE PROTOXYDE D'AZOTE :
EQUIPEMENT non conforme à une utilisation en présence d'un MELANGE ANESTHESIQUE INFLAMMABLE A BASE D'AIR, D'OXYGENE OU DE PROTOXYDE D'AZOTE.
- Mode de fonctionnement :
FONCTIONNEMENT CONTINU
- Installation et utilisation :
EQUIPEMENT PORTABLE
EQUIPEMENT MOBILE

1.2 Signification des termes de signalisation

Dans ce manuel, les termes " **DANGER**", " **AVERTISSEMENT**", " **ATTENTION**", "**REMARQUE**" et "Conseils" annoncent des consignes et des instructions importantes en matière de sécurité. Ces termes et leur signification sont définis ci-après. Leur parfaite compréhension est une condition préalable à la lecture du présent manuel.


Terme de signalisation	Signification
 DANGER	Indique une situation dangereuse imminente qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner une blessure grave, voire mortelle.
 AVERTISSEMENT	Indique une situation présentant un danger potentiel qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner une blessure grave, voire mortelle.
 ATTENTION	Indique une situation présentant un danger potentiel qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner une blessure légère ou modérée.
REMARQUE	Indique une situation présentant un danger potentiel qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des dommages matériels.
Conseils	Informations importantes qui contribuent à une utilisation plus efficace de l'échographe.


1.3 Signification des symboles de sécurité

Symbole	Description
	Pièce appliquée de type BF. Les sondes à ultrasons connectées à cet échographe sont des pièces appliquées de type BF. Le module ECG raccordé à l'échographe est une pièce appliquée de type BF.
	Avertissement général, attention, risque de danger.
	Infection du patient/de l'utilisateur en raison d'un équipement contaminé. Lors du nettoyage, de la désinfection et de la stérilisation, prenez des précautions particulières.
	Blessure du patient ou dommages tissulaires dus aux rayons de l'échographe. Lors de l'utilisation de l'échographe, il est recommandé d'appliquer le principe ALARA (valeur la plus faible qu'il soit raisonnablement possible d'atteindre).

1.4 Consignes de sécurité

Lors de l'utilisation de l'échographe, veuillez respecter les consignes de sécurité suivantes afin de garantir la sécurité des patients et de l'opérateur.

 **DANGER :** En raison du risque d'explosion, N'utilisez PAS à proximité de l'appareil de gaz inflammables, tels qu'un gaz anesthésique ou de l'hydrogène, ou de liquides inflammables comme l'éthanol.

 **AVERTISSEMENT :**

1. Branchez le cordon d'alimentation de l'échographe et les cordons d'alimentation des périphériques à des prises murales conformes à la tension nominale indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil. L'utilisation d'une prise multiple peut compromettre la mise à la terre de l'échographe et provoquer un courant de fuite excédant les normes de sécurité.
Utilisez le câble fourni avec l'échographe pour connecter l'imprimante. L'utilisation d'autres câbles peut créer un risque d'électrocution.
Afin d'éviter tout risque d'électrocution, vous devez utiliser l'adaptateur d'alimentation fourni avec l'échographe
Suivez uniquement la méthode d'alimentation indiquée par Mindray ; l'utilisation d'autres modes d'alimentation (l'usage d'un onduleur, par exemple) peut entraîner un risque d'électrocution.
2. Branchez le conducteur de mise à la terre avant de mettre l'échographe sous tension et déconnectez-le uniquement après la mise hors tension de ce dernier, afin d'éviter tout risque d'électrocution.
3. Le non-respect des procédures de branchement de l'alimentation et de mise à la terre décrites dans ce Manuel d'utilisation crée un risque d'électrocution. NE connectez PAS le conducteur de mise à la terre à une canalisation de gaz ou d'eau, au risque d'entraîner un branchement à la terre inadéquat ou de provoquer une explosion de gaz.
4. Afin d'éviter tout risque d'électrocution et une défaillance de l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation de la prise avant de nettoyer l'échographe.

5. **Cet appareil n'est pas étanche. NE l'utilisez PAS dans un environnement où il existe un risque de fuite d'eau ou de tout autre liquide. L'aspersion d'eau sur ou dans l'échographe peut provoquer une décharge électrique ou un dysfonctionnement de l'appareil. En cas d'aspersion d'eau accidentelle, contactez un représentant du Service commercial ou du Service clientèle de Mindray.**
6. **N'utilisez pas des sondes endommagées, rayées ou avec des câbles à découvert. Arrêtez immédiatement de les utiliser et contactez le Service commercial ou le Service clientèle de Mindray. L'utilisation d'une sonde endommagée ou rayée entraîne un risque d'électrocution.**
7. **Afin d'éviter tout risque d'électrocution, NE permettez PAS au patient d'entrer en contact avec les parties sous tension de l'échographe ou d'autres appareils, les ports E/S des signaux par exemple.**
8. **N'utilisez pas de sondes autres que celles spécifiées par Mindray. Ces sondes pourraient endommager l'échographe et causer une défaillance grave, voire un incendie.**
9. **Évitez de soumettre les sondes à des chocs ou de les faire tomber. L'utilisation d'une sonde défectueuse peut provoquer une électrocution.**
10. **N'ouvrez ni le boîtier ni le panneau avant de l'échographe. Un court circuit ou une décharge électrique pourrait se produire lorsque les composants matériels sous tension sont à découvert.**
11. **N'utilisez PAS cet échographe en même temps qu'un autre équipement numérique, tel qu'un bistouri électrique à haute fréquence, un appareil thérapeutique à haute fréquence ou un défibrillateur, afin d'éviter tout risque d'électrocution du patient.**
12. **Lorsque vous déplacez l'échographe, vous devez d'abord fermer le clavier, puis débrancher l'échographe des autres appareils (sondes incluses) et de l'alimentation.**

13. **Les accessoires connectés aux interfaces analogiques et numériques doivent être conformes aux normes CEI correspondantes, par exemple la norme CEI 60950 relative à la sécurité des équipements informatiques et la norme CEI 60601-1 relative aux dispositifs médicaux. En outre, leur configuration doit répondre aux exigences de la norme CEI 60601-1-1. Il incombe à la personne qui connecte un périphérique au port d'entrée ou de sortie d'un signal et configure un système médical de s'assurer que le système est conforme aux exigences de la norme CEI 60601-1-1. En cas de questions concernant les exigences de cette norme, consultez le représentant local de Mindray.**
14. **Chez certaines personnes, l'usage prolongé et répété du clavier peut entraîner des troubles nerveux de la main ou du bras. Respectez les directives des services locaux de santé ou de sécurité, applicables à l'utilisation du clavier.**
15. **Lorsque vous utilisez des sondes intracavitaires, n'activez pas la sonde hors du corps du patient.**

**ATTENTION :**

1. **Précautions concernant les techniques d'examen clinique :**
 - Ce système doit uniquement être utilisé par du personnel médical qualifié.
 - Le présent manuel d'utilisation ne contient pas de description des techniques d'examen clinique. Le clinicien doit choisir les techniques d'examen appropriées en se basant sur la formation et l'expérience clinique de la spécialité.
2. **Dysfonctionnements dus aux ondes radioélectriques :**
 - L'utilisation d'un appareil émettant des ondes radio à proximité de l'échographe est susceptible d'interférer avec le fonctionnement de ce dernier. Ne placez pas et n'utilisez pas d'appareil générant des ondes radioélectriques (téléphones portables, émetteur-récepteur radio, jouets téléguidés, etc.) à l'intérieur de la salle où l'échographe est installé.
 - Si une personne utilise un appareil générateur d'ondes radio à proximité de l'échographe, demandez-lui de l'éteindre immédiatement.

- 3. Précautions concernant le déplacement de l'échographe :**
 - Lorsque vous déplacez le chariot mobile avec l'échographe, bloquez tous les objets qui se trouvent sur le chariot afin d'éviter qu'ils ne tombent. Ou alors séparez l'échographe du chariot mobile et déplacez-les individuellement.
Si vous devez monter ou descendre une rampe d'escaliers avec le chariot mobile et l'échographe, séparez-les d'abord puis transportez-les individuellement.
 - Tout objet placé sur le moniteur pourrait tomber et occasionner des blessures en cas de déplacement.
 - Attachez et bloquez fermement tout périphérique avant de déplacer l'échographe. Un périphérique mal fixé risque de tomber et de blesser les personnes présentes.
- 4. Veillez à NE PAS soumettre l'échographe à de fortes vibrations durant le transport, au risque de l'endommager.**
- 5. Ne connectez pas l'échographe à des prises d'alimentation dont les disjoncteurs et les fusibles appartiennent à un circuit électrique alimentant d'autres appareils tels que des systèmes de réanimation. En cas de dysfonctionnement du système provoquant une surtension ou un courant instantané à la mise sous tension, les disjoncteurs et les fusibles du circuit d'alimentation du bâtiment sont susceptibles de se déclencher.**
- 6. Veillez à maintenir l'échographe dans un endroit sec. Afin d'éviter la formation de condensation ou de gouttes d'eau susceptibles de générer des courts-circuits et créer un risque d'électrocution, ne le faites pas passer rapidement d'un endroit froid à un endroit chaud.**
- 7. Le déclenchement du circuit de protection indique que l'échographe ou un périphérique n'a pas été fermé correctement et que l'échographe est instable. Dans ce cas, vous ne pouvez pas procéder aux réparations. Contactez un représentant du Service commercial ou du Service clientèle de Mindray.**
- 8. Une échographie normale ne présente aucun risque de brûlures dues à une température élevée. Il est possible que la température de la surface de la sonde soit supérieure à la température corporelle du patient, cela dépend de la température ambiante et des combinaisons de types d'examen. N'appliquez pas la sonde trop longtemps sur la même zone anatomique du patient. Appliquez la sonde uniquement pendant le temps nécessaire au diagnostic.**

- 9. L'échographe et ses accessoires ne sont ni désinfectés ni stérilisés avant leur livraison. La responsabilité du nettoyage et de la désinfection des sondes ainsi que la stérilisation des supports de biopsie selon les instructions données dans les manuels incombe à l'opérateur, et ce avant toute utilisation de l'appareil. Toutes les pièces doivent être soigneusement traitées afin d'éliminer complètement tous les résidus chimiques nocifs pour les patients ou susceptibles d'endommager les accessoires.**
- 10. Il est nécessaire d'appuyer sur [Fin d'exam] pour interrompre l'exploration en cours et effacer le champ Informations patient actuel. Cette précaution permet d'éviter une éventuelle confusion entre les nouvelles données et celles du patient précédent.**
- 11. NE branchez/débranchez PAS le cordon d'alimentation de l'échographe ou de ses accessoires (une imprimante par exemple) avant de les avoir mis hors tension. Cela pourrait endommager l'échographe et ses accessoires ou provoquer une électrocution.**
- 12. En cas de mise hors tension inadéquate du système en cours de fonctionnement, vous pouvez endommager les données enregistrées sur le disque dur ou provoquer une défaillance du système.**
- 13. N'utilisez pas l'échographe pour examiner un fœtus pendant une période prolongée.**
- 14. N'utilisez pas un périphérique mémoire USB (mémoire flash USB, disque dur amovible, par exemple) contenant des données non fiables, au risque d'endommager le système.**
- 15. Il est recommandé d'utiliser uniquement les périphériques vidéo indiqués dans le présent manuel.**
- 16. N'utilisez aucun gel, désinfectant, sonde, couvre-sonde ou guide-aiguille non compatible avec l'échographe.**
- 17. Lisez avec attention la section relative au principe de sortie sonore de ce manuel avant d'utiliser l'échographe dans le cadre d'examens cliniques.**
- 18. Veillez à utiliser un gel échographique conforme aux réglementations locales en vigueur.**

- REMARQUE :**
1. N'utilisez PAS l'échographe à proximité de champs électromagnétiques puissants (par exemple, un transformateur) susceptibles de nuire aux performances de l'appareil.
 2. N'utilisez PAS l'échographe à proximité d'une source de rayonnement haute fréquence susceptible de nuire aux performances de l'échographe ou même de provoquer un dysfonctionnement.
 3. Lors de l'utilisation ou de la mise en place de l'échographe, veillez à maintenir l'appareil sur une surface horizontale afin d'éviter tout déséquilibre.
 4. Pour éviter d'éventuels dommages matériels, N'utilisez PAS l'échographe dans les environnements suivants :
 - (1) emplacements exposés à la lumière solaire directe ;
 - (2) emplacements soumis à de brusques changements de température ;
 - (3) emplacements poussiéreux ;
 - (4) emplacements sujets à des vibrations ;
 - (5) emplacements proches d'un générateur de chaleur ;
 - (6) emplacements très humides.
 5. Ne mettez pas l'échographe sous tension immédiatement après l'avoir mis hors tension, patientez un instant. Si l'échographe est mis hors tension puis immédiatement sous tension, il risque de ne pas redémarrer correctement et de présenter un dysfonctionnement.
 6. Eliminez le gel échographique de la surface de la sonde lorsque l'examen est terminé. L'eau présente dans le gel pourrait pénétrer la lentille acoustique et nuire aux performances et à la sécurité de la sonde.
 7. Vous devez effectuer une sauvegarde du système sur un support de stockage externe sécurisé, en y incluant la configuration, les paramètres et les données patient. Les données mémorisées sur le disque dur peuvent être perdues à la suite d'une défaillance système, d'une erreur de manipulation ou d'un accident.
 8. N'appliquez aucune force sur le panneau de commande, au risque d'endommager l'échographe.
 9. Dans le cas où le système est utilisé dans une salle de petit volume, la température ambiante peut devenir excessive. Veillez à prévoir une ventilation adéquate et un libre échange d'air.
 10. Au moment du recyclage de cet échographe ou de l'un de ses composants, veuillez contacter le Service commercial ou le Service clientèle de Mindray. Mindray ne peut être tenue pour responsable de tout contenu du système ou de ses accessoires n'ayant pas été recyclés de manière adéquate. Mindray ne peut être tenue pour responsable de tout contenu du système ou de ses accessoires n'ayant pas été recyclés de manière adéquate.
 11. Les performances électriques et mécaniques peuvent subir des dégradations avec le temps (courant de fuite, déformation, usure...), de même que la sensibilité et la précision des images. Afin d'assurer un fonctionnement optimal du système, nous vous recommandons de souscrire un contrat de maintenance avec Mindray.

12. Veillez à ce que l'heure et la date de l'examen soient identiques à celles du système.
13. NE mettez PAS hors tension le système au cours d'une impression, d'un stockage de fichiers ou de l'exécution de toute autre opération, au risque d'interrompre le processus et de compromettre le résultat par la perte ou la corruption des données.
14. L'échographe doit être alimenté par batterie lorsque l'intégrité et la fiabilité de la mise à la terre de l'alimentation externe ne sont pas déterminées.
15. Le fusible remplaçable se trouve à l'intérieur du châssis. Pour toute opération de remplacement, faites appel uniquement aux ingénieurs d'entretien Mindray ou aux ingénieurs agréés par Mindray.

Lors de l'utilisation des sondes, veuillez lire attentivement les consignes de sécurité qui suivent afin de garantir la sécurité des patients et de l'opérateur.

 **AVERTISSEMENT :**

1. **La sonde échographique est prévue pour être utilisée uniquement avec l'échographe spécifié. Pour sélectionner la sonde appropriée, reportez-vous à la section "2.5.2 Sondes disponibles".**
2. **La sonde échographique doit uniquement être utilisée par du personnel qualifié.**
3. **Vérifiez l'état de la sonde et du câble avant et après chaque examen. Une sonde défectueuse peut entraîner un risque d'électrocution.**
4. **Veillez à ce que la sonde ne subisse aucun choc. Une sonde défectueuse peut provoquer l'électrocution du patient.**
5. **Ne démontez pas la sonde afin d'éviter tout risque d'électrocution.**
6. **Le connecteur de la sonde n'étant pas étanche, ne l'immergez jamais dans un liquide tel que de l'eau ou du désinfectant, au risque de provoquer une électrocution ou un dysfonctionnement.**
7. **Avant tout examen intracavité ou biopsie, veillez à placer un couvre-sonde sur la sonde.**

 **ATTENTION :**

1. **Vous devez porter des gants stériles lorsque vous utilisez la sonde, afin d'éviter toute infection.**
2. **Veillez à utiliser du gel échographique. Veillez à utiliser un gel échographique conforme aux réglementations locales en vigueur. Manipulez le gel échographique avec précaution de manière à éviter qu'il ne devienne source d'infection.**
3. **En mode de diagnostic échographique normal, il n'y a aucun risque de brûlure. Toutefois, appliquer la sonde trop longtemps sur la même zone anatomique du patient peut provoquer une brûlure.**

4. **N'utilisez pas l'étui de transport pour conserver la sonde. L'étui pourrait devenir source d'infection.**
5. **Lors de l'utilisation de l'échographe, il est recommandé d'appliquer le principe ALARA (valeur la plus faible qu'il soit raisonnablement possible d'atteindre). Appliquez la puissance sonore minimale permettant d'obtenir des images de qualité.**
6. **La sonde et ses accessoires ne sont ni désinfectés ni stérilisés avant leur livraison. Stérilisez (ou désinfectez abondamment) ces éléments avant toute utilisation.**
7. **Les composants jetables sont conditionnés dans des emballages stériles et sont à usage unique. Ne les utilisez pas si l'emballage semble détérioré ou si la date d'expiration est dépassée. Veillez à utiliser des composants jetables conformes aux réglementations locales en vigueur.**
8. **Utilisez la solution de désinfection ou de stérilisation recommandée dans ce Manuel d'utilisation. Mindray ne sera pas tenue pour responsable des dommages découlant de l'utilisation d'autres solutions. Pour toute question, veuillez contacter le Service commercial ou le Service clientèle de Mindray.**
9. **Le couvre-sonde contient du caoutchouc naturel qui peut provoquer des réactions allergiques chez certaines personnes.**
10. **N'utilisez pas de préservatifs pré lubrifiés comme couvre-sonde. Le lubrifiant peut être incompatible avec le matériau du capteur et peut créer des dommages.**
11. **Le capteur peut être endommagé si du gel ou un détergent inapproprié est utilisé :**
n'immergez pas ou ne saturez pas les capteurs dans des solutions contenant de l'alcool, du chlore, des composés de chlorure d'ammonium, de l'acétone ou du formaldéhyde.
Evitez le contact avec des solutions ou des gels de couplage contenant de l'huile minérale ou de la lanoline.

- REMARQUE :**
1. Pour un fonctionnement optimal de la sonde, veuillez lire les précautions suivantes :
 - Nettoyez et désinfectez la sonde avant et après chaque examen.
 - Une fois l'examen terminé, essuyez soigneusement le gel échographique. Sinon, ce dernier pourrait se solidifier et altérer la qualité de l'image.

2. Conditions ambiantes :

Afin d'éviter tout endommagement de la sonde, ne l'exposez pas aux conditions suivantes :

- Lumière directe du soleil ou rayons X
- Changements brusques de température
- Poussière
- Vibrations excessives
- Générateurs de chaleur

Utilisez les sondes dans les conditions ambiantes suivantes :

- Température ambiante : 0 °C à 40 °C
- Humidité relative 30 % à 85 % (sans condensation)
- Pression atmosphérique 700 hPa à 1 060 hPa

3. Des désinfections répétées peuvent endommager la sonde ; vérifiez régulièrement les performances de cette dernière.

REMARQUE : 1. La définition ci-dessous de l'étiquette DEEE est applicable aux Etats membres de l'UE uniquement : l'utilisation de ce symbole indique que le système considéré ne doit pas être traité comme un déchet ménager. En assurant une mise au rebut adéquate du système, vous contribuerez à la prévention des conséquences néfastes potentielles pour l'environnement et la santé publique. Pour des informations plus détaillées sur le retour et le recyclage de ce système, veuillez consulter le distributeur auprès duquel vous l'avez acquis.



2. En ce qui concerne ce système, il est possible que l'étiquette soit apposée uniquement sur l'unité principale.

1.5 Latex

Lors du choix d'un couvre-sonde, nous vous recommandons de contacter directement la société CIVCO pour obtenir des informations sur les couvre-sondes (composition, prix de vente, échantillons, distribution locale, etc.). Coordonnées de la société CIVCO :


CIVCO Medical Instruments

Tél. : 1-800-445-6741

www.civco.com


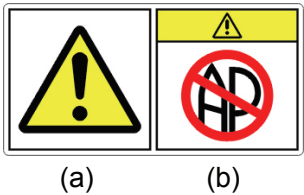


⚠ AVERTISSEMENT : Les réactions allergiques au latex (caoutchouc naturel) chez les patients sensibles peuvent aller d'une légère irritation cutanée au choc anaphylactique mortel et peuvent inclure notamment : difficultés respiratoires (sibilance), vertiges, état de choc, œdème facial, urticaire, éternuements et prurit oculaire. Consultez le texte de l'alerte médicale de la FDA sur les produits contenant du latex : "Allergic Reactions to Latex-containing Medical Devices" (Réactions allergiques aux appareils médicaux contenant du latex), publiée le 29 mars 1991.

1.6 Étiquettes de mise en garde

Les étiquettes de mise en garde sont apposées sur l'échographe : elles sont destinées à attirer votre attention sur des risques potentiels. Le symbole  sur les étiquettes de mise en garde indique une consigne de sécurité.

Les étiquettes de mise en garde portent les mêmes termes de signalisation que ceux utilisés dans le Manuel d'utilisation. Nous vous recommandons de le lire avec attention préalablement à l'utilisation du système.

Vous trouverez ci-dessous le nom, l'apparence et la signification de chaque étiquette de mise en garde :

N°	Étiquettes de mise en garde	Signification
1		Avant d'utiliser l'échographe, veillez à lire attentivement les informations pertinentes figurant dans ce manuel d'utilisation.
2	 (a) (b)	(a) Avertissement général, attention, risque de danger. (b) DANGER : L'utilisation du système en présence de produits anesthésiques inflammables entraîne un risque d'explosion.
3		Le boîtier de l'échographe ne doit pas être ouvert en raison du risque d'électrocution dû à la présence de courant à haute tension.
4	Les étiquettes ci-dessous sont disponibles lorsque l'échographe fonctionne avec le chariot mobile UMT-50.  (a) (b)	(a) NE vous asseyez PAS sur l'échographe. (b) NE poussez PAS le chariot lorsque les roulettes sont verrouillées.

2 Présentation de l'échographe

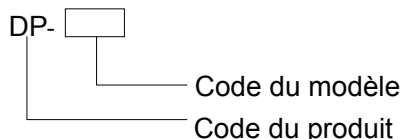
2.1 Indications

L'Echographe numérique peut être utilisé sur les adultes, les femmes enceintes, les enfants et les nouveau-nés. Il est conçu pour les examens gynécologiques, obstétriques, abdominaux, pédiatriques, des petits organes, céphaliques, crâniens, musculosquelettiques, cardiaques, vasculaires, urologiques, orthopédiques et neurologiques.

2.2 Contre-indication

Néant.

2.3 Codes du produit et du modèle



REMARQUE : Les fonctions décrites dans le Manuel d'utilisation peuvent varier en fonction du système spécifique que vous avez acquis.

2.4 Caractéristiques techniques du produit

2.4.1 Mode d'imagerie

Mode B	B
Mode M	M

2.4.2 Alimentation électrique

Tension	100-240 V~
Fréquence	50/60 Hz
Alimentation en entrée	1,5-0,8 A
Fusible	T3.15AH 250 V~

2.4.3 Conditions ambiantes

	Conditions de fonctionnement	Conditions de transport et stockage
Température ambiante	0 °C~40 °C	-20 °C~55 °C
Humidité relative	30%~85 % (sans condensation)	30%~95 % (sans condensation)
Pression atmosphérique	700 hPa~1 060 hPa	700 hPa~1 060 hPa



AVERTISSEMENT : N'utilisez pas cet échographe dans des conditions autres que celles spécifiées.

2.4.4 Taille et poids

- Taille : 190 mm × 415 mm × 378 mm (Profondeur × Poids × Hauteur)
- Poids net : 8,6 kg (batterie et module CA/CC inclus)

2.5 Configuration du système

2.5.1 Configuration standard

- Unité centrale
- Accessoires
 - Manuel d'utilisation
 - Gel échographique
 - Cordon d'alimentation
 - Transparent pour commandes multilingues
 - Porte-sonde

2.5.2 Sondes disponibles

N°	Modèle de sonde	Catégorie	Indications	Application
1.	35C50EA	Convexe	Examens gynécologiques, obstétriques, pédiatriques, abdominaux, vasculaires, urologiques	Surface de la peau
2.	65C15EA	Convexe	Examens abdominaux, pédiatriques, céphaliques, crâniens, cardiaques	Surface de la peau
3.	65EC10EA	Convexe	Examens gynécologiques, obstétriques, pédiatriques, urologiques, céphaliques	Transvaginale Transrectale
4.	65EB10EA	Convexe	Urolog.	Transrectale
5.	75L38EA	Linéaire	Examens pédiatriques, des petits organes, musculosquelettiques, vasculaires, orthopédiques, neurologiques	Surface de la peau

N°	Modèle de sonde	Catégorie	Indications	Application
6.	75L53EA	Linéaire	Examens pédiatriques, des petits organes, musculosquelettiques, vasculaires, orthopédiques, neurologiques	Surface de la peau
7.	10L24EA	Linéaire	Examens des petits organes, musculosquelettiques, vasculaires, neurologiques	Surface de la peau

Pour les biopsies, certaines sondes sont associées aux guide-aiguilles. Les sondes disponibles et les guide-aiguilles correspondants sont énumérés ci-dessous :

Modèle de sonde	Modèle de guide-aiguille	Angle/profondeur de la biopsie ($\pm 1^\circ$)	Aiguille de biopsie applicable
35C50EA	NGB-001 Métal/aiguille détachable ; métal/aiguille non détachable	25°, 35°, 45°	13G, 15G, 16G, 18G, 20G
75L38EA	NGB-002 (métal/aiguille non détachable)	40°, 50°, 60°	13G, 15G, 16G, 18G, 20G
65EC10EA	NGB-004 (métal/aiguille non détachable)	/	16G, 17G, 18G
65EB10EA			
65C15EA	NGB-005 (métal/aiguille non détachable)	12.7°, 24.2°	13G, 15G, 16G, 18G, 20G
75L53EA	NGB-007 Plastique/aiguille détachable ; Métal/aiguille détachable	40°, 50°, 60°	Métal : 14G, 16G, 18G, 20G, 22G Plastique : 13G, 15G, 16G, 18G, 20G
10L24EA	NGB-016 Métal/aiguille détachable	30°, 40°, 50°	14G, 16G, 18G, 20G, 22G

2.5.3 Options

N°	Élément
1	Module iClear
2	Module IMT
3	Module DICOM de base (incluant : gestion des tâches, stockage DICOM, impression DICOM, confirmation de stockage DICOM, stockage sur supports DICOM [DICOMDIR compris], etc.)
4	Module Liste de travail DICOM (nécessite le module des fonctions DICOM de base configuré)

N°	Élément
5	Lecteur DVD R/W : Modèle : SE-S224 (port USB)
6	Pédale
7	Bloc-piles (LI34I002A)
8	Chariot mobile (UMT-50)
9	Guide-aiguille
10	Mallette



2.5.4 Périphériques pris en charge


N°	Élément	Modèle
1.	Imprimante graphique/texte	HP DeskJet 1280 HP Laserjet CM1015 HP Officejet 6000 HP Officejet J3608 Tout-en-un
2.	Imprimante vidéo couleur	Sony UP-20 MITSUBISHI CP910E HP Photosmart plus B210A
3.	Imprimante vidéo noir et blanc	SONY UP-897MD MITSUBISHI P93W-Z
4.	Lecteur DVD R/W externe :	SE-S224
5.	Périphérique de stockage USB amovible	
6.	Pédale	



AVERTISSEMENT : Cet échographe est conforme à la norme CEI 60601-1-2: 2007 et ses émissions RF satisfont les critères de la norme CISPR 11, classe B. Dans un environnement domestique, il incombe à l'acquéreur ou à l'utilisateur de s'assurer que l'échographe est connecté à des périphériques de classe B au risque de créer des interférences radio. Dans le cas contraire, l'acquéreur ou l'utilisateur de l'échographe pourrait être tenu de prendre les mesures adéquates.

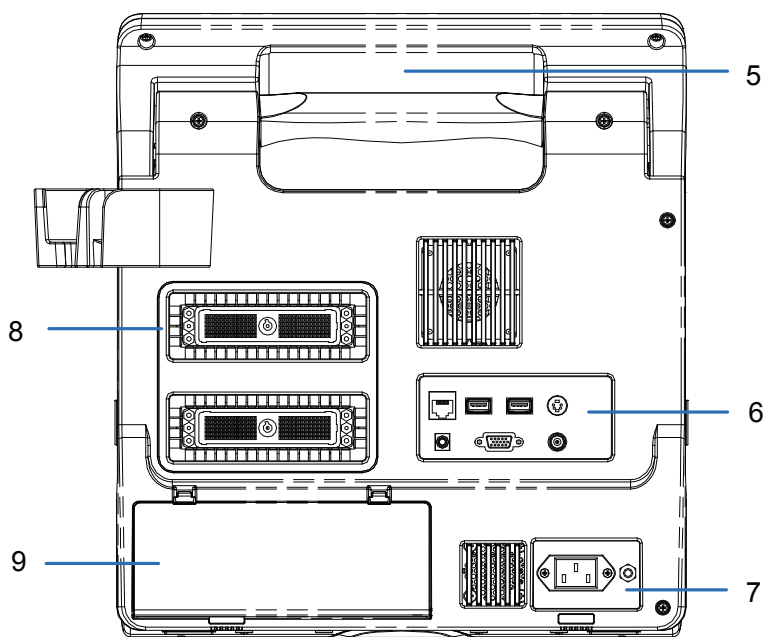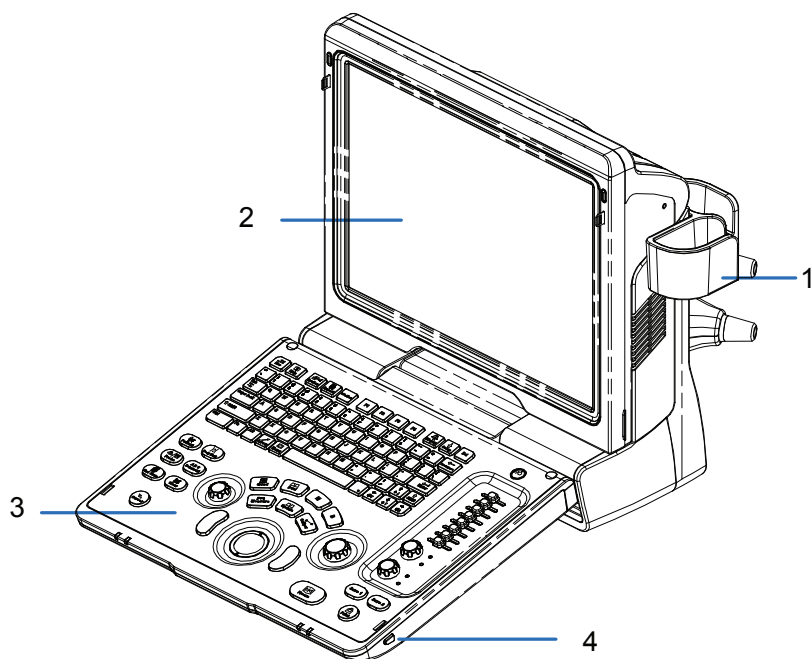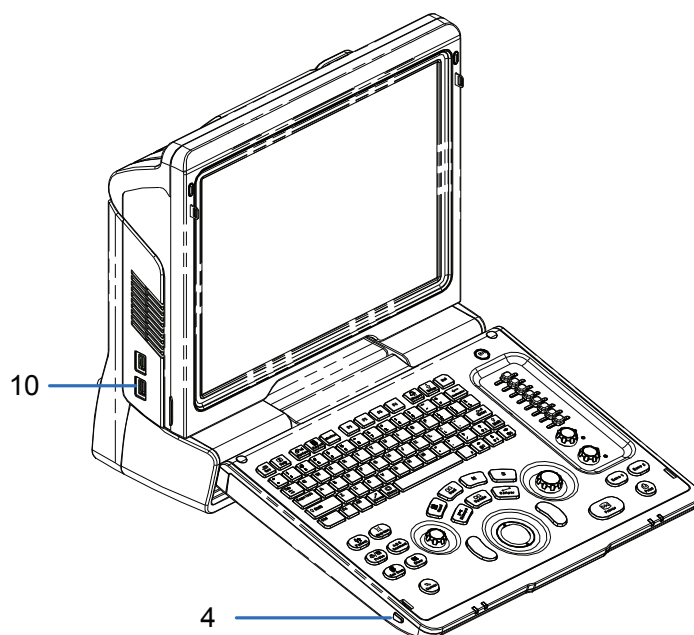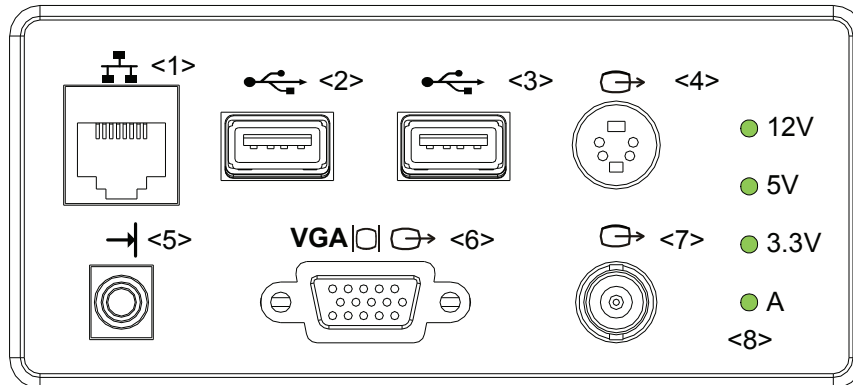
2.6 Présentation de chaque composant




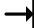
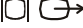





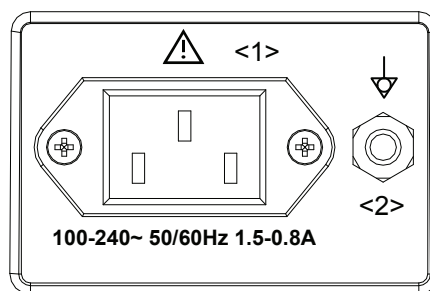
N°	Nom	Fonction
1	Porte-sonde	Permet de positionner la sonde
2	Ecran LCD	Affiche les images et les paramètres pendant l'exploration (angle d'inclinaison réglable)
3	Panneau de commande	Reportez-vous à la section 2.6.3 Panneau de commande.
4	Bouton de verrouillage (x2)	Appuyez sur ce bouton pour déverrouiller le panneau de commande lorsqu'il est fermé
5	Poignée	Permet de transporter la machine
6	Panneau E/S	Panneau d'interface utilisé pour les signaux d'entrée et de sortie. Reportez-vous à la section 2.6.1 Panneau E/S.
7	Panneau d'alimentation électrique	Panneau des ports électriques. Reportez-vous à la section 2.6.2 Panneau d'alimentation électrique.
8	Ports sondes	Permet de brancher la sonde
9	Couvercle de batterie	Permet de tenir la batterie
10	Ports USB	Permet de connecter des périphériques USB

2.6.1 PanneauE/S




N°	Symbole	Fonction
1		Port réseau
2		Ports USB
3		
4		Sortie vidéo à composantes séparées, connexion de l'imprimante vidéo ou de l'écran LCD
5		Port de commande à distance
6	VGA 	Sortie des signaux VGA
7		Sortie vidéo composite
8	/	Témoin d'alimentation

2.6.2 Panneau d'alimentation électrique



N°	Nom	Fonction
1	Prise secteur	Prise secteur c.a.
2	Borne équipotentielle	Utilisée pour la connexion équipotentielle servant à équilibrer les potentiels de terre entre l'échographe et les autres appareils électriques.

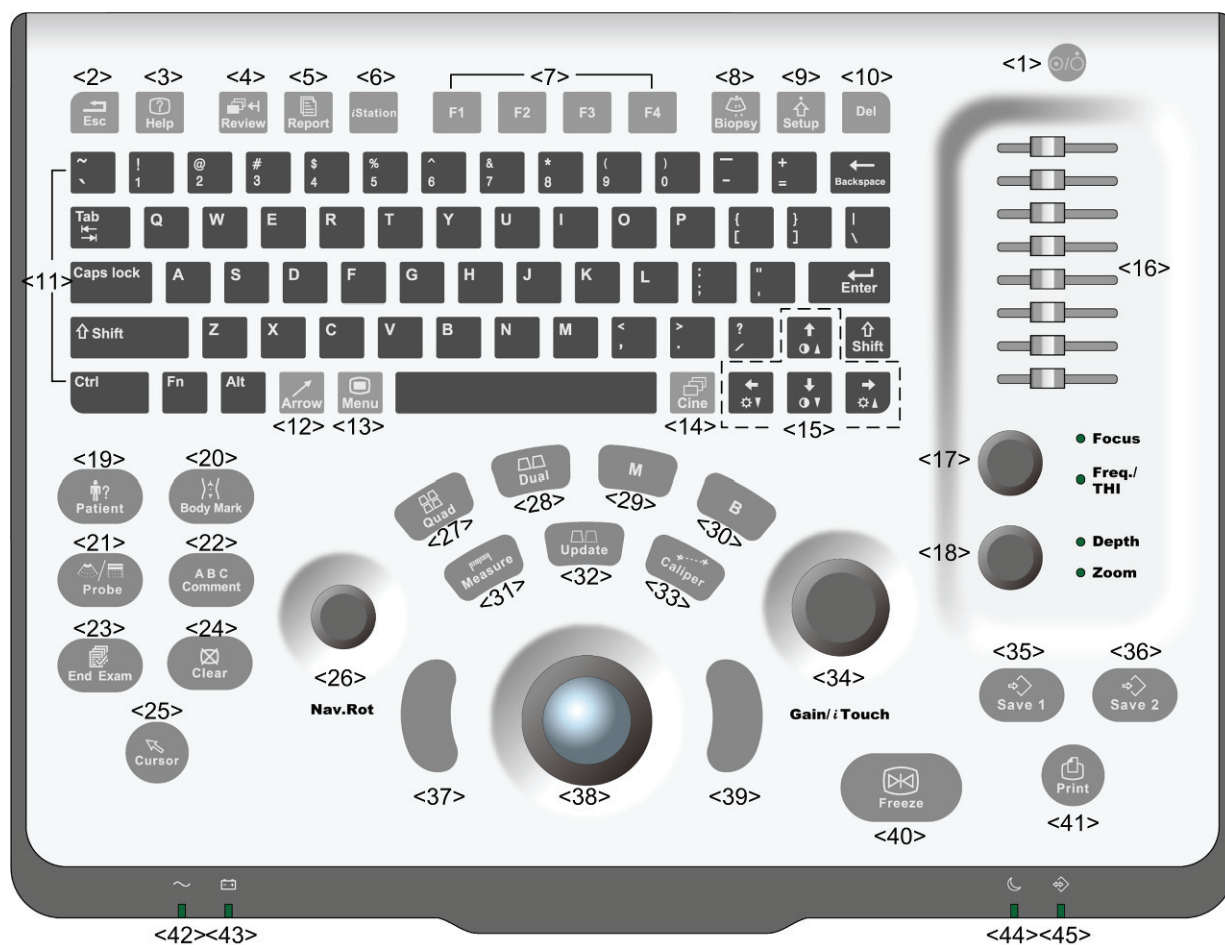2.6.3 Panneau de commande








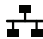












N°	Nom	Description	Fonction
1	/	Power button	Eteint lorsque le système est éteint ; Vert : lorsque le système est sous tension après avoir appuyé sur ce bouton ; Orange : lorsque le système est en mode veille.
2	Esc	Exit	Appuyez sur cette touche pour quitter l'état actuel et revenir au précédent.
3	Help	/	Appuyez pour ouvrir ou fermer les documents d'aide annexes.
4	Review	/	Appuyez pour revoir les images enregistrées.
5	Report	/	Appuyez pour ouvrir ou fermer les rapports de diagnostic.
6	iStation	/	Appuyez sur cette touche pour accéder au système de gestion des informations patient.
7	F1~F4	User-defined key	Vous pouvez affecter une fonction à la touche.
8	Biopsy	/	Appuyez pour afficher ou masquer la ligne de guide-aiguille de biopsie.
9	Setup	/	Appuyez pour ouvrir/fermer le menu de configuration.

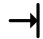
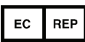

N°	Nom	Description	Fonction
10	Del	/	Appuyez pour supprimer le commentaire, etc.
11	/	Alphanumeric keys	Mêmes touches que celles d'un PC
12	Arrow	/	Appuyez sur cette touche pour activer ou désactiver le mode commentaire flèche.
13	Menu	Main menu	Appuyez pour afficher ou masquer un menu de paramètre de mode spécifique.
14	Cine	Cine Review	Appuyez pour activer ou désactiver le mode revue ciné.
15	/	Direction key	Appuyez en combinaison avec la touche <Fn> pour régler la luminosité ou le contraste de l'écran LCD.
16	TGC	/	Déplacez les curseurs pour régler la compensation du gain de temps.
17	Focus Freq./THI	/	Appuyez : pour basculer entre Focus et Freq/THI ; Tournez : pour régler le paramètre correspondant
18	Depth Zoom	/	Appuyez : pour basculer entre Profondeur et Zoom ; Tournez : pour régler le paramètre correspondant
19	Patient	Patient Information	Appuyez pour ouvrir/quitter l'écran des informations patient.
20	Body Mark	/	Appuyez pour activer ou désactiver le mode repère corporel.
21	Probe	Probe switch	Appuyez pour basculer entre Sonde et Type d'examen
22	Comment	/	Appuyez pour activer ou désactiver le mode commentaire de caractère.
23	End Exam	/	Appuyez pour terminer un examen.
24	Clear	/	Appuyez pour effacer les commentaires ou les repères de mesure à l'écran.
25	Cursor	/	Appuyez sur cette touche pour afficher le curseur.
26	Nav.Rot	/	Bouton multifonction
27	Quad	Quad-split screen	Appuyez pour activer le mode Quad à partir d'un mode différent ; En mode Quad, appuyez sur cette touche pour passer d'une fenêtre à l'autre.
28	Dual	Dual-split screen	Appuyez pour activer le mode d'affichage double à partir d'un mode d'affichage non double ; En mode d'affichage double, appuyez sur cette touche pour passer d'une fenêtre à l'autre.
29	M	/	Appuyez pour activer le mode M.
30	B	/	Appuyez pour passer en mode B
31	Measure	/	Appuyez pour activer ou désactiver les mesures d'application

N°	Nom	Description	Fonction
32	Update	/	Mode mesure : appuyez pour basculer entre le point final fixe et le point final mobile du repère de mesure ; Mode d'imagerie multiple : appuyez pour modifier la fenêtre actuellement active.
33	Caliper	/	Appuyez pour activer ou désactiver les mesures générales
34	Gain/ iTouch	/	Tournez : pour régler le gain B ou M Appuyez : pour activer ou désactiver iTouch.
35	Save 1	/	Appuyez sur cette touche pour enregistrer ; touche définie par l'utilisateur
36	Save 2	/	Appuyez sur cette touche pour enregistrer ; touche définie par l'utilisateur
37	Set	/	Appuyez sur cette touche pour confirmer une opération : équivaut au bouton gauche d'une souris.
38	/	Trackball	Faites rouler la boule de commande pour déplacer le curseur.
39	Set	/	Appuyez sur cette touche pour confirmer une opération : équivaut au bouton gauche d'une souris.
40	Freeze	/	Appuyez sur cette touche pour figer ou libérer l'image.
41	Print	/	Appuyez sur cette touche pour imprimer ; touche définie par l'utilisateur.
42	/	Indicator 1	Indicateur CA Alimentation CA : témoin vert ; Alimentation batterie : témoin éteint.
43	/	Indicator 2	Témoin d'état de la batterie En charge : témoin orange Chargé : témoin vert Déchargement (électricité >20 %) : témoin vert Déchargement (électricité <20 %) : témoin clignotant orange Déchargement (électricité <5 %) : témoin clignotant rapide orange Non chargement/déchargement : témoin éteint
44	/	Indicator 3	Témoin du mode veille Standby (Veille) : témoin clignotant orange Autre état : témoin éteint
45	/	Indicator 4	Témoin d'état du disque dur Lecture/écriture : témoin clignotant vert Autre état : témoin éteint REMARQUE : NE déplacez PAS la machine lorsque un témoin vert clignote, au risque d'endommager le disque dur par de brusques secousses.

2.7 Symboles

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les symboles utilisés par l'échographe, ainsi qu'une explication de leur signification.

Symbole	Description
	Pièce appliquée de type BF
	Avertissement général, attention, risque de danger
	Tension dangereuse
	Equipotentialité
	Bouton d'alimentation
	Port réseau
	Ports USB
	Sortie vidéo
	Port de commande à distance
VGA  	Sortie des signaux VGA
	c.a. (courant alternatif)
	Témoin d'état de la batterie
	Témoin du mode veille
	Témoin du disque dur
	Port sonde A
	Port sonde B
	Numéro de série du produit

Symbole	Description
	Date de fabrication
	Représentant agréé pour la Communauté européenne.
	Ce produit porte le marquage CE conformément aux réglementations de la directive 93/42/CEE du Conseil relative aux dispositifs médicaux. Le nombre adjacent au marquage CE (0123) correspond au numéro de l'organisme notifié de l'UE ayant certifié la conformité aux critères de la directive.

3 Préparation de l'échographe

3.1 Déplacement et mise en place de l'échographe

Avant de déplacer l'échographe, veuillez lire attentivement les consignes de sécurité afin de garantir la sécurité de l'appareil et de l'opérateur.

1. Mettez l'appareil hors tension et débranchez le cordon d'alimentation.
2. Déconnectez tous les périphériques.
3. Placez l'échographe à l'endroit souhaité à l'aide de la poignée.
4. Laissez un dégagement minimum de 20 cm à l'arrière et de chaque côté de l'échographe.

 ATTENTION : Laissez suffisamment d'espace libre à l'arrière et de chaque côté de l'échographe afin d'éviter tout risque de défaillance due à une forte augmentation de la température de fonctionnement.

3.2 Alimentation électrique

L'échographe ne fonctionne normalement que s'il est branché à une alimentation électrique externe ou si la capacité des batteries est suffisante.

3.2.1 Branchement à l'alimentation externe

Un cordon trifilaire permet de connecter le système à l'alimentation externe.

L'installation électrique d'alimentation externe doit satisfaire les exigences suivantes :

Tension : 100-240V~

Fréquence : 50/60 Hz

Courant d'entrée : 1,5- 0,8 A

3.2.2 Alimentation par batterie

Lorsqu'il est branché à l'alimentation externe, l'échographe est alimenté par cette dernière et la pile ion-lithium qu'il contient est en charge. Si vous le débranchez de l'alimentation externe, l'échographe est alimenté par les piles ion-lithium.

Reportez-vous au chapitre "13 Batterie" pour de plus amples informations sur les précautions et le fonctionnement.

3.3 Mise sous tension/hors tension de l'échographe

3.3.1 Mise sous tension

⚠ ATTENTION : Une maintenance et des vérifications quotidiennes sont nécessaires pour assurer l'efficacité et la sécurité de fonctionnement du système. Si l'échographe commence à ne pas fonctionner correctement, cessez immédiatement l'exploration. S'il continue de dysfonctionner, arrêtez complètement le système et contactez un représentant du Service commercial ou du Service clientèle de Mindray. En continuant d'utiliser l'échographe en état persistant de dysfonctionnement, vous risquez de blesser les patients et d'endommager l'appareil.

■ Vérifications avant la mise sous tension

Pour vérifier l'échographe avant la mise sous tension :

N°	Élément à vérifier
<1>	La température, l'humidité relative et la pression atmosphérique doivent satisfaire les conditions de fonctionnement. Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la section "2.4.3 Conditions ambiantes".
<2>	Vérifiez l'absence de condensation.
<3>	Vous ne devez trouver aucune trace de déformation, de dommage ou de salissure sur l'échographe ou les périphériques. En présence de salissures, veuillez vous reporter à la section "16.1.1 Nettoyage de l'échographe" pour procéder au nettoyage.
<4>	Vérifiez qu'aucune vis ne soit desserrée sur l'écran LCD ou sur le panneau de commande.
<5>	Vérifiez le bon état des câbles (p. ex., le cordon d'alimentation). Les connexions doivent toujours être bien serrées.
<6>	Les sondes et leurs câbles ne doivent comporter ni dommage ni salissure. Reportez-vous à la section "12.1.5 Nettoyage et désinfection des sondes" pour plus d'informations sur le nettoyage et la désinfection des sondes.
<7>	Aucun objet ne doit être attaché ou apposé sur le panneau de commande.
<8>	Veillez à ce que toutes les connexions soient en bon état et dégagées de tout objet susceptible de les bloquer. Vérifiez l'absence d'obstacle aux alentours immédiats de l'échographe et de ses orifices de ventilation.
<9>	Les sondes doivent être nettoyées et désinfectées.
<10>	L'ensemble du champ et de l'environnement doit être propre.

■ Vérifications après la mise sous tension

Appuyez sur le bouton d'alimentation situé dans l'angle supérieur droit du panneau de commande.

Pour vérifier l'échographe après la mise sous tension, procédez comme suit :

N°	Élément à vérifier
<1>	Aucune odeur ni son anormal indiquant une possible surchauffe de l'échographe ne doit être détecté.
<2>	Aucun message d'erreur persistant ne doit s'afficher.
<3>	Aucun bruit évident ne doit être détecté ; aucun objet noir, discontinu ni aucune absence d'un objet ne doit être détecté dans les images en mode B.
<4>	Vérifiez que la température de surface de la sonde n'est pas anormalement élevée au cours de l'échographie.
<5>	Les touches et les boutons du panneau de commande doivent bien fonctionner.
<6>	Vérifiez que l'heure et la date de l'examen sont identiques à celles du système et qu'elles sont affichées correctement.

⚠ AVERTISSEMENT :

1. Si la sonde utilisée chauffe excessivement, il y a un risque de brûlure du patient.
2. La détection d'un dysfonctionnement quelconque indique que l'échographe est défectueux. Dans ce cas, arrêtez immédiatement l'échographe et contactez un représentant du Service commercial ou du Service clientèle de Mindray.

REMARQUE : Lorsque vous démarrez l'échographe ou que vous changez de sonde, l'appareil émet des sons similaires à des "cliquetis", cela est normal.

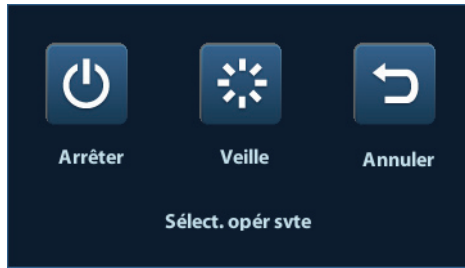
3.3.2 Mise hors tension

Vous devez suivre des procédures appropriées pour mettre l'appareil hors tension. A la suite d'une mise à niveau du logiciel ou lorsque le système est en panne, vous devez mettre hors tension le système et le redémarrer.

Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'échographe pendant une longue période, mettez-le hors tension puis déconnectez l'alimentation externe et mettez hors tension tous les périphériques connectés à l'échographe.

■ Mise hors tension normale

Appuyez légèrement une fois sur le bouton d'alimentation dans l'angle supérieur droit du panneau de commande. L'écran [Shutdown Confirm] (Confirmer arrêt) s'affiche. Voir l'illustration ci-dessous.



- Shut down (Arrêt) : pour mettre l'échographe hors tension normalement.
- Standby (Veille) : pour passer en mode veille.
- Annul. : pour annuler l'opération.
- Pour arrêter l'échographe directement si vous ne pouvez pas le faire correctement, procédez comme suit :

Enfoncez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant longtemps, l'échographe s'arrêtera sans afficher l'écran [Confirmer arrêt]. La procédure d'arrêt direct ci-dessus risque de détruire les données.

- REMARQUE :**
1. EVITEZ d'arrêter l'échographe directement. Les données peuvent être détruites.
 2. A la suite d'une mise à niveau du logiciel, arrêtez l'échographe en suivant la procédure normale (option Arrêt) pour garantir la mise à jour complète.

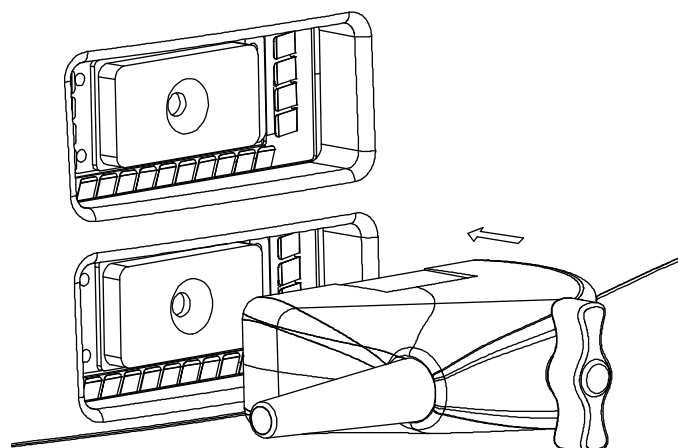
3.4 Connexion/déconnexion d'une sonde

- ATTENTION :**
1. Lorsque vous connectez ou déconnectez une sonde, rangez-la dans un emplacement approprié afin d'éviter qu'elle ne tombe et ne soit endommagée.
 2. Utilisez uniquement les sondes fournies par Mindray. Des sondes autres que celles spécifiées par Mindray risquent de provoquer des dommages ou un incendie.

3.4.1 Connexion d'une sonde


AVERTISSEMENT : Les sondes, les câbles et les connecteurs doivent être en bon état de fonctionnement et sans défauts superficiels apparents, fissures et craquelures, L'utilisation d'une sonde défectueuse peut entraîner un risque d'électrocution.

1. Assurez-vous que la manette de verrouillage de la sonde est verrouillée, ou déverrouillez-la en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la ramener à l'horizontale.
2. Insérez le connecteur de la sonde dans le port en veillant à ce que le câble de la sonde soit orienté vers la poignée.
3. Verrouillez la manette en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
4. Positionnez le câble avec soin afin d'éviter qu'il ne soit piétiné ou qu'il ne s'enchevêtre avec d'autres appareils. Veillez à ce que la tête de la sonde NE pende PAS dans le vide.



3.4.2 Déconnexion d'une sonde

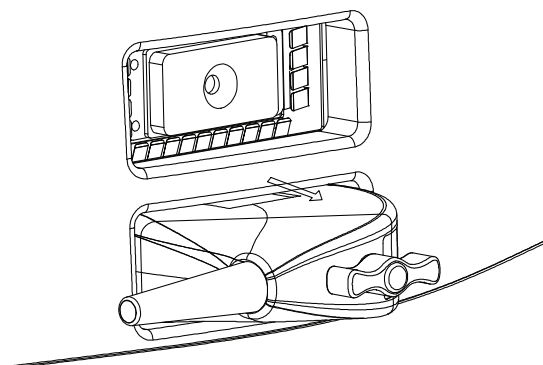1. Tournez la manette de verrouillage de la sonde dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour libérer le connecteur.
2. Tirez le connecteur tout droit.
3. Placez la sonde dans un endroit sûr.





3.5 Connexion de la pédale

Connectez la pédale à l'unité centrale via un port USB.

Définissez les fonctions de la pédale dans la page [Config tch]. Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la section "11.1.6 Config tch".

3.6 Connexion/déconnexion d'un périphérique de stockage USB

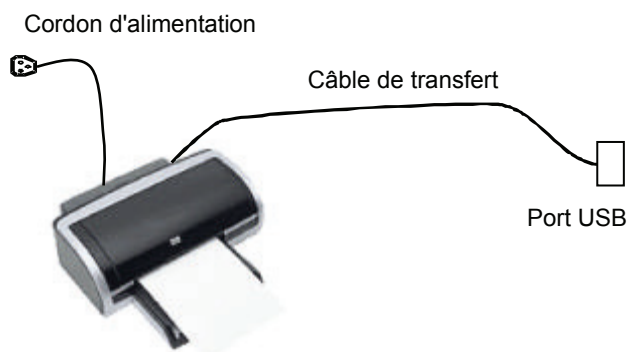
AVERTISSEMENT : NE retirez AUCUN périphérique de stockage USB directement, au risque d'endommager l'échographe ou le périphérique USB et/ou les données enregistrées sur le périphérique.

- Lors de la connexion d'un périphérique de stockage USB à l'échographe, le symbole  s'affiche dans le coin inférieur droit de l'écran.
- Pour retirer le périphérique de stockage USB : Cliquez sur le symbole  pour ouvrir l'écran [Retirer péri. USB]. Sélectionnez le périphérique à retirer. Cliquez sur [Prêt].


3.7 Imprimante graphique/texte

- Connexion d'une imprimante locale

Une imprimante graphique/texte est dotée, comme indiqué dans l'illustration ci-dessous, d'un cordon d'alimentation et d'un câble de transfert de données. Le cordon d'alimentation doit être directement branché sur une prise murale, comme il convient.



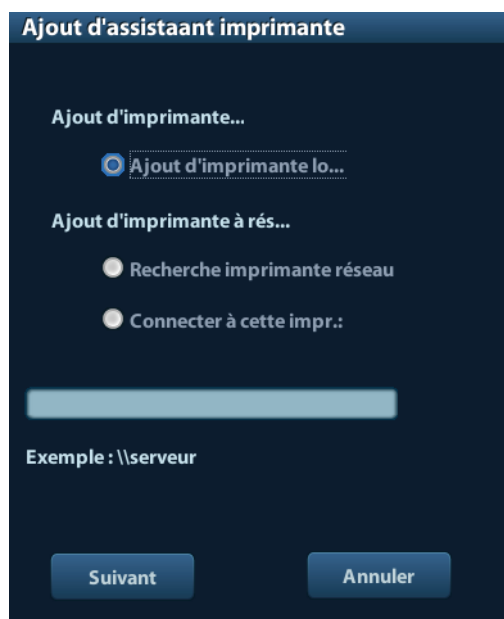1. Branchez le câble de transfert des données au port USB de l'échographe.
2. Branchez l'extrémité libre du cordon d'alimentation sur une prise compatible.
3. Mettez l'échographe et l'imprimante sous tension.
4. Installez le pilote de l'imprimante (les pilotes des imprimantes répertoriées à la section "2.5.4 Périphériques pris en charge" sont déjà installés) :
 - (1) Sélectionnez [Conf.]> [Prédéf. impr.], choisissez "Pilote imprim." puis cliquez sur [Aj. imprim.], comme indiqué dans la figure ci-dessous :



- (2) Sélectionnez "Aj. impr. locale" et cliquez sur [Suivant] pour accéder à l'écran qui vous permet de parcourir les pilotes ; sélectionnez le pilote souhaité et cliquez sur [Prêt] pour l'installer.
5. Sélectionnez l'imprimante dans la liste pour afficher les détails de cette imprimante dans le champ "Propriétés".
 6. Cliquez sur [Prêt] pour terminer l'installation.
- Ajouter une imprimante réseau
1. Le système étant connecté à un réseau local, ouvrez l'écran [Conf.]> [Prédéf. impr.]> [Pilote impr.].
 2. Cliquez sur [Aj. impr.] et sélectionnez le mode d'ajout d'une imprimante réseau.
 - Ajout d'une imprimante réseau
Sélectionnez "Recherche assist. imp. réseau" et cliquez sur [Suivant] pour rechercher l'imprimante ; sélectionnez le domaine et le serveur sur l'écran pour trouver l'imprimante.
 - Connexion à l'imprimante spécifiée
Sélectionnez "Connecter à cette impr.", puis saisissez l'adresse de l'imprimante dans le champ.
 3. Lorsque l'imprimante réseau est connectée, elle apparaît dans la liste.

Conseils : le fonctionnement de l'imprimante réseau repose sur l'environnement réseau configuré à l'hôpital. Consultez la personne responsable de la configuration du réseau en cas d'échec.

REMARQUE : Lorsque vous installez un pilote d'imprimante, vous devez indiquer le parcours d'installation désiré ; dans le cas contraire, la recherche peut prendre un certain temps.

■ Service d'impression

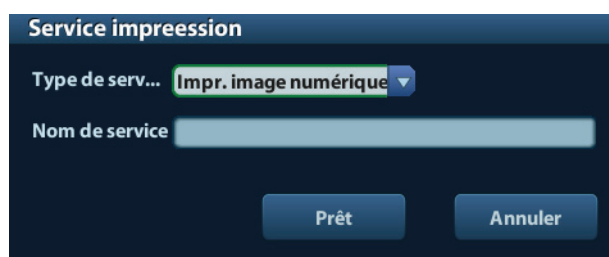
Vous pouvez utiliser une imprimante graphique/texte pour imprimer un rapport ou des images.

- Pour définir l'imprimante par défaut pour les rapports et ses attributs :
Sur l'écran "[Conf.]> [Prédéf. impr.]", sélectionnez le "Service d'impression", puis sélectionnez la colonne "Impr. rapport" dans la liste des services et définissez les options de la zone "Propriété".
- Impression de rapport :
Cliquez sur [Impr.] dans la boîte de dialogue du rapport pour l'imprimer. Vous pouvez également utiliser la touche définie par l'utilisateur (voir la section "11.1.6 Config tch" pour plus d'informations). Pour plus d'informations, reportez-vous aux manuels d'utilisation des imprimantes.

3.8 Imprimante vidéo numérique

■ Installation d'une imprimante locale

1. Placez l'imprimante dans un endroit approprié.
2. Connectez l'imprimante (port VIDEO IN) et l'échographe (port USB) à l'aide du câble de transfert des données.
3. Chargez un rouleau de papier et mettez l'échographe et l'imprimante sous tension.
4. Installez le pilote d'imprimante (même procédure que pour les imprimantes graphiques/texte ; veuillez vous reporter à la section "3.7 Imprimante graphique/texte" pour plus d'informations). Vous n'avez pas besoin d'installer de pilote pour les imprimantes répertoriées à la section "2.5.4 Périphériques pris en charge".
5. Ajoutez un service d'impression :
 - (1) Ouvrez [Conf.]-> [Prédéf. impr.]->[Service impr.].
 - (2) Cliquez sur [Aj. service] pour accéder à la page suivante.



- (3) Sélectionnez le type de service "Impr. image numér.", puis saisissez le nom du service.
- (4) Cliquez sur [Prêt] pour revenir à la page du service d'impression.
- (5) Définissez les options de la zone Propriété et cliquez sur [Enr.] pour enregistrer les réglages.

■ Impression d'image

Pour l'impression d'images DICOM, reportez-vous au chapitre "10 DICOM".

- Modification d'un service d'impression :
 - a) Sélectionnez dans la liste un service d'impression.
 - b) Sélectionnez le type d'imprimante dans la zone Propriété.
 - c) Définissez les attributs : format du papier, orientation, etc.
 - d) Cliquez sur [Prêt] pour confirmer.
- Impression d'image
 - Sélectionnez l'image à imprimer dans l'écran iStation ou Revoir et cliquez sur [Envoi] pour sélectionner l'imprimante.

Pour plus d'informations, reportez-vous aux manuels d'utilisation des imprimantes.

3.9 Imprimante vidéo analogique

1. Connectez l'imprimante (port d'ENTREE VIDEO) et l'échographe (port S-VIDEO sur le panneau E/S) à l'aide du câble d'interface.
2. Connectez le câble distant de l'imprimante au port distant de l'échographe.
3. Branchez le cordon d'alimentation à une prise d'alimentation électrique correctement mise à la terre.
4. Installez le pilote d'imprimante (même procédure que pour les imprimantes graphiques/texte ; veuillez vous reporter à la section "3.7 Imprimante graphique/texte" pour plus d'informations). Vous n'avez pas besoin d'installer de pilote pour les imprimantes répertoriées à la section "2.5.4 Périphériques pris en charge".
5. Ajoutez un service d'impression. Veuillez vous reporter à la section "3.8 Imprimante vidéo numérique".

3.10 DVD externe

1. Branchez le câble USB du graveur DVD au port USB de l'échographe (tout port USB disponible).
2. Branchez l'adaptateur d'alimentation du DVD à l'alimentation électrique.

3.11 Ecran initial et opérations élémentaires

3.11.1 Ecran initial



L'illustration ci-dessous représente les différentes sections de l'écran.

Logo	Nom de l'établissement hospitalier	Informations patient	N° enregistrement	Icône de figeage
	Opérateur		Heure de l'examen	
	Probe	Puissance sonore, paramètres IM/IT		
Zone de menu	Zone de l'image		Mode produit	
			Mode exam	
			Paramètres d'image	
Aperçu vignette et fenêtre zoom	Zone de revue ciné			
	Repère corporel et commentaire			
Zone vignettes des images enregistrées				
Zone d'informations d'aide			Icône d'état système	

■ Zone Informations

La zone Informations affiche le logo du fabricant, le nom de l'établissement hospitalier, la date et l'heure de l'examen, la puissance sonore et les paramètres IM/IT, l'icône de figeage, les informations patient, le modèle de sonde, le mode d'examen en cours, le numéro d'enregistrement, etc. Vous pouvez prédéfinir l'affichage de l'opérateur ou encore du sexe, de l'âge, de l'ID, du nom, etc. du patient via le chemin [Conf.]-> [Prédéf. syst.]-> [Général]. Pour plus d'informations sur la procédure de prédéfinition à suivre, reportez-vous à la section "11.1.2 Général".

- Logo du fabricant
Logo du fabricant, affiché dans le coin supérieur gauche de l'écran.
- Nom de l'établissement hospitalier
Affiche le nom de l'établissement hospitalier. Le nom de l'établissement hospitalier peut être défini via le chemin [Conf.] → [Prédéf syst.] → [Région].
- Heure de l'examen
Affiche l'heure et la date de l'examen. L'heure de l'examen peut être définie via le chemin [Conf.]-> [Prédéf. syst.]-> [Région]. Si l'image est figée, l'heure de l'examen l'est également.

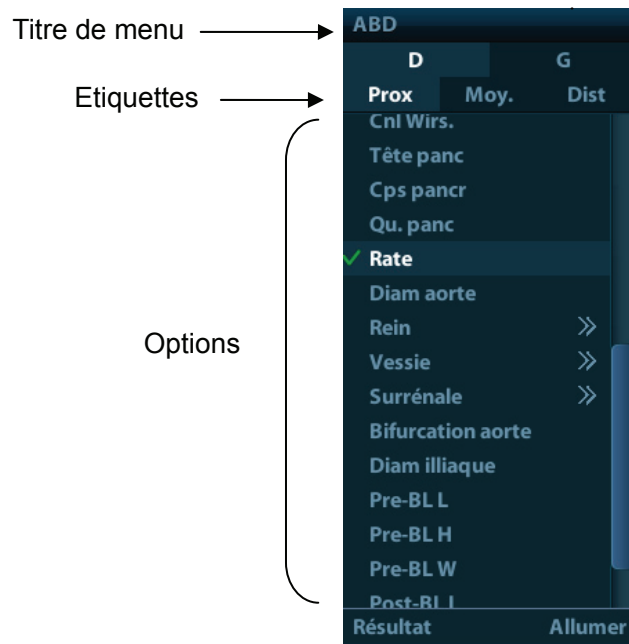
- Puissance sonore et paramètres IM/IT
Affiche la puissance sonore ainsi que les paramètres IM (index mécanique) et IT (index thermique).
- Icône de figeage 
L'icône de figeage  indique que l'image est figée.
- Informations patient
Affiche le nom du patient, son ID, son sexe et son âge, etc. Saisissez les informations patient dans l'écran "Info patient". Vous pouvez également importer les données patient enregistrées depuis iStation ou le serveur de liste de travail DICOM.
- Modèle de sonde
Affiche le modèle de sonde actuellement utilisé ou le modèle par défaut.
- Mode exam
Affiche le type d'examen actuellement utilisé, par exemple, Abdomen.
- Opérateur
Affiche le nom de l'opérateur. Cette information est saisie via l'écran [Info patient].
- N° enregistrement
Le numéro d'enregistrement indique le numéro d'examen utilisé dans le système d'information de l'hôpital. Il peut être importé via DICOM ou saisi manuellement.

■ Zone de menu

Le menu d'image, le menu de mesure, le menu de commentaire ou encore le menu de repère corporel sont concernés. Utilisez la boule de commande ou le bouton multifonction pour naviguer dans le menu.

Pour afficher ou masquer le menu d'image, cliquez sur la touche <Menu> du panneau de commande.

Cette zone se compose du titre et des options du menu. Voir la figure ci-dessous.



- Titre de menu
Affiche le nom du menu.
- Etiquettes
Etiquettes d'attribut de l'option.

➤ Options

Les options varient d'un menu à l'autre. Les options communes à plusieurs modes apparaissent comme des options universelles dans le mode en question. Les options relatives aux modes et aux mesures d'images peuvent être prédéfinies. Reportez-vous au chapitre "11 Configuration" pour plus d'informations.

➤ Retour au menu précédent

Cliquez sur [Revenir] pour quitter le sous-menu et revenir au menu précédent.

Vous pouvez aussi utiliser le bouton multifonction pour accéder au menu. Appuyez sur le bouton pour ouvrir le menu, tournez le bouton pour parcourir les options l'une après l'autre.


Selon les types d'option, le bouton multifonction permet d'exécuter les opérations suivantes :

- Pour une option ou une option facultative de commande : appuyez sur le bouton pour activer directement l'option.
- Pour une option de paramètre ou une option "activer/désactiver" : appuyez sur le bouton pour sélectionner l'option, puis tournez le bouton pour parcourir les valeurs disponibles ; appuyez de nouveau sur le bouton pour désélectionner l'option.
- Pour une option comportant un sous-menu : appuyez sur le bouton pour développer le sous-menu. Le curseur se positionne sur la première sous-option. Vous pouvez en même temps quitter le sous-menu pour revenir à l'option précédente en cliquant sur [Revenir] dans le sous-menu.
- Pour les options d'étiquette du menu : par exemple, les étiquettes "Droite" et "Gauche" du menu de mesure. Tournez le bouton multifonction pour parcourir les étiquettes et appuyez sur le bouton pour sélectionner l'étiquette.

■ Zone des paramètres

Affiche les paramètres d'image relatifs à la fenêtre active. Si plusieurs modes d'imagerie sont utilisés, l'échographe affiche les paramètres respectifs de chaque mode. Pour plus d'informations sur les paramètres affichés dans cette zone, veuillez vous reporter aux modes d'imagerie correspondants.

■ Zone de l'image

La zone de l'image affiche les images échographiques, le repère de la sonde (ou le repère d'activation de la fenêtre), le repère temporel (en mode M), les axes de coordonnées (profondeur, temps et vitesse/fréquence), la position focale (indiquée sur l'axe de profondeur par le symbole ) , les annotations, les repères corporels, les repères de mesure ainsi que la barre des échelles de gris.

■ Aperçu vignette et fenêtre zoom (image dans l'image)

En mode zoom, cette zone affiche la vignette d'une image entière avec un cadre rectangulaire qui surligne la zone actuellement agrandie. Cette fonctionnalité est connue sous le nom de Image dans l'image.

■ Zone d'informations d'aide

La zone d'informations d'aide affiche les différentes informations d'aide ou la barre de progression relatives au mode actuel.





L'échographe propose en outre une aide pour chaque touche. Appuyez sur [Help] pour activer l'aide relative aux touches. Le curseur se transforme en flèche avec un point d'interrogation. Appuyez sur n'importe quelle touche du panneau de commande pour afficher les informations relatives à la touche sélectionnée. L'aide relative aux touches est désactivée.

Conseils : en ce qui concerne les informations d'aide, notez que "BC" correspond à "boule de commande", et "bouton" à "bouton multifonction".

■ Zone vignettes des images enregistrées

Affiche les vignettes des images enregistrées pour le patient actuellement sous examen.

■ Zone de gestion des images


- Défilement des pages : quand il y a plusieurs pages d'images enregistrées, vous pouvez les parcourir en sélectionnant  (pour accéder à la page suivante) ou  (pour accéder à la page précédente).
- Suppr. : sélectionnez une vignette, puis cliquez sur  pour la supprimer.
- Envoi : sélectionnez une vignette, puis cliquez sur  pour l'envoyer à d'autres périphériques.

■ Icône d'état système

Cette zone affiche les icônes système pertinentes : périphérique de stockage USB, imprimante, réseau, saisie chinois / anglais et l'heure système actuelle, etc.

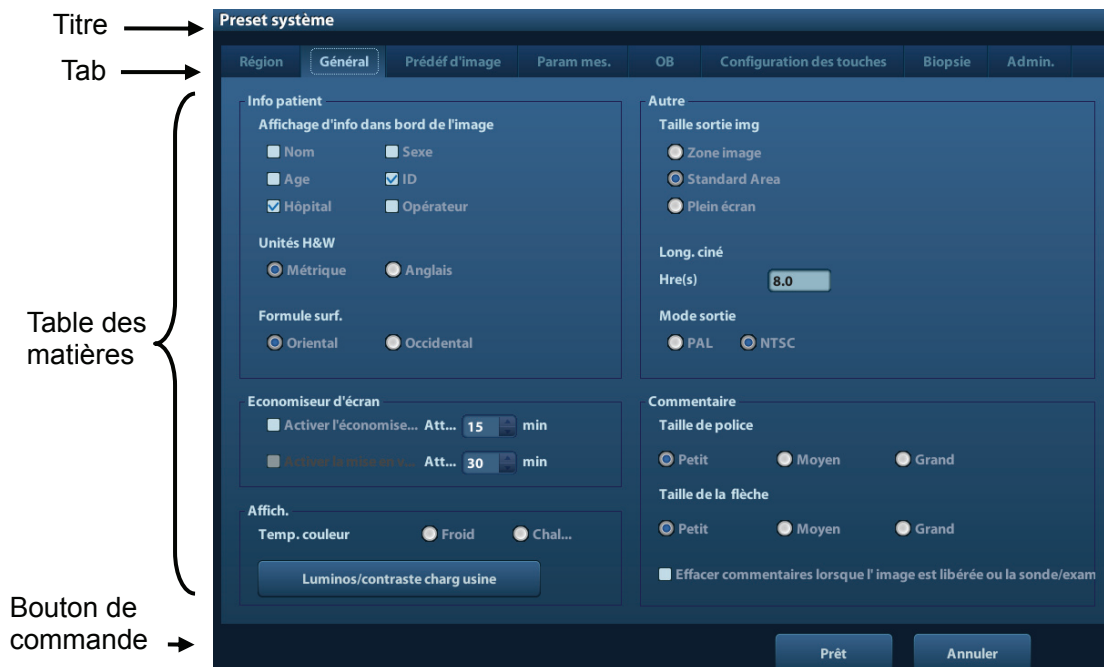
■ Zones non fixes

Les zones illustrées ici sont mobiles, ce qui signifie que vous pouvez les déplacer sur l'écran à l'aide de la boule de commande.

- Fenêtre Résultat
Cette fenêtre affiche les résultats des mesures récentes.
Pour déplacer la fenêtre Résultat, procédez comme suit :
 - a) Positionnez le curseur sur le titre de la fenêtre Résultat (le curseur se transforme alors en ).
 - b) Appuyez sur <Set>, puis faites rouler la boule de commande afin de déplacer la fenêtre et le curseur.
 - c) Déplacez le curseur jusqu'à la position cible, appuyez de nouveau sur [Set] pour ancrer la fenêtre de résultat à sa nouvelle position.
- Zone des commentaires
Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la section "8 Commentaires et repères corporels".
- Zone des repères corporels
Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la section "8 Commentaires et repères corporels".

3.11.2 Opérations élémentaires des écrans

L'écran se compose des éléments suivants : le titre, des onglets de page, le contenu et des boutons, comme illustré dans la figure ci-dessous :




Composition	Description
Barre de titre	La barre de titre fournit une description générale du contenu et des fonctions de l'écran.
Onglet Page	Dans certains écrans, le contenu est réparti sur plusieurs pages. Sélectionnez les pages à ouvrir ou fermer avec le curseur, puis appuyez sur la touche <Set>. Sélectionnez les pages à ouvrir ou fermer avec le curseur, puis appuyez sur la touche [Set].
Contenu	<ul style="list-style-type: none"> ■ Case d'option : cliquez pour sélectionner l'option. ■ Case à cocher : cliquez dessus pour sélectionner ou désélectionner l'option. ■ Zone de saisie : entrez les caractères manuellement via le clavier. Positionnez le curseur dans la zone, puis saisissez les lettres ou les caractères. ■ Case de liste déroulante : cliquez sur [▼] pour afficher la liste et sélectionner une option.
[Prêt] et [Annul.]	Lorsque vous avez fini de renseigner l'écran, appuyez sur le bouton [Prêt] ou [Annul.] pour enregistrer ou annuler l'opération et fermer l'écran.

Pour repositionner une boîte de dialogue, procédez comme suit :

1. Positionnez le curseur sur la barre de titre de la boîte de dialogue à l'aide de la boule de commande. Le curseur se transforme alors en \leftrightarrow ; appuyez sur la touche [Set].
2. Faites rouler la boule de commande et déplacez le graphique rectangulaire vers sa nouvelle position.
3. Appuyez sur la touche <Set>, la boîte de dialogue se déplace jusqu'à la position désirée.

4 Préparation de l'examen

 **ATTENTION :** Avant d'examiner un nouveau patient, appuyez sur la touche <End Exam> pour terminer l'examen du patient précédent et mettre à jour l'ID et les informations du patient afin d'éviter de mélanger ces données avec celles du prochain patient.

4.1 Commencer un examen

Vous pouvez lancer un examen patient dans les situations suivantes :

- Nouvelles informations patient : Pour commencer un nouvel examen patient, vous devez d'abord saisir les informations patient. Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la section "4.2.1 Nouvelles informations patient". Toutefois, l'échographe permet également de procéder à l'examen de patients anonymes sans avoir à consigner les informations patient au préalable.
- Nouvel examen : pour commencer un nouvel examen sur un patient déjà enregistré, vous pouvez vous procurer les informations enregistrées par le biais d'iStation ou de la liste de travail. Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections "4.2.2.1 iStation" et "4.2.2.2 Liste de travail DICOM".
- Activation d'un examen : sélectionnez un examen terminé depuis 24 heures et poursuivez l'examen avec les informations patient et les données d'examen importées. Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la section "4.5 Activation et poursuite d'un examen".
- Poursuite d'un examen : sélectionnez un examen suspendu depuis 24 heures et poursuivez l'examen avec les informations patient et les données d'examen importées. Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la section "4.5 Activation et poursuite d'un examen".

Procédure générale d'examen : saisissez les informations patient -> Sélectionnez un mode d'examen et une sonde -> Choisissez un mode d'imagerie -> Commencez l'examen.

Pour démarrer l'examen d'un nouveau patient, il est recommandé de saisir en détail les informations relatives à ce patient. Le système créera une base de données unique pour chaque patient en fonction des informations patient saisies de manière à ne pas créer de confusion entre les informations des patients.

4.2 Informations patient

- Pour ouvrir l'écran Info patient :
 - Appuyez sur <Patient> ; ou
 - Sur le moniteur, positionnez le curseur sur la zone des informations patient, puis appuyez sur <Set> pour ouvrir l'écran.
- Pour fermer l'écran Info patient :
 - Cliquez sur [Prêt] dans l'écran "Info patient" ; ou appuyez de nouveau sur la touche <Patient> du panneau de commande pour enregistrer les réglages et quitter l'écran.
 - Cliquez sur [Annul.] ou appuyez sur <Esc> pour quitter l'écran sans enregistrer les données patient saisies.
 - Appuyez sur ou <Freeze> pour revenir au mode d'examen en cours en enregistrant les informations saisies.
- Cliquez sur [Enreg. rapide] pour enregistrer rapidement les informations patient et revenir à l'écran principal.

4.2.1 Nouvelles informations patient

La page d'informations patient est illustrée ci-dessous :

Placez le curseur sur la zone souhaitée. Le champ est mis en évidence et un curseur clignotant s'affiche. Vous pouvez alors saisir les informations ou les sélectionner dans les options.

Vous pouvez également modifier la position du curseur en utilisant les touches <Tab>, <Enter> ou haut/bas.

The screenshot shows the 'Info patient' interface. It is divided into several sections:

- 1**: 'Informations générales' section containing fields for Nom, Prénom, M.I., ID patient (20110506-140704-0962), Sexe (Incon.), DOB (DD/MM/YYYY), Age (Ans, Mois, Jours), and buttons for 'Enreg. rapide', 'iStation', and 'Worklist'.
- 2**: A tabbed interface with tabs for ABD, OB, GYN, CARD, VAS, URO, SMP, and PED. The main area contains fields for 'Description d'étude', 'Indications primaires', 'Secondes indications', 'Code CPT4', 'Description CPT4', 'Taille' (cm), 'Poids' (kg), and 'BSA' (m²).
- 3**: A right-hand column containing 'Médecin réf.', 'Méd. diagno', 'Opérateur' (Admin), 'Accès #', and a large 'Annotation' text area.
- 4**: A bottom navigation bar with buttons for 'Nouv. Patient', 'Nouv. examen.', 'Exam pause', 'Prêt', and 'Annuler'.

Les informations incluses sont les suivantes :

1. Info. générales

- Nom

Saisissez le nom du patient sur le clavier. Les caractères admis sont les lettres de A à Z et les chiffres de 0 à 9 ainsi que "." Les caractères "\", "^", "=" et "," ne sont pas autorisés.

- ID patient


L'ID patient est généré automatiquement par le système après avoir démarré l'examen d'un nouveau patient. Il peut être modifié manuellement. Une fois l'ID saisi et confirmé, vous ne pouvez plus le modifier.

REMARQUE : 1. La barre oblique inverse (\) n'est pas autorisée.
2. Si l'ID saisi existe déjà, l'avertissement "ID existant, charger les données ?" s'affiche et vous pouvez importer les données patient. Les données patient peuvent être modifiées une fois l'importation terminée.

- Sexe

Sélectionnez Masculin, Féminin ou Inconnu dans la liste déroulante.

- Date de naissance

- Vous pouvez saisir manuellement la date de naissance d'un patient
- ou bien cliquer sur  pour sélectionner la date et cliquer sur [Prêt] pour confirmer.

- Age

- Age auto-généré : une fois la DDN entrée, le système peut afficher dans ce champ un âge auto-généré. Les unités disponibles sont "Ans", "Mois" ou "Jrs". Si le patient est âgé de moins d'un an, l'échographe calcule automatiquement l'âge en mois ou en jours.
- Vous pouvez également saisir l'âge manuellement.

REMARQUE : Lorsque vous saisissez la date manuellement, veuillez utiliser le format du système.

2. Type d'examen

- Type d'application d'exam

Vous pouvez sélectionner les types suivants : ABD (Abdomen), OB (Obstétrique), GYN (Gynécologie), CARD (Cardio), VAS (Vasculaire), URO (Urologie), PO (Petits Organes) et PED (Pédiatrie).

Sélectionnez l'onglet du type d'examen pour saisir les informations relatives à l'examen.

- Informations générales :

- Descript. étude :** description de chaque examen.
- Indications prim. :** indications primaires (motif de l'examen).
- Indications second. :** indications secondaires.
- Code CPT4 :** code CPT4.
- Description CPT4 :** description CPT4.

- Informations spécifiques à l'examen :

Type d'examen	Indication	Description
ABD (abdomen)	Taille	/
	Poids	/
	BSA (surface corporelle)	Suite à la saisie de la taille et du poids, le système calcule automatiquement la surface corporelle selon la formule définie via le chemin [Conf.]-> [Prédéf. syst.]-> [Général].
OB (obstétrique)	Indice de calcul	<p>Calcule l'âge gestationnel (AG) et la date prévue d'accouchement (DPA) en se basant sur la date des dernières règles (DDR), la fécondation in vitro (FIV), la température corporelle basale (TCB) et la date de l'examen précédent (DEP). Dans la liste déroulante, sélectionnez DDR, FIV, DEP ou DPA. Vous pouvez également calculer l'âge gestationnel ou la date des dernières règles en fonction de la date prévue d'accouchement et de la date saisie.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● DDR : Après avoir saisi la DDR, le système calcule et affiche l'AG et la DPA. ● FIV : Après avoir saisi la FIV, le système calcule l'AG et la DPA. ● DEP : saisissez la date de l'examen précédent et l'AG relatif, le système calculera l'AG et la DPA. ● TCB : saisissez la TCB, le système calculera l'AG et la DPA. ● DPA : suite à la saisie de la DPA, le système calcule et affiche l'AG et la DDR.
	Gross.	Nombre de grossesses
	Ectop.	Nombre de grossesses anormales, extra-utérines par exemple
	Grossesses	Nombre d'embryons (1, 2, 3 ; par défaut, 1)
	Para	Nombre d'accouchements
	Avort.	Nombre d'avortements
GYN (Gynécologie)	DDR	Date des dernières règles
	Gross.	Nombre de grossesses
	Para	Nombre d'accouchements
	Ectop.	Nombre de grossesses anormales, extra-utérines par exemple
	Avort.	Nombre d'avortements
CARD (Cardio)	Taille	/
	Poids	/
	BSA (surface corporelle)	Suite à la saisie de la taille et du poids, le système calcule automatiquement la surface corporelle selon la formule définie via le chemin [Conf.] -> [Prédéf. syst.] -> [Général].
	BP	Pression artérielle
	FC	/
	Press RA	Pression auriculaire droite

Type d'examen	Indication	Description
VAS (vasculaire)	BP(G)	Saisissez la pression artérielle gauche.
	BP(D)	Saisissez la pression artérielle droite.
URO (urologie)	PSA sérum	/
	Coefficient PPSA	/
PO (petits organes)	Néant	/
PED (pédiatrie)	Néant	/

3. Infos opératoires

- Médecin réf. : personne à l'origine de la demande échographique. Les caractères "\", "^", "=" et "," ne sont pas autorisés.
- Méd. diagno : personne responsable de l'examen. Les caractères "\", "^", "=" et "," ne sont pas autorisés.
- Opérat. : personne responsable de la collection et de l'exploration des images. Les caractères "\", "^", "=" et "," ne sont pas autorisés.
- N° enregistrement : numéro d'examen utilisé dans DICOM ; la barre oblique inverse "/" n'est pas autorisée.
- Comment. : explications ou notes concernant un examen spécifique.

4. Touche fonctionnelle

- [Nouv. patient] : cliquez ici pour effacer les informations du patient actuel figurant sur l'écran des informations patient et saisir les nouvelles informations patient.
- [Nouv. ex] : cliquez ici pour effacer les informations de l'examen actuellement sélectionné et créer un nouvel examen pour le patient actuel.
- [Exam pause] : pour suspendre l'examen en cours.
- [Prêt] : cliquez ici pour enregistrer les données patients saisies et quitter l'écran.
- [Annul.] : cliquez ici pour annuler les données patients saisies et quitter l'écran.

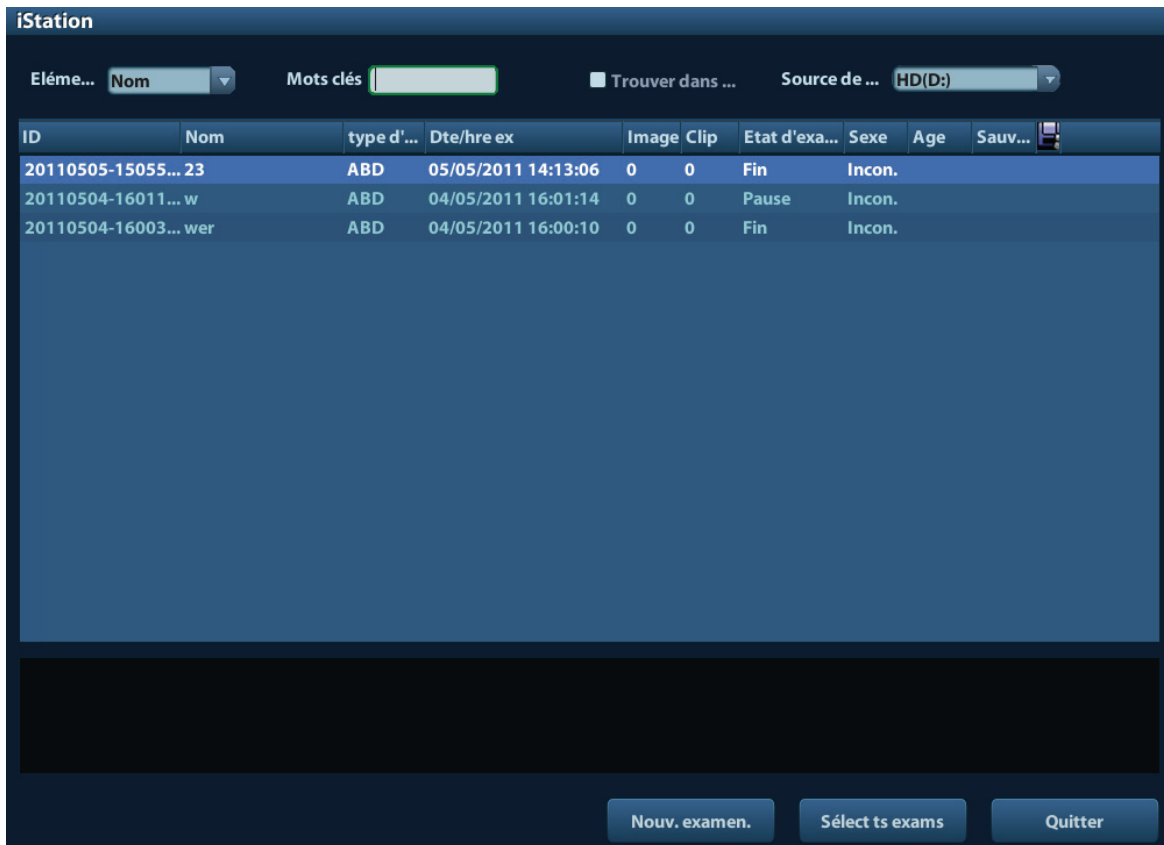
4.2.2 Récupération des informations patient

4.2.2.1 iStation

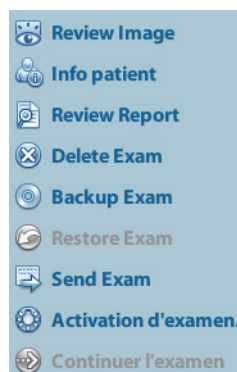
Les données patient peuvent être récupérées dans iStation à partir des composants matériels du système ou d'un dispositif de stockage USB. Définissez les critères de recherche du patient.



1. Pour accéder à l'écran iStation (voir l'illustration ci-après) :








- Appuyez sur la touche <iStation> du panneau de commande ; ou
- Cliquez sur [iStation] dans l'écran "Info patient" ; ou
- Appuyez sur la touche <Review> du panneau de commande et cliquez sur le bouton [iStation] de l'écran.



2. Sélectionnez la source de données :
Sélectionnez la source de données dans la liste déroulante "Sce données". Le pourcentage d'espace occupé de la source de données sélectionnée s'affiche.
3. Saisissez le critère de recherche :
Elément : Nom, ID, DDN et Date exa. La valeur par défaut est Nom. Ensuite, saisissez un mot clé correspondant à l'élément sélectionné.
 - Sélectionnez "Résult. rech." ; le système recherche le mot clé dans les résultats de recherche générés.
4. Sélectionnez les informations patient souhaitées dans la liste. Le menu ci-après s'affiche :



Bouton	Fonction	Description
	Revoir image	Cliquez pour accéder à l'écran Revoir.
	Info patient	Cliquez pour accéder à l'écran Info patient.

Bouton	Fonction	Description
	Revoir rapport	Cliquez pour accéder à l'écran de rapport de diagnostic.
	Supprimer examen	Cliquez pour supprimer l'enregistrement sélectionné.
	Sauvegarder examen	Cliquez pour exporter les données patient sélectionnées vers un support compatible.
	Restaurer examen	Cliquez pour importer les données patient depuis un support externe.
	Envoyer examen	Cliquez pour envoyer les données patient sélectionnées vers un périphérique externe, un serveur de stockage DICOM ou une imprimante DICOM.
	Activer examen	Cliquez pour poursuivre un examen terminé au cours des dernières 24 heures.
	Reprise d'un examen	Cliquez pour poursuivre un examen non terminé qui s'est déroulé au cours des dernières 24 heures.

Autres boutons :

- [Nouv. ex] : Cliquez sur ce bouton pour accéder à l'écran Info patient. Les informations patient correspondantes sont également importées dans le nouvel examen. Après avoir modifié les informations patient dans l'écran Info patient, sélectionnez [Prêt] pour démarrer un nouvel examen.
- [Sélect ts exams] : Cliquez sur ce bouton pour sélectionner tous les enregistrements.
- [Quitter] : cliquez sur ce bouton pour quitter iStation.

4.2.2.2 Liste de travail DICOM

Lorsque le progiciel DICOM de base est configuré et que le serveur de liste de travail a été paramétré, cliquez sur [L de trv] dans l'écran "Info patient" pour interroger ou importer les données patient. (Pour le réglage du serveur de liste de travail, reportez-vous au chapitre "10 DICOM".)

Procédure :

1. Sélectionnez la source de données : choisissez un serveur de liste de travail dans la liste déroulante "Serveur L de trv" ; tous les enregistrements d'examen patient du serveur sont alors répertoriés.
2. Saisissez le critère de recherche :
 - Sélectionnez la période de la date d'examen, cliquez sur [Requ.] pour rechercher les données patient sur la période.
 - Saisissez l'ID patient, le nom du patient et le numéro d'enregistrement. Le système affiche le résultat en temps réel.
 - Vous pouvez également sélectionner le type de mot clé, saisir les mots clés et cliquer sur [Requ.] pour lancer la recherche.
 - Pour réinitialiser les critères, cliquez sur le bouton [Eff.].
3. Sélectionnez le patient souhaité dans la liste.
 - Cliquez sur [Déb examen]. Les informations patient sont importées dans l'échographe et l'examen démarre.
 - Cliquez sur [Transf.]. Les informations patient sont importées dans l'écran Info patient. Modifiez les informations patient dans l'écran Info patient et sélectionnez [Prêt] pour démarrer un nouvel examen.
 - Cliquez sur [Aff. détails] pour afficher les détails des données patient.
4. Cliquez sur [Quitter] pour quitter la liste de travail.

4.3 Sélection de la sonde et du mode d'examen

⚠ ATTENTION : Si le mode d'examen est modifié pendant une mesure, l'ensemble des repères de mesure de l'image sont supprimés. Les données de mesure générale seront perdues mais les données de mesure d'application seront mémorisées dans les rapports.

4.3.1 Modes d'examen pris en charge

L'échographe peut être configuré avec les modes d'examen suivants.

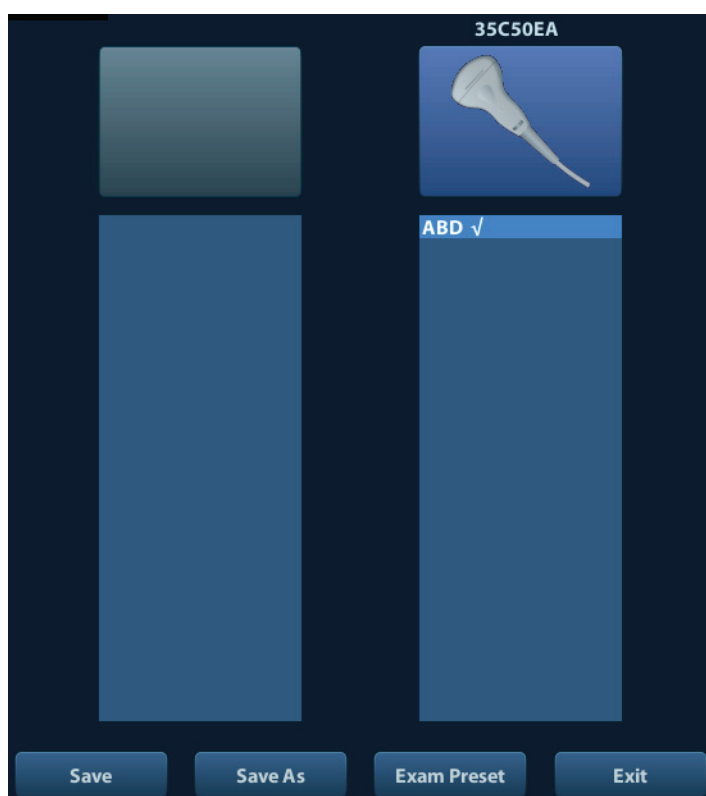
Le système prend en charge le type d'application, les mesures, commentaires, repères corporels et paramètres d'image prédéfinis pour chaque mode d'examen (y compris les modes d'examen définis par l'utilisateur). Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la section "11.2.2 Configuration des examens".

Vous pouvez sélectionner les modes d'examen pour les sondes. Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la section "11.2.1 Sélection des examens".

4.3.2 Sélection de la sonde et du mode d'examen

- Sélection de la sonde et du mode d'examen

(1) Appuyez sur <Probe> pour ouvrir la boîte de dialogue suivante.



- (2) Utilisez la boule de commande et appuyez sur <Set> pour sélectionner le mode d'examen, puis utilisez les touches directionnelles pour tourner les pages des modes d'examen.
- Pour enregistrer rapidement les paramètres d'image pour le mode d'examen en cours :
 - (1) Cliquez sur [Enr.] pour enregistrer les paramètres d'image du mode d'image en cours en tant que prédéfinitions. Une boîte de dialogue s'affiche, vous informant que l'opération écrasera les données prédéfinies actuelles de l'image.
 - (2) Cliquez sur [Enr sous] pour enregistrer les paramètres d'image actuels pour le mode d'examen désigné.
 - Cliquez sur [Prédéf exam.] pour ouvrir l'écran correspondant. Pour en savoir plus sur la prédéfinition des examens, reportez-vous à la section "11.2 Prédéf des examens".
 - Quitter :

Cliquez sur [Quitter] ou appuyez sur <Probe> pour quitter. Appuyer sur , <Freeze> ou <ESC> permet également de quitter l'écran.

4.3.3 Changement de sonde double

Vous pouvez prédéfinir une touche définie par l'utilisateur afin de pouvoir permuter entre une sonde mode B simple et une sonde mode B biplan. Cette fonction n'est disponible que pour les sondes d'un même mode d'examen.

- En mode B simple : appuyez sur la touche définie par l'utilisateur pour permuter la fenêtre actuelle entre deux sondes (lorsque la mémoire ciné est définie sur "Part." dans [Prédéf.. image]).
- En mode B double : appuyez sur la touche définie par l'utilisateur pour permuter deux fenêtres entre deux sondes.

Prédéfinissez la touche définie par l'utilisateur via le chemin [Conf.] (en appuyant sur <Conf.)-> [Prédéf. syst.]-> [Config. tch].

1. Sélectionnez la touche définie par l'utilisateur à gauche de la page Fct. touche (Print, Save1, Save2, F1~F4) ; ou sélectionnez la touche de la pédale.
2. Sélectionnez "Sonde double" sur la page Fonct. avancées située à droite.
3. Cliquez sur [Prêt] pour confirmer et quitter la boîte de dialogue.
4. Le fait de revenir à la page des prédéfinitions active le réglage.

4.3.4 Sonde endocavitaire biplan (65EB10EA)

Lorsque la sonde est active, le système affiche l'image du plan sagittal en mode B par défaut. Vous pouvez changer de plan en cliquant sur [Sélect. plan] dans le menu (ou en appuyant sur la touche de sélection du plan sur la sonde) pour sélectionner le plan parmi le plan S (sagittal) et le plan T (transverse). Les plans S et T sont affichés à droite de l'écran.


Les fonctions de mesure, de commentaire et de repère corporel sont disponibles lors de l'utilisation de cette sonde. Si vous ajoutez un repère corporel sur un des plans, il apparaît sur les deux plans, et la sonde d'un plan est orientée perpendiculairement à celle de l'autre plan.

4.4 Sélection du mode d'imagerie

Utilisez la touche correspondante du panneau de commande pour accéder aux modes d'imagerie. Pour plus d'informations sur les opérations de chaque mode d'imagerie, veuillez vous reporter au chapitre "5 Optimisation des images".

4.5 Activation et poursuite d'un examen


4.5.1 Activation d'un examen

Sélectionnez un examen qui s'est terminé au cours des dernières 24 heures, puis sélectionnez l'enregistrement d'examen et cliquez sur  dans le menu qui s'affiche ; ou cliquez sur [Activ. exam] sur l'écran "iStation" ou "Revoir" pour activer l'examen.

Remarque :

- l'échographe peut automatiquement charger les informations patient et les données de l'examen.
- Pour poursuivre un examen dont les données sont contenues dans une base de données externe, vous devez d'abord permettre que le système charge les données patient dans la base de données patient du système.

4.5.2 Poursuite d'un examen

Sélectionnez un examen qui a été suspendu au cours des dernières 24 heures, puis sélectionnez l'enregistrement d'examen sur l'écran iStation et cliquez sur  dans le menu qui s'affiche pour poursuivre l'examen.

Pour poursuivre un examen dont les données sont contenues dans une base de données externe, vous devez d'abord permettre au système de charger les données patient dans la base de données patient du système.

4.6 Suspension et fin d'un examen

4.6.1 Suspension d'un examen

- Il arrive que vous deviez interrompre un examen incomplet pour une raison quelconque. Lorsque l'examen est interrompu, le système peut commencer d'autres examens.
 1. Appuyez sur <Patient> pour ouvrir l'écran "Info patient".
 2. Cliquez sur [Exam pause].
- Si le système est mis hors tension pendant l'exploration, l'état de l'examen est "suspendu" suite au redémarrage du système.

Un seul examen à la fois peut être suspendu.

Quand un examen est suspendu, l'échographe effectue les opérations suivantes :

1. Il enregistre les images, rapports et données de mesure résultant de l'examen et passe à l'état "Pause".
2. Il enregistre les informations relatives à l'examen, à savoir le rapport, le mode d'imagerie, le mode d'examen, les paramètres d'image, le mode de fonctionnement, les données d'image et de mesure, etc.


4.6.2 Fin d'un examen

Avant d'examiner un nouveau patient, appuyez sur la touche <End Exam> pour terminer l'examen du patient précédent et mettre à jour l'ID et les informations du patient afin d'éviter de mélanger ces données avec celles du prochain patient.






Pour terminer un examen, procédez de l'une des manières suivantes :

- Appuyez sur la touche <End Exam> du panneau de commande.
- Cliquez sur [NouvPatient] dans l'écran Info patient pour mettre fin à l'examen du dernier patient et effacer les informations patient.
- Cliquez sur [Nouv. ex.] dans l'écran Info patient (ou l'écran iStation ou Revoir) pour mettre fin au dernier examen et effacer les données d'examen.

5 Optimisation des images

-  **AVERTISSEMENT :**
1. Les images fournies par cet échographe sont uniquement affichées à titre de référence pour le diagnostic. Mindray ne peut être tenue pour responsable de l'exactitude des résultats de diagnostic. Cette responsabilité incombe au médecin qui pratique l'examen.
 2. En mode d'imagerie B double, les résultats des mesures provenant de l'image fusionnée sont susceptibles d'être inexacts. Par conséquent, les résultats sont fournis à titre de référence uniquement. Ils ne sont pas destinés à des fins de confirmation d'un diagnostic.

5.1 Changement de mode d'image

Touche	Description
	Touche du mode B : appuyez dessus pour activer le mode B.
	Touche du mode M : appuyez dessus pour activer le mode M.
	Touche d'affichage à deux fenêtres : appuyez dessus pour activer le mode d'affichage à deux fenêtres et passer d'une fenêtre à l'autre.
	Touche de commutation : Appuyez sur cette touche pour modifier la fenêtre actuellement active.
	Appuyez sur cette touche pour activer le mode d'affichage à quatre fenêtres ou passer d'une fenêtre d'image à une autre en mode Quad.

5.2 Opérations élémentaires

Avant d'optimiser l'image en réglant les paramètres d'image, réglez au mieux la luminosité et le contraste de l'écran.

Effet recherché	Opérations disponibles
Modifier la luminosité	Régler [Gain] Régler la TGC (compensation du gain de temps) Régler [A. Power] (essayez de régler le gain avant d'augmenter la puissance sonore)
Modifier l'effet d'échelle de gris de l'image	Régler [Plage dyn.] Régler [Carte] Régler [Persistance] Régler [iClear] (facultatif)
Augmenter la fréquence d'image	Réduire [Prof.] Réduire [Nbre focus] Réduire [FOV] Réduire [Densité Ign.] Activer [FR haut] en mode harmonique

- Réglage via le menu d'image :
Appuyez sur <Menu> ou sur le bouton multifonction pour ouvrir le menu ; utilisez la boule de commande et la touche <Set> ou le bouton multifonction pour effectuer le réglage.
- Réglage via la zone des paramètres d'image :
La zone des paramètres d'image est située dans le coin supérieur droit de l'écran. Les paramètres d'image sont affichés tandis que le menu d'image n'est pas disponible.
 - (1) Déplacez le curseur sur un élément de la zone des paramètres.
 - (2) Appuyez sur la touche <Set>.
 - (3) Tournez le bouton multifonction pour modifier les valeurs.
- Réglage via le panneau de commande :
Boule de commande, touches du panneau de commande, bouton multifonction ou curseurs.
- Réglage via la barre des échelles de gris :
Positionnez le curseur sur la barre des échelles de gris et appuyez sur <Set> pour naviguer dans les échelles de gris.

5.3 Mode B

Le mode B est le mode d'imagerie de base. Il affiche les images en temps réel des tissus et organes anatomiques.

5.3.1 Protocole d'examen en mode B

1. Saisissez les informations patient et sélectionnez une sonde compatible ainsi qu'un mode d'examen.
2. Appuyez sur le bouton du panneau de commande afin d'activer le mode B.
3. Réglez les paramètres afin d'optimiser l'image.
4. Effectuez les autres opérations nécessaires (mesures et calculs, par exemple).

En mode d'exploration en temps réel de tous les modes d'image, appuyez sur le bouton du panneau de commande pour revenir au mode B.

5.3.2 Paramètres du mode B

Au cours de l'exploration en mode B, la zone des paramètres d'image est située dans le coin supérieur gauche de l'écran et affiche en temps réel les valeurs des paramètres comme suit :



Affich.	F 2.5M	D 21.3	G 100	FR 34	IP 1	DR 65
Paramètre	Fréquence	Prof.	Gain	Fréquence d'image	B IP	Plage dynamique B

Les paramètres d'optimisation des images en mode B pouvant être réglés sont répertoriés ci-dessous :

Réglage	Options
Panneau de commande	Gain, Profondeur, TGC, iTouch, Focus, Fréquence, Dual, Quad
Menu	Fréquence, iBeam, Ech gris, Position focus, Nbre focus, Coloris, Carte color., FOV, IP, Plage dyn, Persistance, Invers. G/D, Invers. H/B, Densité lgn., iTouch, Puissance sonore, Lisser, FR haut, TSI, Position FOV, Rotation, HScale, Lithotritie, Rejet de gris, γ , Courbe, Invers gris

5.3.3 Optimisation des images en mode B

Gain

Description Cette fonction permet de régler le gain de toutes les informations reçues en mode B. La valeur en temps réel du gain s'affiche dans la zone des paramètres d'image, dans le coin supérieur gauche de l'écran.

Opération Tournez le bouton <Gain/iTouch> dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le gain, ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le diminuer.

Vous pouvez aussi effectuer le réglage directement dans la zone des paramètres d'image.

La plage est de 0-100.

Effets L'augmentation du gain permet d'éclaircir l'image et vous permet de visualiser plus de signaux reçus. Toutefois, il est possible que le bruit augmente également.

Prof.

Description Cette fonction permet de régler la profondeur d'affichage d'échantillonnage. Sa valeur en temps réel s'affiche dans la zone des paramètres d'image, dans le coin supérieur gauche de l'écran.

Opération Utilisez le bouton <Prof./Zoom> pour régler la profondeur.

Vous pouvez aussi effectuer le réglage directement dans la zone des paramètres d'image.

Les valeurs de profondeur disponibles varient selon le type de sonde.

Effets L'augmentation de la profondeur permet d'explorer des tissus dans des régions plus profondes alors que sa diminution permet d'explorer des tissus dans des régions peu profondes.

Impacts L'augmentation de la profondeur entraîne une réduction de la fréquence d'image.

TGC

Description Afin d'optimiser l'image, l'échographe compense les signaux provenant de tissus profonds. Cette compensation est réalisée par segment d'affichage. Le panneau de commande comporte ainsi 8 curseurs TGC, correspondant aux différentes zones de l'image.

Opération Déplacez le curseur TGC vers la droite pour augmenter la compensation de gain dans la zone d'intérêt. Déplacez-le vers la gauche pour réduire la compensation de gain dans la zone d'intérêt.

Environ 1,5 s après le réglage, la courbe TGC disparaît.

Effets Réglez le gain de signal d'une zone d'image donnée afin d'obtenir une image équilibrée.

Fréquence

Description Cette fonction permet de sélectionner la fréquence de fonctionnement de la sonde actuelle. Sa valeur en temps réel s'affiche dans la zone des paramètres d'image, dans le coin supérieur gauche de l'écran ("F" représentant la fréquence en mode B et "FH" la fréquence harmonique).

Opération Réglez-la via l'option [Fréquence] du menu d'image, dans lequel "H" correspond à la fréquence harmonique.

Vous pouvez aussi effectuer le réglage directement dans la zone des paramètres d'image.

Les valeurs de fréquence varient en fonction des types de sonde. Veillez à sélectionner la fréquence selon la profondeur de détection et les caractéristiques actuelles des tissus.

Effets Plus la fréquence est élevée, plus la résolution dans la zone proche est importante mais plus la force de pénétration est faible.

L'imagerie harmonique améliore la résolution dans la zone proche et réduit les basses fréquences ainsi que les bruits de forte amplitude pour une meilleure imagerie des petits organes.

A.Power

Description Il s'agit de la puissance de l'onde échographique transmise par la sonde. Sa valeur en temps réel s'affiche dans la zone des paramètres d'image, dans le coin supérieur gauche de l'écran.

Opération Réglez cette valeur via l'option [Puissance sonore] du menu d'image.

La plage est de 7 % à 100 %, par incréments de 3 %.

Effets Généralement, l'augmentation de la puissance sonore augmente la luminosité et le contraste de l'image, ainsi que la force de pénétration.

Impacts Vous devez effectuer les examens en tenant compte de la situation réelle et selon le principe ALARA.

Focus

Description Il s'agit du réglage focal des faisceaux d'ultrasons. Son symbole "◀" s'affiche à droite de l'image.

Opération Réglez le nombre de focus via l'option [Nbre Focus] du menu.

Réglez la position focale via l'option [Position focus] du menu.

En mode B, vous pouvez sélectionner jusqu'à 4 focus.

Effets La zone concernée par ce réglage bénéficie d'un meilleur contraste et d'une plus grande résolution, ce qui permet d'obtenir une image beaucoup plus nette.

Impacts Plus le nombre de focus est élevé, plus la fréquence d'image est basse.

Réglage de l'affichage d'imagerie

Description	Vous pouvez obtenir davantage d'informations sans déplacer la sonde ou modifier la position d'échantillonnage.
Opération	Modifiez la plage d'exploration via l'option [FOV] du menu. L'échographe propose cinq niveaux de plage d'exploration : ExFOV, W, N, M1, M2. Pour étendre la plage d'exploration, sélectionnez une FOV plus large. Notez cependant que la fréquence d'image va diminuer.
B Steer	Cette fonction permet de diriger le faisceau transmis par la sonde. Orientez le faisceau de transmission via l'option [Dirig B] du menu. Les angles de direction disponibles sont les suivants : -6, 0, 6.
Imagerie trapézoïdale	Activez ou désactivez la fonction via l'option [Img trapèze] du menu. Vous pouvez affecter une touche définie par l'utilisateur à la fonction d'imagerie trapézoïdale via le chemin [Conf.]-> [Prédéf. syst.]-> [Config tch].
Impacts	Les fonctions Dirig B et Img trapèze sont disponibles uniquement pour les sondes linéaires.

Densité lgn.

Description	Cette fonction détermine la qualité et les informations de l'image.
Opération	Réglez cette valeur via l'option [Densité lgn.] du menu. Niveaux : UH, H, M, L.
Effets	Plus la densité de la ligne est élevée, plus la résolution est élevée et plus la fréquence d'image est réduite.

Plage dyn.

Description	Cette fonction permet de régler la résolution de l'image B afin de réduire ou d'étendre la plage d'affichage des gris. La valeur en temps réel dans la plage dynamique s'affiche dans la zone des paramètres d'image, dans le coin supérieur gauche de l'écran.
Opération	Réglez cette valeur via l'option [Plage dyn.] du menu. Vous pouvez aussi effectuer le réglage directement dans la zone des paramètres d'image. La plage est de 30-220 dB, par incréments de 5 dB.
Effets	Plus la plage dynamique est élevée, plus les informations sont précises et plus le contraste est faible. Toutefois, le bruit peut augmenter.

iClear

Description	Cette fonction permet d'augmenter le profil de l'image, afin d'en distinguer la bordure.
Opération	Réglez cette valeur via l'option [iClear] du menu. L'échographe propose 5 niveaux de réglage des effets iClear. Le réglage "Arr" signifie que la fonction n'est pas activée. Plus la valeur est élevée, plus l'image est optimisée.
Effets	Plus cette valeur est élevée, plus le profil de l'image est net.
Impacts	Cette fonction est un module facultatif.

Lisser

Description Permet d'éliminer le bruit de fond des images pour les rendre plus lisses.

Opération Réglez cette valeur via l'option [Lisser] du menu.
L'échographe propose 4 niveaux de réglage. Plus la valeur est élevée, plus l'image est lisse.

Persistance

Description Cette fonction permet de superposer et de faire la moyenne des images B adjacentes afin d'optimiser l'image et de supprimer le bruit de fond.

Opération Réglez cette valeur via l'option [Persistance] du menu.
L'échographe propose 8 niveaux de réglage. Plus la valeur est élevée, plus l'image est optimisée.

Effets Cette fonction permet d'affiner les détails de l'image par la suppression du bruit de fond.

Impacts L'augmentation de cette fonction peut provoquer une perte de signaux.

Rotation/Inversion

Description Cette fonction permet de modifier l'affichage de l'image pour une meilleure observation.

Invers. Pour inverser l'image horizontalement ou verticalement, procédez comme suit : Cliquez sur [Invers.G/D] ou [Invers H/B] dans le menu pour inverser l'image.

Rotation Faites pivoter l'image via l'option [Rotation] du menu.
L'image peut subir une rotation de 0°, 90°, 180° et 270°.

Si l'angle de rotation sélectionné est 90° ou 270°, l'échelle de profondeur s'affiche dans la section supérieure de l'écran.

Lorsque vous inversez une image ou vous lui appliquez une rotation, le repère « M » change de position sur l'écran ; par défaut, le repère « M » est situé dans le coin supérieur gauche de la zone image.

Impacts Cette fonction est disponible en mode d'imagerie en temps réel, figé ou de revue ciné.

iBeam

Description Cette fonction permet de superposer et de faire la moyenne des différents angles de direction afin d'optimiser l'image.

Opération Réglez cette valeur via l'option [iBeam] du menu.
Arrêt : iBeam désactivé
Marche : optimisation iBeam maximale

Effets Après traitement iBeam, les images présentent un bruit de point réduit et une plus grande résolution, révélant une structure plus détaillée.

Impacts La fonction iBeam est disponible uniquement pour les sondes linéaires. Elle n'est pas disponible lorsque la fonction d'imagerie trapézoïdale est activée.

Fus. auto

Description En mode d'affichage à deux fenêtres, lorsque les images des deux fenêtres présentent les mêmes type de sonde, profondeur, niveau d'inversion, niveau de rotation et facteur d'agrandissement, l'échographe les fusionne afin d'étendre la plage d'exploration.

Opération Activez ou désactivez cette fonction via l'option [Fus. auto] du menu.

Impacts Disponible uniquement pour les sondes linéaires.
Cette fonction est disponible en mode d'imagerie en temps réel, figé ou de revue ciné.

Ech gris

Description Cette fonction permet de régler le contraste des échelles de gris pour optimiser l'image.

Opération Sélectionnez l'échelle de gris souhaitée à l'aide de l'option [Ech gris] du menu.
Vous pouvez également effectuer ce réglage via la barre des échelles de gris : positionnez le curseur sur la barre des échelles de gris, puis appuyez sur la touche <Set> du panneau de commande pour confirmer la sélection.
Le système propose 8 échelles de gris différentes.

Impacts Cette fonction est disponible en mode d'imagerie en temps réel, figé ou de revue ciné.

IP

Description Le paramètre IP est une combinaison de plusieurs paramètres de traitement d'image permettant d'optimiser rapidement les images. Son groupe en temps réel s'affiche dans la zone des paramètres d'image, dans le coin supérieur gauche de l'écran.

Cette fonction est une combinaison des paramètres suivants : plage dynamique, iClear, persistance et lissage.

Opération Sélectionnez le groupe IP souhaité à l'aide de l'option [IP] du menu.
Vous pouvez aussi effectuer le réglage directement dans la zone des paramètres d'image.
L'échographe propose 8 groupes de combinaisons IP. La valeur de chaque paramètre peut être prédéfinie.

Coloriser et carte des coloris

Description Cette fonction offre un traitement d'image basé sur la différence des couleurs et non sur la distinction des niveaux de gris.

Opération Activez ou désactivez cette fonction via l'option [Coloris.] du menu.
Sélectionnez la carte des coloris souhaitée à l'aide de l'option [Carte color.] du menu.
Le système propose 16 cartes de coloris différentes.

Impacts Cette fonction est disponible en mode d'imagerie en temps réel, figé ou de revue ciné.

TSI

Description Cette fonction permet d'optimiser l'image en sélectionnant la vitesse sonore selon les caractéristiques tissulaires.

Opération Sélectionnez le mode TSI souhaité via l'option [TSI] du menu.
L'échographe propose quatre niveaux d'optimisation, correspondant à des tissus spécifiques : Général, Muscle, Liq. et Grs.

iTouch

Description Cette fonction permet d'optimiser les paramètres d'image en fonction des caractéristiques actuelles des tissus afin d'obtenir un meilleur rendu.

Opération Appuyez sur la touche <Gain/iTouch> du panneau de commande. Son symbole s'affiche dans la zone des paramètres d'image.
Cliquez sur l'option [iTouch] du menu d'image pour régler le gain en mode iTouch, avec une plage de réglage de -12 à 12 dB.
Cliquez sur l'option [iTouch Bright] du menu d'image pour régler la luminosité en mode iTouch, avec une plage de réglage de -2 à +2.

Rejet de gris

Description Cette fonction permet d'éliminer les signaux d'image en dessous d'une échelle de gris donnée. La zone correspondant aux signaux rejetés devient alors noire.

Opération Cliquez sur [Rejet de gris] dans le menu pour effectuer le réglage.
La plage est de 0-5.

Courbe

Description Ce paramètre permet d'étendre ou de réduire manuellement le signal d'une échelle donnée.

Opération Cliquez sur l'option [Courbe] du menu pour ouvrir la boîte de dialogue de réglage.
Déplacez le point de la courbe afin d'augmenter ou de diminuer les informations de l'échelle de gris : déplacez le point vers le haut pour augmenter les informations et vers le bas pour les diminuer.

Y

Description La correction γ permet de corriger la déformation non linéaire des images.

Opération Cliquez sur l'option [γ] du menu d'image pour effectuer le réglage.
La plage de réglage est de 0 à 3 ; l'image s'obscurcit à mesure que la valeur augmente.

Invers gris

Description inversez la polarité de l'image.

Opération Cliquez sur [Invers gris] pour activer ou désactiver l'inversion d'image.

Impacts Les fonctions de rejet de gris, de courbe, γ et d'inversion de gris sont disponibles en mode d'imagerie en temps réel, figé ou de revue ciné.
Le réglage des paramètres de post-traitement n'affecte pas la revue ciné.

FR haut

Description Cette fonction permet d'augmenter la fréquence d'image lorsqu'elle est activée en mode THI.

Opération En mode B simple, lorsque l'imagerie THI est activée, cliquez sur l'option [FR haut] du menu pour obtenir des images à fréquences d'image élevées.

HScale (Echelle horizontale)

Description Ce paramètre permet d'afficher ou de masquer l'échelle de largeur (échelle horizontale).
L'échelle de l'échelle horizontale est identique à celle de l'échelle verticale (profondeur). Elles changent en mode zoom ou lorsque le numéro de la fenêtre d'image change. Lorsque l'image est inversée, l'échelle horizontale l'est également.

Opération Cliquez sur [HScale] (Echelle horizontale) dans le menu pour afficher ou masquer l'échelle.

5.4 Mode M

5.4.1 Protocole d'examen en mode M

1. Au cours de l'exploration en mode B, sélectionnez une image de bonne qualité et placez la zone d'intérêt au centre de l'image en mode B.
2. Appuyez sur le bouton <M> du panneau de commande, puis faites rouler le boule de commande afin de régler la ligne d'échantillonnage.
3. Appuyez une nouvelle fois sur <M> ou appuyez sur <Update> pour activer le mode M. Vous pouvez alors observer le mouvement des tissus dans les images anatomiques de mode B.
4. Au cours du processus d'exploration, vous pouvez ajuster la ligne d'échantillonnage, le cas échéant.
5. Réglez les paramètres afin d'optimiser les images.
6. Effectuez les autres opérations nécessaires (mesures et calculs, par exemple).

5.4.2 Paramètres du mode M

- Au cours de l'exploration en mode M, la zone des paramètres d'image est située dans le coin supérieur gauche de l'écran et affiche en temps réel les valeurs des paramètres comme suit :



Affich.	V 3	IP 6	DR 65	G 45
Paramètre	Vit. M	M IP	Plage dynamique M	Gain M

- Les paramètres d'optimisation des images en mode M pouvant être réglés sont répertoriés ci-dessous :

Réglage	Options
Panneau de commande	Gain, TGC, Depth
Menu	Fréquence, Ech gris, Position focus, Plage dyn., Vit., Affich. format, Coloris., Carte color., IP, Renf contour, Attén. M, Rep. tps, Puissance sonore, Rejet de gris, γ , Courbe, Invers gris.

- Au cours de l'imagerie en mode M, vous pouvez passer du menu B au menu M, et inversement, depuis le titre du menu.
- Au cours de l'exploration en mode M, la fréquence et la puissance sonore de la sonde sont synchrones avec les valeurs du mode B.
- Si vous modifiez la profondeur ou la compensation TGC dans une image en mode B, les changements sont automatiquement reflétés dans l'image en mode M.
- Appuyez sur <Update> pour basculer entre les images en temps réel et les images figées en mode B.

5.4.3 Optimisation des images en mode M

Gain

Description Cette fonction permet de régler le gain de l'image en mode M. La valeur en temps réel du gain s'affiche dans la zone des paramètres d'image, dans le coin supérieur gauche de l'écran.

Opération Tournez le bouton <Gain/iTouch> dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le gain, ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le diminuer.

Vous pouvez aussi effectuer le réglage directement dans la zone des paramètres d'image.

La plage est de 0-100.

Effets L'augmentation du gain permet d'éclaircir l'image et vous permet de visualiser plus de signaux reçus. Toutefois, il est possible que le bruit augmente également.

Position focus

Description Cette fonction permet de modifier la position focale en mode M. Le symbole de la position focale "◀" est affiché à droite de l'image.

Opération Réglez la position focale via l'option [Position focus] du menu.

Rep. tps

Description Cette fonction permet d'afficher le repère temporel de l'image en mode M.

Opération Activez ou désactivez la fonction à l'aide de l'option [Rep. tps] du menu.

Effets Lorsque l'image en mode M comporte un repère temporel, il est beaucoup plus facile d'identifier les cycles cardiaques et de détecter les détails.

Impacts Cette fonction est disponible en mode d'imagerie en temps réel, figé ou de revue ciné.

Affich. format

- Description** Cette fonction permet de définir le format d'affichage de l'image en mode M par rapport à l'image en mode B.
- Opération** Réglez cette valeur via l'option [Affich. format] du menu.
L'échographe propose 4 formats d'affichage : G/D, V1:1, V1:2 et Plein écran.
- Effets** Prenez en compte la situation réelle et effectuez des comparaisons afin d'obtenir l'analyse souhaitée.
- Impacts** Cette fonction est disponible en mode d'imagerie en temps réel, figé ou de revue ciné.

Vit.

- Description** Cette fonction permet de régler la vitesse d'exploration de l'imagerie en mode M. Sa valeur en temps réel s'affiche dans la zone des paramètres d'image, dans le coin supérieur gauche de l'écran.
- Opération** Modifiez la vitesse via l'option [Vit.] du menu.
Vous pouvez aussi effectuer le réglage directement dans la zone des paramètres d'image.
L'échographe propose 6 niveaux de réglage. Plus la valeur est faible, plus la vitesse est élevée.
- Effets** La modification de la vitesse facilite l'identification des troubles dans les cycles cardiaques.

IP

- Description** IP est une combinaison de plusieurs paramètres de traitement d'image permettant d'optimiser facilement une image. Le numéro de la combinaison IP est affiché dans la zone des paramètres d'image, dans la partie droite de l'écran.
Cette fonction est une combinaison des paramètres suivants du mode M : plage dynamique et atténuation M.
- Opération** Sélectionnez le groupe IP souhaité à l'aide de l'option [IP] du menu.
Vous pouvez aussi effectuer le réglage directement dans la zone des paramètres d'image.
L'échographe propose 8 groupes de combinaisons IP. La valeur de chaque paramètre peut être prédéfinie.

Coloriser et carte des coloris

- Description** Cette fonction offre un traitement d'image basé sur la différence des couleurs et non sur la distinction des niveaux de gris.
- Opération** Activez ou désactivez cette fonction à l'aide de l'option [Coloris.] du menu.
Sélectionnez la carte des coloris souhaitée à l'aide de l'option [Carte color.] du menu.
Le système propose 16 cartes différentes.
- Impacts** Cette fonction est disponible en mode d'imagerie en temps réel, figé ou de revue ciné.

Rejet de gris

- Description** Cette fonction permet d'éliminer les signaux d'image en dessous d'une échelle de gris donnée. La zone correspondant aux signaux rejetés devient alors noire.
- Opération** Cliquez sur l'option [Rejet de gris] du menu d'image pour effectuer le réglage. La plage est de 0-5.

Courbe

- Description** Ce paramètre permet d'étendre ou de réduire manuellement le signal d'une échelle donnée.
- Opération** Cliquez sur l'option [Courbe] du menu pour ouvrir la boîte de dialogue de réglage. Déplacez le point de la courbe afin d'augmenter ou de diminuer les informations de l'échelle de gris : déplacez le point vers le haut pour augmenter les informations et vers le bas pour les diminuer.

γ

- Description** La correction γ permet de corriger la déformation non linéaire des images.
- Opération** Cliquez sur l'option [γ] du menu d'image pour effectuer le réglage. La plage est de 0-3.

Invers gris

- Description** inversez la polarité de l'image.
- Opération** Cliquez sur [Invers gris] pour activer ou désactiver l'inversion d'image.
- Impacts** Les fonctions de rejet de gris, de courbe, γ et d'inversion de gris sont disponibles en mode d'imagerie en temps réel, figé ou de revue ciné. Le réglage de ces paramètres de post-traitement n'affecte pas la revue ciné.

Ech gris

- Description** Cette fonction permet de régler le contraste des échelles de gris pour optimiser l'image.
- Opération** Sélectionnez l'échelle de gris souhaitée à l'aide de l'option [Ech gris] du menu. Vous pouvez également effectuer ce réglage via la barre des échelles de gris : positionnez le curseur sur la barre des échelles de gris, puis appuyez sur la touche <Set> du panneau de commande pour confirmer la sélection. Le système propose 8 échelles de gris différentes.
- Impacts** Cette fonction est disponible en mode d'imagerie en temps réel, figé ou de revue ciné.

Renf contour

Description Cette fonction permet d'augmenter le profil de l'image, afin d'en distinguer la bordure.

Opération Réglez cette valeur via l'option [Renf contour] du menu.
L'échographe propose 14 niveaux de renfort du contour. Le réglage "Arr" signifie que la fonction n'est pas activée. Plus la valeur est élevée, plus l'image est optimisée.

Impacts Un renfort du contour élevé peut provoquer une augmentation du bruit.

Plage dyn.

Description Permet de régler la résolution de contraste d'une image et de réduire ou d'agrandir la plage d'affichage des gris. La valeur en temps réel dans la plage dynamique s'affiche dans la zone des paramètres d'image, dans le coin supérieur gauche de l'écran.

Opération Réglez cette valeur via l'option [Plage dyn.] du menu.
Vous pouvez aussi effectuer le réglage directement dans la zone des paramètres d'image.
La plage est de 30-220 dB, par incréments de 5 dB.

Effets Plus la plage dynamique est élevée, plus les informations sont précises et plus le contraste est faible. Toutefois, le bruit peut augmenter.

Attén. M

Description Cette fonction permet de traiter les lignes d'exploration des images M afin d'en éliminer le bruit de fond et de les rendre plus nettes.

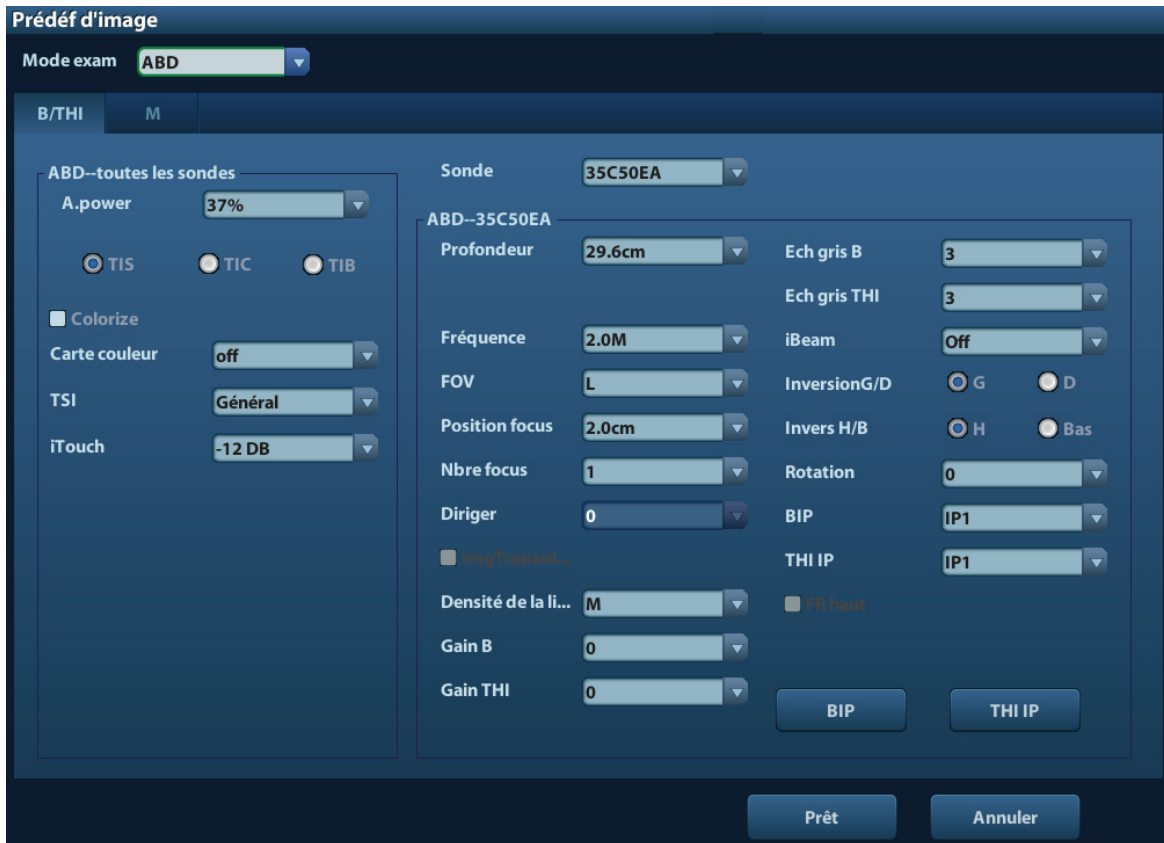
Opération Réglez cette valeur via l'option [Attén. M] du menu.
L'échographe propose 14 niveaux de réglage. Plus la valeur est élevée, plus l'image est optimisée.

5.5 Prédéf image

5.5.1 Prédéf image

La prédéfinition d'image permet de définir les paramètres des images pour une sonde spécifique dans un mode d'examen donné. Les méthodes de réglage sont similaires même si les paramètres diffèrent selon les modes d'imagerie.

1. Appuyez sur la touche <Conf.> du clavier.
2. Sélectionnez [Prédéf. image]→[B/THI] pour accéder à la fenêtre de prédéfinition des paramètres du mode B, tel qu'illustré ci-dessous.



3. Sélectionnez une sonde et un mode d'examen.
 - Sélectionnez "ABD" (Abdomen) dans la liste déroulante "Mode exam".
 - Sélectionnez "35C50EA" (par exemple) dans la liste déroulante "Sonde".
4. Prédéfinition des paramètres d'image
 - Le champ [ABD--Ttes sdes] à gauche de l'écran affiche la prédéfinition des paramètres pour l'ensemble des sondes du mode d'examen ABD.

Paramètres généraux		
A. Power	Liste déroulante	Permet de régler la puissance sonore par défaut.
Index thermique	Case d'option	Trois réglages disponibles : TIC, TIB, TIS.
Coloris.	Case à cocher	Permet de régler l'état par défaut de la fonction de colorisation en mode B (état activé ou désactivé).
Carte color.	Liste déroulante	Permet de définir la carte de coloris par défaut en mode B.
TSI	Liste déroulante	Permet de régler le mode TSI par défaut en mode B.
iTouch	Liste déroulante	Permet de régler la valeur du gain par défaut d'iTouch en mode B.
iTouch Bright	Liste déroulante	Permet de régler la luminosité par défaut d'iTouch.

- Le champ [ABD-35C50EA] à droite de l'écran affiche la prédéfinition des paramètres pour la sonde 35C50EA dans le cadre du mode d'examen ABD.

Paramètres spécifiques aux sondes		
Prof.	Liste déroulante	Permet de définir la profondeur par défaut en mode B.
Fréquence	Liste déroulante	Permet de régler la fréquence par défaut de la sonde.
FOV	Liste déroulante	Permet de définir la plage d'exploration par défaut en mode B.
Position focus	Liste déroulante	Permet de définir la position du focus par défaut en mode B.
Nbre Focus	Liste déroulante	Permet de définir le nombre de focus par défaut en mode B.
Diriger	Liste déroulante	Permet de régler l'angle de direction par défaut pour la sonde linéaire en mode B.
Img trapèze	Case à cocher	Permet de définir si la fonction d'imagerie trapézoïdale doit être activée par défaut pour la sonde linéaire en mode B.
Densité lgn.	Liste déroulante	Permet de régler la densité de ligne par défaut en mode B.
Gain B	Liste déroulante	Permet de régler la valeur du gain par défaut en mode B.
Gain THI	Liste déroulante	Permet de régler la valeur du gain THI par défaut en mode B.
Ech gris B	Liste déroulante	Permet de définir l'échelle de gris par défaut en mode B.
Ech gris THI	Liste déroulante	Permet de définir l'échelle de gris THI par défaut en mode B.
iBeam	Liste déroulante	Permet de régler la valeur iBeam par défaut pour la sonde linéaire en mode B.
Invers.G/D	Case d'option	Permet de définir le mode d'inversion horizontale par défaut : Gche ou Drte.
Invers H/B	Case d'option	Permet de définir le mode d'inversion verticale par défaut : H ou Bas.
Rotation	Liste déroulante	Permet de régler l'angle de rotation par défaut en mode B.
B IP	Liste déroulante	Permet de régler la valeur d'IP B par défaut. Vous pouvez également prédéfinir chaque paramètre du bouton.
THI IP	Liste déroulante	Permet de régler les paramètres d'IP THI. Vous pouvez également prédéfinir chaque paramètre du bouton.
FR haut	Case à cocher	Permet de définir si l'option FR haut est activée par défaut.
iClear	Liste déroulante	Permet de définir la valeur iClear par défaut.

5. Cliquez sur [Prêt] pour quitter l'écran.

Cliquez sur [Prêt] pour confirmer et quitter, ou cliquez sur [Annul.] pour quitter sans enregistrer les modifications.

6 Affichage et revue ciné

6.1 Affichage des images

6.1.1 Partage de l'affichage

L'échographe prend en charge le format d'affichage à deux (B/B) ou quatre (4B) fenêtres. Toutefois, une seule fenêtre ne peut être active, quel que soit le mode d'affichage.

- Format à deux fenêtres : appuyez sur la touche <Dual> du panneau de commande pour activer le mode d'affichage à deux fenêtres, puis appuyez une nouvelle fois sur cette touche pour basculer entre les deux images. Appuyez sur la touche du panneau de commande pour quitter ce mode.
- Format à quatre fenêtres : appuyez sur la touche <Quad> du panneau de commande pour activer le mode d'affichage à quatre fenêtres, puis appuyez une nouvelle fois sur cette touche pour basculer entre les images. Appuyez sur la touche du panneau de commande pour quitter ce mode.

6.1.2 Agrandissement des images

REMARQUE : L'agrandissement d'une image modifie la fréquence d'image, occasionnant souvent une modification des index thermiques. Il est possible également que la position des zones focales change, ce qui peut provoquer une intensité de crête à un point différent du champ sonore, d'où une modification possible de l'index mécanique.

6.1.2.1 Agrandissement du point

Procédures :

1. Activation du mode Zoom :

Lors de l'exploration d'images en temps réel, appuyez sur le bouton <Prof./Zoom> du panneau de commande pour allumer le témoin de Zoom.

2. Réglage de la ZDI :

Utilisez la boule de commande pour modifier les dimensions et la position du champ. Appuyez sur la touche <Set> pour basculer entre les réglages des dimensions et de la position. Une fois le volume d'échantillonnage défini, appuyez de nouveau sur le bouton <Zoom> pour activer le mode d'agrandissement du point.

3. Quitter :

En mode d'agrandissement du point, appuyez une nouvelle fois sur <Prof./Zoom>.

Remarque :

- seul l'agrandissement du point peut être appliqué à une image en cours d'exploration.
- Les dimensions et la position du champ du volume d'échantillonnage changent en fonction de la zone et de la profondeur d'exploration.

6.1.2.2 Agrandissement panoramique

Procédures :

1. Activation du mode Zoom :
Figez l'image et appuyez sur le bouton <Prof./Zoom> du panneau de commande pour allumer le témoin de Zoom. L'image dans l'image s'affiche.
2. Tournez le bouton <Prof./Zoom> pour modifier le facteur d'agrandissement entre 0,8 et 10.
3. Quitter :
 - Appuyez sur <Prof./Zoom>.
 - Libérez l'image ; le système quitte alors automatiquement le mode d'agrandissement panoramique.

6.1.2.3 iZoom (agrandissement plein écran)

Fonction : permet d'afficher l'image en plein écran.

L'échographe propose deux types d'agrandissement plein écran, selon la région concernée :

- Agrandissez la zone standard au format plein écran, c'est-à-dire la zone de l'image, la zone des paramètres, la bordure de l'image, la zone des vignettes, etc.
- Affichez la zone de l'image uniquement en plein écran.

■ Procédures :

1. Définissez la touche définie par l'utilisateur :
 - (1) Appuyez sur <Conf.> pour activer [Conf.] -> [Prédéf. syst.] -> [Config tch].
 - (2) Dans la liste Fonction, sélectionnez une touche libre.
 - (3) Sélectionnez "iZoom" dans la page "Autre".
 - (4) Cliquez sur [Prêt] pour valider le réglage.
 2. Ouvrez l'image (ou l'image en cours d'exploration), appuyez une fois sur la touche iZoom définie par l'utilisateur pour agrandir la zone standard de l'image, puis appuyez une nouvelle fois pour agrandir uniquement la zone de l'image.
 3. Appuyez de nouveau sur la touche définie par l'utilisateur pour revenir au mode normal.
- Le mode iZoom propose les options suivantes :
- Mesures, ajout de commentaires et repères corporels.
 - Sortie vidéo, enregistrement des images et impression de la zone agrandie en cours.
 - Désactivation du mode Zoom en appuyant sur <Sonde>, <Patient>, <iStation>, <Revoir> ou <Conf.>.

6.1.3 Figeage/libération de l'image

Appuyez sur la touche <Freeze> du panneau de commande pour figer l'image en cours d'exploration. En mode figé, la sonde interrompt la transmission de la puissance sonore, et toutes les images, ainsi que les paramètres restent immobiles.

Conseil : une fois l'image figée, le système peut passer en mode de revue ciné, de mesure, d'ajout de commentaire ou de repère corporel, en fonction des réglages prédéfinis. (Chemin de configuration : [Conf.]→[Prédéf. syst.]→[Prédéf. image]→"Freeze Config" (Config. mode figé)).

Appuyez sur <Freeze> en mode figé pour libérer l'image, le système reprend l'exploration d'image.

6.1.3.1 Changement de mode d'imagerie en mode figé

En mode figé, procédez comme suit pour changer de mode d'imagerie :

- En mode B à affichage partagé, appuyez sur la touche pour quitter le mode d'affichage partagé et afficher l'image de la fenêtre actuellement activée en plein écran.
- En mode figé, le système permet de changer de sous-mode d'imagerie (uniquement pour la fenêtre activée).
- Le mode d'imagerie et les paramètres d'une image libérée sont les mêmes que ceux de l'image avant qu'elle ne soit figée. En revanche, l'affichage conserve le format qui était actif avant la libération de l'image.

6.1.3.2 Changement de format d'affichage en mode figé

En mode figé, procédez comme suit pour changer de format d'affichage des images :

- 2D+M (appuyez sur <Freeze> en mode d'exploration 2D+M)
Si le mode d'imagerie activé avant que l'image ne soit figée est 2D (figé) + M (temps réel) ou 2D (temps réel) + M (figé), alors en mode figé, vous pouvez basculer entre les modes 2D (temps réel) + M (temps réel) ou 2D (figé) + M (temps réel) en appuyant sur la touche <Update> du panneau de commande.
- Mode d'affichage à deux/quatre fenêtres (appuyez sur la touche <Freeze> en mode d'affichage à deux/quatre fenêtres)
 - Quand le mode figé est activé, la fenêtre activée par défaut correspond à la fenêtre en temps réel qui va être figée. Les autres fenêtres d'image affichent les mémoires ciné correspondantes. Si une mémoire ciné est libre, alors aucune image n'est affichée.
 - Appuyez sur <Dual> ou <Quad> pour basculer entre les modes d'affichage à deux et quatre fenêtres.
 - Appuyez sur le bouton du panneau de commande pour activer le format d'affichage à fenêtre unique, qui affiche la fenêtre actuellement activée. En format d'affichage à fenêtre unique, appuyez sur <Dual> ou <Quad> pour basculer entre les modes d'affichage à deux et quatre fenêtres.
 - Libération de l'image : en mode d'affichage partagé, vous ne pouvez libérer que l'image de la fenêtre activée. Les autres images restent figées. En mode d'affichage à fenêtre unique, le système revient à l'affichage de l'image unique.

6.2 Revue ciné

Après avoir appuyé sur la touche [Freeze], le système vous permet de revoir et de modifier les images avant de figer l'image. Cette fonction est connue sous le nom de Revue Ciné. Vous pouvez également revoir les images agrandies après les avoir figées à l'aide de la touche <Freeze> en suivant la même méthode. Vous pouvez réaliser des opérations de post-traitement, effectuer des mesures, ajouter des commentaires et des repères corporels sur les images en cours de revue.

Le système prend en charge aussi bien la fonction de revue manuelle que la revue automatique. Le mode par défaut est le mode de revue manuelle, mais vous pouvez passer de la revue ciné auto à la revue ciné manuelle et vice-versa.

De plus, le système prend en charge les images revues parallèlement aux formes d'onde physiologiques, en cas de détection de ces dernières.



ATTENTION :

1. Les images de revue ciné peuvent être accidentellement combinées à des explorations individuelles intermédiaires du patient. Vous devez effacer la mémoire ciné à la fin de l'examen du patient actuel et celle du prochain patient en appuyant sur la touche <End Exam> du panneau de commande.
2. Les fichiers Ciné stockés sur le disque dur du système doivent contenir les informations patient afin d'éviter la sélection d'un fichier image incorrect ou d'une éventuelle erreur de diagnostic.

6.2.1 Activation/Désactivation de la revue ciné

- Pour activer la revue ciné, procédez comme suit :
 - Sélectionnez "[Conf.]-> [Prédéf. syst.]-> [Prédéf. image]-> "Freeze Config" (Config. mode figé) pour définir "Entrée quand gelé" sur "Ciné". L'échographe passe alors en mode de revue ciné manuelle. Appuyez une fois sur <Freeze> pour figer l'image.
 - Ouvrez les fichiers ciné dans la zone vignettes, dans iStation ou dans l'écran Revoir ; l'échographe passe automatiquement en mode de revue ciné.
- Pour désactiver la revue ciné, procédez comme suit :
 - Appuyez de nouveau sur la touche <Freeze>, le système retourne au mode d'exploration de l'image et désactive le mode de revue ciné.
 - Appuyez sur la touche <Cine> ou <Esc>. Les images sont toujours figées mais le système désactive le mode de revue ciné.

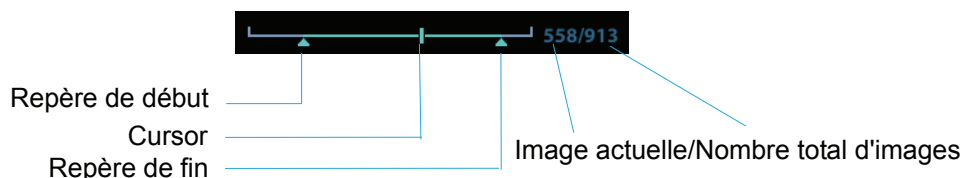
6.2.2 Revue ciné en mode 2D

■ Revue ciné manuelle

Une fois la revue ciné activée en mode 2D, vous pouvez afficher les images ciné une par une à l'aide de la boule de commande ou du bouton multifonction.

En faisant rouler la boule vers la gauche, la séquence de revue des images est inversée par rapport à la séquence enregistrée, les images figurent ainsi par ordre décroissant. En faisant rouler la boule vers la droite, la séquence de revue des images est identique à la séquence enregistrée, les images figurent ainsi par ordre croissant. Lorsque vous passez en revue la séquence jusqu'à la première ou la dernière image, c'est la dernière ou la première image qui s'affiche respectivement si vous continuez de faire rouler la boule de commande.

La barre de progression de la revue Ciné s'affiche en bas de l'écran (comme illustrée ci-dessous) :



■ Revue auto

- Revue totale
En mode de revue ciné manuelle, cliquez sur l'option [Lect.auto] du menu pour activer la revue ciné automatique.
- Définition de la zone de revue auto

Vous pouvez définir un segment de la boucle ciné à revoir en automatique. Une fois la zone de revue auto spécifiée, la revue auto ne pourra avoir lieu que dans cette zone mais la revue ciné manuelle pourra aller au-delà. Lorsque le fichier ciné est enregistré, seules les images situées dans cette zone sont sauvegardées.

- a) Définissez la première image : Procédez à la revue manuelle jusqu'à atteindre l'image à définir comme point de départ, puis cliquez sur [Déf. gch] pour définir un repère de début.
- b) Définissez la dernière image : Procédez à la revue manuelle jusqu'à atteindre l'image à définir comme point final, puis cliquez sur [Déf. drte] pour définir un repère de fin.
- c) Cliquez sur [Lect. auto] sur le nom de l'image.
- d) Cliquez de nouveau sur [Lect. auto] ou utilisez la boule de commande pour accéder au mode de revue manuelle. Vous pouvez également appuyer sur <Cine> pour quitter la revue ciné.
- e) Cliquez sur [Aller à prem.] / [Aller à dern] pour revoir la première ou la dernière image.

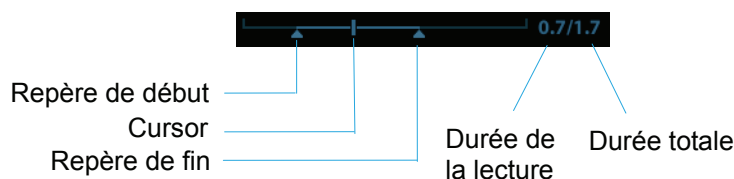
Conseils : en mode d'affichage partagé à deux/quatre fenêtres, vous pouvez procéder à la revue ciné de chaque fenêtre d'image.

6.2.3 Revue ciné en mode M

Une fois la revue ciné activée en mode M, vous pouvez afficher les images ciné une par une à l'aide de la boule de commande ou du bouton multifonction.

Si vous faites rouler la boule de commande vers la gauche, le curseur de revue se déplace dans la même direction, les images défilent vers la droite et vous visualisez les images les plus anciennes. Si vous la faites rouler vers la droite, le curseur se déplace dans la même direction, les images défilent vers la gauche et vous visualisez les images les plus récentes. Lorsque vous passez en revue les images jusqu'à la plus ancienne ou la plus récente, c'est la dernière ou la première image qui s'affiche respectivement si vous continuez de faire rouler la boule de commande.


La barre de progression de la revue Ciné s'affiche en bas de l'écran (comme illustrée ci-dessous) :



Vous pouvez procéder de la même manière qu'en mode 2D.

6.2.4 Revue Ciné associée

La revue ciné associée permet de revoir les images acquises au même moment.

Le repère d'image  s'affiche sur le repère temporel de l'image M, indiquant l'image 2D actuelle.

En mode d'affichage à deux ou quatre fenêtres, vous pouvez revoir les images uniquement dans la fenêtre actuellement active. Utilisez la touche <Dual> ou <Quad> pour changer de fenêtre.

6.3 Mémoire ciné

6.3.1 Réglage de la mémoire ciné

Vous pouvez définir la partition de la mémoire ciné de deux manières : Auto et Part.

Chemin de configuration : sélectionnez "Auto" ou "Part." pour la mémoire ciné dans [Conf.]→ [Prédéf. syst.]→ [Prédéf. image].

Où,

- Le paramètre de mémoire ciné "Auto" indique que l'échographe partage la mémoire en fonction du nombre de fenêtres d'images B.
- Le paramètre "Part." indique que le système partage systématiquement la mémoire ciné même si, dans la fenêtre B simple, la mémoire ciné est aussi divisée en deux. Vous pouvez appuyer sur la touche pour permuter et afficher les images dans l'une ou l'autre mémoire, afin de pouvoir les comparer en mode partagé.

La capacité de mémoire est uniformément répartie en fonction du nombre de partitions, comme indiqué dans le tableau ci-dessous (pour les images B à faible densité par exemple, la capacité de la mémoire ciné B est de N images) :

Mode d'imagerie Part.	B simple/ Couleur	Mode double	Quad
Auto	Une mémoire, d'une capacité de N images.	Mémoire divisée en deux parties d'une capacité de N/2 images chacune	Mémoire divisée en quatre parties d'une capacité de N/4 images chacune
Part.	Mémoire divisée en deux parties d'une capacité de N/2 images chacune	Mémoire divisée en deux parties d'une capacité de N/2 images chacune	Mémoire divisée en quatre parties d'une capacité de N/4 images chacune

6.3.2 Effacement de la mémoire ciné

La mémoire de revue ciné sera effacée dans les situations suivantes :

- Commencez l'examen d'un nouveau patient.
- Commencez un nouvel examen pour un même patient.
- Changement de sonde (si la mémoire ciné est partagée, seule celle correspondant à la fenêtre actuellement activée est effacée)
- Changement de condition d'examen (si la mémoire ciné est partagée, seule celle correspondant à la fenêtre actuellement activée est effacée)
- Changement de mode d'imagerie : B, M, changement de mode d'affichage, etc.

- Modification de paramètres, notamment :
 - Paramètres occasionnant un changement de région d'imagerie ou de sens, tels que les paramètres de profondeur, de plage d'exploration, d'imagerie trapézoïdale, de direction, de zoom, etc.
 - Modifiez des paramètres occasionnant un changement d'image, tels que les paramètres de densité de ligne, de nombre de focus, etc.
 - Changement de vitesse en mode M.
 - Effacement d'image 2D.
- Libérez l'image : une fois l'image libérée, les images enregistrées dans la mémoire ciné sont effacées. Si la mémoire ciné est partagée, seule celle correspondant à la fenêtre actuellement activée est effacée.
- Ouvrez/fermez le fichier d'image occupant la mémoire ciné.

6.4 Prédéfinition


Ouvrez [Conf.] → [Prédéf. syst.] → [Général] pour prédéfinir la longueur ciné des fichiers stockés.




Longueur ciné : 1 à 60 s.

7 Mesure

Il existe des mesures générales et des mesures d'application. Vous pouvez effectuer des mesures sur une image agrandie, une image de revue ciné, une image en temps réel ou une image figée. Pour plus d'informations sur les mesures, veuillez consulter le Manuel d'utilisation [Volume avancé].

 **AVERTISSEMENT :** Afin d'éviter toute erreur de diagnostic due à des mesures inexactes, veillez à mesurer les zones d'intérêt à partir du plan d'image optimal.

 **ATTENTION :**

1. Si l'image n'est pas figée ou un changement de mode se produit pendant une mesure, les repères et les données de la mesure seront effacés de l'écran. Les données générales de mesure seront perdues (les données de mesure de l'application sont enregistrées dans le rapport).
2. Si vous arrêtez le système pendant une mesure ou si vous appuyez sur la touche <End Exam>, les données qui n'ont pas été enregistrées seront perdues.
3. En mode d'imagerie B double, les résultats des mesures provenant de l'image fusionnée sont susceptibles d'être inexacts. Par conséquent, les résultats sont fournis à titre de référence uniquement. Ils ne sont pas destinés à des fins de confirmation d'un diagnostic.

7.1 Opérations de base

■ Activation/désactivation des mesures

Activation : appuyez sur la touche <Caliper> du panneau de commande pour activer les mesures générales ou sur la touche <Measure> pour activer les mesures d'application.

Appuyez de nouveau sur <Caliper> ou <Measure> pour quitter l'application.

■ Résultats de mesure et informations d'aide

L'échographe présente les résultats de mesure et les met à jour dans la fenêtre des résultats.

Les informations d'aide relatives aux mesures et aux calculs sont fournies dans la zone des informations d'aide située en bas de l'écran.

7.2 Mesures générales

7.2.1 Mesures générales 2D

Les mesures générales 2D correspondent aux mesures générales effectuées en mode 2D :

Outils de mesure	Fonction
Distance	Mesure la distance entre deux points d'intérêt.
Prof.	Mesure la distance entre la surface de la sonde et le point d'exploration le long du faisceau ultrasons.
Angle	Mesure l'angle d'intersection de deux plans.
Surf	Mesure la surface et le périmètre d'une zone fermée.
Volume	Mesure le volume de l'objet cible.
Droites transversales	Mesure la longueur de deux segments de droite perpendiculaires.
Droites parallèles	Mesure la distance entre chaque paire de droites parmi plusieurs droites parallèles de la séquence.
Longueur de tracé	Mesure la longueur d'une courbe sur l'image.
Rapport de distances	Mesure la longueur de deux segments de droite quelconques et calcule le ratio.
Rapport de surfaces	Mesure la surface de deux zones quelconques et calcule le ratio.
Histogramme B	Mesure la distribution des gris des signaux d'écho ultrasonore dans une zone fermée.
Profil B	Mesure la distribution des gris des signaux d'écho ultrasonore sur une droite.

7.2.2 Mesures générales en mode M

Les mesures générales M correspondent aux mesures générales effectuées en mode M.
Les mesures répertoriées ci-dessous peuvent être réalisées :

Outils de mesure	Fonction
Distance	Mesure la distance verticale entre deux points.
Durée	L'intervalle de temps entre deux points.
Pente	Mesure la distance et le temps entre deux points, puis calcule la pente.
FC	Mesure le temps de n ($n \leq 8$) cycles cardiaques, puis calcule la fréquence cardiaque dans l'image en mode M.
Vitesse	Calcule la vitesse moyenne en mesurant la distance et le temps entre deux points.

7.3 Mesure d'application

L'échographe prend en charge les types de mesures suivants :

- Mesures de l'abdomen : mesure des organes de l'abdomen (foie, vésicule biliaire, pancréas et rein, etc.) et des grands vaisseaux abdominaux.
- Mesures OB : mesure des indices de croissance fœtale (y compris le PFE) et calcul de l'AG et de la DPA. L'évaluation du fœtus peut être réalisée via la courbe de croissance et le profil biophysique fœtal.
- Mesures cardiaques : mesure des fonctions du ventricule gauche et mesure des principaux paramètres artériels et veineux.
- Mesures gynécologiques : mesure de l'utérus, des ovaires et des follicules, etc.
- Mesures des petits organes : mesure des petits organes, de la thyroïde par exemple.
- Mesures urologiques : mesure du volume de la prostate, de la vésicule séminale, des reins, des glandes surrénales, résiduel et des testicules.
- Mesures des vaisseaux périphériques : mesure de la carotide et des vaisseaux des membres supérieurs et inférieurs, mesures cérébrales, etc.
- Mesures pédiatriques : mesure de l'articulation coxo-fémorale.
- Mesures neurologiques : mesure de la structure neurologique.
- Mesures d'urgence : mesure abdominale, obstétrique, superficielle etc. d'urgence.

7.4 Précision des mesures

Tableau 1 Erreur dans les images 2D

Paramètre	Plage de valeurs	Erreur
Distance	Plein écran	$\pm 3 \%$; ou, lorsque la valeur mesurée est inférieure à 40 mm, l'erreur est inférieure à 1,5 mm.
Surf (tracé)	Plein écran	$\pm 7 \%$; ou, lorsque la valeur mesurée est inférieure à 16 cm ² , l'erreur est inférieure à 1,2 cm ² .
Surf (ellipse, cercle)	Plein écran	$\pm 7 \%$; ou, lorsque la valeur mesurée est inférieure à 16 cm ² , l'erreur est inférieure à 1,2 cm ² .
Angle	Plein écran	$\pm 3 \%$.

Tableau 2 Mesures de volume

Paramètre	Plage de valeurs	Erreur
Volume	Plein écran	$\pm 10 \%$; ou, lorsque la valeur mesurée est inférieure à 64 cm ³ , l'erreur est inférieure à 6,4 cm ³ .

Tableau 3 Mesures de durée/mouvement

Paramètre	Plage de valeurs	Erreur
Distance	Plein écran	$\pm 3 \%$; ou, lorsque la valeur mesurée est inférieure à 40 mm, l'erreur est inférieure à 1,5 mm.
Durée	Affichage de la durée	$\pm 2 \%$.
Fréq card	Affichage de la durée	$\pm 4 \%$.
Pente	Affichage de la durée	$\pm 4 \%$.

REMARQUE : Pour chaque rubrique, la précision des mesures est garantie dans les plages mentionnées ci-dessus. Les caractéristiques de précision correspondent aux performances dans les pires conditions ou reposent sur la mise à l'essai réelle de l'échographe, indépendamment de l'erreur de vitesse du son.

8 Commentaires et repères corporels

8.1 Commentaires

Vous pouvez ajouter des commentaires à une image échographique pour attirer l'attention sur des points, noter ou communiquer des faits observés au cours de l'examen. Vous pouvez ajouter des commentaires sur les images suivantes : image agrandie, image de revue ciné, image en temps réel ou image figée. Vous pouvez saisir des commentaires alphabétiques, insérer des commentaires prédéfinis de la bibliothèque des commentaires ou insérer des repères fléchés.



AVERTISSEMENT : Veillez à ce que les commentaires saisis soient corrects. Des commentaires incorrects peuvent conduire à une erreur de diagnostic !

8.1.1 Procédures de base du mode commentaire

1. Activation du mode commentaire

- Appuyez sur la touche [Comment] (Commentaire), le curseur devient « | », le mode commentaire est actif.
- Appuyez sur n'importe quelle touche alphanumérique ; la lettre ou le chiffre correspondant s'affiche près du curseur.
- Appuyez sur la touche <Arrow> pour activer l'ajout de flèche.

Conseils : en mode commentaire, les caractères par défaut saisis sont en majuscules et le témoin de la touche <Caps Lock> est allumé.

2. Amenez le curseur à l'emplacement souhaité afin de définir la position du commentaire. Ajoutez un nouveau commentaire à l'image, selon la situation réelle. Vous pouvez également modifier, déplacer, supprimer, masquer ou afficher les commentaires existants.

3. Désactivation du mode commentaire

- En mode commentaire, appuyez sur la touche <Comment>.
- Vous pouvez également appuyer sur la touche <ESC> ou d'autres touches de mode opératoire, telles que [Caliper], [Measure], etc.
- En mode flèche, appuyez sur la touche <Arrow>.

8.1.2 Menu Commentaire

En mode commentaire, vous pouvez régler les paramètres concernés à l'aide du menu.

■ Affichage ou masquage du menu

Une fois en mode commentaire, appuyez sur la touche <Menu> ou sur le bouton multifonction pour afficher ou masquer le menu Bibliothèque des commentaires.

■ Accueil des commentaires

Affectez la touche définie par l'utilisateur à la fonction d'accueil dans "[Conf.] → [Prédéf syst.] → [Config tch]".

Amenez le curseur à l'emplacement souhaité pour rédiger un commentaire, puis cliquez sur la touche [Définir Accueil] définie par l'utilisateur. La position actuelle du curseur est définie en tant que position par défaut pour l'ajout de commentaire. Lorsque vous cliquez sur [Accueil], le curseur revient à cette position par défaut.

■ Modification de la taille de la police/flèche

- Cliquez sur [Tl police] pour modifier la taille de police des commentaires : Petit, Moy., Grs.
- Cliquez sur [T. flèche] pour modifier la taille des flèches : Petit, Moy., Grs.

Par défaut, la bibliothèque des commentaires est celle de l'examen en cours. En mode commentaire, l'échographe affiche la bibliothèque de commentaires personnalisée de l'examen en cours. En l'absence de bibliothèque de commentaires personnalisée pour l'examen en cours, il affiche les bibliothèques de commentaires de tous les modes d'examen affectés à la sonde actuelle. Enfin, si aucune bibliothèque n'est personnalisée pour tous les modes d'examen, aucun commentaire ne s'affiche.

Veuillez vous reporter à la section "11.6 Prédéfiniion des commentaires" concernant la prédéfiniion de commentaires pour un mode d'examen spécifique.

■ ABC Display

Cliquez sur [Affich. ABC] pour afficher ou masquer les commentaires ajoutés. Affectez une touche définie par l'utilisateur à la fonction dans "[Conf.] → [Prédéf syst.] → "Config tch"".

8.1.3 Ajout de commentaires

L'échographe peut être configuré avec des bibliothèques de commentaires telles que Abdomen, Cardio, GYN (gynécologie), OB (obstétrique), Urologie, PO (petits organes), Vasculaire, PED (pédiatrie) et Nerve Blocks (Blocs nerveux).

■ Saisie des commentaires

1. Définition de l'emplacement du commentaire

Faites rouler la boule de commande ou appuyez sur les touches directionnelles du clavier pour déplacer le curseur jusqu'à l'emplacement désiré pour le commentaire.

2. Saisie des caractères alphanumériques

- Saisissez les caractères alphanumériques via le clavier qwerty (par défaut, les caractères sont en majuscule) ;
- Pour saisir les caractères qui se trouvent sur la partie supérieure d'une touche, appuyez simultanément sur la touche [Shift] (Maj) et sur la touche correspondante.

3. Passage à une nouvelle ligne

Lors de l'édition (les caractères apparaissent en vert), appuyez sur <Enter> pour déplacer le curseur sur la nouvelle ligne. Il est alors aligné sur la première ligne.

4. En mode d'édition, faites rouler la boule de commande ou appuyez sur le bouton multifonction pour confirmer le caractère ajouté ; le caractère ajouté apparaît en jaune.

■ Ajout d'un commentaire

Dans le menu, positionnez le curseur sur le texte souhaité et appuyez sur <Set> ou sur le bouton multifonction. L'échographe insère automatiquement le texte choisi à l'emplacement spécifié. Le commentaire ajouté est en mode d'édition. Vous pouvez donc le modifier.

- Ajoutez un commentaire combiné : Appuyez sur la touche <Menu> ou sur le bouton multifonction pour afficher le menu. Tournez le bouton pour parcourir les commentaires un par un. Appuyez une nouvelle fois sur le bouton pour sélectionner un élément et l'ajouter sur l'image (le commentaire ajouté est modifiable). Tournez le bouton multifonction pour rechercher la partie suivante et appuyez de nouveau dessus pour ajouter la deuxième partie du commentaire combiné. Répétez la procédure pour ajouter d'autres parties d'un commentaire combiné. Appuyez sur <Set> pour confirmer le commentaire.

■ Ajout d'une flèche




Vous pouvez ajouter une flèche où vous désirez attirer l'attention.

1. Appuyez sur la touche <Arrow> ; une flèche apparaît alors à l'emplacement par défaut.
2. Réglez la flèche.
 - Réglez la position et l'orientation de la flèche : faites rouler la boule de commande jusqu'à la position souhaitée et utilisez le bouton multifonction pour modifier l'orientation par incréments de 15°.
 - Cliquez sur la touche [T. flèche] du menu pour modifier la taille de la flèche :
3. Appuyez sur <Set> ou <Enter> pour ancrer la position de la flèche. La flèche devient jaune.
4. Pour ajouter d'autres flèches, répétez la procédure ci-dessus.
5. Appuyez sur la touche <Arrow> ou <ESC> pour quitter le mode commentaire flèche.

8.1.4 Déplacement des commentaires

1. Positionnez le curseur sur le commentaire à déplacer. Appuyez sur <Set> pour le sélectionner. Le commentaire apparaît alors encadré et en surbrillance.
2. Déplacez le commentaire jusqu'à la nouvelle position à l'aide de la boule de commande.
3. Appuyez sur la touche <Set> pour ancrer le commentaire sur sa nouvelle position. L'opération de déplacement est terminée.

8.1.5 Modification de commentaires

- Modification (Edition) des caractères
 1. Positionnez le curseur sur le commentaire à modifier.
 - Saisissez directement le caractère à la position à laquelle reste le curseur ; ou
 - Appuyez deux fois sur la touche <Set> pour passer en mode d'édition, utilisez la touche  ou  pour déplacer le curseur à l'emplacement où vous souhaitez insérer des caractères, puis saisissez ces caractères.
 2. Appuyez sur la touche pour supprimer le caractère ou le texte de commentaire à droite du curseur. Appuyez sur la touche <Backspace> pour supprimer le caractère ou le texte de commentaire à gauche du curseur.
 3. Faites rouler la boule de commande ou appuyez sur la touche <Set> ou sur le bouton multifonction pour confirmer la modification et quitter l'édition. Les commentaires apparaissent en jaune.
- Modification (Edition) des flèches
 1. Positionnez le curseur sur la flèche à modifier. Lorsque le curseur devient , appuyez sur la touche <Set>. La flèche en question apparaît en vert, elle est encadrée de vert pour indiquer qu'elle peut être modifiée. Déplacez le curseur pour modifier la position de la flèche.
 2. Tournez le bouton multifonction pour modifier sa direction.
 3. Appuyez sur la touche <Set> ou <Enter> pour terminer la modification.

8.1.6 Suppression des commentaires

- Suppression des caractères, des textes ou des flèches
 1. Déplacez le curseur jusqu'au commentaire à supprimer.
 2. Appuyez sur la touche <Set> pour sélectionner le commentaire.
 3. Appuyez sur la touche ou <Clear> pour opérer la suppression.
- Suppression d'un caractère, d'un texte ou d'une flèche récemment ajouté

Après l'ajout de plusieurs commentaires et si le curseur a la forme "I" ou " ✂", vous pouvez supprimer les commentaires récemment ajoutés ou édités en appuyant sur la touche <Clear>.
- Suppr. tt comment.

Appuyez de manière prolongée sur la touche <Clear> pour supprimer tous les commentaires.

REMARQUE :

1. Si vous ne sélectionnez aucun objet, en appuyant sur la touche <Clear>, vous effacez tous les commentaires et tous les repères de mesure.
2. Si vous mettez le système hors tension, tous les commentaires de l'image sont effacés.

8.2 Body Mark

La fonction des repères corporels (pictogrammes) permet d'indiquer la position d'examen du patient ainsi que la position et l'orientation de la sonde.

L'échographe propose des repères corporels pour les applications suivantes : abdomen, cardiologie, gynécologie, obstétrique, urologie, petits organes et vasculaire. Pour chaque mode d'examen, vous pouvez prédéfinir les repères corporels généraux configurés par le système. Vous pouvez également personnaliser les repères corporels. Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la section "11.5 Prédéfinition des repères corporels".

8.2.1 Procédures d'utilisation des repères corporels

Pour ajouter le premier repère corporel, procédez comme suit :

1. Appuyez sur <Body Mark> pour activer le mode repère corporel.
2. Sélectionnez le repère corporel puis réglez la position et l'orientation de l'icône de sonde.
3. Quittez le mode de repère corporel :
 - Appuyez sur la touche <Set> (Définir) pour confirmer la position et l'orientation du symbole de la sonde et quitter le mode de repère corporel.
 - Sur le panneau de commande, appuyez une nouvelle fois sur [Body Mark].
 - Appuyez sur la touche [Esc] (Echap) pour confirmer l'opération en cours et désactiver le mode repère corporel.

8.2.2 Menu

Appuyez sur <Menu> pour afficher le menu de repère corporel. Les méthodes applicables sont les suivantes :

- Sélection d'une bibliothèque de repères corporels
Déplacez le curseur sur le titre du menu et sélectionnez la bibliothèque souhaitée.
- Affich.
Cliquez sur [Affich.] pour afficher ou masquer le repère corporel ajouté.

8.2.3 Ajout de repères corporels


- Pour ajouter le premier repère corporel, procédez comme suit :
 - (1) Activez le mode de repère corporel.
 - (2) Sélectionnez la bibliothèque de repères corporels via le titre du menu.
 - (3) Sélectionnez le repère corporel.
Positionnez le curseur sur le repère corporel désiré pour mettre votre choix en surbrillance, puis appuyez sur la touche <Set> pour ajouter le repère corporel sélectionné ou tournez le bouton multifonction pour afficher les repères corporels.



- (4) Appuyez sur <Set> pour confirmer la sélection.
- (5) Pour régler la position et l'orientation du symbole de la sonde :
 - A l'aide de la boule de commande, placez le symbole de la sonde sur la position correcte.
 - Tournez le bouton multifonction pour régler l'orientation.
 - Appuyez sur la touche <Set> (Définir) pour confirmer la position et l'orientation du symbole de la sonde et quitter le mode de repère corporel.

8.2.4 Déplacement des repères corporels

Vous pouvez déplacer le graphique du repère corporel vers n'importe quel emplacement dans la zone de l'image.

1. Positionnez le curseur sur le repère corporel, en faisant rouler la boule de commande. Le curseur se transforme en , ce qui signifie que vous pouvez déplacer le pictogramme vers une nouvelle position.
2. Appuyez sur la touche <Set> pour sélectionner le repère corporel. Un cadre s'affiche autour du graphique.
3. Faites rouler la boule de commande pour déplacer le graphique du repère corporel sur la position désirée.
4. Appuyez sur <Set> pour ancrer et confirmer la nouvelle position du graphique.

REMARQUE : En mode B double, vous ne pouvez pas déplacer les repères corporels d'une fenêtre d'image individuelle à une autre.

8.2.5 Suppression des repères corporels

- Pour supprimer un repère corporel, procédez comme suit :
 1. Utilisez la boule de commande pour positionner le curseur sur le graphique du repère corporel et appuyez sur <Set> pour le sélectionner.
 2. Appuyez sur la touche <Clear> pour supprimer le repère corporel sélectionné.

REMARQUE : En mode repère corporel, si aucun objet n'est sélectionné, vous pouvez effacer l'ensemble des commentaires, des repères corporels et des mesures générales affichés à l'écran en appuyant sur la touche <Clear>.

Conseils :

- Si vous mettez le système hors tension, revenez aux réglages prédéfinis ou changez d'examen/patient/mode/sonde, les repères corporels sont effacés.

9 Gestion des données patient

Un enregistrement d'examen regroupe toutes les informations et données découlant d'un examen.

Il contient les informations suivantes :

- Informations de base relatives au patient et données d'examen
- Fichiers images
- Rapport

<p>REMARQUE :</p> <ol style="list-style-type: none">1. N'utilisez PAS le disque dur interne à des fins de stockage d'images à long terme. Il est recommandé d'effectuer des sauvegardes quotidiennement. Il est recommandé d'utiliser des supports de stockage externes pour archiver les images.2. L'espace disponible dans la base de données des patients est limité. Veillez à sauvegarder ou effacer les données patient régulièrement.3. Mindray ne peut être tenue pour responsable des pertes de données si vous NE respectez PAS les procédures de sauvegarde recommandées.

9.1 Gestions des informations patient

9.1.1 Saisie des informations patient

Vous pouvez saisir les informations générales relatives au patient ainsi que les informations d'examen dans l'écran Info patient. Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la section "4.2 Informations".

Une fois que toutes les informations patient sont consignées, cliquez sur [Prêt] pour les enregistrer dans les données patient.

9.1.2 Réglage des informations patient

Ouvrez "[Conf.] → [Prédéf syst.] → [Général]" et définissez les éléments suivants dans la zone Info patient. Vous pouvez choisir d'afficher à l'écran le sexe du patient, son âge ou l'opérateur, définir les unités à utiliser pour la taille et le poids et sélectionner la formule de calcul de la surface corporelle.

- Affichage des informations patient
- Unités H&W
- Formule de calcul de la surface corporelle

9.2 Gestion des fichiers d'image

Vous pouvez stocker les fichiers d'image soit dans la base de données patient du système, soit sur un périphérique de stockage externe. Une fois les images enregistrées, vous pouvez effectuer leur revue, les analyser et les visionner (iVision).

9.2.1 Supports de stockage

L'échographe prend en charge les supports mémoire suivants :

- disque dur système
- périphériques mémoire USB : mémoire flash USB, disque dur USB amovible
- DVD±RW, CD-R/W

9.2.2 Formats des fichiers d'image

L'échographe prend en charge les deux types de format de fichier image suivants : compatible système et compatible PC.

■ Formats compatibles système :

- Fichier d'image unique (FRM)
Fichier comportant une seule image statique et qui ne doit pas être compressé. Avec ce type de fichier, vous pouvez effectuer des mesures ou ajouter des commentaires.
- Fichier ciné (CIN)
Format de fichier à images multiples, défini par le système. Permet de réaliser une revue ciné manuelle ou automatique, d'effectuer des mesures ou d'ajouter des commentaires sur les images revues. Lorsque vous ouvrez un fichier CIN stocké, le système passe automatiquement en mode revue ciné.

Il permet d'enregistrer les fichiers FRM au format BMP, JPG, TIFF ou DCM, ou d'enregistrer les fichiers CIN au format AVI ou DCM. Il peut aussi ouvrir les fichiers FRM, JPG, BMP et CIN.

■ Formats compatibles PC :

- Capture d'écran (BMP)
Format de fichier à image unique, utilisé pour sauvegarder l'écran actuel, non compressé.
- Capture d'écran (JPG)
Format de fichier à image unique, utilisé pour sauvegarder l'écran actuel au format compressé ; vous pouvez définir le taux de compression.

- TIFF : format d'exportation d'une image unique.
- Fichiers multimédia (AVI)
Format de fichier à images multiples, format général de fichier ciné.
- Fichier DICOM (DCM)
Format de fichier DICOM standard, à image unique ou images multiples, utilisé pour enregistrer les informations patient et les images.

9.2.3 Prédéfinition du stockage des images

■ Définition de la taille d'image

Vous pouvez définir la taille d'image via [Conf.] → [Prédéf. syst.] → [Général]. Les options disponibles sont illustrées dans la figure ci-dessous :



■ Définition du format d'exportation des images uniques.

● Format

Vous pouvez sélectionner le format d'exportation des images dans la boîte de dialogue Envoi.

REMARQUE : la compression JPEG peut produire une déformation de l'image.

■ Définition de la longueur d'enregistrement ciné

Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la section "6.4 Prédéfinition".

9.2.4 Enregistrement des images sur l'échographe

■ Enregistrement d'une image unique dans le système

- (1) Sélectionnez [Conf.] → [Prédéf. syst.] → [Config tch] → [Sortie] et configurez une touche définie par l'utilisateur pour la fonction "Enr. image sur disque dur".
- (2) Appuyez sur la touche définie par l'utilisateur pour enregistrer l'image.
 - Sur l'écran d'image, appuyez sur la touche de raccourci pour enregistrer l'image unique active avec l'image figée. L'image est enregistrée avec le nom de fichier par défaut dans le répertoire de fichier par défaut au format FRM. La vignette de cette image s'affiche alors dans la zone des vignettes à droite de l'écran. Lorsque vous positionnez le curseur sur la vignette, le nom et l'extension du fichier s'affichent.
 - Lorsqu'une boîte de dialogue s'affiche sur l'écran actif, appuyez sur la touche définie par l'utilisateur pour sauvegarder l'écran au format BMP.

■ Pour enregistrer l'image de boucle ciné sur l'échographe :

- (1) Sélectionnez [Conf.] → [Prédéf. syst.] → [Config tch] → [Sortie] et configurez une touche définie par l'utilisateur pour la fonction "Enr. CIN".
- (2) Fixez une image. Cliquez sur la touche définie par l'utilisateur pour enregistrer le fichier image actif dans le répertoire défini par défaut au format dynamique .CIN.

La vignette de cette image s'affiche alors dans la zone des vignettes dans la partie inférieure de l'écran. Lorsque vous positionnez le curseur sur la vignette, le nom et l'extension du fichier s'affichent.

9.2.5 Enregistrement rapide des images sur mémoire flash USB

Utilisez les touches définies par l'utilisateur pour procéder à l'enregistrement rapide d'une image unique ou d'une séquence ciné sur une mémoire flash USB.

Le fichier image est alors enregistré dans le répertoire suivant : disque U\US Export\dossier patient\dossier examen\Image ID.bmp, où

- Le nom du dossier patient est : nom + ID du patient
- Le nom du dossier examen est : mode + heure d'examen
- Pour enregistrer une image unique sur mémoire flash USB, procédez comme suit :
 - (1) Définissez la touche utilisateur via le chemin : [Conf.]→ [Prédéf. syst.]→ [Config tch]. Sélectionnez une touche dans la zone Fct. touche à gauche puis, dans la page Sortie de la zone Fonction à droite, sélectionnez "Env. image au disque USB".
 - (2) Quitter le mode de prédéfinition pour revenir à l'écran principal.
 - (3) Appuyez sur la touche définie par l'utilisateur pour enregistrer l'image sur mémoire flash USB.
- Pour enregistrer une séquence ciné sur mémoire flash USB, procédez comme suit :

Enregistrez les images ciné sur mémoire flash USB au format AVI.

 - (1) Définissez la touche utilisateur via le chemin : [Conf.]→ [Prédéf. syst.]→ [Config tch]. Sélectionnez une touche dans la zone Fct. touche à gauche puis, dans la page Sortie de la zone Fonction à droite, sélectionnez "Envoy ciné AVI au disque USB".
 - (2) Quitter le mode de prédéfinition pour revenir à l'écran principal afin d'explorer et figer une image.
 - (3) Appuyez sur la touche définie par l'utilisateur pour enregistrer la boucle ciné.

9.2.6 Enregistrement rapide d'image plein écran sur le système

Cette fonction peut enregistrer l'image plein écran active sur le système avec l'image en temps réel.

1. Définissez la touche utilisateur via le chemin : [Conf.] (en appuyant sur <Conf.>)→ [Prédéf syst.]→[Config tch]. Sélectionnez une touche sur la page Fct. touche à gauche puis, sur la page Sortie de la zone Fonction à droite, sélectionnez "Send Full Screen Image to Local" (Env image plein écran au disque local).
2. Une fois le réglage effectué, vous pouvez utiliser la touche définie par l'utilisateur pour enregistrer l'image plein écran sur le système.

9.2.7 Vignettes

Les images ou boucles ciné enregistrées s'affichent sous la forme de vignettes à l'écran :


- Dans l'écran iStation, les vignettes se réfèrent aux images enregistrées pour l'examen ou pour le patient sélectionné.
- En mode d'exploration ou en mode figé, les vignettes se réfèrent aux images enregistrées pendant l'examen en cours.
- Dans l'écran Revoir, les vignettes font référence aux images enregistrées pendant le même examen.
- Dans l'écran Revoir, ouvrez une image afin d'activer le mode d'analyse des images. Toutes les vignettes associées à l'examen s'affichent.
- Lorsque vous positionnez le curseur sur une vignette, le nom et le format du fichier s'affichent.

9.2.8 Revue et analyse d'images

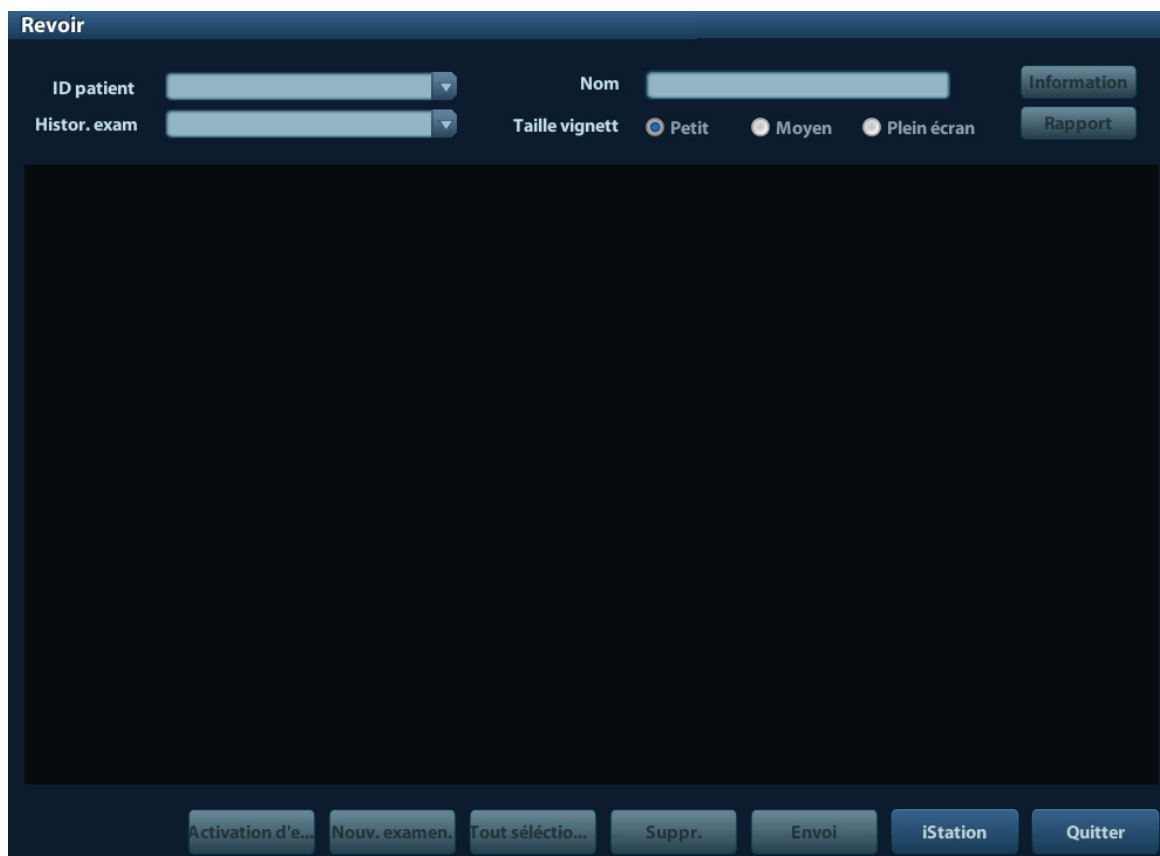
Vous pouvez revoir et analyser les images enregistrées (uniquement les images enregistrées à l'emplacement système par défaut).

9.2.8.1 Pour revoir les images

Vous pouvez revoir toutes les images enregistrées dans un examen et envoyer, supprimer ou analyser ces images.

- Pour accéder au mode de revue :
 - Appuyez sur <Review> pour accéder à l'écran Revoir. L'échographe affiche les images enregistrées dans cet examen du patient en cours (si aucun patient n'est en cours d'examen, vous pouvez revoir les images du dernier examen).
 - Sélectionnez un examen relatif à un patient dans l'écran iStation, puis appuyez sur  pour ouvrir l'écran Revoir et visionner les images de ce patient. Vous pouvez également sélectionner plusieurs examens. L'échographe affiche les images de l'examen le plus récent en mode de revue.

L'écran Revoir est illustré ci-dessous :



- Pour quitter le mode de revue :
 - Cliquez sur [Quitter] dans l'écran Revoir ; ou
 - Appuyez sur <ESC> ou de nouveau sur <Review>.
- Opérations de base

Positionnez le curseur sur un élément d'examen dans la zone Histo. exam. et appuyez sur la touche <Set>. Les éléments sélectionnés sont mis en surbrillance. Cliquez sur [Aprop] or [Rapp.] pour afficher les informations patient ou le rapport. Double-cliquez sur une vignette pour afficher et analyser une image. Parcourez les vignettes en tournant le bouton multifonction.

Les boutons fonction sont décrits ci-dessous :

 - Histo. exam. :

Vous pouvez sélectionner un examen particulier dans le répertoire des examens pour revoir les images correspondantes.

 - Si vous y accédez depuis iStation, l'écran affiche les enregistrements sélectionnés dans iStation. Si aucun patient n'est sélectionné dans iStation, tous les patients de la base de données du système s'affichent et l'examen du patient en cours est répertorié.
 - Si vous y accédez depuis le mode d'imagerie, l'écran Revoir affiche les images de l'examen actif. L'image sélectionnée par défaut est l'image affichée sur l'écran principal de prévisualisation.
 - Info :

Cliquez sur ce bouton pour ouvrir l'écran Info patient, dans lequel vous pouvez revoir ou modifier les informations du patient actuellement sélectionné.
 - Rapport

Cliquez sur ce bouton pour revoir ou modifier le rapport du patient actuellement sélectionné.
 - Opérations sur les images

[Sélect. tt] : Cliquez sur ce bouton pour sélectionner l'ensemble des images dans la fenêtre des vignettes.

[Désélect. tt] : Quand vous appuyez sur le bouton [Sélect. tt], le libellé devient [Désélect. tt]. Si vous cliquez sur ce bouton, toutes les sélections effectuées sont annulées.

[Envoi] : Cliquez sur ce bouton pour envoyer l'image sélectionnée vers un autre emplacement (un serveur DICOM, une imprimante, etc.) ou sélectionnez l'image et cliquez sur ➡.

[Suppr.] : Cliquez sur ce bouton pour supprimer l'image sélectionnée. Vous pouvez également sélectionner l'image puis cliquer sur ✕.
 - Taille des vignettes

Petite : 4 x 4

Moyenne : 2 x 2

Chargé : 1 x 1
 - Changements d'écran :

[Nouv. ex] : Cliquez sur ce bouton pour créer un examen pour le patient sélectionné et ouvrir l'écran Info patient.

[Activ. exam.] : Cliquez sur ce bouton pour accéder à l'examen actuellement sélectionné et ouvrir l'écran d'exploration de l'image ; ce bouton est grisé si le patient actif ne peut pas être activé.

[iStation] : Cliquez sur ce bouton pour ouvrir l'écran iStation.

[Quitter] : Cliquez sur ce bouton pour quitter le mode de revue et revenir à l'écran principal.

9.2.8.2 Pour analyser des images

Cette fonction vous permet de visionner une image enregistrée, de l'agrandir / la réduire, d'effectuer le post-traitement et des mesures sur cette image, d'ajouter des commentaires et d'effectuer une revue ciné (images multiples). Les procédures à suivre pour réaliser ces opérations sont identiques à celles illustrées pour l'exploration en temps réel. Pour plus d'informations, veuillez vous reporter aux sections appropriées.

- Pour activer le mode d'analyse des images, procédez comme suit :
 - En mode d'exploration de l'image ou lorsque l'image est figée, double-cliquez sur une vignette enregistrée pour cet examen afin d'activer le mode d'analyse des images ; ou
 - double-cliquez sur la vignette sélectionnée pour ouvrir l'image.
- Pour désactiver le mode d'analyse des images, procédez comme suit :
 - Appuyez sur <Freeze> ou cliquez sur [Quitter] pour quitter et accéder au mode d'exploration en temps réel.
 - Appuyez sur <Review> pour passer du mode d'analyse des images au mode de revue.

En mode d'analyse des images, l'image sélectionnée est ouverte sur l'écran et les vignettes du même examen s'affichent dans la zone vignettes. Vous pouvez tourner les pages, ou encore supprimer ou envoyer une image sélectionnée.

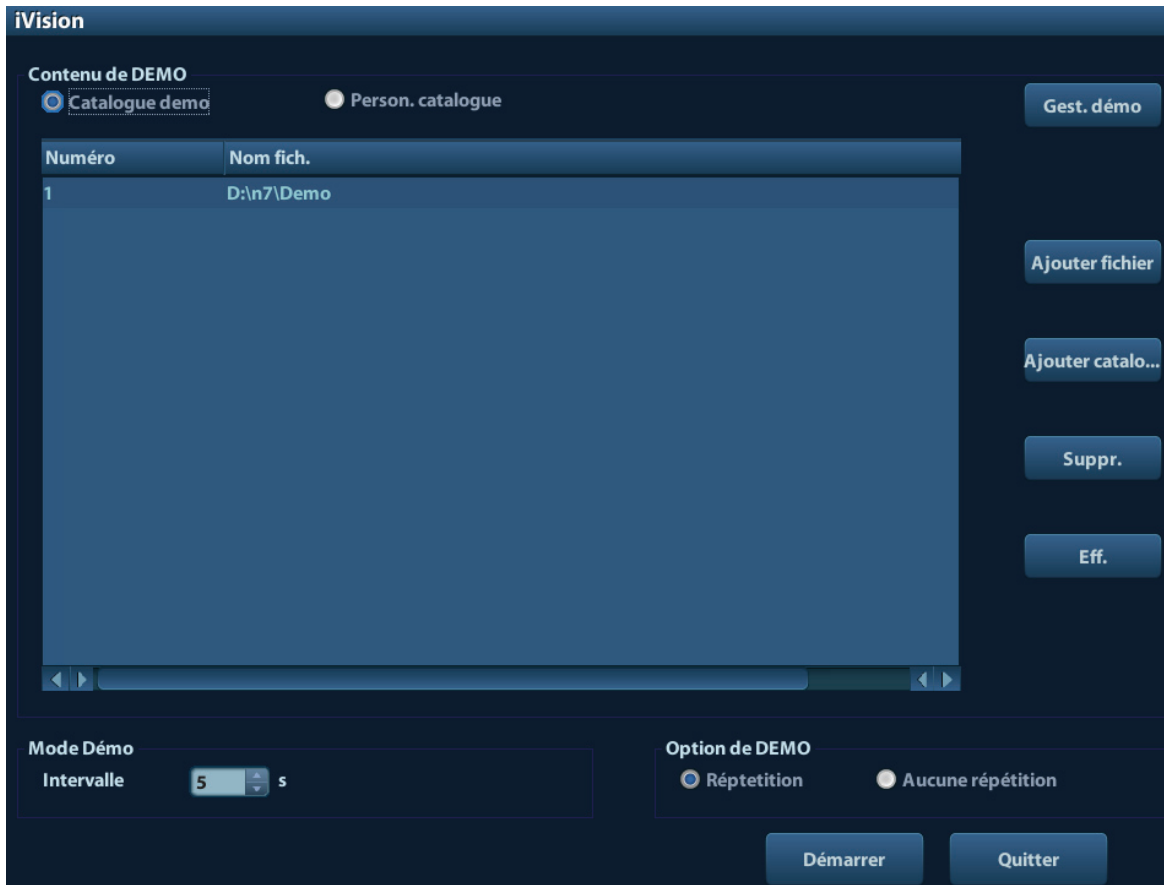
9.2.9 iVision

La fonction iVision permet de visionner les images enregistrées. Les fichiers images sont lus l'un après l'autre dans l'ordre des noms de fichier (y compris les fichiers images aux formats compatibles système et PC).

Pour effectuer la démonstration d'une image, procédez comme suit :

1. Ouvrez l'écran iVision :
Accédez au menu d'image-> [Avancé], sélectionnez [iVision] ou appuyez sur la touche iVision définie par l'utilisateur sur le panneau de commande (chemin de configuration : [Conf.]→[Prédéf. syst.]→[Config tch]).
2. Ajoutez le contenu à lire, puis sélectionnez le mode de démonstration.
3. Sélectionnez l'un des éléments de la liste et cliquez sur [Démar] pour démarrer la démonstration.
4. Cliquez sur [Quitter] ou appuyez sur <ESC> pour quitter le mode iVision.

L'écran iVision est illustré ci-dessous :



■ Éléments de démonstration

Les éléments de démonstration sont les fichiers d'image aux formats pris en charge par l'échographe. Vous pouvez sélectionner des données d'examen contenues dans la base de données patient ou des fichiers et dossiers d'images pris en charge par le système afin d'ajouter ces éléments à la liste de démonstration. Les images contenues dans les répertoires et sous-répertoires correspondant aux fichiers et dossiers de la liste des éléments de démonstration sont lues une par une. Le système ignore automatiquement les fichiers qui ne peuvent pas être ouverts.

■ Éléments de démonstration

Deux types de catalogue sont disponibles : Catalogue demo et Person. catalogue.

- Catalogue demo : il s'agit du dossier présent sur le disque dur (disque E), sur lequel est enregistrée la démonstration d'usine. L'échographe lit les images de ce dossier pendant la démonstration.

L'échographe prend en charge l'importation, la suppression ou l'effacement des données dans le catalogue de démonstration.

Cliquez sur [Gest. demo] pour effectuer les opérations suivantes :

[>]: pour importer des données dans le catalogue de démonstration.

[<]: pour supprimer les données sélectionnées.

[<<]: pour supprimer toutes les données.

- Person. catalogue : contient le catalogue de l'image affichée. L'échographe lit les images de ce catalogue pendant la démonstration.

Utilisez les boutons situés à droite pour manipuler le catalogue :

[Ajout. fichier] : pour ajouter des fichiers à la liste de fichiers.

[Ajout. catalogue] : pour ajouter le catalogue à la liste de fichiers.

[Suppr.] : pour supprimer le fichier ou le catalogue sélectionné de la liste de fichiers.

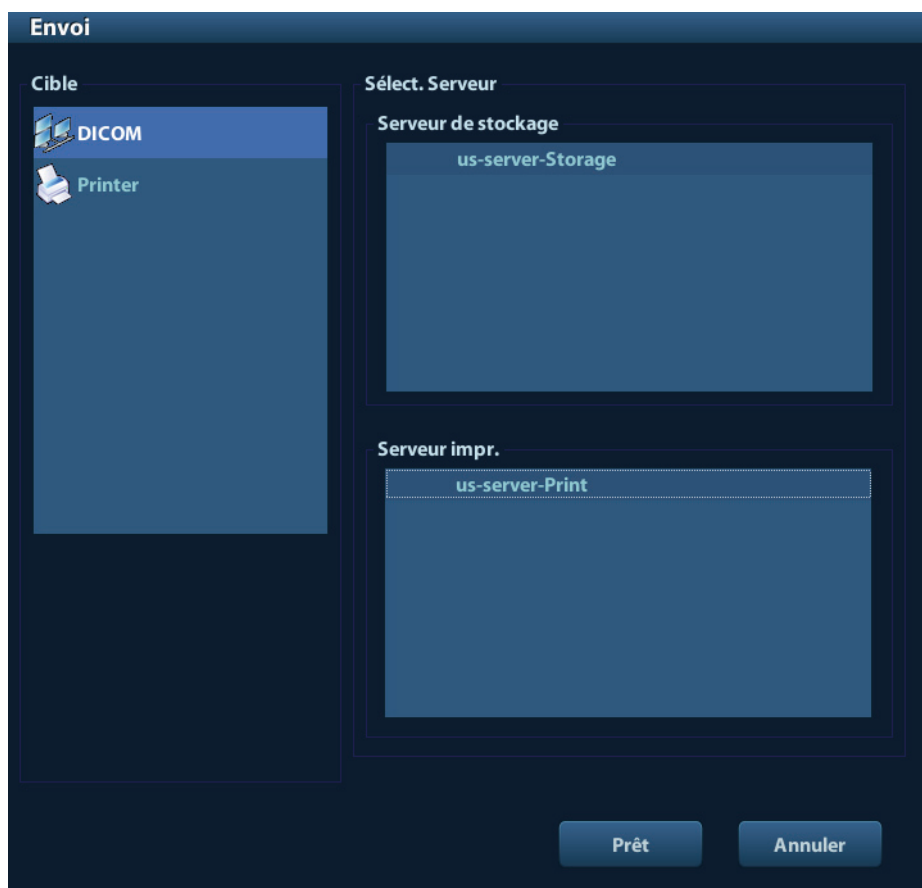
[Eff.] : pour effacer l'ensemble des fichiers et des catalogues de la liste de fichiers.

- Mode de démonstration
Intervalle : reportez-vous à l'intervalle de la démonstration. La plage de réglages est comprise entre 1 et 500 s.
- Option de démonstration
Vous pouvez choisir de répéter la démonstration ou de la quitter dès qu'elle est terminée.

9.2.10 Envoi d'un fichier image

- Dans l'écran de l'image, sélectionnez une vignette d'image enregistrée, cliquez sur ➔ (Envoi) dans le coin droit de l'image. L'image peut être envoyée vers le périphérique externe, le graveur DVD, le serveur de stockage DICOM, le serveur d'impression DICOM, l'imprimante connectée au système, etc.
- Sur l'écran iStation, cliquez sur ➔ ou sur l'écran Revoir, cliquez sur [Envoi] pour transmettre l'image sélectionnée aux périphériques externes.

Voir l'illustration ci-dessous.





- Pour les périphériques de stockage externes (périphériques de stockage USB et DVD) :
 - a) Transfert au format PC : JPG/AVI, BMP/AVI, TIFF/AVI. Une image monochrome est exportée au format JPG, TIFF ou BMP et le fichier ciné est exporté au format AVI.
 - b) Transfert au format DCM : DCM (à image unique et à images multiples).
 - c) Vous pouvez également choisir d'exporter le rapport au format RTF.
- Pour le serveur de stockage ou d'impression DICOM, sélectionnez le Stockage DICOM ou le Serveur d'impression.
- Pour une imprimante vidéo, envoyez les images à l'imprimante vidéo connectée au système. Pour une imprimante graphique/texte, envoyez les images à l'imprimante graphique/texte par défaut.

9.3 Gestion des rapports


■ Stockage des rapports :

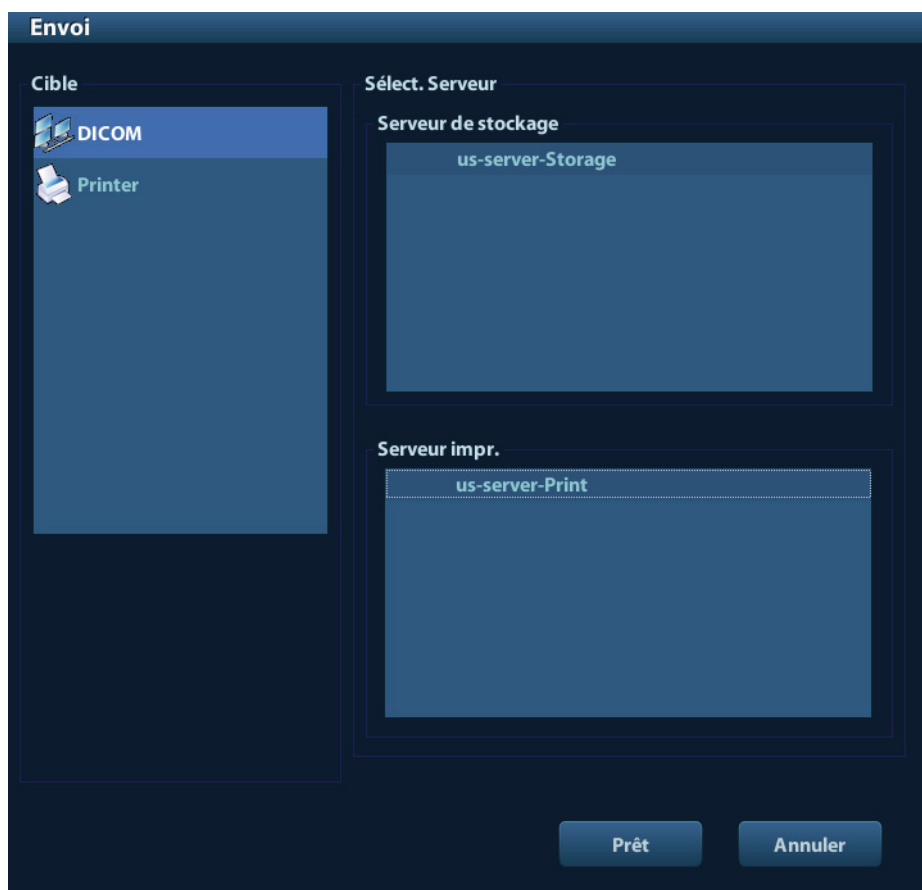
Les rapports d'examen sont enregistrés dans le répertoire correspondant à l'examen du patient.

■ Importation, exportation et envoi d'un rapport

Dans l'écran iStation, sélectionnez les données patient, puis cliquez sur  (Restor.) ou  (Sauv.) afin d'importer ou d'exporter les informations patient, les images et les rapports depuis ou vers un périphérique mémoire externe. Voir l'illustration ci-dessous :



Dans l'écran iStation, cliquez sur  ou dans l'écran Revoir, cliquez sur [Envoi] pour transmettre les données patient à un périphérique mémoire externe. Vous pouvez également choisir d'exporter les rapports accompagnés d'images. Voir l'illustration ci-dessous.



Pour exporter le rapport :

- (1) Cochez l'option "Exporter rapport" sur l'écran.
- (2) Cliquez sur [Prêt] pour confirmer.

Vous pouvez sélectionner le format du papier à utiliser pour le rapport via le chemin :
[Conf.] → [Prédéf. impr]

■ Impression d'un rapport

Procédez à l'impression à l'aide d'une imprimante graphique/texte connectée à l'échographe. Veuillez vous reporter à la section "11.7 Prédéfiniion du service d'impression" pour plus d'informations sur le réglage de l'imprimante par défaut pour l'impression des rapports.

Pour plus d'informations sur les opérations relatives aux rapports, veuillez consulter le Manuel d'utilisation [Volume avancé].

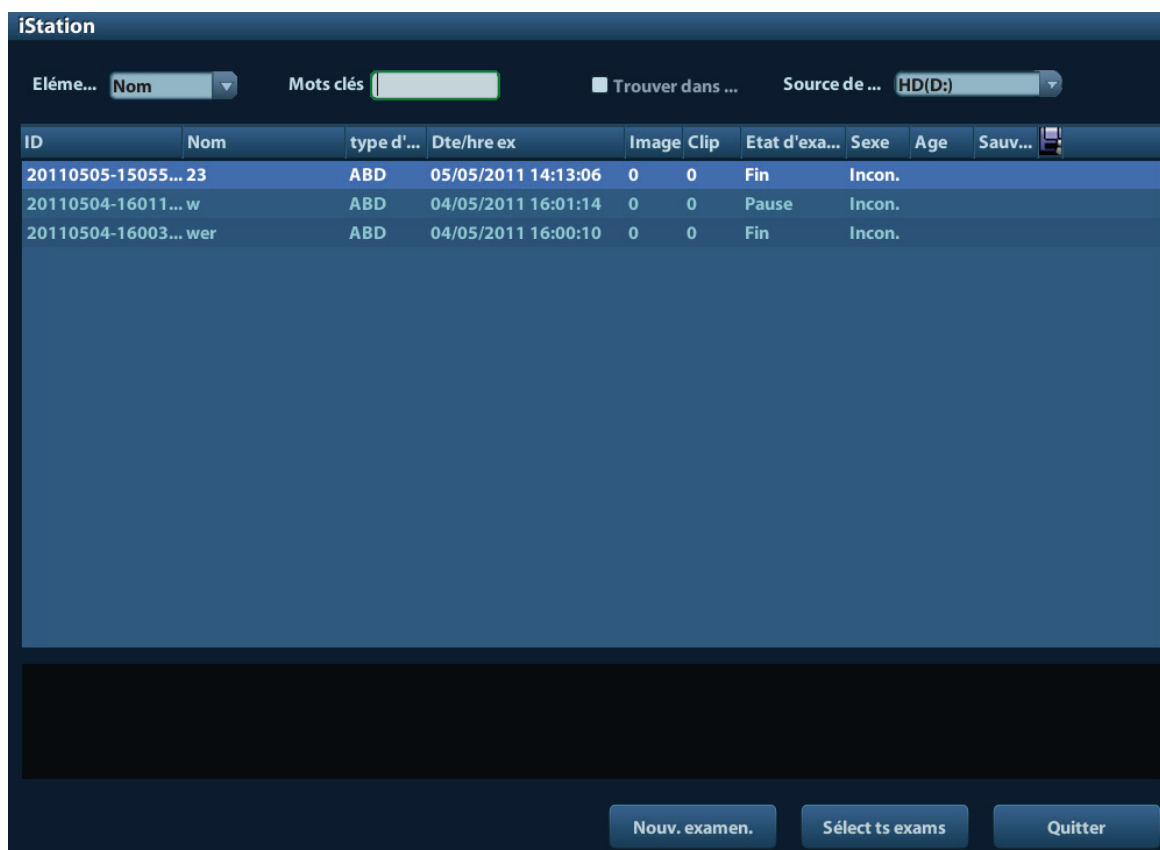
9.4 Gestion des données patient (iStation)

Les données patient comprennent les informations élémentaires sur le patient, les informations de l'examen, les fichiers image et les rapports. Vous pouvez rechercher, afficher, sauvegarder, envoyer, restaurer ou supprimer les données patient dans iStation.

■ Accès à iStation

- Appuyez sur la touche <iStation> du panneau de commande ; ou
- Cliquez sur [iStation] dans l'écran Info patient ; ou
- Cliquez sur le bouton [iStation] dans l'écran Revoir.

L'écran iStation est illustré ci-dessous :



Affichage des informations patient

- Source de données
Sélectionnez la source des données patient (par défaut, la base de données des patients).
- Liste des patients
Affichez les informations patient, le mode d'examen, le nombre d'images et de séquences ciné, l'état de l'examen (sauvegardé ou non).
- Nouvel examen :
Après avoir sélectionné les données ou l'examen d'un patient dans l'écran iStation, cliquez sur [Nouv. ex.] pour ouvrir l'écran Info patient. Sélectionnez un nouveau mode d'examen, puis cliquez sur [Prêt] pour lancer un nouvel examen.
- Sélect ts exams/Désél ts examens
Cliquez sur [Sélect ts exams] pour sélectionner toutes les données patient répertoriées. Le libellé du bouton devient alors [Désél ts examens]. Si vous cliquez sur [Désélect. tt], toutes les sélections effectuées sont annulées.

9.4.1 Recherche d'un patient

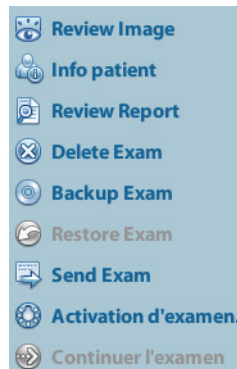
- (1) Sélectionnez la source de données.
- (2) Définissez les critères de recherche (nom, ID, date de naissance et date d'examen) dans la liste déroulante des éléments.
- (3) Saisissez le mot clé correspondant au critère de recherche sélectionné. Les résultats de la recherche s'affichent dans la liste des patients.
- (4) Lorsque vous sélectionnez un patient de la liste, les images de ce patient sont affichées en bas de l'écran.

Remarque :


- Si vous effacez le mot clé, saisissez un autre mot clé ou annulez la sélection de "Résult. rech.", le système actualise les résultats.
- Sélectionnez "Résult. rech.". Le système relance la recherche sur la base des derniers résultats.

9.4.2 Affichage et gestion des données patient


Sélectionnez les informations patient souhaitées dans la liste. Le menu ci-après s'affiche :




■ Revue

Sélectionnez un examen de patient et cliquez sur  pour ouvrir l'écran correspondant.



■ Info :

Sélectionnez l'examen d'un patient et cliquez sur  à droite de l'écran pour afficher les informations patient relatives à l'examen en question.

■ Rapport


Après avoir sélectionné l'examen d'un patient, cliquez sur  pour afficher le rapport relatif à cet examen patient. Si aucun rapport n'a été généré pour l'examen, le système affiche le message "Aucun rapport associé à l'examen".


■ Suppr.

Sélectionnez un examen ou un patient et cliquez sur  pour effectuer la suppression. Vous ne pouvez toutefois ni supprimer les données patient à imprimer, exporter ou envoyer, ni supprimer l'examen en cours. Pour supprimer une image, sélectionnez l'image et cliquez sur  à droite de l'écran.

■ Sauvegarde/Restauration



Vous pouvez sauvegarder les données patient sélectionnées sur un support compatible avec le système afin de les afficher sur un PC, ou restaurer les données patient depuis un support externe.

 : cliquez sur ce bouton pour exporter les données patient sélectionnées vers un support compatible avec le système.


 : cliquez sur ce bouton pour importer les données patient depuis un support externe. Si aucune source de données externe n'est connectée, le bouton n'est pas disponible.

■ Envoi

Le système prend en charge l'envoi de données vers les périphériques de stockage externe ou les imprimantes.


- Sélectionnez l'enregistrement patient et cliquez sur  **Send Exam** dans le menu pour envoyer les images ou données d'examen de l'enregistrement sélectionné.
- Sélectionnez l'image et cliquez sur  pour envoyer l'image sélectionnée.
 - Envoyez les données d'examen du patient à des périphériques USB et à un lecteur DVD.
 - Envoyez les images à des périphériques USB, un lecteur DVD, un serveur de stockage DICOM, une imprimante DICOM, une imprimante vidéo et une imprimante graphique/texte.
 - Envoyez les images avec le rapport à des périphériques USB et un lecteur DVD.
 - Le transfert de format est disponible lors de l'envoi d'images à des périphériques USB ou à un lecteur DVD. Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la section "9.2.10 Envoi d'un fichier image".
 - Appuyez sur la touche <Shift> du panneau de commande pour sélectionner plusieurs examens ou images simultanément.

■ Activation de l'examen :

Sélectionnez un examen réalisé au cours des dernières 24 heures, puis cliquez sur  **Activation d'examen.** pour activer l'examen et charger les informations patient élémentaires et les données de mesure afin de poursuivre l'examen.

Si vous souhaitez sélectionner les données patient dans une base de données externe, afin de démarrer un nouvel examen ou de restaurer l'examen, vous devez d'abord permettre que le système charge les données patient dans la base de données patient du système.


■ Reprise d'un examen

Sélectionnez un examen suspendu au cours des dernières 24 heures, puis cliquez sur  **Continuer l'examen** pour activer l'examen et charger les informations patient élémentaires et les données de mesure afin de poursuivre l'examen.

Pour poursuivre un examen dont les données sont contenues dans une base de données externe, vous devez d'abord permettre au système de charger les données patient dans la base de données patient du système.

■ Corbeille

La corbeille permet de stocker les données patient, les données d'examen et les images supprimées jusqu'à la mise hors tension de l'échographe. Le système prend en charge la récupération de ces données dans la corbeille. REMARQUE : la corbeille est vidée à la mise hors tension de l'échographe.

Pour rétablir les données patient supprimées, cliquez sur  dans le coin inférieur droit de l'écran (lorsque le bouton est grisé, l'opération n'est pas disponible) pour ouvrir l'écran Corbeille patient.

(1) Sélectionnez les éléments à restaurer dans la liste.

(2) Sélectionnez l'une des opérations suivantes :






- Cliquez sur [Rest. élmts] pour restaurer l'élément sur iStation ;
- Cliquez sur [Suppr.] pour supprimer définitivement l'élément, sans possibilité de restauration ;
- Cliquez sur [Rest. tous élmts] pour restaurer tous les éléments sur iStation ;
- Cliquez sur [Vider corbeille] pour vider la corbeille, sans possibilité de restauration de son contenu.


Cliquez sur [Quitter] pour quitter l'écran Corbeille et revenir à iStation.

9.5 Sauvegarde et suppression des fichiers via le lecteur de DVD


Le système prend en charge les lecteurs/graveurs DVD-RW pour l'écriture des données sur CD/DVD et la lecture des CD/DVD dans le PC.

Supports : DVD±RW, CD-R/W.

- Écriture des données sur un CD/DVD
 - (1) Insérez un CD/DVD dans le plateau du lecteur.
 - (2) Sélectionnez les données à sauvegarder et cliquez sur  **Send Exam** ou  **Backup Exam** dans l'écran iStation ou Revoir. Dans la boîte de dialogue Envoi ou Sauv. dossier patient, sélectionnez le lecteur cible.
 - (3) Cliquez sur  **Backup Exam** ou [Prêt] pour commencer l'écriture. Le symbole  s'affiche alors.
 - (4) Une fois l'écriture terminée, cliquez sur  pour ouvrir la boîte de dialogue Option disque, puis sélectionnez [Ej.] pour éjecter le CD/DVD.

- Pour effacer des données d'un CD/DVD, procédez comme suit :
 - (1) Insérez le CD/DVD dans le plateau.
 - (2) Double-cliquez sur le symbole  afin d'ouvrir l'écran [Option disque], comme montré dans l'illustration ci-dessous. Voir la figure ci-dessous.
 - (3) Cliquez sur le bouton [Effac] pour effacer les données d'un CD/DVD.
 - (4) Une fois l'effacement terminé, cliquez sur [Ej.] dans la boîte de dialogue Option disque.

Remarque :

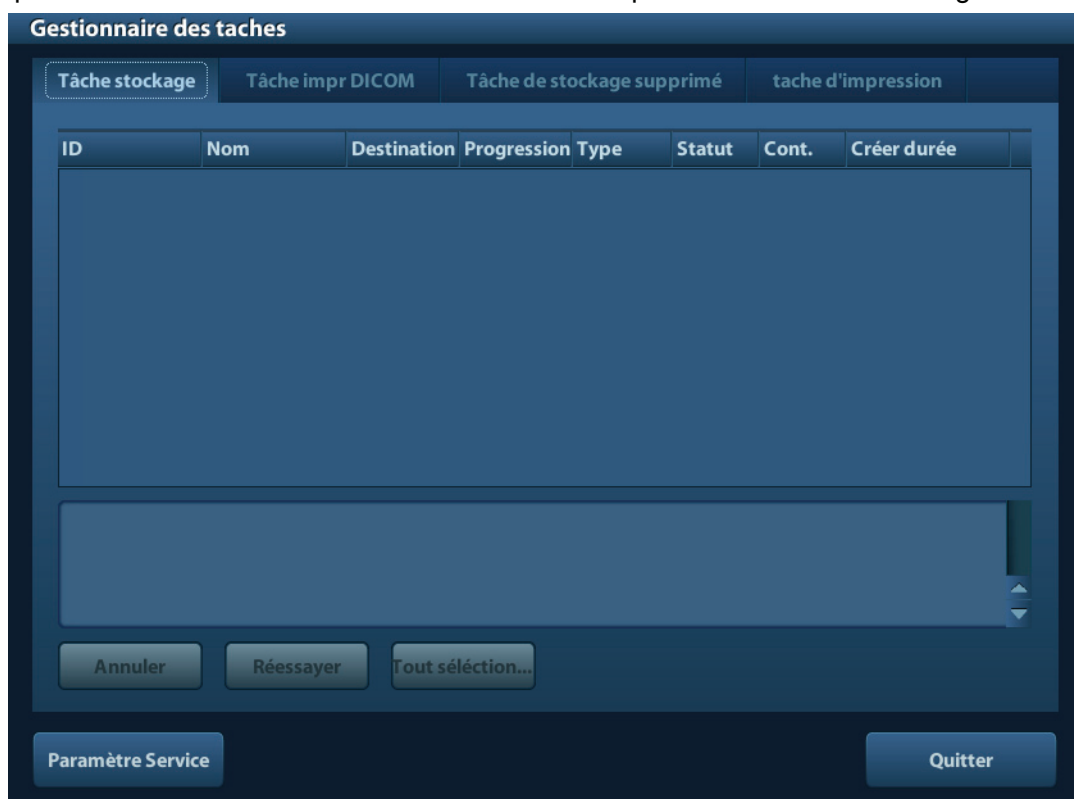
- L'écriture de données via l'option "Envoi" prend en charge la fonction de transfert de format PC, tandis que les CD/DVD écrits avec l'option "Sauv." prennent uniquement en charge les formats compatibles système.
- Le symbole  indique que le CD/DVD en entrée est endommagé ou contient des données au format incorrect.

ATTENTION : Si un CD/DVD est éjecté de force ou si vous effectuez d'autres opérations pendant une sauvegarde, il existe un risque d'échec de la procédure ou de dysfonctionnement du système.



REMARQUE : Vous risquez d'endommager le lecteur DVD-RW/DVD+RW et/ou le système si vous le retirez directement. Reportez-vous à la section "3.6 Connexion/déconnexion d'un périphérique de stockage USB" pour la procédure de déconnexion.

9.6 Gestionnaire des tâches patient

Cliquez sur  dans le coin inférieur droit de l'écran pour ouvrir la boîte de dialogue suivante :



Options incluses :


- Tâche stockg : affiche la tâche de stockage DICOM.
- Tâche impr DICOM : affiche la tâche d'impression DICOM.
- Tâch.stockage supp :
 - Tâche de stockage sur support externe DICOM (dont périphériques à disque et USB).
 - Tâche de sauvegarde (format compatible système) : sélectionnez l'examen à sauvegarder dans iStation et cliquez sur  **Backup Exam**.
 - Envoi à des périphériques externes (dont périphériques à disque et USB) : sélectionnez les images ou données d'examen dans l'écran iStation ou Revoir et cliquez sur  **Send Exam** ou [Envoi].
- Tâche d'impression
Liste des tâches d'impression en cours. Affiche le nom du fichier, l'état (en cours d'impression ou suspendu), le nom de l'imprimante, l'heure de soumission, etc.
Une fois toutes les tâches d'impression terminées, l'icône d'impression disparaît de l'écran.
Dans le cas contraire, vérifiez auprès du gestionnaire qu'aucune tâche n'a échoué.


La boîte de dialogue Gestion tâche affiche l'ID du patient, son nom, la destination, la progression, le type, l'état, le contenu et la date de création de la tâche.


Vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Suppr.
Cliquer sur [Annul.] pour annuler la tâche sélectionnée.

- Réessayer
Cliquez sur [Réessayer] pour réessayer d'exécuter la tâche ayant échoué. Lorsque l'imprimante est à cours d'encre ou de papier, les tâches de la liste d'impression sont suspendues. Cliquez sur [Réessayer] pour reprendre la tâche d'impression suspendue.
- Sélection de l'ensemble des données
Cliquez sur [Sélect. tt] pour sélectionner toutes les tâches.
- Etat des tâches
Sélectionnez la tâche en cours. Le système affiche les informations d'état détaillées ou des informations sur l'erreur.

Lorsque des tâches sont en cours d'exécution, l'icône de gestion des tâches  s'affiche. Cliquez sur cette icône pour contrôler leur déroulement.

Lorsque des tâches échouent, l'icône de gestion des tâches  s'affiche. Cliquez sur cette icône pour en savoir plus sur le motif de l'échec.

L'icône de gestion des tâches  s'affiche pour indiquer qu'aucune tâche n'est en cours d'exécution ou n'a échoué.
- Paramètre de service DICOM
Cliquez sur [Paramètre Service] pour accéder à l'écran de prédéfinition DICOM. Reportez-vous à la section 10.3 Service DICOM.

9.7 Contrôle d'accès

9.7.1 Contrôle d'accès

L'échographe prend en charge les types d'utilisateur suivants :

- Administrateur
L'administrateur système peut consulter toutes les données patient, telles que les informations générales, les images, les rapports, etc.
- Opérateur
L'opérateur ne peut visualiser que les informations d'examen enregistrées dans le système dont il est l'auteur, telles que les informations patient, les images, les rapports, etc.
L'opérateur ne peut pas consulter les données d'examen provenant d'autres opérateurs.

Les opérateurs d'urgence sont des opérateurs normaux, mais qui peuvent accéder au système sans mot de passe. Ils ne peuvent toutefois pas modifier ou supprimer un mot de passe.

9.7.2 Contrôle d'accès

L'administrateur système peut prédéfinir le contrôle d'accès et déterminer si un opérateur est autorisé à accéder à certaines données du système.

Le contrôle d'accès ne peut être défini que par l'administrateur système.

Pour régler le contrôle d'accès :

1. Ouvrez la page "Admin" via le chemin [Conf.]→[Prédéf. syst.]→[Admin].
2. Si l'option [Activ. contrôle compte utilis.] est sélectionnée, vous devez vous connecter avant de pouvoir accéder aux données du système. Autrement, vous pouvez accéder à toutes les données sans autorisation préalable.

9.7.3 Connexion au système

Si l'option [Activ. contrôle compte utilis.] est sélectionnée, vous ne pouvez accéder aux données qu'après vous être connecté au système.

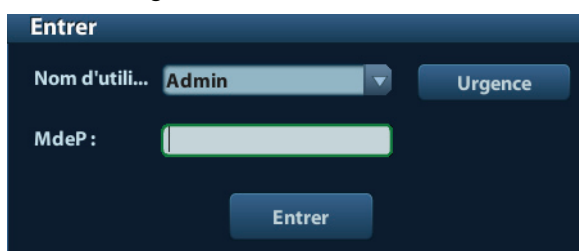
Vous devez saisir votre nom d'utilisateur et mot de passe dans les cas suivants :

- Avant d'accéder au système
- En cas de changement d'utilisateur

Tant que l'échographe est en mode fonction, vous pouvez accéder aux écrans ci-dessus sans répéter la saisie du nom d'utilisateur et du mot de passe. Vous devez à nouveau vous connecter suite au redémarrage ou à la dormance du système.

■ Connexion au système :

- (1) Si le système nécessite que vous vous connectiez avant de pouvoir accéder aux données, la boîte de dialogue suivante s'affiche.




La boîte de dialogue 'Entrer' est présentée sur un fond bleu foncé. Elle contient un menu déroulant 'Nom d'utili...' avec 'Admin' sélectionné, un bouton 'Urgence' à droite, un champ de saisie 'MdeP:' et un bouton 'Entrer' en bas.

- (2) Sélectionnez le nom d'utilisateur dans la liste déroulante Nom util.
- (3) Saisissez le mot de passe, puis cliquez sur [Entr.].

Les utilisateurs d'urgence doivent cliquer directement sur [Urgence] pour se connecter.

■ En cas de changement d'utilisateur

- (1) Pour déconnecter l'utilisateur actuel afin que l'autre utilisateur puisse se connecter, cliquez sur  dans le coin inférieur droit de l'écran pour ouvrir la boîte de dialogue suivante :



La boîte de dialogue 'Gestion de session' est présentée sur un fond bleu foncé. Elle affiche 'Utl. actuel :Admin, connex. à06/05/2011 14:21:44'. En bas, il y a trois boutons : 'Modification de ...', 'Modifier MdP' et 'Annuler'.

- (2) Cliquez sur [Modif.util.] pour ouvrir la boîte de dialogue Entr.
- (3) Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe dans les champs appropriés.

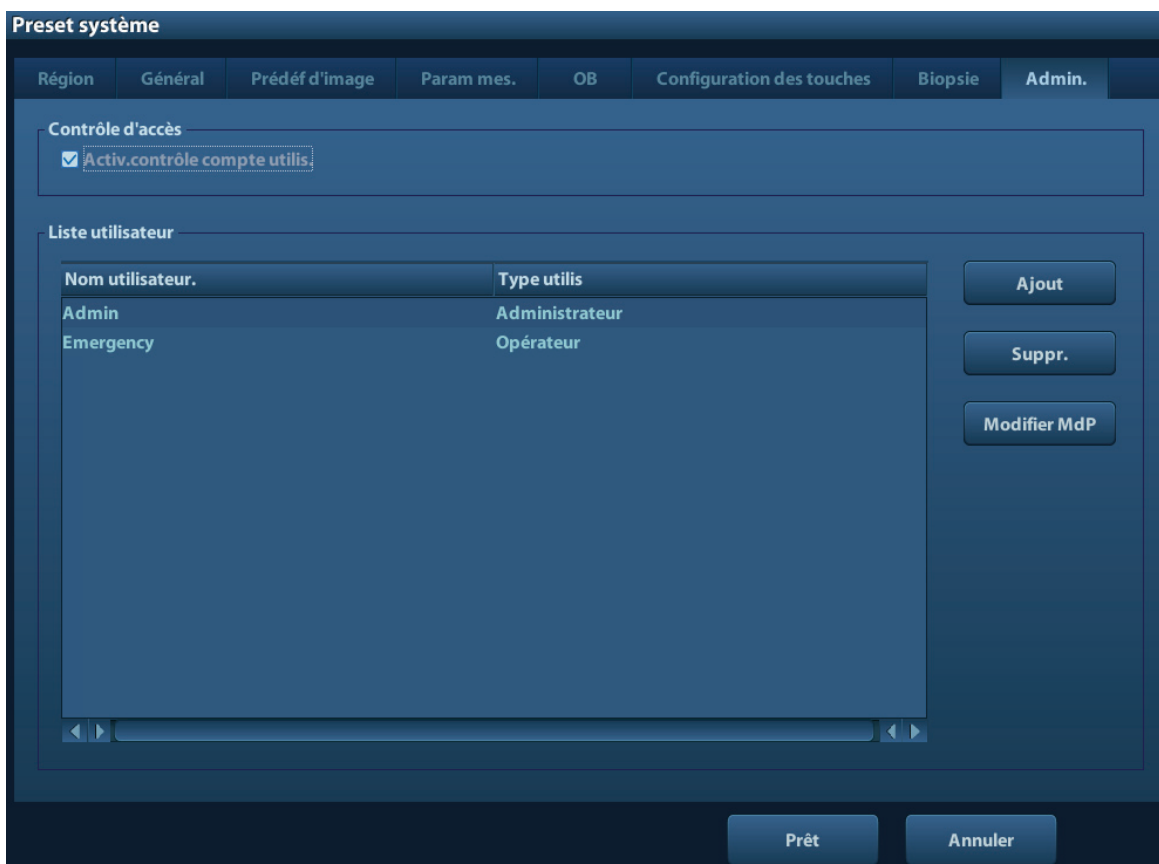
9.7.4 Ajout/suppression d'un utilisateur

L'administrateur système peut ajouter et supprimer un utilisateur, ce que ne peut pas faire l'opérateur.

9.7.4.1 Ajout d'un utilisateur

Tout d'abord, vous devez vous connecter au système en tant qu'administrateur système. Si vous ne le faites pas, vous devrez saisir le nom et le mot de passe de l'administrateur avant de pouvoir procéder au réglage.

1. Ouvrez la page "Admin" via le chemin [Conf.]→[Prédéf. syst.]→[Admin]. Voir l'illustration ci-dessous.



2. Cliquez sur [Ajt] pour ouvrir la page suivante.

The 'Ajout nouvel utilisateur' dialog box contains the following fields and controls:

- Nom utilisateur. (text input field)
- MdeP (password input field)
- Confirmer MdeP (password input field)
- Type utilisateur (dropdown menu with 'Opérateur' selected)
- NB : 6 à 16 caractères max. dans mot de passe.
- Prêt (button)
- Annuler (button)

3. Saisissez le nom d'utilisateur (vous n'êtes pas autorisé à saisir ou modifier un nom existant).

4. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe.
5. Définissez le rôle de l'utilisateur dans la liste déroulante : administrateur ou opérateur.
6. Cliquez sur [Prêt] pour confirmer le réglage et quitter la boîte de dialogue. Le nouvel utilisateur apparaît alors dans la liste des utilisateurs.

9.7.4.2 Suppression d'un utilisateur

Tout d'abord, vous devez vous connecter au système en tant qu'administrateur système. Si vous ne le faites pas, vous devrez saisir le nom et le mot de passe de l'administrateur avant de pouvoir procéder au réglage.

1. Ouvrez la page "Admin" via le chemin [Conf.]→[Prédéf. syst.]→[Admin].
2. Sélectionnez l'utilisateur à supprimer dans la liste des utilisateurs (l'utilisateur d'urgence ne peut pas être supprimé) et cliquez sur [Suppr.] pour le supprimer.


9.7.5 Modification du mot de passe


L'administrateur système peut modifier le mot de passe de tous les utilisateurs. Le mot de passe administrateur n'est pas renseigné à l'usine. Vous pouvez le définir pour l'administrateur. L'opérateur ne peut modifier que son propre mot de passe.

Pour modifier son mot de passe, l'utilisateur doit être connecté au système.

Pour modifier le mot de passe, deux méthodes sont possibles : depuis la page "Admin" ou la boîte de dialogue "Gestion session".

- Page "Admin" (l'administrateur peut modifier le mot de passe)
 - (1) Ouvrez la page "Admin" via le chemin [Conf.]→[Prédéf. syst.]→[Admin].
 - (2) Sélectionnez le nom d'utilisateur à modifier (à l'exception des opérateurs urgence) dans la liste des utilisateurs, puis cliquez sur [Modifier MdP].
 - (3) Saisissez le nouveau mot de passe, confirmez-le dans la boîte de dialogue, puis cliquez sur [Prêt].
- Page Gestion session (l'opérateur général et l'administrateur peuvent modifier le mot de passe)

Une fois l'utilisateur connecté au système, l'icône  s'affiche dans le coin inférieur droit de l'écran.

- (1) Cliquez sur  dans le coin inférieur droit afin d'ouvrir la boîte de dialogue Gestion session, qui affiche les informations de l'utilisateur actuel.
- (2) Pour modifier le mot de passe actuel, cliquez sur [Modifier MdP] afin d'ouvrir la boîte de dialogue correspondante.



Modifier MdP

Nom utilisAdmin

MdeP actuel

Nouv MdeP

Confirmer nouv MdeP

NB : 6 à 16 caractères max. dans mot de passe.

Prêt Annuler

- (3) Saisissez l'ancien et le nouveau mot de passe dans cette boîte de dialogue.
- (4) Cliquez sur [Prêt] pour quitter l'écran.

10 DICOM

REMARQUE : Avant d'utiliser le module DICOM, veuillez lire attentivement le fichier électronique DICOM CONFORMANCE STATEMENT fourni avec l'appareil.

Ce chapitre aborde les réglages prédéfinis, la vérification de la connectivité et les services DICOM de l'échographe compatible DICOM. Il n'inclut pas les configurations du SCP (PACS/SIR/SIH, par exemple).

Le progiciel DICOM est en option. La description donnée dans ce chapitre s'applique donc uniquement aux échographes dotés de ce progiciel.

Cet échographe prend en charge les fonctions DICOM suivantes :

- Fonctions DICOM de base : vérification de connexion DICOM, gestion des tâches DICOM, stockage DICOM, impression DICOM, confirmation de stockage DICOM, stockage sur support externe DICOM (revue DICOMDIR)
- Liste de travail DICOM

Les flux de travail de la prédéfinition et des applications DICOM peuvent être décrits brièvement de la manière suivante :

1. Prédéfinition de DICOM (prédéfinition réseau, prédéfinition DICOM et service DICOM)
2. Vérification de la connexion.
3. Services DICOM (stockage des images, impression, liste de travail, confirmation de stockage, stockage sur supports externes, revue DICOMDIR, gestion des tâches).

Abréviations utilisées dans ce chapitre :

Abr.	Descriptions
DICOM	Digital Imaging and Communications in Medicine (Imagerie et appareils de communication numériques destinés au domaine médical)
AE	Application Entity (Entité d'application)
PDU	Protocol Data Unit (Unité de données de protocole)
SCU	Service Class User (client DICOM) (Utilisateur de la classe de service)
SCP	Service Class Provider (serveur DICOM) (Fournisseur de la classe de service)
SOP	Service-Object Pair (Paire service-objet)

10.1 Prédéfinition de DICOM

10.1.1 Prédéfinition réseau

Prédéfinition des paramètres TCP/IP locaux.

1. Appuyez sur <Conf.> pour ouvrir le menu [Conf.].
2. Sélectionnez [Réseau présél.].

Réseau de preset

Propriété réseau

Adaptateur Net act... Local Area Connection

DHCP Static

Adresse IP 10.2.42.65 XXX.XXX.XXX.XXX

MASQ SS-RES 255.255.255.0 XXX.XXX.XXX.XXX

Passerelle 10.2.42.254 XXX.XXX.XXX.XXX

Prêt Annuler

3. Les options de prédéfinition du paramètre TCP/IP local sont décrites ci-dessous :

Nom	Description
Current Net Adapter (Carte réseau actuelle)	Permet de sélectionner le mode de connexion réseau.
DHCP/Stat.	DHCP : Adresse IP obtenue automatiquement à partir du serveur DNS ; Statique : Vous devez saisir l'adresse IP.
Adresse IP	Adresse IP de l'échographe
MASQ SS-RES	Permet de configurer un segment du réseau.
PASSRLL	Permet de configurer la passerelle IP.

Remarque :

- l'adresse IP de l'échographe ne doit pas être utilisée par d'autres périphériques du réseau, au risque de faire échouer les fonctions DICOM.
- Une fois que vous avez modifié le nom de la station, vous devez redémarrer le système pour appliquer le paramètre (appuyez sur le bouton d'alimentation et sélectionnez Arrêter, puis redémarrez le système après un court instant).

10.1.2 Prédéfinition de DICOM

Pour configurer le service DICOM et les propriétés du serveur :

1. Appuyez sur <Conf.> pour ouvrir le menu [Conf.].
2. Sélectionnez [DICOM Prédéf.].

DICOM Prédéf.

Propriété de service DICOM Local host (y compris SCU et SCP)

Titre AE

Port

PDU

Paramètre de serveur

Périphérique

Périph.

Adresse IP

Liste périphérique

Périph.	Adresse IP
1 us-server	215.41.6.8

3. Prédéfinissez les propriétés DICOM locales et le serveur DICOM local.

■ Propriété de service DICOM Local host

Nom	Description
Titre AE	Titre de l'entité application de l'échographe. Ce titre AE doit être identique à celui du service SCU accepté du serveur.
Port	Port de communication DICOM. Doit être identique à celui du serveur.
PDU	Taille maximale du paquet de données PDU, comprise entre 16 384 et 65 536. La valeur par défaut est 32 768.

Renseignez les champs Titre AE, Port et PDU en fonction de la situation réelle, puis cliquez sur [Prêt] pour quitter l'écran.

Remarque :

- Le titre AE doit être identique au titre AE du service SCU prédéfini sur le serveur (PACS/SIR/SIH). Par exemple, si le titre AE prédéfini sur le serveur d'impression est AAA et que le titre AE du service SCU accepté est prédéfini sur MMM, dans l'écran ci-dessus, le titre AE du paramètre local doit être MMM et le titre AE du serveur d'impression doit être AAA.

■ Paramètre serveur DICOM

Nom	Description
Périphérique	Nom du périphérique prenant en charge les services DICOM
Adresse IP	Adresse IP du serveur
Ping	Vous pouvez établir la connexion avec les autres machines à des fins de vérification après avoir saisi l'adresse IP correcte. Vous pouvez également vérifier la connexion du serveur déjà ajouté dans la liste.
[Ajt]	Cliquez sur ce bouton pour ajouter des serveurs à la liste de périphériques.
[Déf. serv. DICOM]	Cliquez sur cette touche pour accéder à l'écran de prédéfinition des services DICOM. Veuillez vous reporter à la section "10.1.3 Service DICOM".
[Suppr.]	Cliquez sur ce bouton pour supprimer les serveurs sélectionnés dans la liste de périphériques.

Remarque :

- Si le nom saisi existe déjà, le système affiche le message suivant : "Nom de serveur existant". Cliquez sur [Prêt] et saisissez un autre nom.

10.1.3 Service DICOM

Lorsque l'échographe est configuré avec le module des fonctions DICOM de base et que les modules DICOM de liste de travail et de confirmation de stockage et de requête/récupération sont installés, les réglages prédéfinis correspondants apparaissent dans l'écran Param. serv. DICOM.

Sélectionnez [Conf.]> [DICOM Prédéf.] et cliquez sur [Déf. serv. DICOM]. Vous pouvez ajouter, supprimer et définir les propriétés des services du serveur DICOM.

10.1.3.1 Storage

1. Sélectionnez [Conf.]> [DICOM Prédéf.]> [Déf. serv. DICOM]> [Stockage].
2. Sélectionnez le périphérique et saisissez les informations. Pour plus d'informations sur le réglage des périphériques, reportez-vous à la section "10.1.2 Prédéfinition de DICOM".
 - Cliquez sur [Ajt] pour ajouter le service à la liste des services.
 - Sélectionnez un élément dans la liste des services, modifiez les paramètres dans la zone située au-dessus, puis cliquez sur [M à J] pour mettre à jour l'élément dans la liste des services. Cliquez sur [Annul.] pour annuler la modification.
 - Sélectionnez un élément dans la liste des services et cliquez sur [Suppr.] pour le supprimer.
 - Sélectionnez un élément de la liste des services et cliquez sur [Défaut] pour configurer le serveur en tant que service par défaut.
3. Sélectionnez un élément dans la liste des services et cliquez sur [Vérif.] pour vérifier la connexion.
4. Cliquez sur [Quitter] pour enregistrer et quitter le mode de prédéfinition.

Param. serv. DICOM

stockage Impr. Worklist Affectat. Stockage

Configurer nouv. service

Périph. Nom de service Titre AE Port

Max niveaux d'es... Intervalle(Sec) Délai(Sec)

Mode couleur Mode compression Ratio compression

Multiframe ok

Ajout Annuler Mise à jour

Liste de serveur

	Périph.	Nom de service	Titre AE	Port	Défaut
1	us-server	us-server-Storage		104	N

Suppr. Défaut Vérif. Vérif. annul

Quitter

Les options de réglage du stockage DICOM sont décrites ci-dessous :

Nom	Description
Périphérique	Une fois les serveurs configurés dans l'écran Param serveur DICOM, leur nom apparaît dans la liste déroulante. Sélectionnez le nom du serveur de stockage.
Nom service	Le nom par défaut est xxx-Storage. Il peut être modifié.
Titre AE	Le titre de l'entité application doit correspondre à celui du serveur de stockage.
Port	Port de communication DICOM, 104 par défaut. Le port doit correspondre à celui du serveur de stockage.
Max nvx essais	Plage : 0-9.
Intervalles de temps	Fonction réservée.
Délai	Délai au bout duquel l'échographe cesse d'essayer d'établir une connexion au service. Valeur : 5-60 s, par incréments de 5 s, et 15 par défaut.
Mode Couleur	Gris/Mixte/Couleur
Mode compression	Sélectionnez le mode de compression : Non compress., RLE, JPEG ou JPEG2000.
Taux de compression	Sélectionnez le taux de compression : Sans perte, Bas, Moyen et Haut.
Multiframe ok	Cochez cette case si le SCP prend en charge cette fonction.
[Ajt]	Cliquez sur ce bouton pour ajouter le service DICOM à la liste des services.

Nom	Description
[Annul.]	Cliquez sur ce bouton pour annuler le réglage des paramètres.
[M à J]	Sélectionnez un élément dans la liste des services, modifiez les paramètres dans la zone située au-dessus, puis cliquez sur [M à J] pour mettre à jour l'élément dans la liste des services.
[Suppr.]	Cliquez sur ce bouton pour supprimer le service sélectionné de la liste
[Défaut]	Sélectionnez un élément dans la liste des services, puis cliquez sur [Défaut]. La lettre "O" s'affiche dans la colonne Défaut.
[Vérif.]	Cliquez sur ce bouton pour vérifier si les deux entités d'application DICOM sont connectées normalement.
[Quitter]	Cliquez sur ce bouton pour quitter l'écran.

Conseils : les options RLE, JPEG et JPEG2000 ne sont pas prises en charge par tous les SCP. Reportez-vous au fichier électronique *DICOM CONFORMANCE STATEMENT* du SCP afin de vérifier si ce dernier prend en charge ou non ces options. Si le serveur de stockage n'est pas compatible avec ces modes de compression, ne les sélectionnez pas.

10.1.3.2 Impr. Dicom

1. Sélectionnez [Conf.]-> [DICOM Prédéf.]-> [Déf. serv. DICOM]-> [Impr.].
2. Sélectionnez le périphérique et saisissez les informations. Pour plus d'informations sur le réglage des périphériques, reportez-vous à la section "10.1.3 Service DICOM".
 - Cliquez sur [Ajt] pour ajouter le service à la liste des services.
 - Sélectionnez un élément dans la liste des services, modifiez les paramètres dans la zone située au-dessus, puis cliquez sur [M à J] pour mettre à jour l'élément dans la liste des services. Cliquez sur [Annul.] pour annuler la modification.
 - Sélectionnez un élément dans la liste des services et cliquez sur [Suppr.] pour le supprimer.
 - Sélectionnez un élément de la liste des services et cliquez sur [Défaut] pour configurer le serveur en tant que service par défaut.
3. Sélectionnez un élément dans la liste des services et cliquez sur [Vérif.] pour vérifier la connexion.
4. Cliquez sur [Quitter] pour confirmer le réglage et quitter la page.

Param. serv. DICOM

stockage **Impr.** Worklist Affectat. Stockage

Configurer nouv. service

Périph. **us-server** Nom de service **us-server-Prin** Titre AE Port **104**

Max niveaux d'ess... **3** Intervalle(Sec) **15** Délai(Sec) **15**

Propriétés d'impression

Copies **1** Paramètre **MONOCHROME2** Orientation film **PORTRAIT** Priorité **HIGH**

TailleFilm **8INX10IN** Aff.format **STANDARD\1,1** Type de Support **PAPER** garnit... **NO**

Densité min **0** Densité max **300** Info configuration

Destination **MAGAZINE** Grossissement type **NONE**

Ajout Annuler Mise à jour

Liste de serveur

	Périph.	Nom de service	Titre AE	Port	Défaut
1	us-server	us-server-Print		104	N

Suppr. Défaut Vérif. Vérif. annul

Quitter

Les options de réglage du service d'impression DICOM sont décrites ci-dessous :

Nom	Description
Périphérique	Une fois les serveurs configurés dans l'écran Param serveur DICOM, leur nom apparaît dans la liste déroulante. Sélectionnez le nom du serveur d'impression.
Nom service	Le nom par défaut est xxx-Print. Il peut être modifié.
Titre AE	Titre de l'entité application Il doit correspondre à celui du serveur d'impression.
Port	Port de communication DICOM, 104 par défaut. Le port doit correspondre à celui du serveur d'impression.
Max nvx essais	Plage : 0-9.
Intervalles de temps	Fonction réservée.
Délai	Délai au bout duquel l'échographe cesse d'essayer d'établir une connexion au service. Valeur : 5-60 s, par incréments de 5 s, et 15 par défaut.
Copies	Il s'agit du nombre d'exemplaires imprimés souhaités. Vous pouvez sélectionner un chiffre entre 1 et 5, ou saisir directement le nombre.
Paramètres	L'échographe prend en charge l'impression couleur (RGB) et noir et blanc (MONOCHROME2). Sélectionnez le type pris en charge par l'imprimante.
Orientation film	Choisissez PAYSAGE ou PORTRAIT.

Nom	Description
Priorité	Spécifiez la priorité de la tâche d'impression entre HIGH (ELEVÉ), MED (MOY) et LOW (FAIBLE).
Taille film	Sélectionnez la taille du film dans la liste déroulante.
Affich. format	Spécifiez la quantité de fichiers imprimés. Par exemple STANDARD2, 3 indique que 6 images sont imprimées pour chaque page.
Type support	Spécifiez le type de support d'impression : papier, film clair, film bleu.
Coupe	Déterminez si vous souhaitez imprimer un cadre de coupe autour de chaque image du film : Oui ou Non.
Densité min	Saisissez la densité minimale du film
Densité max.	Saisissez la densité maximale du film.
Info configuration	Dans ce champ, saisissez des informations sur la configuration.
Destination	Spécifiez l'endroit où le film est exposé : MAGAZINE (stocké dans le magazine), ou PROCESSOR (exposé dans le processeur).
Type magnific.	Répliquer : les pixels interpolés correspondent à la duplication des pixels adjacents ; Bi-linéaire : les pixels interpolés sont générés à partir d'interpolations bi-linéaires entre les pixels adjacents ; Cubique : les pixels interpolés sont générés à partir d'interpolations cubiques entre les pixels adjacents. Aucun : pas d'interpolation. Sélectionnez le type d'agrandissement d'une image lors de l'impression pour que ses dimensions correspondent à celles du film.
[Ajt]	Cliquez sur ce bouton pour ajouter le service DICOM à la liste des services.
[Annul.]	Cliquez sur ce bouton pour annuler le réglage des paramètres.
[M à J]	Sélectionnez un élément dans la liste des services, modifiez les paramètres dans la zone située au-dessus, puis cliquez sur [M à J] pour mettre à jour l'élément dans la liste des services.
[Suppr.]	Cliquez sur ce bouton pour supprimer le service sélectionné de la liste des services.
[Défaut]	Sélectionnez un élément dans la liste des services, puis cliquez sur [Défaut]. La lettre "O" s'affiche dans la colonne Défaut.
[Vérif.]	Cliquez sur ce bouton pour vérifier si les deux entités d'application DICOM sont connectées normalement.
[Quitter]	Cliquez sur ce bouton pour quitter l'écran.

Le réglage des paramètres doit être cohérent avec les performances de l'imprimante :

- Par exemple, si l'imprimante ne prend pas en charge la taille de film « 8IN*10IN », sélectionnez une taille prise en charge par l'imprimante.
- Paramètres : Utilisez RGB pour l'impression couleur et MONOCHROME2 pour l'impression noir et blanc.
- Type support : en général, pour l'impression noir et blanc, du film bleu ou transparent est utilisé, tandis que pour l'impression couleur, du papier est utilisé. Pour plus d'informations, reportez-vous à la déclaration de conformité de l'imprimante.
- Modifiez le paramètre, si nécessaire.

10.1.3.3 Liste de travail DICOM

1. Sélectionnez [Conf.]> [DICOM Prédéf.]> [Déf. serv. DICOM]> [L de trv].
2. Sélectionnez le périphérique et saisissez les informations. Pour plus d'informations sur le réglage des périphériques, reportez-vous à la section "10.1.3 Service DICOM".
 - Cliquez sur [Ajt] pour ajouter le service à la liste des services.
 - Sélectionnez un élément dans la liste des services, modifiez les paramètres dans la zone située au-dessus, puis cliquez sur [M à J] pour mettre à jour l'élément dans la liste des services. Cliquez sur [Annul.] pour annuler la modification.
 - Sélectionnez un élément dans la liste des services et cliquez sur [Suppr.] pour le supprimer.
 - Sélectionnez un élément de la liste des services et cliquez sur [Défaut] pour configurer le serveur en tant que service par défaut.
3. Sélectionnez un élément dans la liste des services et cliquez sur [Vérif.] pour vérifier la connexion.
4. Cliquez sur [Quitter] pour confirmer le réglage et quitter la page.

Le paramètre de service DICOM concernant la liste de travail est décrit de la manière suivante :

Nom	Description
Périphérique	Une fois les serveurs configurés dans l'écran Param serveur DICOM, leur nom apparaît dans la liste déroulante. Sélectionnez le nom du serveur de liste de travail.
Nom service	Le nom par défaut est xxx-Worklist. Il peut être modifié.
Titre AE	Le titre de l'entité application doit correspondre à celui du serveur de liste de travail.

Nom	Description
Port	Port de communication DICOM, 104 par défaut. Le port doit correspondre à celui du serveur de liste de travail.
Max nvx essais	Fonction réservée.
Intervalles de temps	Fonction réservée.
Délai	Délai au bout duquel l'échographe cesse d'essayer d'établir une connexion au service. Valeur : 5-60 s, par incréments de 5 s, et 15 par défaut.
[Ajt]	Cliquez sur ce bouton pour ajouter le service de liste de travail à la liste des services.
[Annul.]	Cliquez sur ce bouton pour annuler le réglage des paramètres.
[M à J]	Sélectionnez un élément dans la liste des services, modifiez les paramètres dans la zone située au-dessus, puis cliquez sur [M à J] pour mettre à jour l'élément dans la liste des services.
[Suppr.]	Cliquez sur ce bouton pour supprimer le service sélectionné de la liste des services.
[Défaut]	Sélectionnez un élément dans la liste des services, puis cliquez sur [Défaut]. La lettre "O" s'affiche dans la colonne Défaut.
[Vérif.]	Cliquez sur ce bouton pour vérifier si les deux entités d'application DICOM sont connectées normalement.
[Quitter]	Cliquez sur ce bouton pour quitter l'écran.

Remarque :

Si vous définissez le titre AE de la station planifiée pour le serveur de liste de travail, alors le titre configuré ici doit correspondre au titre défini dans le serveur.

Par exemple, pour le serveur de liste de travail, si vous saisissez DP50 dans le champ "Titre AE station plan." (signifiant que vous affectez l'examen planifié à DP50), le titre AE et le titre AE de la station planifiée doivent tous deux être configurés sur DP50.

10.1.3.4 Confirmation de stockage

1. Sélectionnez [Conf.]-> [DICOM Prédéf.]-> [Déf. serv. DICOM]-> [Confirm. stockage].
2. Sélectionnez le périphérique et saisissez les informations. Pour plus d'informations sur le réglage des périphériques, reportez-vous à la section "10.1.3 Service DICOM".
 - Cliquez sur [Ajt] pour ajouter le service à la liste des services.
 - Sélectionnez un élément dans la liste des services, modifiez les paramètres dans la zone située au-dessus, puis cliquez sur [M à J] pour mettre à jour l'élément dans la liste des services. Cliquez sur [Annul.] pour annuler la modification.
 - Sélectionnez un élément dans la liste des services et cliquez sur [Suppr.] pour le supprimer.
 - Sélectionnez un élément de la liste des services et cliquez sur [Défaut] pour configurer le serveur en tant que service par défaut.
3. Sélectionnez un élément dans la liste des services et cliquez sur [Vérif.] pour vérifier la connexion.
4. Cliquez sur [Quitter] pour confirmer le réglage et quitter la page.

Param. serv. DICOM

stockage Impr. Worklist **Affectat. Stockage**

Configurer nouv. service

Périph. Nom de service Titre AE Port

Max niveaux d'ess... Intervalle(Sec) Délai(Sec)

Service de stockage associé

Liste de serveur

Périph.	Nom de service	Titre AE	Port	Défaut

Les options de réglage du service de confirmation de stockage DICOM sont décrites ci-dessous :

Nom	Description
Périphérique	Une fois les serveurs configurés dans l'écran Param serveur DICOM, leur nom apparaît dans la liste déroulante. Sélectionnez le nom du serveur de confirmation de stockage.
Nom service	Le nom par défaut est xxx-SC. Il peut être modifié.
Titre AE	Le titre de l'entité application doit correspondre à celui du serveur de confirmation de stockage.
Port	Port de communication DICOM, 104 par défaut. Le port doit correspondre à celui du serveur de confirmation de stockage.
Max nvx essais	Fonction réservée.
Intervalles de temps	Fonction réservée.
Délai	Valeur : 5-60 s, par incréments de 5 s, et 15 par défaut. Après l'envoi de la confirmation de stockage, le système ferme la connexion au serveur.
Service de stockage associé	Le serveur de stockage associé est prédéfini avant le service de confirmation de stockage. Ce dernier ne peut être créé qu'après l'envoi de l'examen.
[Ajt]	Cliquez sur ce bouton pour ajouter le service DICOM à la liste des services.
[Annul.]	Cliquez sur ce bouton pour annuler le réglage des paramètres.
[M à J]	Sélectionnez un élément dans la liste des services, modifiez les paramètres dans la zone située au-dessus, puis cliquez sur [M à J] pour mettre à jour l'élément dans la liste des services.

Nom	Description
[Suppr.]	Cliquez sur ce bouton pour supprimer le service sélectionné de la liste
[Défaut]	Sélectionnez un élément dans la liste des services, puis cliquez sur [Défaut]. La lettre "O" s'affiche dans la colonne Défaut.
[Vérif.]	Cliquez sur ce bouton pour vérifier si les deux entités d'application DICOM sont connectées normalement.
[Quitter]	Cliquez sur ce bouton pour quitter l'écran.

10.2 Vérification de la connectivité

Si vous souhaitez vérifier la connectivité (non obligatoire), vous pouvez cliquer sur le bouton [Vérif.] des pages de l'écran Param. serv. DICOM.

- Si la vérification réussit, le message "xxx Vérif. réussie" s'affiche.
- Dans le cas contraire, il affiche le message "xxx Echec vérif".

Les causes possibles d'un échec de vérification sont les suivantes :

Remarque :

Tous les SCP ne prennent pas en charge la vérification. Veuillez consulter la documentation correspondante pour savoir si le SCP prend en charge cette fonctionnalité. Si ce n'est pas le cas, la vérification échouera.

10.3 Service DICOM

Si le système est configuré avec des modules DICOM et connecté aux serveurs DICOM appropriés, vous pouvez effectuer des opérations de stockage, impression, liste de travail, confirmation de stockage et requête/récupération après avoir vérifié la connexion.


10.3.1 Stockage DICOM

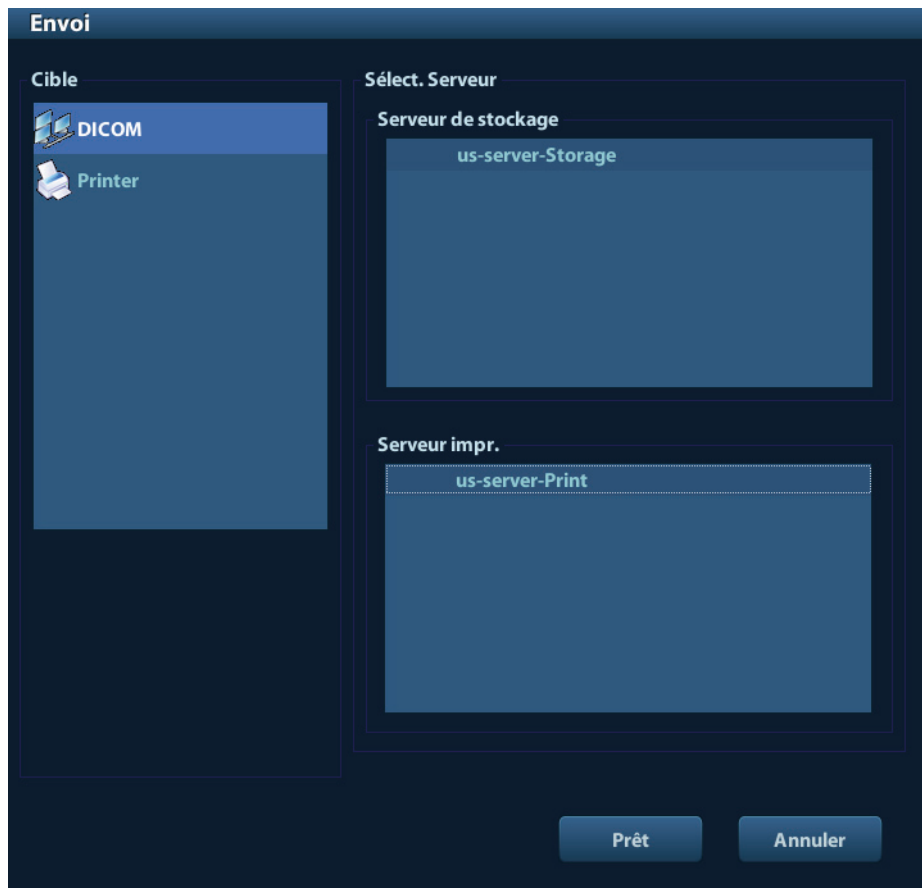
Le service de stockage DICOM permet d'envoyer des images au serveur de stockage DICOM, à des fins d'archivage.

■ Envoi d'images sur l'écran iStation/Revoir/principal

(1) Sélectionnez les images.

- Appuyez sur <iStation> pour accéder à l'écran iStation, cliquez pour sélectionner un enregistrement d'examen dans la liste (les vignettes s'affichant dans la zone vignettes en bas de l'écran), puis cliquez pour sélectionner une ou plusieurs vignettes. Ou,
- Appuyez sur <Review> pour accéder à l'écran Revoir et cliquez pour sélectionner une ou plusieurs images. Ou,
- Sur l'écran principal, sélectionnez une ou plusieurs vignettes.

(2) Sélectionnez une image enregistrée dans l'écran iStation, Revoir ou principal, puis cliquez sur  à droite de l'image. La boîte de dialogue ci-après s'ouvre .




- (3) Sélectionnez DICOM dans la liste "Cible" et sélectionnez un serveur dans la liste "Serveur de stockage".
- (4) Cliquez sur [Prêt] pour commencer l'envoi.

10.3.2 Impr. Dicom

Le service d'impression DICOM permet d'envoyer des images au serveur d'impression DICOM à des fins d'impression.

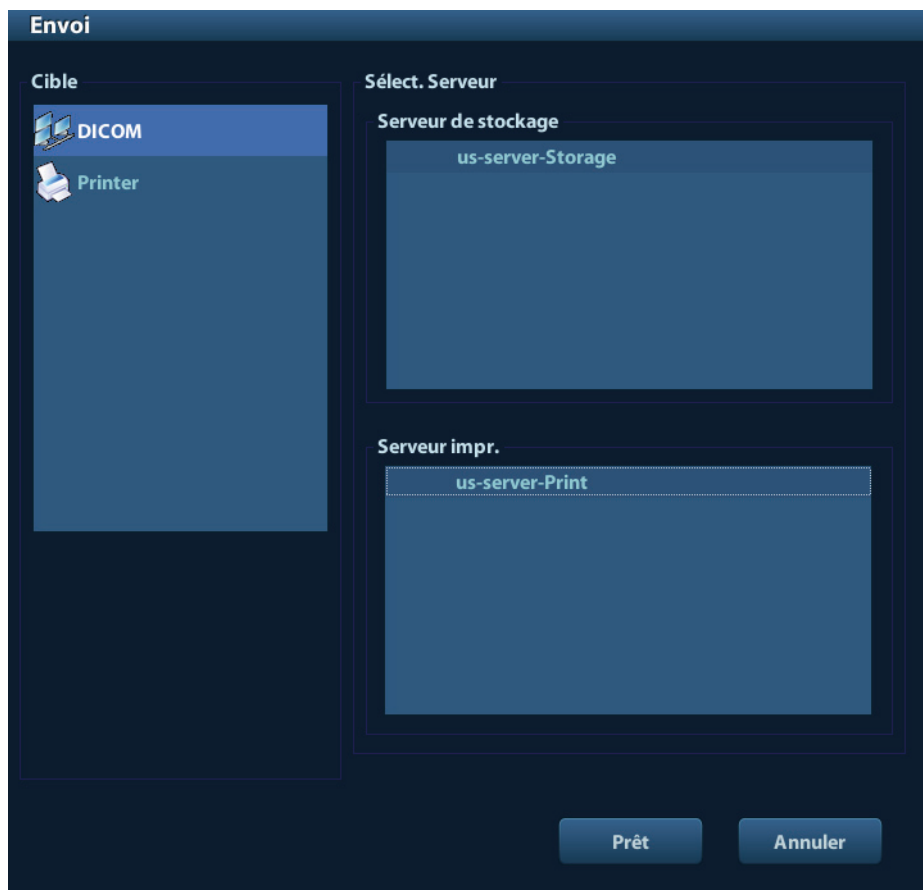- Impression d'images depuis les écrans principaux/iStation/Revoir
 - (1) Sélectionnez les images. Les procédures sont identiques à celles du service de stockage DICOM.
 - (2) Dans la boîte de dialogue Envoi, sélectionnez un serveur d'impression DICOM.



(3) Cliquez sur [Prêt] pour envoyer la tâche d'impression.

10.3.3 Liste de travail DICOM

Connectez le serveur de liste de travail DICOM à l'échographe. Vous pouvez à présent interroger des enregistrements patient du serveur de liste de travail et importer les informations souhaitées dans votre système.

- Pour effectuer une requête d'informations sur le patient via un serveur de liste de travail, procédez comme suit :
 - (1) Appuyez sur <Patient> pour ouvrir l'écran Info patient.
 - (2) Cliquez sur [L de trv] pour ouvrir la page correspondante.

Worklist

Requête.

ID patient Nom patient Accès #

Rech. clé Serveur L de trv

Date exam... A Type modalité

Titre AE station plan.

0 Enregistrement dans la liste

ID patient	Nom	Accès #	Descript. exam.	Date examen	Sexe	DOB

(3) Récupération des informations patient

- a) Définissez les critères de requête dans les champs ID patient, Nom patient, N° enregistrement, Clé rech., Srvr L de trv ou Date exa. La date d'examen par défaut est la date du jour.
- b) Cliquez sur [Requ.].
- c) Les patients planifiés, qui correspondent aux critères, sont affichés dans la partie inférieure de l'écran.
- d) Suite à la première requête, vous pouvez effectuer la deuxième sur la base de l'aperçu. Les patients programmés affichés dans la liste sont mis à jour en temps réel.

(4) Sélectionnez le dossier patient souhaité dans la liste des patients affichée, puis Sélectionnez le patient désiré et cliquez sur [Déb examen], les informations patient sont importées dans le système et l'examen démarre.

Cliquez sur [Transf.]. Les informations patient sont importées dans l'écran Info patient. Modifiez les informations patient dans l'écran Info patient et sélectionnez [Prêt] pour démarrer un nouvel examen.

(5) Pour afficher les informations détaillées sur le patient :

- a) Cliquez pour sélectionner un enregistrement patient.
- b) Cliquez sur [Aff. détails] pour afficher les propriétés et informations détaillées sur le patient.

■ Utilisez la fonction de requête automatique via le serveur de liste de travail.

- (1) Accédez à l'écran de prédéfinition des services DICOM et ouvrez la page L de trv : [Conf.]→[DICOM Prédéf.]→[Déf. serv. DICOM]→"L de trv".
- (2) Sélectionnez un élément de la liste des services et cliquez sur [Défaut] pour configurer le serveur en tant que service par défaut.
- (3) Cliquez sur [Quitter], puis sur [Revenir] dans le menu de configuration.

- (4) Appuyez sur <Patient> pour ouvrir l'écran Info patient.
- (5) Cliquez sur [L de trv] pour ouvrir la page correspondante.
- (6) Le système interroge automatiquement la liste de patients intrajournaliers via le serveur de liste de travail et les enregistrements patient apparaissent dans la liste.


En état hors ligne, vous pouvez :

- Exécuter une deuxième requête ; ou
- Cliquer sur [Aff. détails] pour afficher les informations patient détaillées.

10.3.4 Confirmation de stockage


Le service de confirmation de stockage permet de s'assurer que les images sont bien stockées sur le serveur DICOM.

Avant d'appliquer ce service, vous devez définir un serveur de confirmation de stockage par défaut.

- Confirmation de stockage après l'envoi d'images depuis l'écran iStation
 - (1) Ouvrez l'écran iStation : appuyez sur <iStation> ou sur <Patient> et cliquez sur [iStation].
 - (2) Sélectionnez un enregistrement d'examen (les images sont stockées dans l'enregistrement d'examen), puis cliquez sur  pour ouvrir la boîte de dialogue Envoi.
 - (3) Cliquez sur ce bouton pour sélectionner "DICOM" dans le champ "Cible" situé à gauche de l'écran, puis sélectionnez le serveur de stockage DICOM dans le champ "Servr stockage" situé à droite.
 - (4) Cliquez sur [Prêt] pour commencer l'envoi. L'échographe envoie toutes les images de l'enregistrement d'examen au serveur de stockage et envoie parallèlement une confirmation de stockage à ce même serveur.

10.4 Stockage sur supports externes DICOM

L'échographe prend en charge l'enregistrement des données patient sur support externe au format DCM. Vous pouvez parallèlement consulter sur l'échographe les fichiers DCM enregistrés depuis le support externe.

- Stockage sur supports externes :
 1. Sélectionnez des enregistrements patient dans l'écran iStation.
 2. Cliquez sur  pour faire apparaître la boîte de dialogue ci-dessous :



3. Sélectionnez la destination et le format DICOM.
4. Indiquez si vous souhaitez supprimer les données d'examen patient ou uniquement les images du disque dur local.
5. Cliquez sur [Sauv.] pour commencer le stockage.

Si la sauvegarde se déroule avec succès, une coche s'affiche dans la liste de sauvegarde de l'écran iStation. En cas d'échec, aucune coche n'apparaît.


Conseils : Si un fichier DICOMDIR/DCMIMG/IHE_PDI du support de stockage externe porte le même nom qu'un fichier à sauvegarder, la sauvegarde ne peut pas être réalisée. Veillez à ce que le support de stockage dispose de suffisamment d'espace libre. En cas de manque d'espace, la sauvegarde peut échouer.

■ Revue du support :

1. Connectez le support externe contenant les fichiers DCM à l'échographe.
2. Sélectionnez la source de données dans l'écran iStation ; les données visibles s'affichent.

Si le support contient plusieurs types de données, le système vous demande de sélectionner le format souhaité dans la boîte de dialogue.

■ Restauration des données :

1. Si les données au format DICOM sont sauvegardées sur un support externe, vous pouvez les restaurer sur l'échographe à partir du support.
2. Revoyez les données enregistrées sur le support externe.
3. Sélectionnez les données à restaurer dans iStation.
4. Cliquez sur  dans l'écran iStation.

REMARQUE : Seuls les supports compatibles avec le système peuvent être sélectionnés.

10.5 Visionnage d'enregistrements

Vous pouvez utiliser un logiciel de visionnage afin de visualiser les fichiers images DICOM. Lors de l'enregistrement de fichiers DICOM (fichiers sauvegardés au format DICOMDIR et fichiers convertis au format DICOM après sélection du bouton [Envoi]), il est possible d'enregistrer le visionnage en même temps sur le CD. Insérez le CD contenant le logiciel de visionnage. Le visionnage est lancé automatiquement.

REMARQUE : Pour un visionnage optimal des fichiers DCM, il est recommandé d'installer une version de NET Framework (Visual Studio.Net) ultérieure à 2.0, si TortoiseSVN est installé sur votre ordinateur.

10.6 Gestionnaire des tâches DICOM

La gestion des tâches DICOM permet de suivre la progression des tâches ou de gérer les tâches après l'envoi des images pour stockage, impression ou stockage sur support externe.

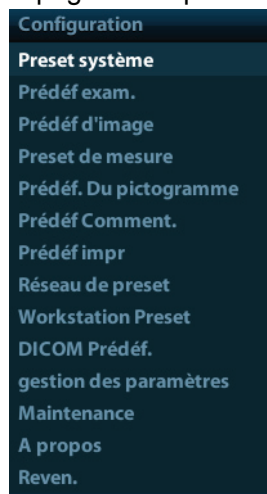
Pour plus d'informations sur le gestionnaire des tâches, veuillez vous reporter à la section 9.6 Gestionnaire des tâches patient.

11 Configuration

La fonction de Configuration sert à définir les paramètres de configuration du système et à conserver les données de configuration de l'utilisateur en matière de flux de travail. Les données de configuration système et utilisateur sont enregistrées sur le disque dur et doivent être sauvegardées sur un périphérique mémoire USB ou sur CD/DVD.

ATTENTION : Lorsque les données de configuration sont modifiées, veuillez à enregistrer les préférences en appliquant les méthodes décrites dans ce chapitre. Mindray ne peut être tenue pour responsable des pertes de données de configuration.

- Pour accéder au menu de configuration :
 - Appuyez sur la touche <Setup> pour ouvrir le menu de configuration ;
 - Sur la page relative à la sélection de la sonde et du mode d'examen, cliquez sur [Prédéf exam.] pour ouvrir la page correspondante.



- Pour quitter le menu de configuration :

Sélectionnez [Revenir] dans le menu de configuration ou appuyez sur <Esc> pour fermer le menu de configuration en enregistrant le réglage des paramètres.

Si vous changez la langue du système et cliquez sur [Revenir] dans le menu de configuration ou appuyez sur <ESC>, le système redémarre automatiquement pour appliquer la modification.
- Opérations de base
Les types de réglage fréquents sont les suivants :
 - Saisie manuelle : positionnez le curseur dans la zone souhaitée et saisissez la valeur de votre choix à l'aide du clavier.
 - Case d'option : cliquez sur la case pour activer l'option correspondante.
 - Case à cocher : cochez la case pour activer une ou plusieurs options.
 - Liste déroulante : cliquez sur la flèche en regard de la liste pour sélectionner une option.

- Boutons généraux
 - [Prêt] : cliquez sur ce bouton pour confirmer le réglage, quitter la page en cours et revenir à la page précédente.
 - [Annul.] : cliquez sur ce bouton pour ignorer le réglage, quitter la page en cours et revenir à la page précédente.
 - [Charg usine] : cliquez sur ce bouton pour rétablir tous les réglages des paramètres à leurs valeurs d'usine par défaut.


11.1 Prédéfinition du système

Cliquez sur [Prédéf. syst.] dans le menu de configuration pour prédéfinir les éléments suivants :

Page	Description
Région	Cette page permet de définir le nom de l'établissement hospitalier, la langue, le fuseau horaire, le format de l'heure, la date et l'heure système, un logo, etc.
Général	Cette page permet de saisir des informations sur le patient et de définir les paramètres de l'examen, la gestion patient, le stockage, la dormance du système, le journal des opérations, etc.
Prédéf image	Cette page permet de définir certains paramètres généraux relatifs aux modes d'imagerie.
Param mes.	Cette page permet de définir la règle de mesure, le résultat de mesure, les unités, etc.
Obstétrique	Cette page permet de définir des informations importantes sur l'âge gestationnel du fœtus, la formule de la courbe de croissance fœtale et le poids fœtal.
Config tch	Cette page permet d'affecter des fonctions à la pédale et aux touches <Print>, <Save> et <F1> à <F6>.
Biopsie	Cette page permet de définir les paramètres relatifs au modèle de guide-aiguille et à la ligne de guide-aiguille pour biopsie.
Admin	Cette page permet de définir les informations relatives au contrôle des comptes utilisateur.

11.1.1 Région

Ouvrez la page Région via [Conf.]-> [Prédéf. syst.]-> [Région]. La page est illustrée ci-dessous.

Elément	Description
Informations hôpital	Cette page permet de saisir les informations importantes relatives à l'hôpital, comme le nom, l'adresse, le téléphone, etc.
Langue	Cette page permet de sélectionner la langue de l'échographe parmi les choix suivants : allemand, anglais, chinois, danois, espagnol, finnois, français, islandais, italien, norvégien, polonais, portugais, russe, tchèque, turc, et suédois. Une fois que vous avez modifié la langue et quitté le mode de configuration, l'échographe redémarre automatiquement.
Fus. hor.	Permet de sélectionner le fuseau horaire.
Format date	Permet de choisir entre le format de date JJ/MM/AAAA, MM/JJ/AAAA et AAAA/MM/JJ.
Format hre	Permet de choisir entre le format horaire 12 heures et 24 heures.
Date syst.	Permet de définir la date système. Positionnez le curseur dans le champ correspondant, puis saisissez la date à l'aide du clavier ; ou cliquez sur l'icône de calendrier  et sélectionnez la date.
Heure syst.	Saisissez l'heure dans la zone de saisie ou modifiez-la à l'aide des boutons fléchés situés à droite.

11.1.2 Général

Ouvrez la page Général via [Conf.]> [Prédéf. syst.]> [Général]. La page est illustrée ci-dessous.

Type	Élément	Description
Info patient	Affich. info ds bord de l'img	Permet de choisir les informations patient à afficher dans la bordure de l'image parmi les éléments suivants : Sexe, Age, Opérat., ID, Nom, Etabl.
	Unités H&W	Permet de définir l'unité de taille et de poids du patient.
	Formule surf.	Permet de définir la formule de calcul de la surface corporelle.
Storage	Taille img	Permet de définir la taille d'une image enregistrée : Zone de l'image Zone standard Plein écran
	Long. ciné/Hre(s)	Hre(s) : 1 à 60 s.
	Mode sortie	PAL/NTSC
Economiseur d'écran	Activer économ. écran	Permet d'activer la fonction d'économiseur d'écran et de sélectionner son délai d'activation.
	Activer veille	Disponible lorsque la case "Activer l'économiseur d'écran" est cochée.
Affich.	Temp. couleur	Froid/Chaleur
	Luminos/contraste charg usine	Chargement des données d'usine pour la luminosité et le contraste de l'écran.

Type	Elément	Description
Commentaires	Taille de police	Petit/ Moyen/Grand
	T. flèche	Petit/ Moyen/Grand
	Effacer commentaires lorsque l'image est libérée ou la sonde/ exam changé	Permet d'effacer des commentaires lorsque l'image est libérée ou lorsque la sonde ou l'examen est changé

11.1.3 Prédéf image

Ouvrez la page Prédéf. image via [Conf.]-> [Prédéf. syst.]-> [Prédéf. image]. La page est illustrée ci-dessous.

Type	Elément	Description
Réinit conf.	Probe	Permet de définir le modèle de sonde par défaut à utiliser dans le système.
Freeze Config (Config. mode figé)	Entrée quand gelé	Permet de définir le mode du système quand une image est figée.
Image	Mémoire ciné	Permet de définir le type de partage de la mémoire ciné : Auto, Part.

11.1.4 Param mes.

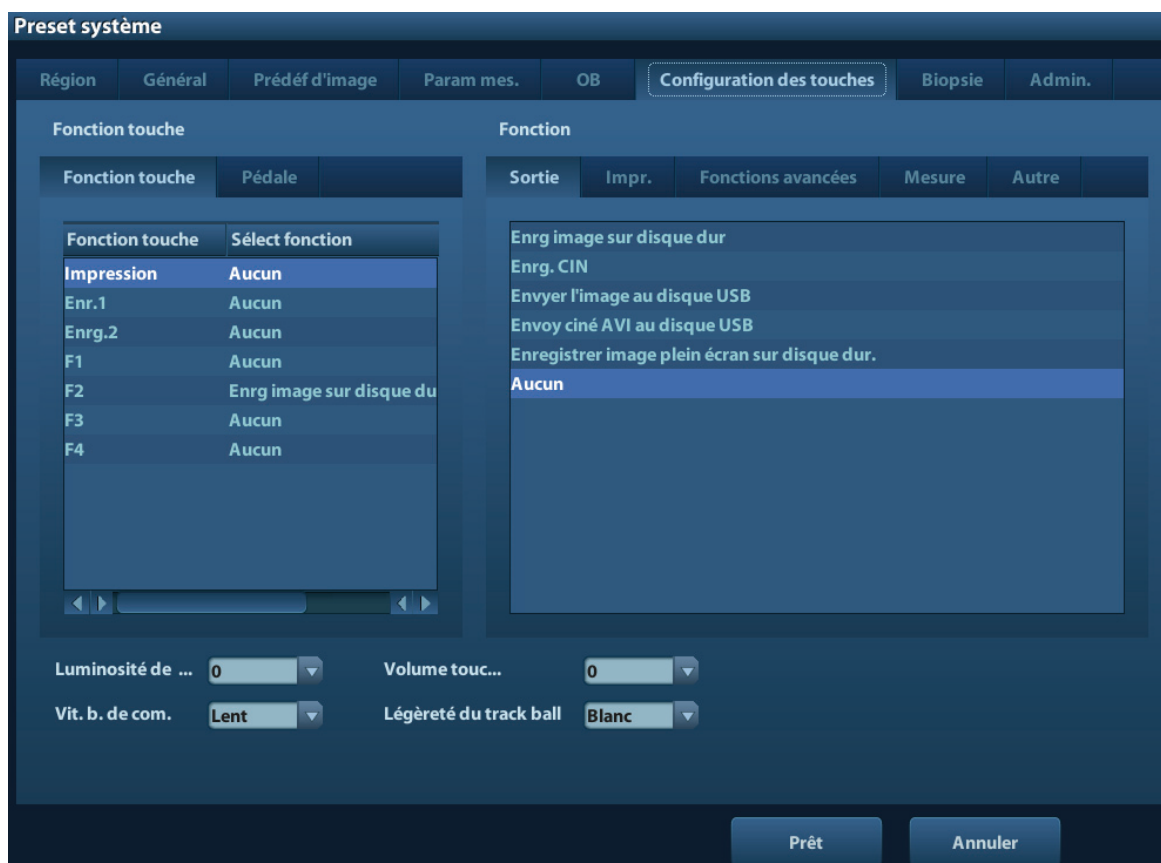
Ouvrez la page Param mes. via [Conf.]-> [Prédéf. syst.]-> [Param mes.]. Dans cette page, vous pouvez définir les informations relatives à la règle de mesure et à l'unité utilisée. Pour plus d'informations, veuillez consulter le Manuel d'utilisation [Volume avancé].

11.1.5 Ob

Ouvrez la page OB via [Conf.]-> [Prédéf syst.]-> [OB]. Dans cette page, vous pouvez définir les formules de calcul de l'âge gestationnel, de la croissance fœtale et du poids fœtal ainsi que d'autres informations importantes. Pour plus d'informations, veuillez consulter le Manuel d'utilisation [Volume avancé].

11.1.6 Config tch

Ouvrez la page via [Conf.]-> [Prédéf. syst.]-> [Config tch]. La page est illustrée ci-dessous.



■ Affectation de fonctions aux touches

Vous pouvez affecter des fonctions aux touches <Print>, <Save>, F (F1 à F4) et à la pédale. Pour affecter une fonction à une touche, procédez comme suit :

- (1) Cliquez sur ce bouton pour sélectionner la touche souhaitée dans la colonne Fct. touche, dans la section gauche de la page.
- (2) Cliquez sur ce bouton pour sélectionner une fonction dans la zone Fonction. Les fonctions sélectionnées apparaissent à droite de la touche sélectionnée.
- (3) Cliquez sur [Prêt] pour confirmer l'opération.

L'exemple suivant illustre l'affectation de la touche <F4> à la fonction "Env. ciné au disque USB" :

- (1) Sélectionnez F4 dans la liste "Fct. touche" du côté gauche de la page.
- (2) Sélectionnez "Env. ciné au disque USB" dans "Fonction" du côté droit de la page.
- (3) Cliquez sur [Prêt] pour valider le réglage.

Dans la zone Fonction, les fonctions des touches définies par l'utilisateur sont réparties en cinq catégories : Sortie, Impr., Fonct. avancées, Mesure et Autre. Leurs fonctions sont décrites ci-dessous :

Type	Fonction	Description
Sortie	Enr image sur disque dur	Permet d'enregistrer une image sur le système au format compatible système.
	Save Cine	Permet d'enregistrer un fichier ciné sur disque dur local.
	Env. image au disque USB	Pour enregistrer une image unique sur mémoire flash USB, procédez comme suit :
	Env. ciné au disque USB	Env. ciné au disque USB
	Enr. image plein écran sur disque dur	Permet d'enregistrer une image plein écran sur le système, au format JPG ou BMP.
	Aucun	Permet de n'affecter aucune fonction à une touche.
Imprimer	(Impression du nom du service)	Envoi à l'imprimante spécifiée (prédéfini dans [Conf.]> [Prédéf impr])
Fonct. avancées	Imagerie trapézoïdale	Permet d'activer la fonction d'imagerie trapézoïdale.
	Enr param image	Permet d'enregistrer les paramètres d'image.
	Coloris.	Permet d'activer/désactiver la fonction de colorisation.
	Sonde double	Permet d'activer le mode de sonde double.
Mesure	SG	/
	LVC	/
	DBP	/
	PC	/
	DOF	/
	CN	/
	PA	/
	LF	/
	LA	/
	PFE1	/
PFE2	/	

Type	Fonction	Description
Autre	Définir Accueil	Permet de définir l'emplacement d'accueil des commentaires.
	Accueil	Permet de ramener le curseur sur l'emplacement d'accueil.
	ABC Display	Permet d'afficher ou de masquer les commentaires.
	iZoom	Permet d'activer ou de désactiver le mode zoom plein écran.
	iVision	Permet d'activer ou de désactiver iVision.
	Envoi vers station de travail	Permet d'envoyer des données d'image et de mesure vers la station de travail.

■ Autres paramètres

Elément	Description
Lumin. touche	Permet de définir la luminosité des touches : 0, 1, 2, 3.
Vol touche	Permet de définir le volume des touches : 0-2. 0 signifie qu'il n'y a pas de son.
Vit. b. de com.	Permet de définir la vitesse de déplacement de la boule de commande : Lent, Moyen, Rap.
Trackball Lightness (Lumin. b. de com.)	Permet de définir la couleur de la boule de commande : Blanc, Bleu, Vert, Rose, Violet, Jaune.

11.1.7 Biopsie

Ouvrez la page Biopsie via [Conf.]-> [Prédéf. syst.]-> [Biopsie], comme illustré ci-dessous.

- Support
Sélectionnez le guide-aiguille par défaut pour la sonde.
- Paramètre
Appuyez sur cette touche pour afficher le guide-aiguille de la biopsie.

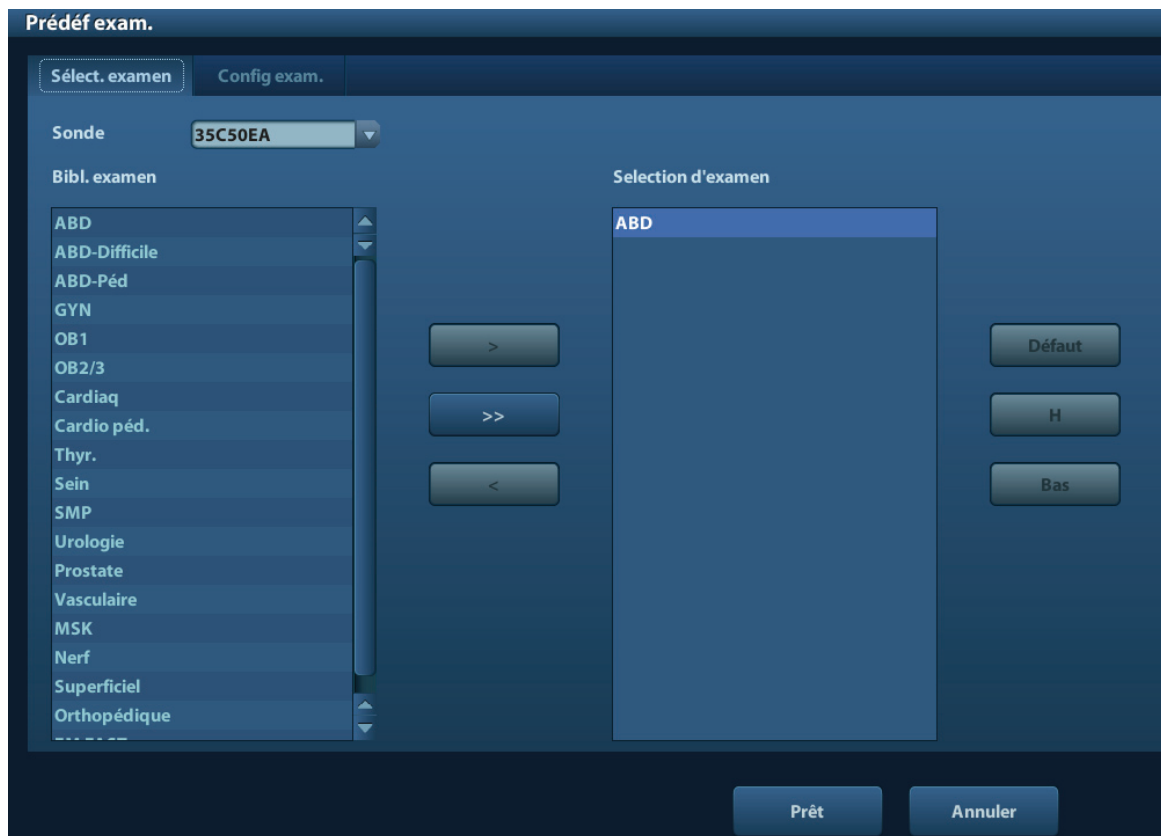
11.1.8 Admin

Ouvrez la page Admin via [Conf.]-> [Prédéf. syst.]-> [Admin].

Pour plus d'informations sur le contrôle d'accès, veuillez vous reporter à la section "9.7 Contrôle d'accès".

11.2 Prédéf des examens

Ouvrez [Conf.]> [Prédéf exam.] ou cliquez sur [Prédéf exam.] dans l'écran de sélection "Sonde & Exam" pour ouvrir l'écran de prédéfinition des examens.




11.2.1 Sélection des examens

Une fois l'écran de prédéfinition des examens ouvert, il affiche généralement l'onglet Sélect. examen, comme indiqué dans l'illustration ci-dessous. Cette page permet d'affecter un type d'examen à une sonde spécifique.

1. Sélection d'une sonde
Déplacez le curseur sur [Sonde] et sélectionnez une sonde dans la liste déroulante.
2. Sélection/Suppression de modes d'examen
Les types d'examen pris en charge par la sonde actuellement sélectionnée figurent dans la zone à droite. Dans la colonne à gauche de l'écran figurent tous les modes d'examen pris en charge par le système, c'est-à-dire la bibliothèque des examens.
 - [>]: permet d'ajouter à la liste [Exam sélect.] un mode d'examen sélectionné figurant dans [Bibl. examen].
 - [>>]: permet d'ajouter à la liste [Exam sélect.] tous les modes d'examen figurant dans la bibliothèque.
 - [<]: permet de supprimer de la liste [Exam sélect.] un mode d'examen sélectionné.
 - Cliquez sur [H] et [Bas] pour modifier l'ordre des éléments sélectionnés.
 - Cliquez sur [Défaut] pour définir un mode d'examen sélectionné comme mode d'examen par défaut.
3. Cliquez sur [Prêt] pour confirmer les modifications ou sur [Annul.] pour annuler le réglage.

11.2.2 Configuration des examens

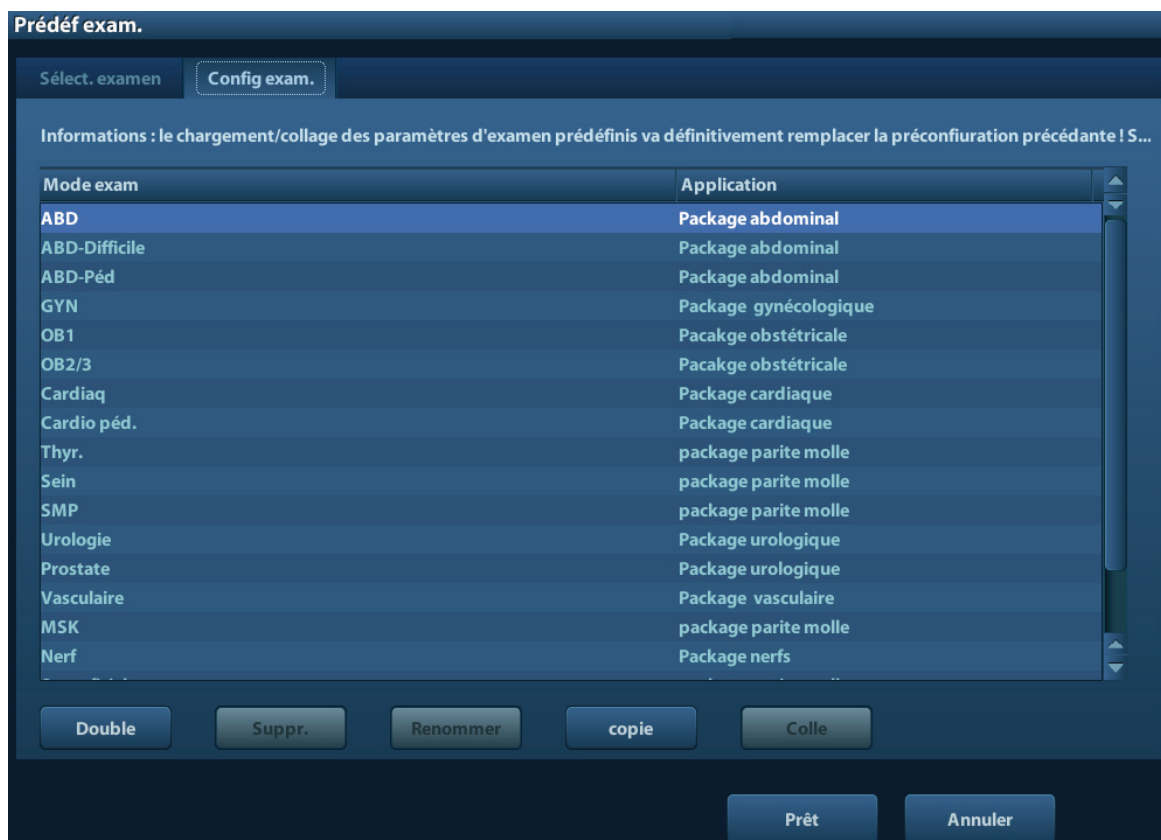Dans l'écran Prédéfin exam., cliquez sur l'onglet "Config exam." pour ouvrir la page correspondante.



Le système prend en charge les fonctions suivantes :

■ Copie du mode d'examen

1. Sélectionnez dans la liste un mode d'examen à copier.
2. Cliquez sur [Cop.].
3. Sélectionnez un autre mode d'examen et cliquez sur [Colle]. Les paramètres du mode d'examen source sont alors copiés dans le mode d'examen cible (le mode d'examen cible n'est pas renommé).

Conseils : le chargement ou le collage des données de configuration d'examen remplace définitivement la préconfiguration précédente. Soyez vigilant lors de cette opération.

■ Modes d'examen définis par l'utilisateur

Vous pouvez créer un mode d'examen défini par l'utilisateur en copiant un mode d'examen existant :

1. Sélectionnez le mode d'examen à copier et cliquez sur [Double].
2. Saisissez un nouveau nom dans la boîte de dialogue qui s'affiche et cliquez sur [Prêt].

Conseils : le mode d'examen défini par l'utilisateur prend en charge les fonctions de duplication, suppression, renommage, copie et collage.

- Renommage du mode d'examen (disponible uniquement pour le mode d'examen défini par l'utilisateur)
Sélectionnez un mode d'examen et cliquez sur [Renom.].
- Modification d'une région d'application (disponible uniquement pour le mode d'examen défini par l'utilisateur)
Sélectionnez un examen, cliquez sur la région d'application dans la colonne [Application] et sélectionnez une valeur dans la liste déroulante.

11.3 Prédéf image

Sélectionnez [Conf.]> [Prédéf. image].

La prédéfinition d'image permet de définir les paramètres d'image de chaque mode d'imagerie.

Les paramètres d'image se divisent en plusieurs catégories :

- Paramètres relatifs aux modes d'imagerie.
- Paramètres s'appliquant au mode d'examen et à la sonde.
- Autres paramètres d'image.

Pour plus d'informations sur les modes d'imagerie, veuillez vous reporter au chapitre "5 Optimisation des images".

11.4 Prédéfinition des mesures

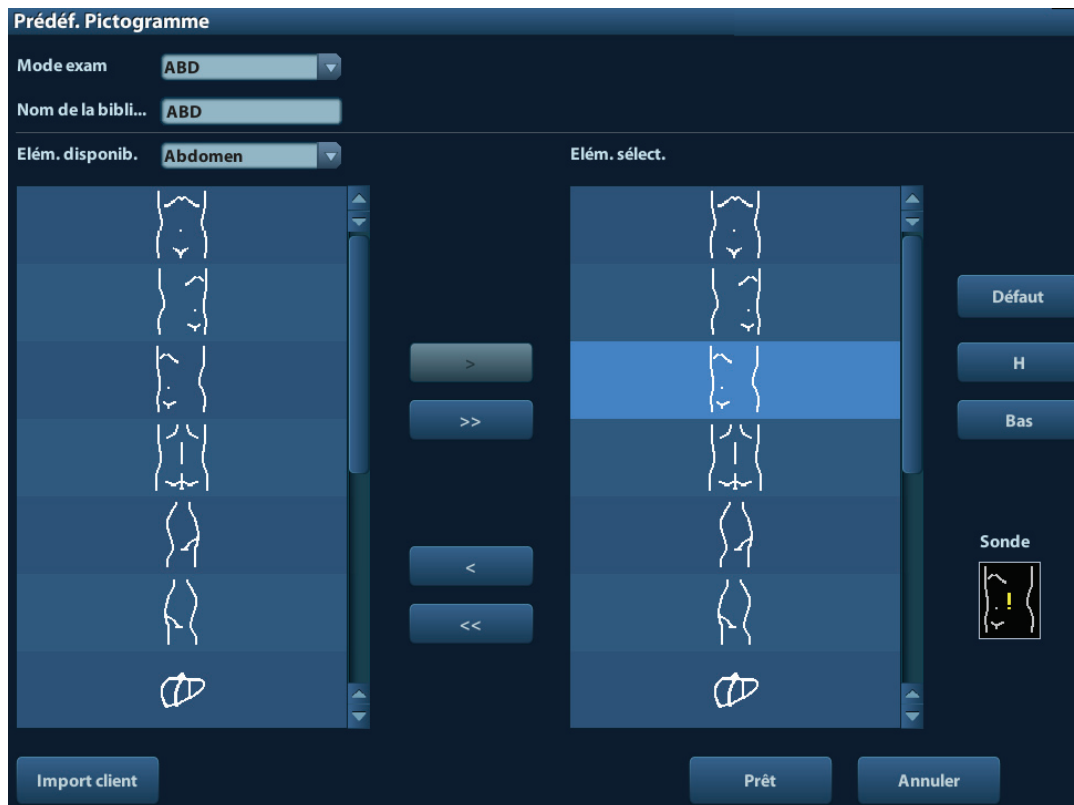
Pour plus d'informations sur les mesures, veuillez consulter le Manuel d'utilisation [Volume avancé].

11.5 Prédéfinition des repères corporels

L'écran Prédéf repcorp vous permet de définir un grand nombre de paramètres préférentiels afin de s'adapter à votre flux de travail. Cette fonction permet de prédéfinir les repères corporels pour chaque type d'examen ou les repères corporels définis par l'utilisateur.

11.5.1 Prédéfinition des repères corporels pour le mode d'examen

1. Pour accéder à l'écran de prédéfinition des repères corporels (voir l'illustration ci-dessous), procédez comme suit :
Sélectionnez [Conf.]> [Prédéf. Pictogramme] (voir la figure ci-dessous).



2. Sélection des modes d'examen

Sélectionnez le mode d'examen dans la liste déroulante. Le mode d'examen actuel est le réglage par défaut.

3. Définissez le nom de la bibliothèque : permet de saisir le nom de la bibliothèque des repères corporels personnalisés.

4. Ajoutez ou supprimez des repères corporels.

- [>] Permet d'ajouter à la liste [Elém. sélect.] l'élément sélectionné dans la liste [Elém. disponib.].
- [>>] Permet d'ajouter à la liste [Elém. sélect.] tous les éléments de la liste [Elém. disponib.].
- [<] Permet de retirer de la liste [Elém. sélect.] l'élément sélectionné pour le redéplacer vers la liste [Elém. disponib.].
- [<<] Permet de retirer tous les éléments de la liste [Elém. sélect.].

5. Cliquez sur [Haut] et [Bas] : pour définir l'ordre des éléments dans la liste Elém. sélect.

6. Prédéfinissez le symbole de sonde du repère corporel sélectionné dans les éléments sélectionnés.

Déplacez le curseur sur le symbole de sonde du repère corporel dans la zone de sonde, puis appuyez sur <Set>. Le curseur devient vert. Utilisez la boule de commande pour modifier la position de la sonde, tournez le bouton multifonction pour modifier l'angle et appuyez sur <Set> pour confirmer l'orientation de la sonde.

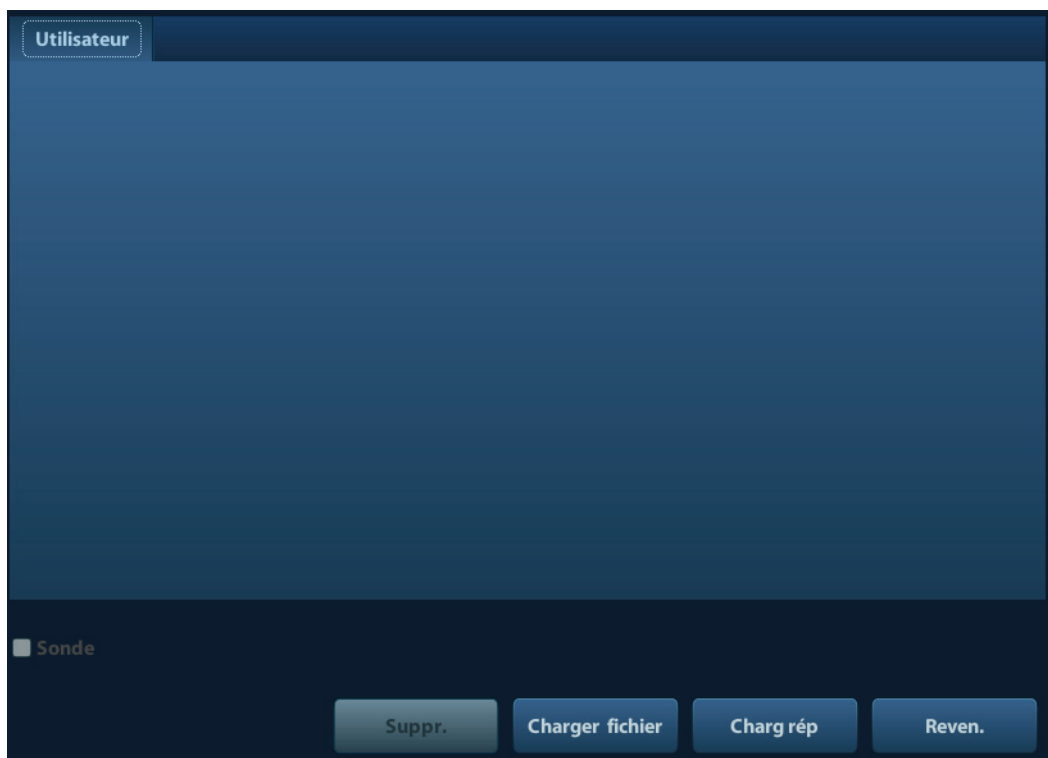
7. Sélectionnez le repère corporel dans les éléments sélectionnés et cliquez sur [Défaut]. L'affichage du repère corporel devient prioritaire.

8. Cliquez sur [Prêt] pour valider le réglage.

11.5.2 Personnalisation des repères corporels

Le système prend en charge le chargement et la suppression des repères corporels.

Dans l'écran de prédéfinition des repères corporels illustré ci-dessus, cliquez sur [Import person] pour ouvrir l'écran des repères corporels définis par l'utilisateur (comme indiqué dans l'illustration ci-dessous).



- [Charger fichier] : permet de charger un fichier de repère corporel unique.
- [Charg rép] : permet de charger tous les fichiers de repères corporels situés dans un répertoire déterminé.
- [Revenir] : permet de quitter l'écran actuel.

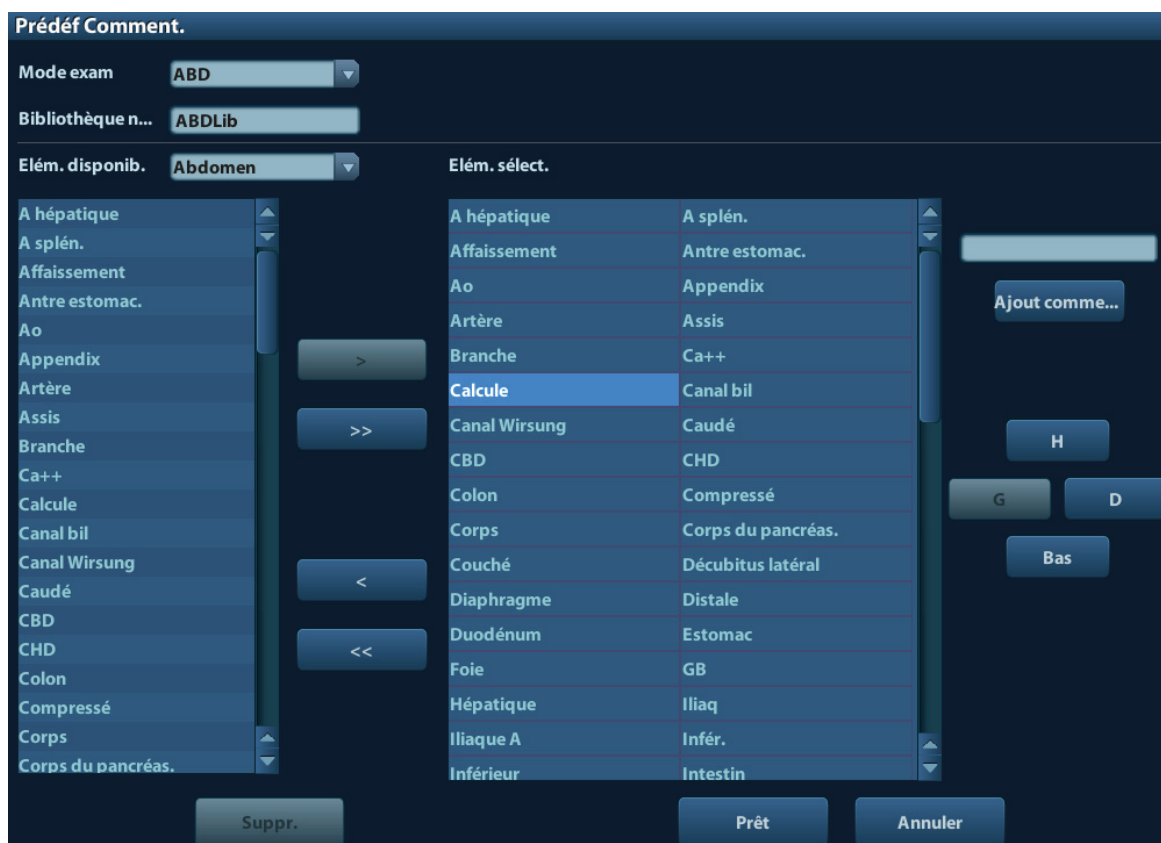
11.6 Prédéfinition des commentaires

Vous pouvez prédéfinir, pour chaque mode d'examen, la bibliothèque des commentaires personnalisés, selon vos besoins.

11.6.1 Commentaires personnalisés

Vous pouvez prédéfinir, pour chaque mode d'examen, la bibliothèque des commentaires personnalisés, selon vos besoins. Les commentaires de la bibliothèque sont fournis par le système ou définis par l'utilisateur. Le nom de la bibliothèque, qui peut être défini, apparaît sur la première page de la bibliothèque.

1. Pour accéder à l'écran de prédéfinition des commentaires :
Ouvrez la page Comment. via [Conf.]-> [Prédéf. comment.].



2. Sélectionnez le mode d'examen.
3. Saisie du nom de la bibliothèque : vous pouvez saisir des caractères du nom de la bibliothèque, ou accepter le nom par défaut (le même que celui pour le mode d'examen).
4. Ajout de commentaires définis par l'utilisateur : saisissez directement des textes commentaires, ou sélectionnez les textes dans la bibliothèque des commentaires.
 - Saisie directe des textes commentaires : positionnez le curseur dans le champ au-dessus du bouton [Aj.comment.], saisissez le commentaire texte à l'aide du clavier, puis cliquez sur [Aj.comment.]. Le commentaire saisi est ajouté aux listes des éléments disponibles et des éléments sélectionnés.
 - Sélection des éléments disponibles : sélectionnez, d'abord, une bibliothèque des commentaires dans la liste déroulante à côté des « Élément disponibles », puis cliquez [Set] sur un élément figurant en dessous de « Éléments disponibles ».
 - Cliquez sur [>] pour ajouter l'élément sélectionné dans la liste Elém. disponib., située à gauche, à la liste Elém. sélect., sur la droite.
 - Cliquez sur [>>] pour ajouter tous les éléments de la liste Elém. disponib., située à gauche, à la liste Elém. sélect., sur la droite.
5. Changez la position des éléments sélectionnés : sélectionnez un élément dans la zone de droite et cliquez sur les boutons [H], [Bas], [Gche] ou [Drte] pour déplacer l'élément dans la liste.
6. Suppression de commentaires :
 - Retrait d'un élément (de la bibliothèque ou défini par l'utilisateur) dans la liste Elém. sélect. :
Sélectionnez un élément dans la liste Elém. sélect., puis cliquez sur [<] pour le retirer et le déplacer dans la liste Elém. disponib.
Cliquez sur [<<] pour supprimer tous les éléments figurant dans la liste Elém. sélect.

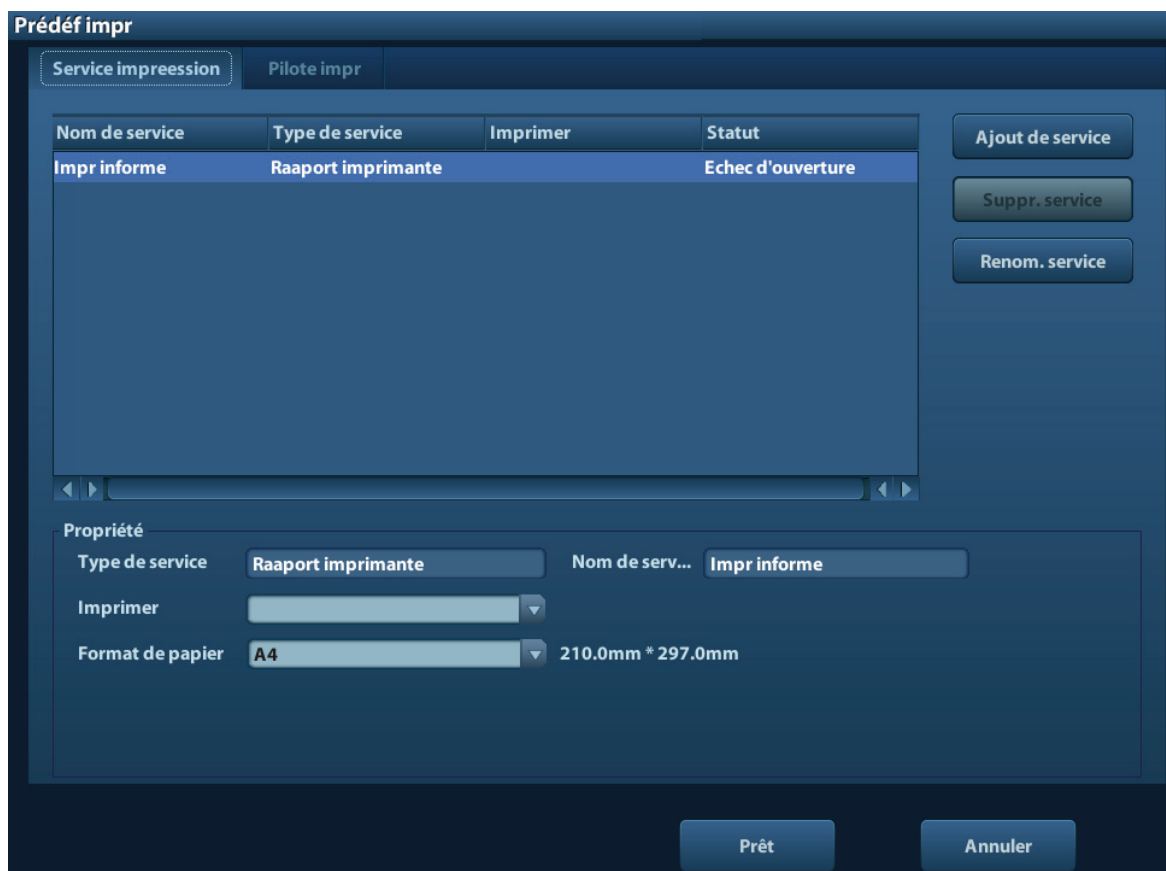
- Suppression d'un élément défini par l'utilisateur dans la case des éléments disponibles. Vous ne pouvez que supprimer les éléments définis par l'utilisateur plutôt que les éléments présents dans la bibliothèque système. Une fois supprimé, l'élément défini par l'utilisateur n'est pas disponible.

Sélectionnez un élément défini par l'utilisateur dans la liste Elém. disponib., puis cliquez sur le bouton [Suppr.]. Une fois l'élément défini par l'utilisateur supprimé de la liste des éléments disponibles, il a également disparu de la liste des éléments sélectionnés, à droite.

7. Après avoir personnalisé les commentaires, cliquez sur [OK] pour confirmer et quitter l'écran [Prédéf. comment.].

11.7 Prédéfinition du service d'impression

Le paramétrage d'une imprimante inclut le service d'impression et le pilote d'impression.



- Réglage du service d'impression
 - Aj. service : cliquez sur ce bouton pour commencer l'ajout d'un service d'impression.
 - Suppr. service : cliquez sur ce bouton pour supprimer le service d'impression sélectionné.
 - Renom. service : cliquez sur ce bouton pour renommer le service d'impression sélectionné.
 - Propriété : permet de prédéfinir les propriétés des services d'impression.
- Réglage du pilote d'impression

Les imprimantes répertoriées dans ce Manuel d'utilisation sont toutes prises en charge par l'échographe. Aucun pilote n'est nécessaire.

Cliquez sur [Pilote impr.] pour ouvrir l'écran de réglage du pilote d'impression, qui vous donne accès aux opérations suivantes :

- Afficher le nom de l'imprimante ainsi que l'état de l'impression.
- Ajouter une imprimante, y compris une imprimante réseau.
- Vérifier les attributs de l'imprimante.

Pour plus d'informations sur l'impression DICOM, veuillez vous reporter à la section "10 DICOM".

11.8 Prédéfinition réseau

Pour plus d'informations sur la prédéfinition du paramètre TCP/IP local et la prédéfinition de DICOM, veuillez vous reporter à la section "10.1 Prédéfinition de DICOM".

11.9 Configuration de la station de travail

Vous pouvez prédéfinir l'envoi des données d'image et de mesure vers la station de travail, qui correspond à un système de gestion des données d'image.

- Prédéfinition de la station de travail
Sélectionnez [Conf.]-> [Param. station trv] pour définir l'adresse IP et le port.
- Prédéfinition de la touche définie par l'utilisateur
Sélectionnez [Conf.]-> [Prédéf. syst.]-> [Config tch]-> [Autre] pour prédéfinir une touche définie par l'utilisateur pour envoyer des données d'image et de mesure vers la station de travail. Pour plus d'information sur la configuration des touches, reportez-vous à la section "11.1.6 Config tch".

11.10 Gestion des prédéfinitions

La page Don. prédéf permet d'exporter et d'importer les données de configuration ou de rétablir les paramètres d'usine.

11.10.1 Exportation des données de configuration

Cette fonction permet d'inscrire l'ensemble des données que vous avez prédéfinies sur un disque afin de les sauvegarder. Le format du fichier de données est PDP.

- Pour exporter certaines données prédéfinies :
 1. Accédez à [Conf.]-> [Don. prédéf] et sélectionnez les éléments à exporter dans le champ [Expor.] situé à gauche.
 2. Cliquez sur [Expor.] pour ouvrir l'écran [Exp. données].
 3. Sélectionnez le chemin pour enregistrer les données.
 4. Cliquez sur [Prêt].
- Pour exporter toutes les données prédéfinies :
Cliquez sur [Export. tt] et sélectionnez le chemin pour enregistrer les données.

11.10.2 Importation des données de configuration

Cette fonction permet d'importer les données de configuration existantes dans la mémoire données prédéfinies du système. Le système réinitialise ces données et applique les préférences importées.

- Pour importer certaines données prédéfinies :
 1. Accédez à [Conf.]> [Don. prédéf] et sélectionnez un élément dans le champ Ouv situé à droite.
 2. Cliquez sur Ouv. pour ouvrir l'écran Chgt donn.
 3. Sélectionnez le fichier importé.
 4. Cliquez sur [Prêt]. Une barre de progression apparaît et les données de configuration au format DTA sont importées à l'emplacement spécifié.
 5. Pour rétablir les paramètres d'usine, cliquez sur [Charg usine] à droite de l'écran.
- Pour importer toutes les données prédéfinies :

Cliquez sur [Import. ts] et sélectionnez le chemin pour enregistrer les données.

11.11 Maintenance

La fonction [Maintenance] vous permet de mettre à jour le logiciel de l'échographe et vous propose d'autres fonctions spéciales. Si vous avez besoin de ces fonctions, veuillez contacter le Service commercial ou le Service clientèle de Mindray.

Vous pouvez installer des options, prédéfinir des mesures, repères corporels et commentaires ou encore exporter et télécharger des journaux des opérations.

11.12 Infos système

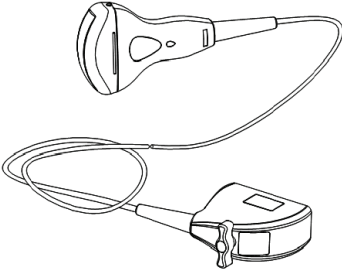



Cliquez sur [Aprop] dans le menu de configuration pour accéder à l'écran Infos système, (Les informations varient en fonction des configurations du système et de la version.)




- Aprop
Affiche le nom du produit, la version du matériel et d'autres informations qui ne sont pas modifiables mais peuvent être exportées au format de fichier texte txt en cliquant sur [Enr.].
- A propos de détail
Affiche des informations sur la version du logiciel, du matériel et d'autres modules, qui ne sont pas modifiables mais peuvent être exportées au format de fichier texte txt en cliquant sur [Enr.].
- Option
Affiche les informations du module facultatif.

12 Sondes et biopsie

12.1 Probe

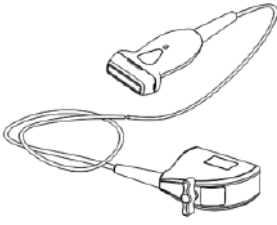Le système prend en charge les sondes suivantes :

N°	Modèle de sonde	Type de sonde	Illustration
1.	35C50EA	Convexe	
2.	65C15EA	Convexe	
3.	65EC10EA	Intracavitaire	
4.	75L38EA	Linéaire	

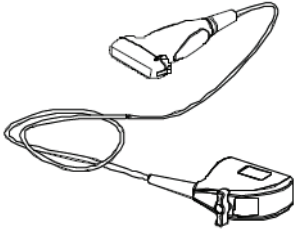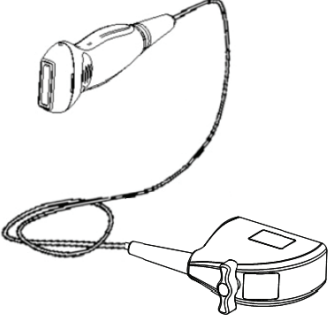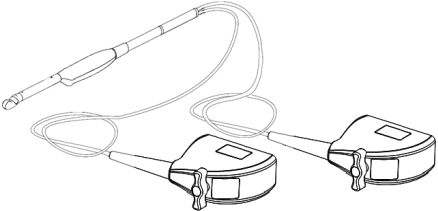
N°	Modèle de sonde	Type de sonde	Illustration
5.	75L53EA	Linéaire	
6.	10L24EA	Linéaire	
7.	65EB10EA	Convexe	

Remarque : Pour plus d'informations sur la durée de stockage et les conditions de désinfection des sondes ou de stérilisation des sondes et supports, veuillez vous reporter aux normes techniques de désinfection des structures médicales et sanitaires

12.1.1 Nom et fonction de chaque partie de la sonde

Les structures et fonctions fondamentales de toutes les sondes répertoriées ci-dessus sont similaires. Elles sont décrites ci-dessous.

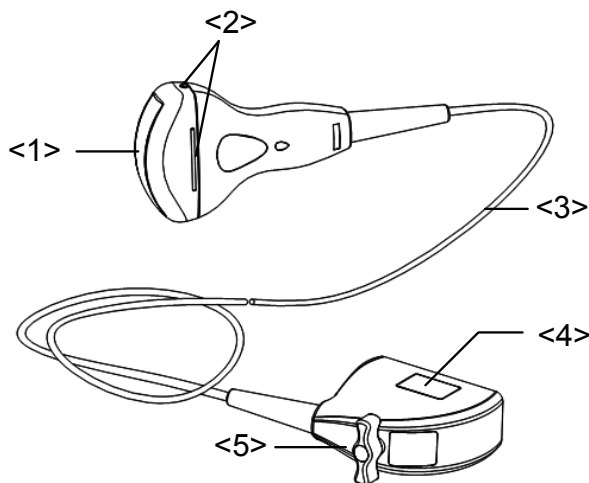
■ Sonde 35C50EA



N°	Nom	Fonction
<1>	Tête du capteur	Elle convertit le signal électrique en signal échographique, orientant les faisceaux sonores dans la direction donnée. En outre, elle reçoit le signal échographique, puis le convertit de nouveau en signal électrique. La lentille à la surface correspond à la lentille acoustique. Enduisez la lentille acoustique de gel échographique.
<2>	Rainures et languettes de fixation du guide-aiguille.	Permettent d'installer le guide-aiguille.
<3>	Câble de la sonde	Permet de transmettre les signaux électriques entre le corps et le connecteur de la sonde.
<4>	Connecteur de la sonde	Permet de brancher la sonde à l'échographe.

La structure de sonde <2> de la figure ci-dessus peut varier selon les guide-aiguilles.

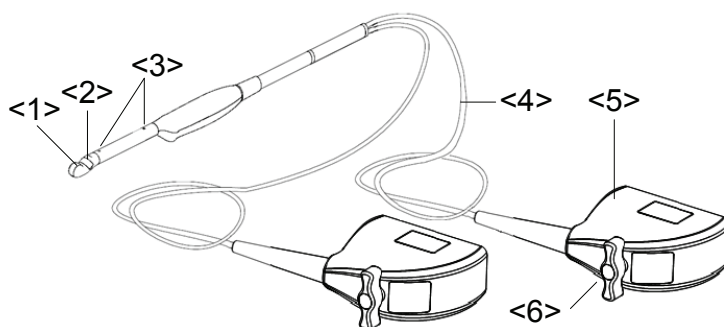
■ Sonde 65EB10EA




N°	Nom	Fonction
<1> <2>	<1>Tête de capteur (convexe, section verticale) <2>Tête de capteur (convexe, section horizontale)	Elle utilise l'effet piézoélectrique pour convertir les signaux électriques en ondes ultrasonores, transmises aux corps, et générer des signaux électriques lors de la réception des ondes ultrasonores renvoyées (échos). La lentille de la surface est la lentille acoustique. Enduisez la lentille acoustique de gel échographique.
<3>	Rainure de positionnement	Permet de monter le guide-aiguille.
<4>	Câble	Il transmet les signaux électriques entre le boîtier du capteur et le connecteur.
<5>	Connecteur	Il connecte le capteur à l'échographe.
<6>	Poignée de verrouillage	Elle fixe le connecteur à l'échographe.

12.1.2 Orientation de l'image échographique et de la tête de la sonde

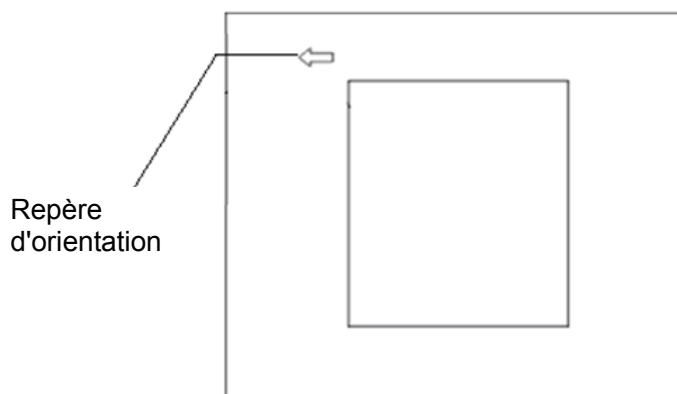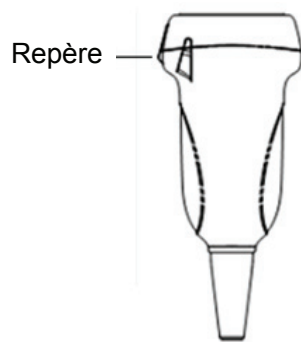L'orientation de l'image échographique et de la sonde est illustrée ci-dessous. Le repère de l'image échographique sur le moniteur doit correspondre au repère de la sonde. Avant de commencer un examen, vérifiez l'orientation (l'exemple ci-dessous est basé sur une sonde linéaire).







12.1.3 Procédures d'utilisation

Cette section décrit les procédures générales de fonctionnement de la sonde. Le choix de la technique clinique à utiliser pour le fonctionnement de la sonde doit être fondé sur une formation et une expérience clinique de la spécialité.

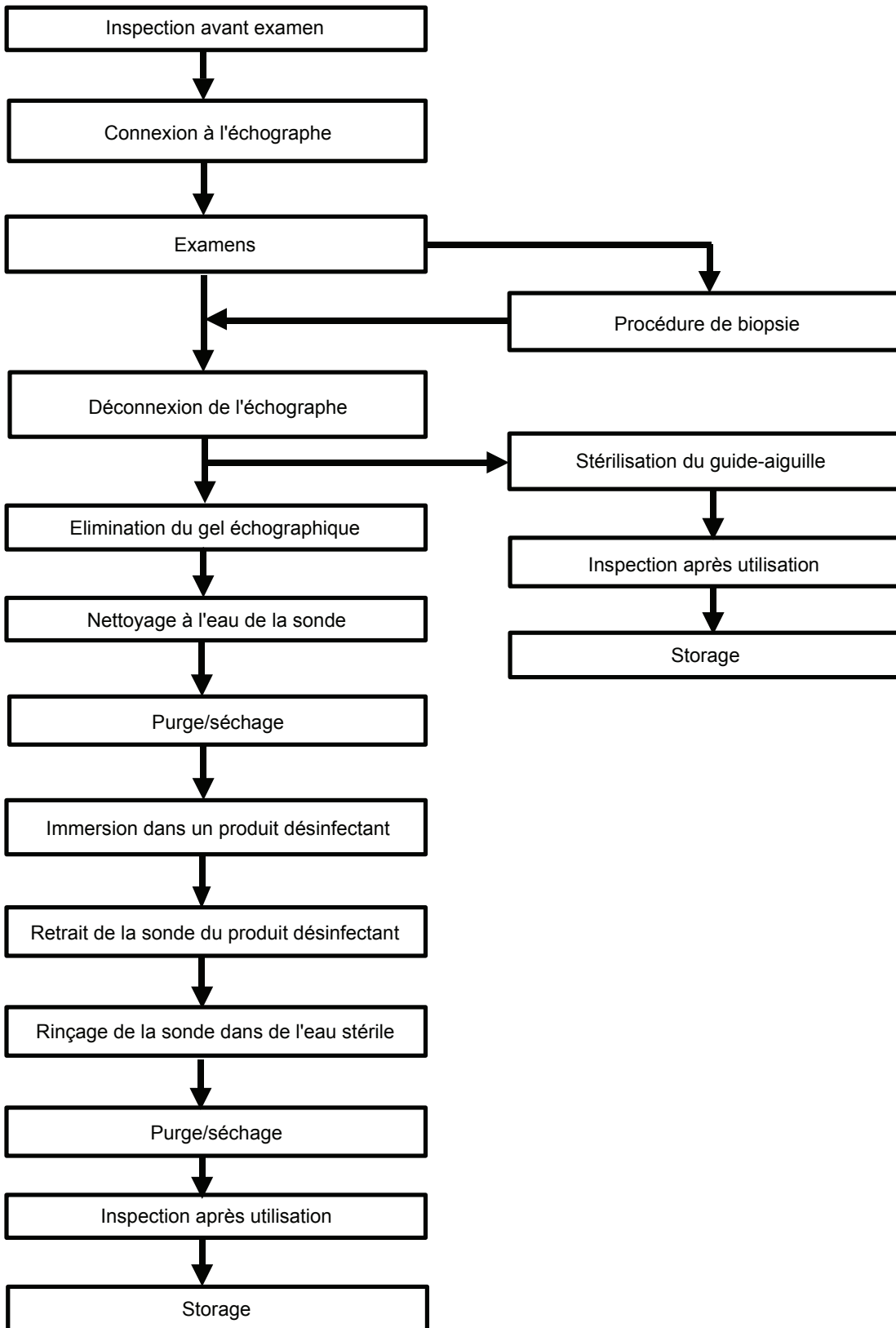■ Procédures de fonctionnement (avec fonction de biopsie) :



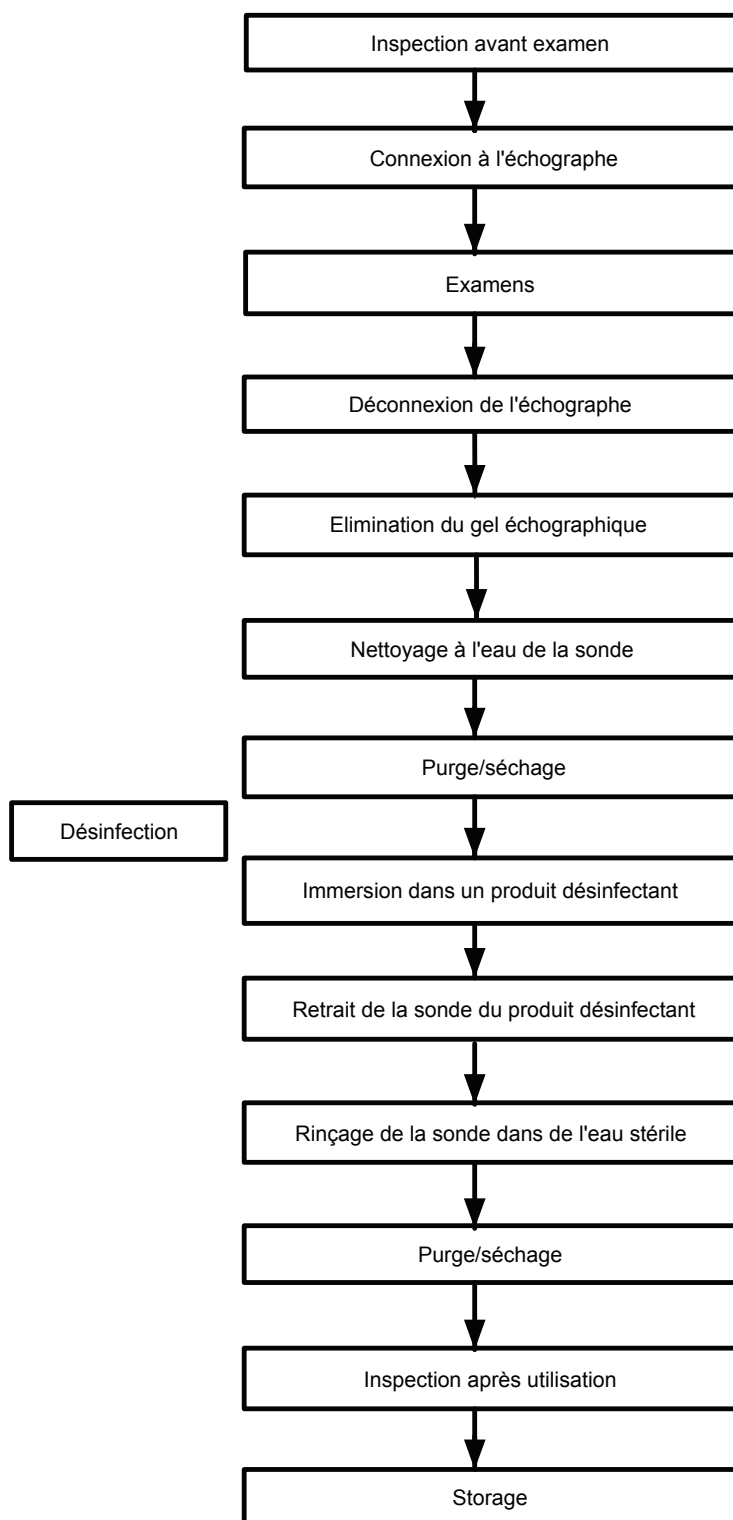■ Procédures de fonctionnement (sans fonction de biopsie) :



AVERTISSEMENT :

Désinfectez la sonde et stérilisez le guide-aiguille avant et après chaque procédure de biopsie sous échoguidage. Si vous ne respectez pas cette recommandation, la sonde et le guide-aiguille peuvent devenir source d'infection.

12.1.4 Usure du couvre-sonde

Avant tout examen, veillez à placer un couvre-sonde sur la sonde. Les couvre-sondes doivent être utilisés dans toutes les situations cliniques où une infection pourrait se révéler problématique.

Avant tout examen intracavité ou biopsie, veillez à placer un couvre-sonde sur la sonde. Utilisez un couvre-sonde disponible dans le commerce.

Si vous souhaitez commander un couvre-sonde, contactez :

CIVCO Medical Instruments Co.

102 First Street South, Kalona, IA 52247-9589 Etats-Unis Tél. : 1-319-656-4447

Email : info@civco.com

<http://www.civco.com>

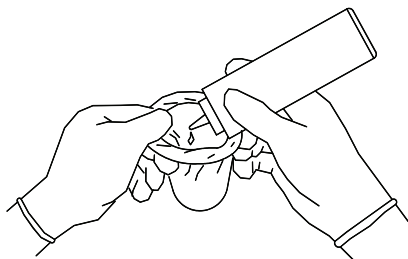


ATTENTION :


1. **Veillez à utiliser un couvre-sonde neuf (non utilisé) afin d'éviter toute infection au cours de l'examen. Si l'emballage d'un couvre-sonde est ouvert ou déchiré, il est possible que le couvre-sonde ne soit plus stérile. N'utilisez JAMAIS un tel couvre-sonde.**
2. **Le couvre-sonde contient du latex (caoutchouc naturel) qui peut provoquer des réactions allergiques chez certaines personnes.**
3. **N'utilisez JAMAIS un couvre-sonde dont la date d'utilisation a expiré. Avant d'utiliser des couvre-sondes, vérifiez leur validité.**

Méthode (pour référence uniquement) :


1. Enduisez de gel l'intérieur du couvre-sonde ou la surface de la sonde. Si vous n'utilisez pas de gel, vous risquez d'obtenir des images médiocres.



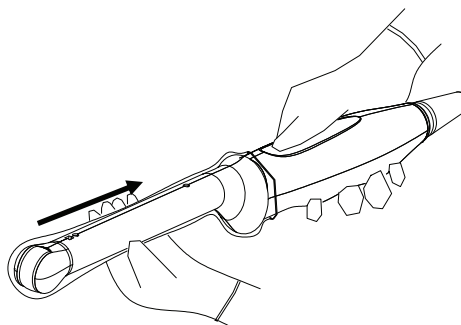2. Insérez la sonde dans le couvre-sonde, en veillant à utiliser une technique stérile adaptée. Étirez bien le couvre-sonde sur la sonde afin d'éliminer tout renflement ou bulle d'air, en veillant à ne pas endommager le couvre-sonde.



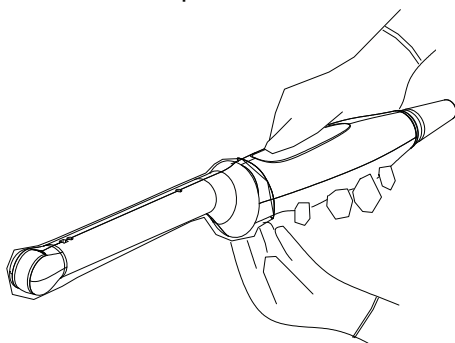3. Fixez le couvre-sonde à l'aide des bandes élastiques



4. Inspectez le couvre-sonde afin de vérifier qu'il n'y a pas de trou ou de déchirure.

12.1.5 Nettoyage et désinfection des sondes

Mettez l'échographe hors tension après chaque examen, puis nettoyez et désinfectez (ou stérilisez) les sondes. En cas de procédure de biopsie, stérilisez en outre le guide-aiguille. Si vous ne respectez pas cette recommandation, la sonde et le guide-aiguille peuvent devenir source d'infection. Veuillez suivre les instructions de nettoyage fournies dans le manuel.



AVERTISSEMENT :

N'immergez jamais le connecteur de la sonde dans un liquide tel que de l'eau ou du désinfectant, au risque de provoquer une électrocution ou un dysfonctionnement.



ATTENTION :

1. Vous devez porter des gants stériles lorsque vous procédez au nettoyage et à la désinfection de la sonde, afin d'éviter toute infection.



2. Après la désinfection, rincez la sonde abondamment avec de l'eau stérile afin d'éliminer tout résidu chimique. S'il reste des résidus chimiques sur la sonde, cela peut en effet se révéler dangereux pour le corps humain.

3. La sonde risque de devenir source d'infection si elle n'est ni nettoyée ni désinfectée.

REMARQUE :

1. Une fois l'examen terminé, essuyez soigneusement le gel échographique. Sinon, ce dernier pourrait se solidifier et altérer la qualité de l'image.
2. Veillez à ce que la sonde ne chauffe pas de manière excessive (plus de 55 °C) au cours du nettoyage et de la désinfection. Une température trop élevée peut déformer ou endommager la sonde.

Nettoyage

1. Portez des gants stériles afin d'éviter toute infection.
2. Nettoyez la sonde à l'eau claire ou savonneuse pour éliminer tout corps étranger, ou essuyez la sonde à l'aide d'une éponge d'uréthane douce. Evitez l'usage de brosse, afin de ne pas endommager la sonde.
3. Essuyez ensuite la sonde à l'aide d'un tissu ou d'une gaze stérile. Ne chauffez jamais la sonde pour la sécher.

Désinfection

Veillez suivre les instructions de désinfection fournies dans le manuel.

1. Portez des gants stériles afin d'éviter toute infection.
 2. Nettoyez la sonde avant de la désinfecter. Pour désinfecter la sonde, MINDRAY recommande les solutions suivantes.
- Désinfectant à base de glutaraldéhyde :

Nom chimique	Nom commercial	Procédures
Glutaraldéhyde (2.2-2.7%)	Cidex - Solution activée à base de dialdéhyde	Veillez vous reporter aux instructions fournies par le fabricant de la solution pour en savoir plus.

■ Désinfectant à base de glutaraldéhyde :

Nom chimique	Nom commercial	Procédures
Ortho-phthalaldéhyde (0,55 %)	Cidex OPA	Veillez vous reporter aux instructions fournies par le fabricant de la solution pour en savoir plus.

■ Désinfectant à base de N-dodécylpropane-1, 3-diamine :

Nom chimique	Fabricant	Nom commercial	Procédures
N-dodécylpropane-1, 3-diamine	Antiseptica	Triacid-N	Veillez vous reporter aux instructions fournies par le fabricant de la solution pour en savoir plus.


■ Désinfectant à base d'ammoniums quaternaires :

Nom chimique	Fabricant	Nom commercial	Procédures
Ammoniums quaternaires	Ecolab Inc.	Ster-Bac	Veillez vous reporter aux instructions fournies par le fabricant de la solution pour en savoir plus.

■ Désinfectant à base de peroxyde d'hydrogène et d'acide peroxyacétique :

Nom commercial	Nom chimique	Procédures
Agent stérilisant Minncare®	Peroxyde d'hydrogène à 22 % Acide peroxyacétique à 4,5 %	Veillez vous reporter aux instructions fournies par le fabricant de la solution pour en savoir plus.

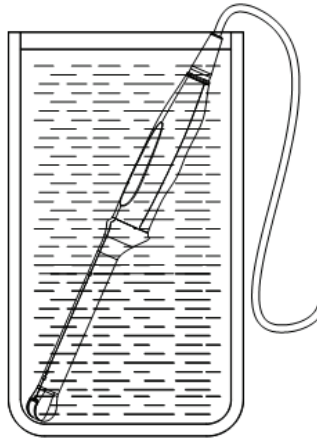- Consultez les instructions fournies par le fabricant du produit chimique afin d'en savoir plus sur la concentration de la solution désinfectante, la méthode, la dilution et les précautions d'utilisation.
 - N'immergez PAS le connecteur ou le câble de la sonde dans de l'eau ou dans une solution quelconque.
 - Immergez la sonde dans la solution désinfectante pendant la durée minimale recommandée par le fabricant (par exemple, la durée minimale d'immersion recommandée par le fabricant de la solution Cidex OPA est 12 minutes).
 - Lors de la sélection et de l'utilisation du désinfectant, respectez les réglementations locales.
1. Rincez la sonde abondamment avec de l'eau stérile (environ 7 litres) pendant au moins 1 minute afin d'éliminer tout résidu chimique. Ou suivez la méthode de rinçage recommandée par le fabricant de la solution désinfectante.
 2. Essuyez ensuite la sonde à l'aide d'un tissu ou d'une gaze stérile. NE séchez JAMAIS la sonde par l'apport de chaleur.



(Pour référence uniquement)

12.1.6 Stockage et transport

Lorsque tous les examens de la journée sont terminés, vérifiez que la sonde est en bon état. Après avoir désinfecté la sonde, assurez-vous qu'elle est en parfait état avant de la ranger dans un endroit adapté à des fins d'utilisation ultérieure.

1. Afin d'éviter tout endommagement de la sonde, ne la rangez pas dans des endroits où elle peut être exposée aux conditions suivantes :
 - Lumière directe du soleil ou rayons X
 - Changements brusques de température
 - Poussière
 - Vibrations excessives
 - Générateurs de chaleur
2. Stockez et transportez la sonde dans les conditions ambiantes suivantes :
 - Température ambiante : -20 °C à 55 °C
 - Humidité relative 30 % à 95 % (sans condensation)
 - Pression atmosphérique 700 hPa à 1 060 hPa
3. Si vous envoyez la sonde pour réparation au Service commercial ou au Service clientèle de MINDRAY, veillez à la désinfecter et conservez-la dans son étui de transport afin d'éviter toute infection.
4. Stérilisez l'étui de transport, le cas échéant.

12.2 Guide de biopsie



AVERTISSEMENT :

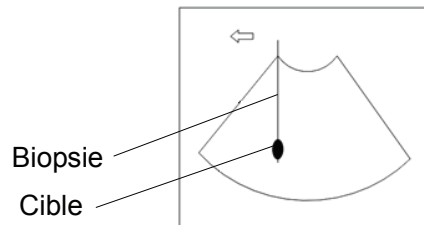
1. La personne exécutant les procédures de biopsie doit avoir une connaissance approfondie de l'échographe et doit avoir été dûment formée, au risque de provoquer des effets secondaires chez le patient.
2. Dans les situations ci-dessous, il est possible que l'aiguille de biopsie ne pénètre pas dans la cible. Une biopsie pratiquée de manière incorrecte peut provoquer divers effets secondaires chez le patient.
 - Si vous utilisez un guide-aiguille qui ne correspond pas à la sonde.
 - Si vous montez le guide-aiguille de manière incorrecte.
 - Si vous utilisez une aiguille de biopsie non adaptée au type de biopsie pratiquée.
 - Si vous utilisez une aiguille de biopsie non adaptée au type de biopsie pratiquée.
3. Avant et après une procédure de biopsie, vérifiez que le guide-aiguille est en bon état. Vérifiez manuellement que les composants du guide-aiguille ne glissent pas ou ne bougent pas de leurs positions. Si le guide-aiguille est utilisé alors que ses composants ne sont pas fixement ou correctement installés, le patient peut subir des blessures. Si une anomalie est détectée sur le guide-aiguille, cessez immédiatement de l'utiliser et contactez le Service commercial ou le Service clientèle de Mindray.
4. N'utilisez pas un guide-aiguille pendant une exploration. L'aiguille peut avancer dans une direction incorrecte et blesser le patient.

Ne pratiquez jamais une biopsie pendant l'exploration d'une image.
5. Ne figez pas une image pendant une procédure de biopsie.
6. Pendant les procédures de biopsie, l'aiguille peut dévier du chemin souhaité en raison des caractéristiques du tissu ou du type d'aiguille. Ceci se vérifie particulièrement en cas d'aiguilles de petits diamètres, qui peuvent dévier plus fortement.


- 7. Stérilisez la sonde et le guide-aiguille avant et après chaque procédure de biopsie sous échoguidage. Si vous ne respectez pas cette recommandation, la sonde et le guide-aiguille peuvent devenir source d'infection.**
- 8. Le repère d'aiguille affiché sur l'image échographique n'indique pas la position réelle de l'aiguille de biopsie. Il ne doit dès lors être utilisé qu'à titre de référence. Surveillez toujours les positions relatives de l'aiguille de biopsie au cours des procédures.**
- 9. Ajustez le repère d'aiguille avant d'exécuter la procédure de biopsie.**
- 10. Lors de la réalisation des procédures de biopsie, n'utilisez que du gel échographique stérile certifié sûr. Manipulez le gel échographique avec précaution de manière à éviter qu'il ne devienne source d'infection.**
- 11. Lors de la pratique de la biopsie, portez des gants stériles.**

12. Image de la cible de biopsie et de la position réelle de l'aiguille de biopsie :

Les échographes produisent des images tomographiques qui fournissent des informations d'épaisseur dans la direction d'épaisseur de la sonde. (Les informations affichées sur les images correspondent à toutes les informations collectées dans la direction d'épaisseur de la sonde.) Dès lors, même si l'aiguille de biopsie semble avoir pénétré dans l'objet cible dans l'image, ce n'est peut-être pas le cas en réalité. Quand la cible de biopsie est petite, une dispersion du faisceau d'ultrasons peut engendrer une déviation de l'image par rapport à sa position réelle. Soyez vigilant. La déviation de l'image est illustrée sur la figure ci-dessous :



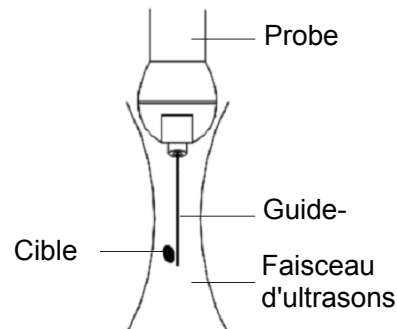L'aiguille de biopsie semble atteindre l'objet cible dans l'image.



Dispersion du faisceau d'ultrasons

Pour éviter ce problème, gardez en mémoire les points suivants :

Ne vous fiez pas uniquement aux signaux d'écho de la pointe de l'aiguille dans l'image. Soyez vigilant au fait que, lorsque l'aiguille de biopsie entre en contact avec l'objet cible, l'objet bouge légèrement.

Avant de pratiquer la biopsie, évaluez la taille de l'objet et assurez-vous que la biopsie peut être exécutée correctement.

- ⚠ ATTENTION :**
1. Vous devez porter des gants stériles lorsque vous utilisez le guide-aiguille, afin d'éviter toute infection.
 2. Un fonctionnement incorrect peut survenir au cours de la biopsie de la sonde 65EB10EA si la plage d'exploration n'est pas réglée sur "L", affectant ainsi la zone cachée de l'image et la fiabilité de l'affichage de l'aiguille. La plage d'exploration doit être réglée sur "L".

12.2.1 Procédures de base du guidage de la biopsie

1. Sélectionnez l'aiguille et le guide-aiguille appropriés, puis installez-les correctement.
Avant d'effectuer le guidage de la biopsie, prédéfinissez, le cas échéant, le modèle de guide-aiguille, l'affichage de la biopsie et le type de point de la ligne de guide-aiguille. Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la section "12.2.3 Prédéfinition de la biopsie".
2. Vérifiez la ligne de guide-aiguille pour biopsie. Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la section "12.2.5 Menu Biopsie".
3. Appuyez sur le bouton <Biopsie> du panneau de commande.
 - Si la sonde actuelle n'est associée à aucun guide-aiguille ; ou si l'image est figée alors que la ligne de guide-aiguille est masquée, le menu Biopsie n'est pas accessible.
 - Avant d'accéder au menu Biopsie, le système affiche le message "Vérifiez les lignes du guide-aiguille avant la biopsie".
4. Réglez l'option [Affich.] sur "Mar" pour afficher la ligne de guide-aiguille, puis sélectionnez le guide-aiguille et la ligne de guide-aiguille en fonction de la situation réelle. Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la section "12.2.5 Menu Biopsie".
5. Dans le menu Biopsie, cliquez sur [Vérif.] afin d'ouvrir le menu correspondant et de vérifier la ligne du guide-aiguille. Après la vérification, cliquez sur [Enr.] sur le menu pour enregistrer le réglage du paramètre. Cliquez ensuite sur [Quitter] pour revenir au menu Biopsie.
Remarque :
 - Si vous changez de sonde ou de guide-aiguille au cours de la biopsie, vérifiez la ligne de guide-aiguille une nouvelle fois.
 - Si vous quittez le menu de vérification de biopsie sans enregistrer le réglage, le système affiche le message "Données modifiées. Enregistrer les modifications ?". Cliquez sur [Prêt] pour enregistrer le réglage et revenir au menu Biopsie.
6. Localisez la cible. Centrez la cible dans le chemin de la zone de guidage électronique.
7. Dirigez l'aiguille dans la zone d'intérêt pour prélèvement de l'échantillon.
8. Une fois le prélèvement de l'échantillon de biopsie réalisé, retirez doucement la sonde du corps. Pour quitter le menu Biopsie : appuyez sur la touche <Esc> ou déplacez le curseur sur le menu Autre.
9. Démontez les éléments et mettez-les au rebut selon la réglementation en vigueur.

- ⚠ DANGER :**
- Si vous ne positionnez pas le guide selon la zone de guidage affichée, l'aiguille risque de suivre un chemin en dehors de la zone.**
- Lors de l'utilisation de guides de biopsie à angle réglable, il est extrêmement important que l'angle affiché à l'écran corresponde à l'angle ajusté sur le guide. Si ce n'est pas le cas, l'aiguille ne suit pas la zone de guidage affichée, d'où des biopsies répétées ou un risque de blessure du patient.**

12.2.2 Guide-aiguilles

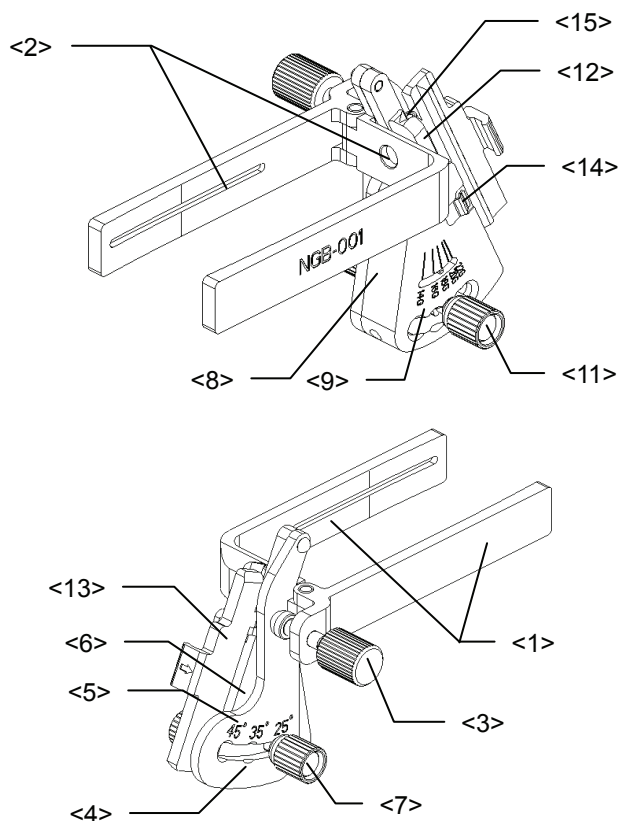
Les guide-aiguilles sont des accessoires facultatifs et s'utilisent conjointement avec les sondes. Certaines sondes sont associées à des aiguilles et des guide-aiguilles. Pour commander des guide-aiguilles, contactez le Service commercial ou le Service clientèle de Mindray.

Dans le cadre d'une biopsie ou d'un traitement, les procédures de biopsie sous échoguidage peuvent être réalisées à l'aide de cette sonde combinée à un guide-aiguille (accessoire facultatif) et d'une aiguille de biopsie (fournie par l'utilisateur).

Nom des composants

Cette section décrit les composants et les fonctions correspondantes de chaque guide-aiguille.



- NGB-001
 - Métal/aiguille détachable





N°	Nom	Description
<1>	Pince du guide-aiguille	Permet d'installer le guide-aiguille sur la sonde.
<2>	Rainure	Correspond à la languette de la sonde.
<3>	Noix de serrage du guide-aiguille	Permet de bloquer le guide-aiguille et la sonde.
<4>	Base de réglage de l'angle	3 types d'angle sont disponibles.
<5>	Libellés des différents angles (25°, 35°, 45°)	Correspond à l'angle de biopsie (25°, 35°, 45°).

N°	Nom	Description
<6>	Bloc d'angle	Permet de déterminer l'angle de la biopsie. Différentes spécifications de bloc d'angle sont disponibles.
<7>	Noix de serrage de l'angle	Permet de bloquer l'angle à la spécification choisie.
<8>	Base de réglage du type d'aiguille	Taille du trou de réglage : 5 types d'aiguille peuvent être réglés.
<9>	Libellés des différents types d'aiguille	Correspond à la spécification de l'aiguille de biopsie (14G, 16G, 18G, 20G, 22G).
<10>	Echelle d'indication du type d'aiguille	Indique le type d'aiguille choisi.
<11>	Noix de réglage du type d'aiguille	Permet de régler et de serrer le bloc de guidage en V sur la valeur souhaitée.
<12>	Bloc de guidage en V	Détermine la taille du trou de guidage, dont la position est contrôlée par la noix de réglage du type d'aiguille.
<13>	Couvercle en V	Détermine le trou de guidage, conjointement avec le bloc de guidage en V. Il peut être ouvert ou fermé.
<14>	Boucle de fixation	Permet de verrouiller le couvercle en V.
<15>	Trou de guidage de l'aiguille de biopsie	Maintient l'aiguille de biopsie. Il est déterminé par le bloc de guidage en V et le couvercle associé.

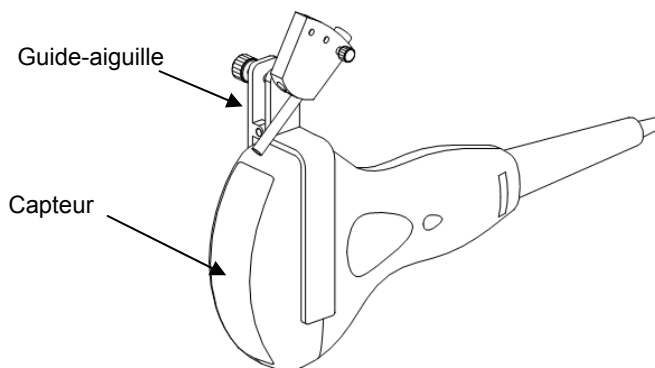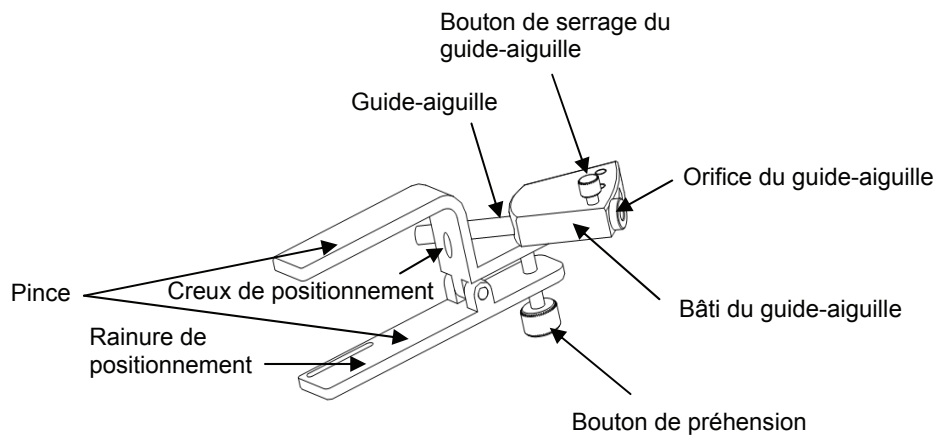
- Métal/aiguille non détachable





■ NGB-002

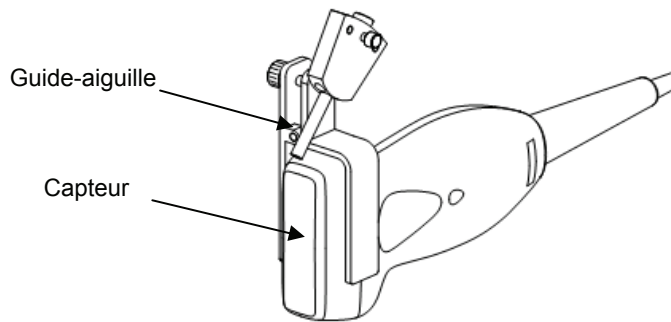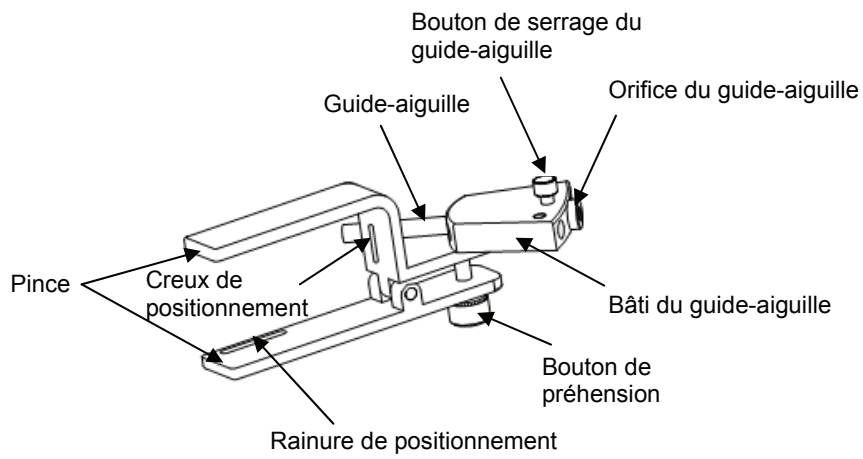

■ NGB-004 :

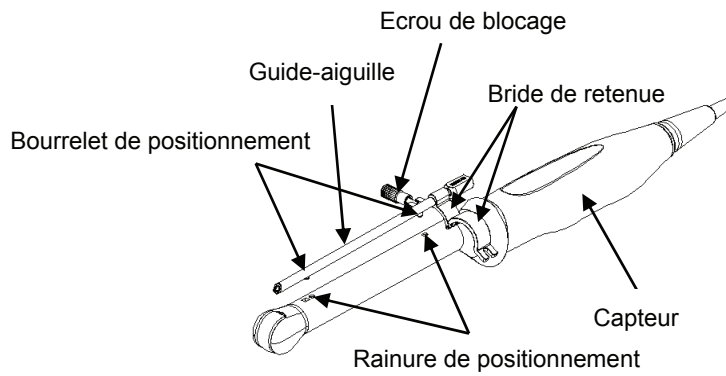



■ NGB-005

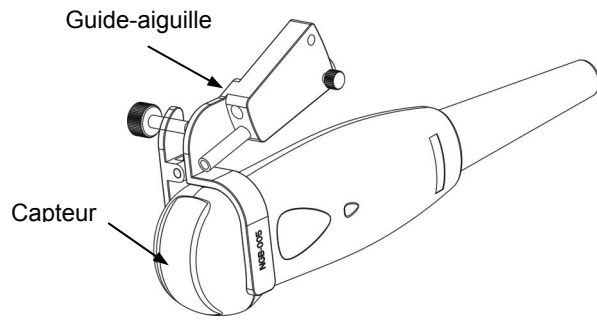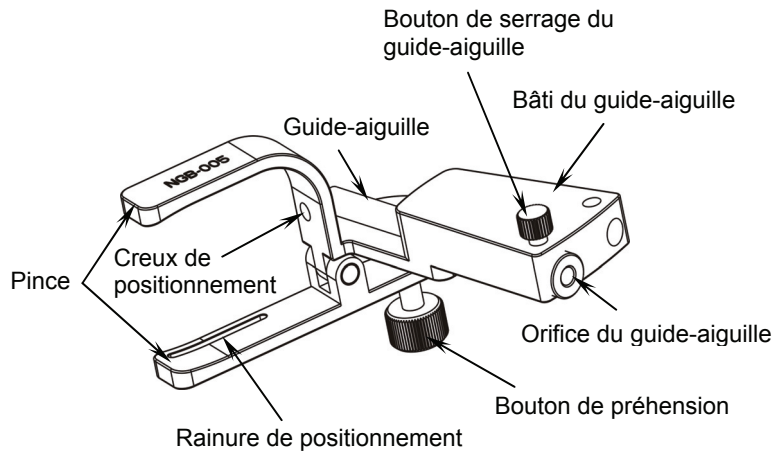

■ NGB-007

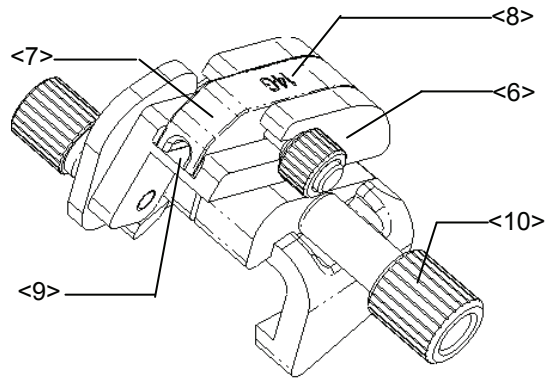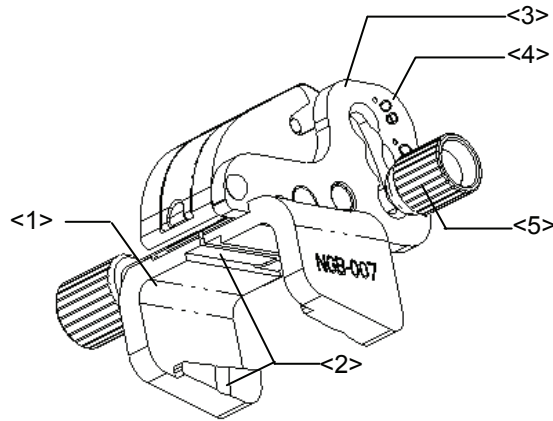
- Métal :






N°	Nom	Description
<1>	Support du guide-aiguille	Permet d'installer le guide-aiguille sur la sonde.
<2>	Rainure et languette du guide-aiguille	Correspondent respectivement à la languette et à la rainure de la sonde.
<3>	Base de réglage de l'angle	3 types d'angle sont disponibles.
<4>	Libellés des différents angles (40°, 50°, 60°)	Correspond à l'angle de biopsie (40°, 50°, 60°).
<5>	Noix de serrage de l'angle	Permet de bloquer l'angle à la spécification choisie.
<6>	Bloc d'angle	Permet de déterminer l'angle de la biopsie. Différentes spécifications de bloc d'angle sont disponibles.
<7>	Bloc de guidage	Permet d'installer l'aiguille de biopsie. Cinq spécifications de bloc de guidage sont disponibles pour différentes aiguilles de biopsie.
<8>	Spécification du bloc de guidage (14G)	Correspond à la spécification de l'aiguille de biopsie (14G).
<9>	Orifice du guide-aiguille	Permet d'installer l'aiguille de biopsie.
<10>	Noix de serrage du guide-aiguille	Permet de bloquer le guide-aiguille et le capteur

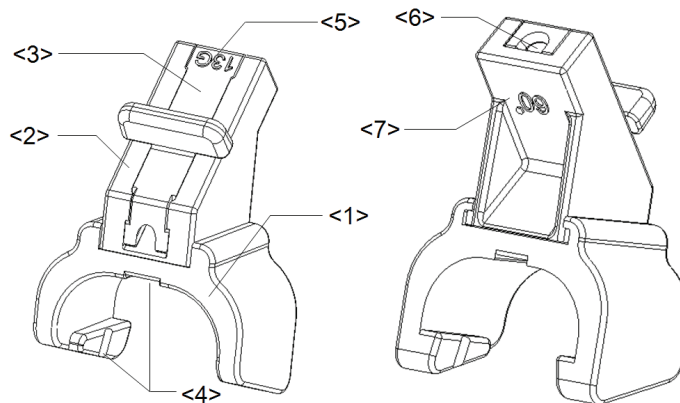- Plastique



N°	Nom	Description
<1>	Support du guide-aiguille	Permet d'installer le guide-aiguille sur la sonde.
<2>	Bloc d'angle	Permet de déterminer l'angle de la biopsie. Trois spécifications de bloc d'angle sont disponibles.
<3>	Bloc de guidage	Permet d'installer l'aiguille de biopsie. Cinq spécifications de bloc de guidage sont disponibles pour différentes aiguilles de biopsie.
<4>	Rainure et languette du guide-aiguille	Correspondent respectivement à la languette et à la rainure de la sonde.
<5>	Spécification du bloc de guidage (13G)	Correspond à la spécification de l'aiguille de biopsie (13G).
<6>	Orifice du guide-aiguille	Permet d'installer l'aiguille de biopsie.
<7>	Spécification du bloc d'angle (60°)	Correspond à la taille de l'angle de biopsie (60°).

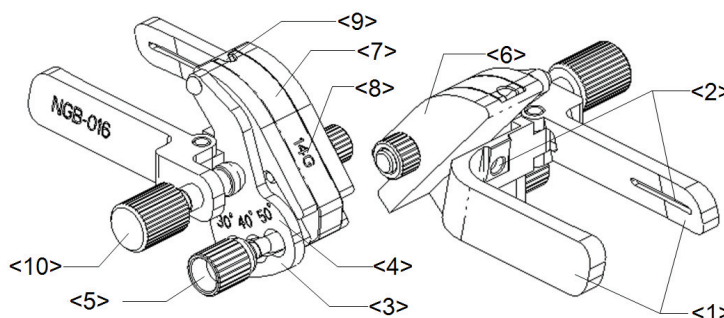■ NGB-016



N°	Nom	Description
<1>	Pince du guide-aiguille	Permet d'installer le guide-aiguille sur la sonde.
<2>	Rainure du guide-aiguille	Correspond à la languette de la sonde.
<3>	Base de réglage de l'angle	3 types d'angle sont disponibles.
<4>	Libellés des différents angles (30°, 40°, 50°)	Correspond à l'angle de biopsie. (30°, 40°, 50°).
<5>	Noix de serrage de l'angle	Permet de bloquer l'angle à la spécification choisie.
<6>	Bloc d'angle	Permet de déterminer l'angle de la biopsie. Différentes spécifications de bloc d'angle sont disponibles.
<7>	Bloc de guidage	Permet d'installer les différentes spécifications d'aiguille ; 5 types d'aiguille sont disponibles.
<8>	Spécification du bloc de guidage (14G)	Correspond à la spécification de l'aiguille de biopsie (14G).
<9>	Trou de guidage de l'aiguille de biopsie	Permet d'installer les aiguilles.
<10>	Noix de serrage du guide-aiguille	Permet de bloquer le guide-aiguille et la sonde.

12.2.3 Prédéfinition de la biopsie

Ouvrez la page Biopsie via [Conf.]-> [Prédéf. syst.]-> [Biopsie].

■ Modèle de guide-aiguille

Pour définir le support par défaut d'une sonde :

- (1) Sélectionnez un modèle de sonde dans la liste Mod. sonde. Tous les modèles de support compatibles s'affichent dans la liste Modèle Sup. à droite. (Si la sonde sélectionnée n'est associée à aucun support, aucun modèle n'apparaît.)
- (2) Cliquez sur ce bouton pour sélectionner un modèle de support dans la liste Modèle Sup.
- (3) Cliquez sur [Prêt] pour confirmer le réglage et revenir au menu de configuration.

■ Paramètre

Pour choisir d'afficher ou de masquer la ligne de guide-aiguille :

- (1) Activez l'option [Biops. visible] pour afficher la ligne de guide-aiguille. Si vous ne cochez pas cette case, la ligne de guide-aiguille est masquée lorsque vous activez le mode de biopsie.
- (2) Cliquez sur [Prêt] pour confirmer le réglage et revenir au menu de configuration.

12.2.4 Inspection et installation du guide-aiguille

Inspection du guide-aiguille

Veillez à effectuer l'inspection avant et après chaque utilisation du guide-aiguille. Si une anomalie est détectée sur le guide-aiguille, cessez immédiatement de l'utiliser et contactez le Service commercial ou le Service clientèle de Mindray.

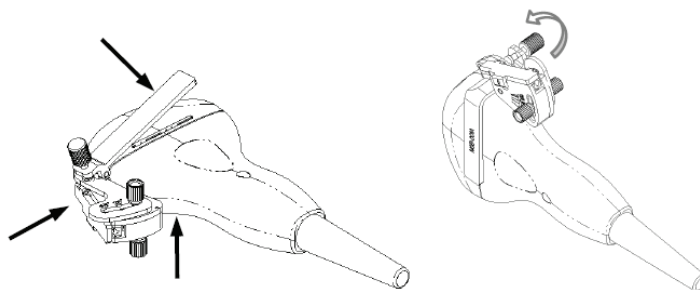
1. Stérilisez le guide-aiguille avant et après chaque utilisation.
2. Assurez-vous que le guide-aiguille fonctionne parfaitement, qu'il n'est pas endommagé, déformé, démonté ou desserré et qu'aucune pièce ne manque.
3. Assurez-vous également que le guide-aiguille est bien fixé dans la position souhaitée.

Installation du guide-aiguille


■ NGB-001

● Métal/aiguille détachable

1. Installez le couvre-sonde stérile.
2. Sélectionnez un guide-aiguille adapté, puis faites correspondre sa rainure avec la languette de la sonde. Installez le guide-aiguille sur la sonde.



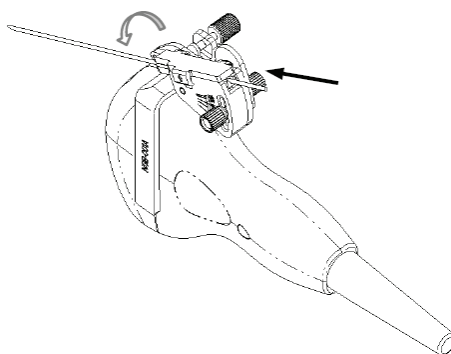3. Vissez la noix de serrage du guide-aiguille afin de fixer ce dernier sur la sonde.
4. Ajustez la noix de réglage du type d'aiguille à la position souhaitée, puis vissez l'écrou afin de fixer le bloc de guidage.
5. Fermez le couvercle en V, puis insérez l'aiguille dans le trou de guidage.



- Métal/aiguille non détachable

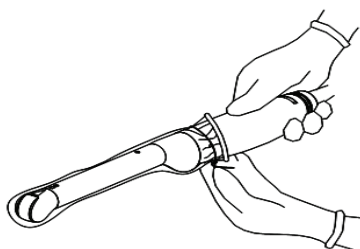
1. Installez le couvre-sonde stérile.
2. Faites correspondre la rainure de positionnement de la bride avec les deux bords relevés de la tête de la sonde, puis alignez le creux de positionnement de la bride avec le point convexe de la tête de la sonde.
3. Tournez le bouton de préhension situé à l'autre extrémité du guide-aiguille afin de fixer fermement l'ensemble.

- NGB-002


1. Installez le couvre-sonde stérile.
2. Faites correspondre la rainure de positionnement de la bride avec les deux bords relevés de la tête de la sonde, puis alignez le creux de positionnement de la bride avec le point convexe de la tête de la sonde.
3. Tournez le bouton de préhension situé à l'autre extrémité du guide-aiguille afin de fixer fermement l'ensemble.

- NGB-004 :


1. Installez le couvre-sonde stérile.



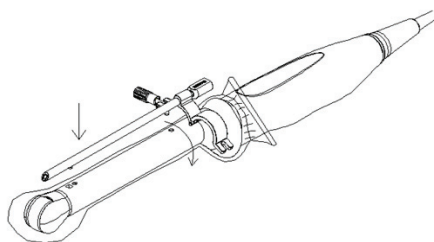2. Ouvrez la bride de retenue, alignez le guide-aiguille avec la sonde de manière à ce que le bourrelet de positionnement du guide-aiguille soit face aux rainures de positionnement de la sonde, puis tournez la bride de retenue afin de maintenir cette position.



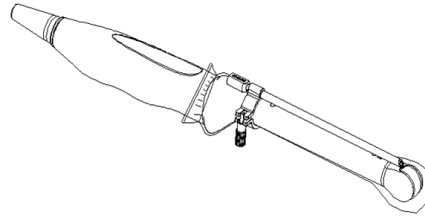3. Quand la bride de retenue est correctement placée, utilisez l'écrou de blocage pour la maintenir en position. Le guide-aiguille est alors correctement monté.




■ NGB-005

1. Installez le couvre-sonde stérile.
2. Faites correspondre la rainure de positionnement de la bride avec les deux bords relevés de la tête de la sonde, puis alignez le creux de positionnement de la bride avec le point convexe de la tête de la sonde.
3. Tournez le bouton de préhension situé à l'autre extrémité du guide-aiguille afin de fixer fermement l'ensemble.


■ NGB-007

● Métal

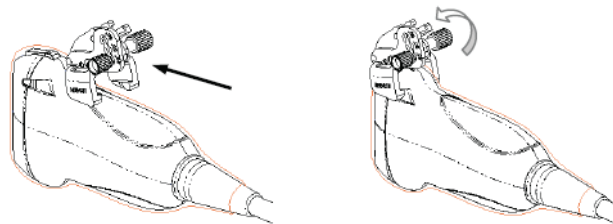
- 1) Installez le couvre-sonde stérile.
- 2) Tenez la sonde dans une main, sélectionnez le guide-aiguille approprié, puis tenez-le dans l'autre main. Faites correspondre respectivement la rainure et la languette du guide-aiguille avec la languette et la rainure de la sonde. Installez le guide-aiguille sur la sonde.



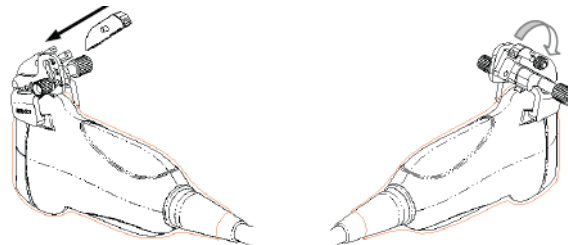- 3) Vissez la noix de serrage du guide-aiguille afin de fixer ce dernier sur la sonde.
- 4) Sélectionnez un bloc de guidage approprié, poussez-le dans la rainure au-dessus du bloc d'angle, puis serrez-le fermement.




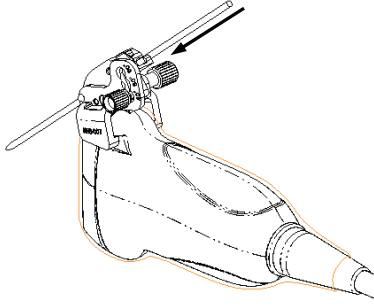- 5) Vissez l'écrou du bloc de guidage afin de le maintenir en position.
- 6) Insérez une aiguille de biopsie de même spécification que celle du bloc de guidage dans le trou de ce dernier.




- Plastique

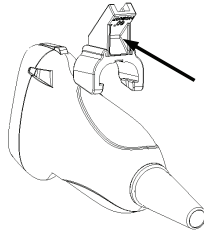
- 1) Installez le couvre-sonde stérile.
- 2) Tenez la sonde dans une main, sélectionnez le guide-aiguille approprié, puis tenez-le dans l'autre main. Alignez la languette étroite du guide-aiguille avec la rainure de la sonde, puis poussez le guide-aiguille afin que les languettes et rainures du guide-aiguille correspondent aux rainures et languettes de la sonde.



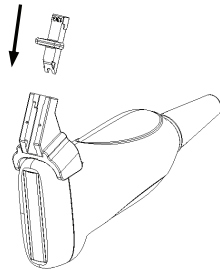- 3) Vérifiez que le guide-aiguille est parfaitement installé sur le capteur.
- 4) Sélectionnez un bloc de guidage approprié, poussez-le dans la rainure au-dessus du bloc d'angle, puis serrez-le fermement.




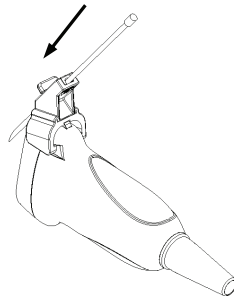- 5) Insérez une aiguille de biopsie de même spécification que celle du bloc de guidage dans le trou de ce dernier.




■ NGB-016

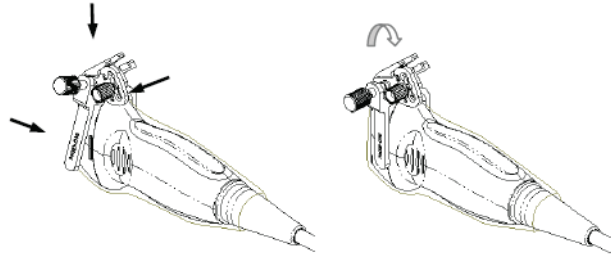
1. Installez le couvre-sonde stérile.
2. Sélectionnez un guide-aiguille adapté, puis faites correspondre sa rainure avec la languette de la sonde. Installez le guide-aiguille sur la sonde.



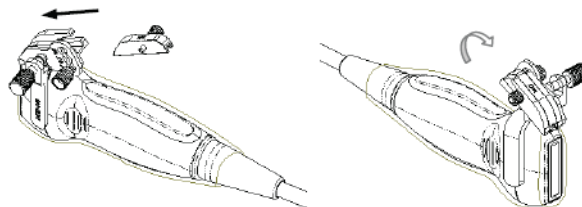3. Vissez la noix de serrage du guide-aiguille afin de fixer ce dernier sur la sonde.
4. Sélectionnez un bloc de guidage approprié, poussez-le dans la rainure au-dessus du bloc d'angle, puis serrez-le fermement.



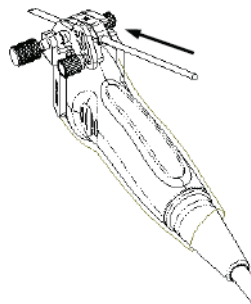5. Vissez l'écrou du bloc de guidage afin de le maintenir en position.
6. Insérez une aiguille de biopsie de même spécification que celle du bloc de guidage dans le trou de ce dernier.




ATTENTION :

Assurez-vous que toutes les pièces de guidage sont correctement installées avant de pratiquer la biopsie.


12.2.5 Menu Biopsie

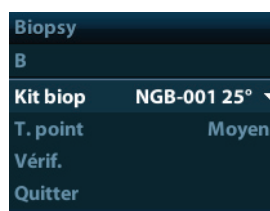Appuyez sur <Biopsie> pour afficher le menu Biopsie.




- Sélection de l'angle de support pour biopsie
Si le guide-aiguille prend en charge plusieurs angles de biopsie, vous pouvez sélectionner l'angle adéquat dans la liste déroulante.
- Sélection de la taille du point
Déplacez le curseur sur [T. point], puis appuyez sur <Set> pour sélectionner la taille du point parmi Petit, Moyen et Grs.
Conseils :
 - La ligne de guide-aiguille line est une ligne constituée de deux sortes de point, la distance entre deux points étant fonction de la profondeur. Déplacez le curseur sur le grand point. Un chiffre, représentant la profondeur de la biopsie, s'affiche.
 - La zone de guidage de la biopsie est actualisée selon les modifications effectuées sur l'image (inversion/rotation, zoom et changement de profondeur, par exemple).
 - Quand la profondeur et la zone d'imagerie sont modifiées, la ligne de guide-aiguille est ajustée en conséquence.
- Affichage ou masquage de la ligne de guide-aiguille
Pour masquer la ligne du guide-aiguille, désactivez l'option [Kit biopsie] dans le menu. Vous pouvez également appuyer sur la touche <Biopsy> du panneau de commande pour afficher ou masquer la ligne de guide.
- Dans le menu d'image en mode B, vous pouvez également afficher, masquer ou sélectionner le guide-aiguille via l'option [Kit biopsie].

12.2.6 Vérification de la ligne de guide-aiguille pour biopsie.

 AVERTISSEMENT : 1. Avant de procéder à une biopsie, vérifiez bien la ligne du guide-aiguille. 2. Si l'aiguille ne correspond pas à la ligne, NE procédez PAS à la biopsie.
--

REMARQUE : 1. Vous pouvez réaliser la vérification de la ligne de guide-aiguille uniquement sur une image B unique active. Toutes les opérations ne concernant pas la biopsie sont alors interdites. 2. En cas de biopsie pratiquée à l'aide de sondes biplan, la vérification est effectuée sur la première ligne de guide-aiguille. Les autres lignes se déplacent simultanément et parallèlement à la première.
--

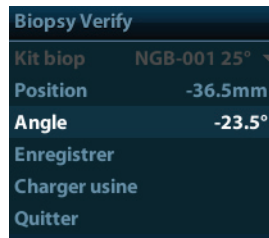1. Assurez-vous que le guide-aiguille est bien fixé dans la position souhaitée.
2. Préparez un récipient d'eau stérile.
3. Plongez la tête de la sonde dans l'eau stérile, puis insérez une aiguille de biopsie dans le guide-aiguille.
4. Lorsque l'aiguille de biopsie s'affiche à l'image, réglez les paramètres du menu à l'écran pour vous assurer qu'elle apparaît à la même position, quasiment, que le repère d'aiguille sélectionné.




- Réglage de la position de la ligne de guide-aiguille
Positionnez le curseur sur [Position], appuyez sur la touche <Set> pour déplacer la ligne suivant un mouvement linéaire ou appuyez sur le bouton multifonction et tournez-le. Cette orientation n'est possible que si une seule ligne de guide-aiguille s'affiche.
- Réglage de l'angle
Positionnez le curseur sur [Angle], appuyez sur la touche <Set> pour modifier l'angle de la ligne de guide-aiguille ou appuyez sur le bouton multifonction et tournez-le. Cette orientation n'est possible que si une seule ligne de guide-aiguille s'affiche.
- Enregistrement des paramètres vérifiés
Une fois que la position et l'angle de la ligne de guide-aiguille sont réglés, cliquez sur [Enr.]. L'échographe enregistre les nouveaux paramètres de la ligne du guide-aiguille. Lorsque vous revenez au mode de biopsie, la position et l'angle affichés correspondent aux valeurs vérifiées.
- Rétablissement des réglages d'usine par défaut
Cliquez sur [Charg usine] pour rétablir les réglages d'usine par défaut de la position et de l'angle de la ligne du guide-aiguille.
- Désactivation du mode de vérification de la biopsie
Cliquez sur [Quitter] pour abandonner l'état de vérification de la ligne du guide-aiguille.


12.2.7 Retrait du guide-aiguille

■ NGB-001

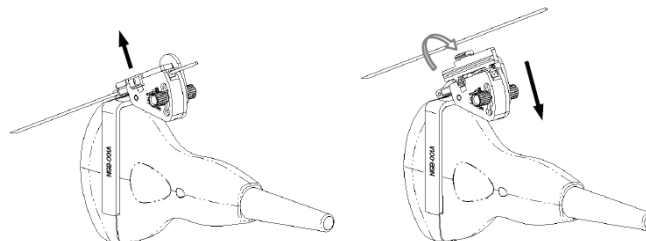- Métal/aiguille détachable
1. Ouvrez le couvercle en V afin de libérer l'aiguille de biopsie.



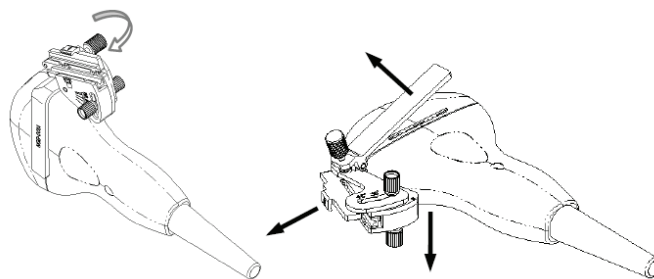2. Retirez la sonde et le guide-aiguille de l'aiguille de biopsie.
3. Dévissez la noix de serrage du guide-aiguille afin de libérer ce dernier.



4. Séparez la sonde et le guide-aiguille.

- Métal/aiguille non détachable

Tout en tenant la sonde et le guide-aiguille, ouvrez le bouton de préhension du guide-aiguille.

- NGB-002

Tout en tenant la sonde et le guide-aiguille, ouvrez le bouton de préhension du guide-aiguille.

- NGB-004

Tenez la sonde de la main gauche, dévissez l'écrou de blocage avec la main droite afin d'ouvrir la bride de retenue, puis soulevez le guide-aiguille de manière à séparer le bourrelet de positionnement des rainures de positionnement.

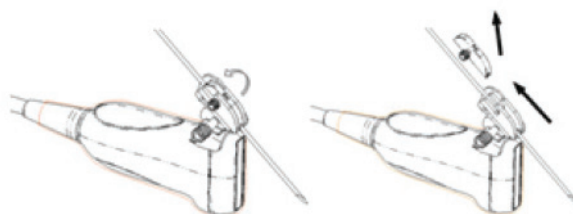
- NGB-005

Tout en tenant la sonde et le guide-aiguille, ouvrez le bouton de préhension du guide-aiguille.


- NGB-007

- Métal

- 1) Dévissez l'écrou du bloc de guidage et retirez ce dernier en le faisant glisser légèrement en direction de la queue de l'aiguille.




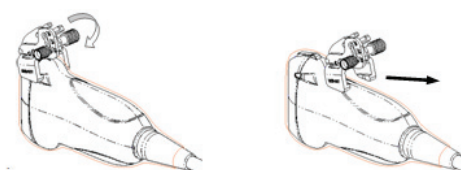- 2) Séparez le reste du guide-aiguille et la sonde de l'aiguille.
- 3) Dévissez la noix de serrage du guide-aiguille, puis retirez ce dernier de la sonde.




- Plastique

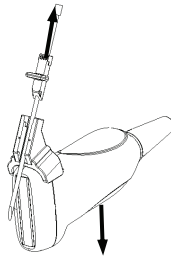- 1) Retirez le bloc de guidage en le faisant glisser légèrement en direction de la queue de l'aiguille.
- 2) Séparez le reste du guide-aiguille et la sonde de l'aiguille.




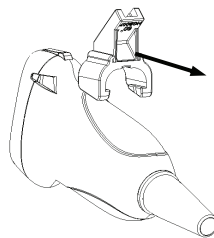- 3) Retirez le support du guide-aiguille de la sonde.




- NGB-016

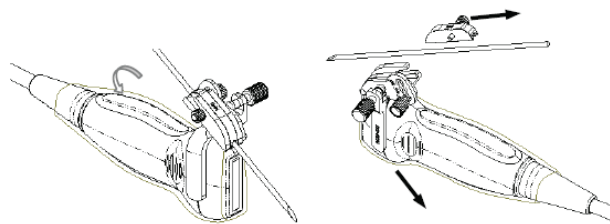1. Dévissez l'écrou du bloc de guidage et retirez ce dernier en le faisant glisser légèrement en direction de la queue de l'aiguille.



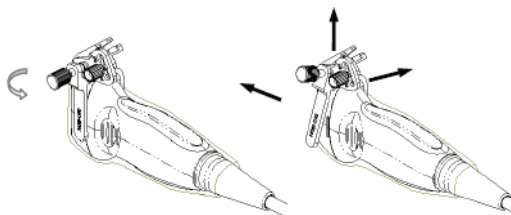2. Séparez le reste du guide-aiguille et la sonde de l'aiguille.
3. Dévissez la noix de serrage du guide-aiguille, puis retirez ce dernier de la sonde.



4. Séparez la sonde et le guide-aiguille.

12.2.8 Nettoyage et stérilisation du guide-aiguille

Nettoyage

1. Portez des gants stériles afin d'éviter toute infection.
2. Vous pouvez également nettoyer le guide-aiguille à l'eau claire ou savonneuse pour éliminer tout corps étranger, ou l'essuyer à l'aide d'une éponge d'uréthane douce.
3. Essuyez ensuite le guide-aiguille à l'aide d'un tissu ou d'une gaze stérile.

Veillez suivre les instructions de nettoyage fournies dans le manuel.

Stérilisation

1. Portez des gants stériles afin d'éviter toute infection.
2. Nettoyez le guide-aiguille avant de le stériliser. MINDRAY recommande les solutions ou systèmes de stérilisation suivants pour stériliser le guide-aiguille.
3. Lors de la sélection et de l'utilisation du désinfectant, respectez les réglementations locales.

■ Stérilisant à base de glutaraldéhyde :

Nom chimique	Nom commercial	Procédures
Glutaraldéhyde (2.2-2.7%)	Cidex Solution activée Solution à base de glutaraldéhyde	Veillez vous reporter aux instructions fournies par le fabricant de la solution pour en savoir plus. Immergez la sonde dans la solution activée pendant 10 heures (20-25 °C)

Avant que les performances et la sécurité ne soient affectées, il est possible de stériliser le support en plastique NGB-007 au moins 233 fois avec du Cidex, une solution active à base de glutaraldéhyde (le processus dure 10 heures pour chaque élément).

■ Stérilisant à base de peroxyde d'hydrogène et d'acide peroxyacétique :

Nom commercial	Nom chimique	Procédures
Agent stérilisant Minnicare®	Peroxyde d'hydrogène à 22 % Acide peroxyacétique à 4,5 %	Diluez le stérilisant avec de l'eau purifiée stérilisée (1:20). Durée de l'immersion : 11 heures. Température : 20 °C-25 °C. Veillez vous reporter aux instructions fournies par le fabricant de la solution pour en savoir plus.

Avant que les performances et la sécurité ne soient affectées, il est possible de stériliser le support en plastique NGB-007 au moins 245 fois avec de l'AGENT STERILISANT Minncare (le processus dure 11 heures pour chaque élément).

- Consultez les instructions fournies par le fabricant du produit chimique afin d'en savoir plus sur la concentration de la solution, la méthode de désinfection et la dilution. Notez que la solution à base de glutaraldéhyde nécessite une solution activante.
- Rincez le guide-aiguille abondamment avec de l'eau stérile afin d'éliminer tout résidu chimique.
- Essuyez ensuite le guide-aiguille à l'aide d'un tissu ou d'une gaze stérile.

- STERRAD 100S - Système de stérilisation basse température par gaz plasma de peroxyde d'hydrogène

Nom chimique	Nom commercial	Procédures
Gaz plasma de peroxyde d'hydrogène	Vapeur de peroxyde d'hydrogène	Veillez vous reporter aux instructions fournies par le fabricant de la solution pour en savoir plus.

- Consultez les instructions fournies par le fabricant du système de stérilisation STERRAD 100S afin d'en savoir plus sur la méthode et les précautions d'utilisation.
 - STERRAD 100S (système de stérilisation basse température par gaz plasma de peroxyde d'hydrogène) est disponible pour les guides-aiguilles en métal.
- Stérilisation à la vapeur à haute pression (uniquement applicable pour les guides-aiguilles en métal)
Autoclavage (chaleur humide) 121 °C pendant 20 minutes.

REMARQUE : La vapeur à haute pression/stérilisation par immersion n'affecte pas la double vie du support, contrairement à l'application journalière du support. Vérifiez l'état extérieur du support avant de l'utiliser.

12.2.9 Stockage et transport

- N'utilisez pas l'étui de transport pour conserver le guide-aiguille. L'étui pourrait devenir source d'infection.
- Entre chaque examen, conservez le guide-aiguille dans un environnement stérile.
- Si vous envoyez le guide-aiguille pour réparation à votre représentant Mindray, veillez à le désinfecter ou le stériliser et conservez-le dans son étui de transport afin d'éviter toute infection.
- Stérilisez l'étui de transport, le cas échéant.
- Stockez ou transportez le guide-aiguille dans les conditions ambiantes suivantes :
 - Température ambiante : -20 °C à 55 °C
 - Humidité relative 30 % à 95 % (sans condensation)

12.2.10 Mise au rebut

Veillez à mettre le guide-aiguille au rebut uniquement après l'avoir stérilisé.

Contactez votre représentant MINDRAY lors de la mise au rebut de cet équipement.

13 Batterie



AVERTISSEMENT :

1. **N'installez PAS, ni ne retirez la batterie de manière arbitraire.**
Les batteries sont munies d'un mécanisme et d'un circuit de protection. NE démontez PAS les batteries et ne les modifiez pas.
2. **NE mettez PAS les batteries en court-circuit en connectant directement les bornes négatives sur un objet en métal.**
3. **NE chauffez PAS les batteries et n'essayez pas de les jeter au feu.**
4. **Gardez les batteries éloignées du feu et de toute autre source de chaleur.**
5. **N'immergez PAS les batteries dans l'eau et ne les laissez pas devenir humides.**
6. **NE chargez PAS les batteries à proximité d'une source de chaleur ni à la lumière directe du soleil.**
7. **NE percez PAS les batteries avec un objet tranchant, ne les tapez pas, ne marchez pas dessus.**
8. **NE mélangez PAS différents types de batteries.**
9. **NE placez PAS les batteries dans un four à micro-onde ou dans tout autre récipient sous pression.**
10. **Si les batteries émettent une odeur ou de la chaleur, si elles sont déformées ou décolorées, ou présentent un aspect anormal en cours d'utilisation, de chargement ou de stockage, retirez-les immédiatement et arrêtez de les utiliser.**

13.1 Présentation

La batterie se recharge lorsque le système est connecté à l'alimentation électrique CA.

- Lorsque le système est hors tension, la durée de charge complète d'une batterie totalement déchargée est habituellement inférieure à 3 heures. En général, le chargement de la batterie s'effectue en 2 heures, avec restauration d'une qualité de charge électrique supérieure à 95 %.

REMARQUE :

1. Il est recommandé de charger les batteries lorsque l'échographe est hors tension, vous pouvez ainsi charger rapidement la batterie et gagner du temps.
2. Mettez l'échographe hors tension si vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant une longue période (y compris pendant le transport et le stockage). Ne laissez pas l'échographe en mode veille, les batteries risqueraient de se décharger et d'être définitivement endommagées.

Lorsque l'alimentation électrique externe n'est pas branchée, l'échographe est alimenté par une batterie au lithium-ion.

Le modèle de la batterie rechargeable au lithium-ion (désignée batterie ci-après pour raccourcir) est LI34I002A.

REMARQUE :

1. Utilisez uniquement les batteries spécifiées.
2. Si l'échographe ne contient qu'une seule batterie, elle ne peut pas fournir d'électricité ni être rechargée.

13.2 Précautions

1. Avant d'utiliser la batterie, lisez avec attention la description indiquée sur l'étiquette apposée sur la batterie.
2. Lorsque vous utilisez la batterie pour la première fois, si vous trouvez qu'elle est sale ou émet une odeur, ne l'utilisez pas.
3. N'exposez pas la batterie à une source de chaleur ou de pression élevée.
4. N'exposez pas la batterie à la lumière directe du soleil.
5. Stockez la batterie dans un lieu hors d'atteinte des enfants. Stockez la batterie dans un lieu hors d'atteinte des enfants.
6. La batterie est conçue pour être chargée uniquement sur cet échographe. Ne chargez la batterie que lorsque la température ambiante est comprise entre 0 et 40 °C.
7. Lorsque la batterie est déchargée, procédez immédiatement au chargement.
8. Si vous n'envisagez pas d'utiliser la batterie pendant 10 jours ou plus, retirez-la de l'échographe et stockez-la avec soin. NE l'entourez PAS d'un matériau conducteur ; stockez-la dans un endroit sombre, frais et sec.
9. N'appliquez pas de choc à la batterie.

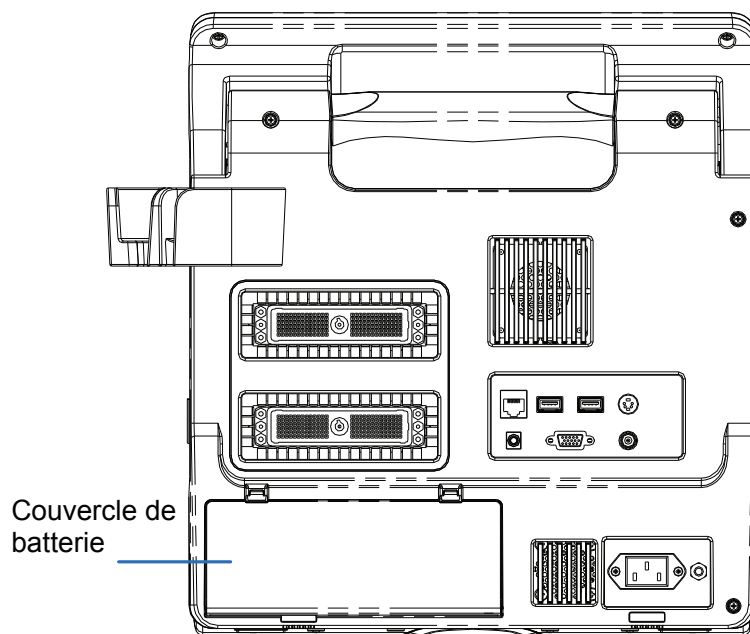
13.3 Installation et retrait des batteries

⚠ AVERTISSEMENT : Mettez l'échographe hors tension et débranchez l'adaptateur de l'unité principale avant d'installer ou de retirer les batteries. N'installez PAS, ni ne retirez les batteries lorsque l'échographe est sous tension ou si l'échographe est hors tension mais l'adaptateur est connecté à l'échographe.

La batterie est placée dans les logements de batterie situés à l'arrière de l'échographe. Vous pouvez l'installer ou la retirer une fois que l'échographe est hors tension et le cordon d'alimentation débranché de l'unité principale.

Pour installer la batterie :

1. Mettez l'unité hors tension et retirez le cordon d'alimentation de l'unité principale.
2. Vous pouvez voir un logement de batterie à l'arrière de l'échographe (à noter que la batterie doit être insérée dans le bon sens). Placez la batterie dans le logement et insérez-la sur le côté droit jusqu'à ce qu'elle soit fermement verrouillée.
3. Fermez le couvercle de la batterie.



Pour retirer la batterie :

1. Mettez l'unité hors tension et retirez le cordon d'alimentation de l'unité principale.
2. Ouvrez le couvercle de la batterie.
3. Poussez la batterie vers la gauche jusqu'à ce qu'elle soit libérée.
4. Retirez la batterie de son logement.

13.4 Témoin d'état de la batterie

Le témoin d'état de la batterie se situe dans le coin inférieur droit de l'écran et indique la capacité de la batterie.



: indique que la batterie est vide.



: indique que la batterie est pleine.

Lorsque la capacité de la batterie devient insuffisante, l'échographe affiche un message : Avert.! Batterie faible! Branchez l'échographe à l'alimentation ou le système va s'éteindre dans une minute. Branchez l'alimentation électrique pour pouvoir travailler normalement.

13.5 Un cycle déchargement/chargement complet

Si vous n'avez pas utilisé la batterie pendant plus de 2 mois, il est conseillé d'effectuer un cycle de déchargement/chargement complet. Il est également recommandé de stocker la batterie pleine dans un endroit sombre et frais.

■ Un cycle déchargement/chargement complet :

1. Déchargement complet de la batterie pour laisser l'échographe s'éteindre automatiquement.
2. Chargement de l'échographe à 100 % (capacité de courant complète).
3. Déchargement de l'échographe pour une extinction complète.

13.6 Vérification des performances de la batterie

Les performances de la batterie risquent de diminuer avec le temps, vous devez donc vérifier ses performances régulièrement. Les procédures de vérification sont les suivantes :

1. Arrêtez l'examen ultrason.
2. Connectez l'échographe à l'alimentation électrique CA pour charger les batteries jusqu'à ce que la capacité soit pleine.
3. Déconnectez l'échographe de l'alimentation électrique CA pour alimenter l'échographe via les batteries jusqu'à ce que celui-ci s'éteigne automatiquement.
4. La durée d'alimentation des batteries indique leurs performances.

Si la durée d'alimentation de la batterie est beaucoup plus courte que celle indiquée dans le manuel des spécifications, vous devez remplacer la batterie ou contacter le personnel d'entretien.

13.7 Elimination des batteries

Vous devez mettre la batterie au rebut lorsqu'elle est endommagée, gravement dégradée ou lorsqu'elle a servi pendant trois ans.

REMARQUE : Vous devez respecter les réglementations locales pour éliminer la batterie.

14 Sortie sonore

Cette section du Manuel d'utilisation concerne le système entier : l'unité principale, les sondes, les accessoires et les périphériques. Elle contient des informations relatives à la sécurité, très importantes pour les opérateurs de l'appareil : celles-ci concernent la puissance de sortie sonore et le contrôle de l'exposition du patient via le principe ALARA (valeur la plus faible qu'il soit raisonnablement possible d'atteindre). Cette section fournit également des informations à propos du test de sortie sonore et de l'affichage de sortie sonore en temps réel.

Nous vous recommandons de lire attentivement ces informations préalablement à l'utilisation du système.

14.1 Impact biologique

L'échographie est reconnue comme étant sûre et dépourvue d'effets secondaires. Aucun compte rendu n'a rapporté de blessure infligée au patient du fait de l'utilisation des ultrasons. Néanmoins, on ne peut affirmer catégoriquement que les ultrasons sont sûrs à 100 %. Des études ont révélé que des ultrasons utilisés à une très haute intensité sont nocifs pour les structures tissulaires de l'organisme.

Au cours des dernières années, la technologie de l'échographie a considérablement évolué. Ces progrès rapides ont fait naître des inquiétudes sur l'impact biologique potentiel des nouvelles applications et techniques de diagnostic aujourd'hui disponibles.

14.2 Principe de précaution

Bien qu'aucun effet secondaire biologique causé par l'exposition de patients aux échographes actuellement commercialisés n'ait été confirmé, il existe néanmoins une probabilité que de tels effets soient identifiés dans le futur. Par conséquent, les ultrasons doivent être utilisés avec une extrême prudence afin d'éviter tout problème d'un point de vue médical. En particulier, il est recommandé d'éviter l'utilisation de niveaux d'ultrasons élevés sur de longues périodes d'exposition jusqu'à ce que des informations cliniques complètes soient disponibles.

14.3 Principe ALARA (valeur la plus faible qu'il soit raisonnablement possible d'atteindre)

Lors de l'utilisation de l'énergie ultrasonore, il est recommandé d'appliquer le principe ALARA (valeur la plus faible qu'il soit raisonnablement possible d'atteindre). L'application du principe ALARA garantit que le niveau total d'énergie est maintenu sous un seuil suffisamment bas pour ne pas générer d'effet biologique néfaste tout en permettant l'acquisition des informations diagnostiques recherchées. L'énergie totale est contrôlée par l'intensité de sortie et la durée totale de l'exposition. L'intensité de sortie nécessaire aux examens dépend principalement du patient et du cas clinique.

Une énergie sonore d'un niveau extrêmement bas n'est pas applicable à tous les types d'examen. Le contrôle des ultrasons à un niveau très bas conduit à l'acquisition d'images de qualité médiocre ou de signaux Doppler insuffisants, ce qui peut affecter gravement la fiabilité des diagnostics. Cependant, l'augmentation de la puissance sonore à un niveau plus élevé que nécessaire ne contribue pas toujours à une qualité supérieure des informations requises par le diagnostic, mais peut augmenter le risque d'effets secondaires biologiques.

Il incombe à l'utilisateur d'assurer la sécurité des patients et d'utiliser les ultrasons avec prudence. Une utilisation prudente des ultrasons implique que la puissance de sortie sonore soit choisie selon le principe ALARA.

Vous trouverez des informations complémentaires sur le concept ALARA et les effets biologiques possibles des ultrasons dans un document de l'AIUM (American Institute of Ultrasound Medicine) intitulé "*Medical Ultrasound Safety*".

14.4 Explication de l'IM/IT

14.4.1 Connaissance élémentaire de l'IM et de l'IT

La relation qui existe entre certains paramètres de sortie des ultrasons (fréquence, pression et intensité sonores, etc.) et leurs effets biologiques est encore méconnue. Il est avéré que deux mécanismes fondamentaux peuvent avoir des effets biologiques. Le premier est un effet biologique thermique dû à l'absorption des ultrasons par les tissus et le second est un effet biologique mécanique lié au phénomène des cavitations. L'indice thermique (IT) est l'indice relatif d'augmentation de la température par l'effet biologique thermique. L'indice mécanique (IM) est l'indice relatif de l'effet biologique mécanique. Les index IT et IM reflètent les conditions de sortie immédiates ; ils NE tiennent donc PAS compte des effets cumulés sur la durée totale de l'examen.

■ IM (index mécanique) :

Les effets biologiques mécaniques sont le résultat de la compression et de la dilatation des tissus exposés aux ultrasons, qui aboutissent à la formation de micro-bulles appelées cavitations.

L'IM est un index qui vous renseigne sur la probabilité de formation des cavitations en fonction de la pression sonore. Cette valeur correspond également à la pression sonore de raréfaction maximale divisée par la racine carrée de la fréquence. La valeur IM diminue donc lorsque la fréquence augmente ou que la pression sonore de raréfaction maximale baisse. Il devient alors improbable que des cavitations se forment.

$$IM = \frac{P_r \alpha}{\sqrt{f_{awf}} \times C_{IM}}$$

$$\text{Où, } C_{IM} = 1 \text{ (MPa} / \sqrt{\text{MHz}} \text{)}$$

Avec une fréquence de 1 MHz et une pression sonore de raréfaction maximale de 1 MPa, l'IM vaut 1. L'IM peut être considéré comme le seuil de formation des cavitations. Il est particulièrement important de maintenir une valeur IM basse lorsque des gaz et des tissus mous coexistent, par exemple en cas d'exposition des poumons lors d'une exploration cardiaque ou en présence de gaz intestinaux lors d'une exploration abdominale.

■ IT (indice thermique) :

L'IT est déterminé par le ratio entre la puissance sonore totale et la puissance sonore requise pour augmenter la température des tissus de 1 °C. En outre, étant donné que la hausse de température est foncièrement différente selon les structures tissulaires, il existe trois sortes d'IT : TIS (index thermique des tissus mous), TIB (index thermique des os) et TIC (index thermique des os crânien).

- TIS : index thermique pour les tissus mous (applications abdominales et cardiaques, par exemple).
- TIB : index thermique utilisé pour les applications du type fœtal (deuxième et troisième trimestres) ou néonatal céphalique (via la fontanelle), par exemple, au cours desquelles le faisceau d'ultrasons traverse des tissus mous et la région focale se trouve à proximité d'os.
- TIC : index thermique utilisé pour les applications du type pédiatrique et adulte crânien, par exemple, au cours desquelles le faisceau d'ultrasons traverse des os à proximité du point d'entrée du faisceau dans l'organisme.

Les directives de la WFUMB (World Federation for Ultrasound in Medicine and Biology) stipulent qu'une hausse de température de 4 °C pendant au moins 5 minutes doit être considérée comme potentiellement dangereuse pour les tissus de l'embryon et du fœtus.

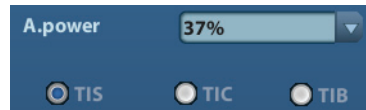
Plus les valeurs d'IM/IT sont faibles, moins les effets biologiques sont importants.

14.4.2 Affichage de l'IM/IT

Les valeurs IT et IM sont affichées en temps réel dans la partie inférieure de l'écran. L'opérateur doit surveiller les valeurs de ces index en cours d'examen et s'assurer que les valeurs de durée d'exposition et de puissance de sortie sont maintenues au niveau minimum requis pour un diagnostic efficace.

Quelles que soient les conditions de fonctionnement, une fois que la valeur IM a dépassé 1, elle est affichée en partant de la valeur 0,4.

De la même façon, dès lors que la valeur IT est supérieure à 1, elle est affichée avec 0,4 comme point de départ. Vous pouvez prédéfinir le type de valeur IT qui sera affiché. Ouvrez la page B/THI dans l'écran [Prédéf image], et les paramètres de puissance sonore s'affichent, comme indiqué dans l'illustration ci-dessous :



Cette boîte de dialogue vous permet de prédéfinir l'affichage par défaut du TIC, du TIB ou du TIS, ainsi que le niveau de puissance sonore. De manière générale, lors d'un examen du crâne, seul le TIC est affiché.

REMARQUE : Si une valeur IM ou IT dépasse 1,0, vous devez veiller à appliquer le principe ALARA.

La précision de l'affichage est de 0,1.

14.5 Configuration de la puissance sonore

■ Réglage de la puissance sonore

Cliquez sur le bouton [A. power] du menu pour régler le pourcentage de puissance sonore ; sa valeur s'affiche alors sur l'écran. Plus le niveau choisi est élevé, plus la puissance sonore effective est importante.

Lorsque l'image est figée, la puissance sonore émise est nulle.

■ Valeur par défaut de la puissance sonore

Le choix des applications diagnostiques est le plus important facteur de contrôle de la puissance de sortie des ultrasons.

Le niveau d'intensité admissible diffère selon la zone d'intérêt. La plus grande prudence est requise pour les examens fœtaux en particulier.

Cet échographe vous permet de créer des prédéfinitions d'imagerie à partir de la puissance de sortie des ultrasons que vous avez déterminée. Dans ce cas, la fonction par défaut est désactivée. L'utilisateur est tenu pour responsable des modifications apportées aux paramètres par défaut.

Sélections par défaut

Puissance initiale	10 % à 100 %*
--------------------	---------------

* Définition de 100 % :

puissance sonore maximale d'une sonde déterminée par l'augmentation de la température de surface de la sonde dans le mode choisi et les restrictions de puissance sonore spécifiées par la FDA (autorité sanitaire américaine).

REMARQUE : L'appareil rétablit automatiquement les paramètres à chaque fois que les valeurs changent (lors de la mise sous tension, d'un changement de sonde, appuyez sur [End Exam] ou sélectionnez Revenir dans le menu de configuration). Dans les paramètres d'usine par défaut, la puissance sonore est limitée aux paramètres inférieurs. Conformément aux restrictions du principe ALARA, vous êtes autorisé à augmenter cette puissance dans la limite des spécifications de la FDA 510 (voie d'autorisation "Track 3"), et à la définir dans l'écran de prédéfinition des paramètres d'image.

La puissance sonore de l'échographe a été mesurée et calculée conformément à la norme IEC60601-2-37 : « Acoustic Output Measurement Standard for Diagnostic Ultrasound Equipment » (NEMA UD-2 2004) et « Standard for Real-Time Display of Thermal and Mechanical Indices on Diagnostic Ultrasound Equipment » (AIUM/NEMA UD-3 2004).

14.6 Contrôle de la puissance sonore

Un opérateur qualifié peut se servir des commandes de l'échographe pour limiter la puissance de sortie des ultrasons et régler la qualité des images. L'échographe comporte trois catégories de commandes agissant sur la puissance de sortie : des commandes ayant un impact direct sur la puissance de sortie, des commandes agissant indirectement sur la puissance de sortie et des commandes de récepteur.

■ Commandes directes

Si besoin, vous pouvez contrôler la puissance sonore via la touche du menu. Dans ce cas, la valeur maximale de puissance de sortie sonore ne dépasse jamais un IM de 1,9, un IT de 6 et un $I_{SPTA,3}$ de 720 mW/cm^2 , quel que soit le mode d'examen.

■ Commandes indirectes

Les commandes agissant indirectement sur la puissance de sortie sont principalement des paramètres d'imagerie. Il s'agit des modes de fonctionnement, de la fréquence, des positions du point focal et de la profondeur de l'image et de la fréquence de répétition des impulsions (PRF).

Le mode de fonctionnement détermine si le faisceau d'ultrasons procède ou non à une exploration. L'effet biologique thermique est étroitement lié au mode M.

L'affaiblissement acoustique des tissus est directement lié à la fréquence de la sonde.

Le point focal est associé à l'ouverture active de la sonde et à la largeur du faisceau.

Plus la PRF (fréquence de répétition des impulsions) est élevée, plus le nombre d'impulsions de sortie émises sur une période donnée est important.

■ Commandes de récepteur

Les commandes de récepteur (par exemple, le gain, la plage dynamique, le post traitement de l'image, etc.) n'ont aucun impact sur la puissance de sortie. Ces commandes doivent, si possible, être utilisées en vue d'améliorer la qualité d'image avant de recourir aux commandes qui agissent directement ou indirectement sur la puissance de sortie.

14.7 Sortie sonore

14.7.1 Compensation des paramètres de sortie des ultrasons

Pour déterminer les paramètres pertinents de sortie des ultrasons, une méthode consiste à comparer des échographes fonctionnant à différentes fréquences et dont le focus est situé à différentes profondeurs. Cette approche, appelée "compensation" ou "atténuation", ajuste la sortie sonore mesurée dans un réservoir d'eau afin de tenir compte des effets de la propagation des ultrasons dans les tissus. Par convention, une valeur moyenne spécifique d'atténuation de l'intensité est utilisée : elle correspond à une perte de 0,3 dB/cm/MHz. En d'autres termes, l'intensité des ultrasons est réduite de 0,3 dB/MHz par centimètre de trajet depuis la sonde. Cela peut être exprimé par l'équation suivante :

$$I_{\text{atten}} = I_{\text{water}} \times 10^{(-0.3/10 \times f_c \times z)}$$

$I_{\text{attén}}$ est l'intensité atténuée, I_{eau} est l'intensité mesurée dans un réservoir d'eau (à une distance z), f_c est la fréquence centrale de l'onde ultrasonore (telle que mesurée dans l'eau) et z est la distance depuis la sonde. L'équation d'atténuation de la pression est similaire, exception faite du coefficient d'atténuation qui est de 0,15 dB/cm/MHz, soit la moitié du coefficient utilisé pour l'intensité. Le coefficient d'atténuation de l'intensité vaut le double du coefficient d'atténuation de la pression parce que l'intensité est proportionnelle au carré de la pression.

Le coefficient d'atténuation choisi (0,3 dB/cm/MHz) est bien inférieur à celui de n'importe quel tissu solide de l'organisme mais il s'explique par la prise en compte des examens fœtaux. Lors des échographies du fœtus réalisées au premier trimestre, il peut exister un trajet de fluide important entre la sonde et le fœtus. Or, l'atténuation des fluides est minime. Par conséquent, le coefficient d'atténuation a été abaissé pour tenir compte de ce cas de figure.

14.7.2 Limites de sortie sonore

Conformément aux spécifications de la FDA (voie d'autorisation « Track 3 »), l'approche de compensation (ou d'atténuation) a été intégrée aux limites de sortie sonore fixées par la FDA et répertoriées ci-dessous. Le niveau maximum de sortie sonore d'une sonde doit être inférieur à ces limites, quel que soit le mode de fonctionnement.

Limites maximales de sortie sonore spécifiées par la FDA
(voie d'autorisation "Track 3", valeurs atténuées)

Application	$I_{\text{spta.3}}$ (mW/cm ²)	$I_{\text{sppa.3}}$ (W/cm ²)	IM
Toutes les régions (sauf les yeux)	720	≤ 190	≤ 1.9

14.7.3 Différences entre l'IM et l'IT réels et affichés

En cours de fonctionnement, l'échographe fournit à l'opérateur les paramètres de puissance de sortie sonore suivants : index thermique (IT) ou index mécanique (IM) (parfois les deux paramètres simultanément). Ces paramètres servent d'indicateurs généraux du risque encouru du fait de l'action thermique ou mécanique des ondes ultrasonores. Ils signalent à l'opérateur si une configuration particulière du système diminue ou augmente la probabilité d'effets thermiques ou mécaniques. Ils ont été conçus plus précisément pour faciliter la mise en œuvre du principe ALARA. Lorsqu'un opérateur modifie une commande système donnée, l'effet potentiel de la variation de la puissance de sortie est indiqué. Toutefois, l'indice thermique n'équivaut pas strictement à la hausse de la température corporelle, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, afin de vous fournir un seul index d'affichage, un certain nombre de principes simplificateurs ont été énoncés. Le plus important de ces principes est l'utilisation de la formule d'atténuation décrite ci-dessus, qui est bien inférieure à la valeur réelle pour la plupart des tissus du corps humain. Par exemple, une exploration transmusculaire ou transorganique produira une atténuation bien supérieure à 0,3 dB/cm/MHz. Les propriétés thermiques des tissus ont également été grandement simplifiées. Par conséquent, l'exploration de tissus fortement perfusés, comme le cœur ou les vaisseaux sanguins, aura un effet thermique bien moindre que celui suggéré par l'indice thermique.

De la même façon, l'index mécanique a été mis au point pour indiquer la probabilité relative d'effets mécaniques (cavitations). L'IM est basé sur la pression de raréfaction maximale atténuée et sur la fréquence centrale des ondes ultrasonores. La pression de raréfaction maximale réelle est affectée par la véritable atténuation causée par les tissus situés sur le trajet entre la sonde et le point focal. N'oubliez pas que tous les tissus solides du corps humain ont un pouvoir d'atténuation supérieur à la valeur prescrite de 0,3 dB/cm/MHz. Par conséquent, la pression de raréfaction maximale réelle sera inférieure. En outre, cette pression change en fonction de la région anatomique soumise à l'exploration.

C'est pour cela que l'IT et l'IM affichés doivent uniquement être utilisés pour aider l'opérateur à mettre en application le principe ALARA lors de l'examen du patient.

14.8 Incertitude des mesures

I_{spta}	32.9%
I_{sppa}	32.9%
Fréquence centrale (f_c)	2%
Puissance totale (W)	32.9 % (5,1 % pour le mode d'exploration et le mode combiné)
Pression de raréfaction	16.4%

14.9 Références relatives à la puissance sonore et à la sécurité

1. "Bioeffects and Safety of Diagnostic Ultrasound", publié par l'AIUM en 1993
2. "Medical Ultrasound Safety", publié par l'AIUM en 1994
3. "Acoustic Output Measurement Standard for Diagnostic Ultrasound Equipment, Revision 3", publié par l'AIUM/NEMA en 2004
4. "Standard for real-time display of thermal and mechanical acoustic output indices on diagnostic ultrasound equipment, Revision 2", publié par l'AIUM/NEMA en 2004
5. "Information for Manufacturers Seeking Marketing Clearance of Diagnostic Ultrasound Systems and Transducers", publié par la FDA en 2008.
6. "Medical electrical equipment – Part 2-37: Particular requirements for the safety of ultrasonic medical diagnostic and monitoring equipment", publié par le CEI en 2005.

15 Directives et déclaration du fabricant

Le système est conforme à la norme de compatibilité électromagnétique CEI 60601-1-2: 2007.



AVERTISSEMENT : L'utilisation d'accessoires non homologués peut compromettre les performances du système.

- REMARQUE :**
1. L'utilisation d'accessoires, de sondes et de câbles autres que ceux spécifiés peut augmenter les émissions ou réduire l'immunité du système.
 2. L'échographe ne doit pas être placé à proximité immédiate d'un autre appareil ni empilé sur un autre appareil. Si ces inconvénients ne peuvent pas être évités, l'échographe doit être observé afin de vérifier son bon fonctionnement dans la configuration dans laquelle il sera utilisé.
 3. L'échographe requiert des précautions particulières concernant la compatibilité électromagnétique et doit être installé et mis en service conformément aux informations en la matière fournies ci-après.
 4. Prévention de l'immunité RF conduite. En raison de limitations technologiques, le niveau d'immunité RF conduite est limité à 1 Veff ; les perturbations radioélectriques supérieures à 1 Veff sont susceptibles de conduire à des erreurs de diagnostic et de mesure. Nous recommandons de positionner l'échographe à bonne distance de toute source d'énergie radioélectrique conduite.
 5. Si les signaux physiologiques du patient sont inférieurs à l'amplitude minimale ou à la valeur spécifiée dans les caractéristiques techniques du produit, des résultats inexacts sont susceptibles d'être obtenus lors de l'utilisation de l'échographe.
 6. Les appareils de communication RF mobiles et portables peuvent perturber le fonctionnement du système. Consultez les tableaux 1, 2, 3 et 4 ci-dessous.


TABLEAU 1

DIRECTIVES ET DECLARATION MINDRAY : EMISSIONS ELECTROMAGNETIQUES		
L'échographe est conçu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-après. Il incombe à l'acquéreur ou à l'utilisateur de l'échographe de s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.		
ANALYSE DES EMISSIONS	NIVEAU	ENVIRONNEMENT ELECTROMAGNETIQUE-DIRECTIVES
Emissions radioélectriques CISPR 11	Groupe 1	L'échographe utilise l'énergie radioélectrique uniquement pour son fonctionnement interne. Par conséquent, ses émissions radioélectriques sont très faibles et ne sont susceptibles d'aucune interférence avec un appareil électronique proche.
Emissions radioélectriques CISPR 11	Classe B	L'échographe peut être utilisé dans tout type d'établissement, y compris les édifices domestiques et les édifices directement raccordés au réseau public de fourniture de courant électrique basse tension qui alimente les bâtiments destinés à un usage domestique
Emissions harmoniques CEI 61000-3-2	Classe A	
Fluctuations de tension/flicker CEI 61000-3-3	Conformité	

TABLEAU 2

DIRECTIVES ET DECLARATION MINDRAY : IMMUNITE ELECTROMAGNETIQUE			
L'échographe est conçu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-après. Il incombe à l'acquéreur ou à l'utilisateur de l'échographe de s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.			
TEST D'IMMUNITE	NIVEAU DE TEST CEI 60601-1-2	NIVEAU DE CONFORMITE	ENVIRONNEMENT ELECTROMAGNETIQUE - DIRECTIVE
Décharge électrostatique CEI 61000-4-2	±6 kV par contact ; ±8 kV dans l'air	±6 kV par contact ; ±8 kV dans l'air	Les sols doivent être en bois, en béton ou recouverts de carreaux de céramique. S'ils sont recouverts d'un matériau synthétique, l'humidité relative doit être de 30 % minimum.
Transitoires électriques rapides/en salve CEI 61000-4-4	±2 kV pour la tension d'alimentation ; ±1 kV pour la tension d'entrée/ sortie	±2 kV pour la tension d'alimentation ; ±1 kV pour la tension d'entrée/ sortie	La qualité de l'alimentation secteur doit être celle d'un environnement commercial ou hospitalier courant.
Surtension CEI 61000-4-5	±1 kV tension(s) à tension(s) ; ±2 kV tension(s) à la terre	±1 kV tension(s) à tension(s) ; ±2 kV tension(s) à la terre	La qualité de l'alimentation secteur doit être celle d'un environnement commercial ou hospitalier courant.
Chutes de tension, coupures brèves et variations de tension des lignes d'entrée de l'alimentation CEI 61000-4-11	< 5 % U_T (> 95 % creux de U_T) pour 0,5 cycle ; 40 % U_T (60 % creux de U_T) pour 5 cycles ; 70 % U_T (30 % creux de U_T) pour 25 cycles ; < 5 % U_T (> 95 % creux de U_T) pour 5 s ;	< 5 % U_T (> 95 % creux de U_T) pour 0,5 cycle ; 40 % U_T (60 % creux de U_T) pour 5 cycles ; 70 % U_T (30 % creux de U_T) pour 25 cycles ; < 5 % U_T (> 95 % creux de U_T) pour 5 s ;	La qualité de l'alimentation secteur doit être celle d'un environnement commercial ou hospitalier courant. Si vous avez besoin d'un fonctionnement continu pendant les coupures de l'alimentation secteur, il est recommandé de compléter l'alimentation de l'échographe au moyen d'un système d'alimentation sans interruption ou d'une batterie.
Champ magnétique de fréquence d'alimentation (50/60 Hz) CEI 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Les champs magnétiques de la fréquence d'alimentation doivent posséder le niveau caractéristique d'un environnement commercial ou hospitalier courant.
REMARQUE : U_T est la tension secteur CA avant l'application de la tension de test.			

TABLEAU 3

DIRECTIVES ET DECLARATION MINDRAY : IMMUNITE ELECTROMAGNETIQUE			
L'échographe est conçu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-après. Il incombe à l'acquéreur ou à l'utilisateur de l'échographe de s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.			
TEST D'IMMUNITE	NIVEAU DE TEST CEI 60601	NIVEAU DE CONFORMITE	ENVIRONNEMENT ELECTROMAGNETIQUE - DIRECTIVE
RF conduite CEI 61000-4-6	3 Veff 150 kHz à 80 MHz	1 Veff	<p>Les appareils de communication RF portables et mobiles ne doivent pas être utilisés à proximité de l'échographe ou de ses composants, y compris les câbles. La distance les séparant ne doit pas être inférieure à la distance de sécurité recommandée, calculée à partir de l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur. Distance de sécurité recommandée</p> $d = 3,5 \times \sqrt{P}$
RF par rayonnement CEI 61000-4-3	3 V/m 80 MHz à 2,5 GHz	3 V/m	<p>$d = 1,2 \times \sqrt{P}$ 80 MHz à 800 MHz</p> <p>$d = 2,3 \times \sqrt{P}$ 800 MHz à 2,5 GHz</p> <p>Où P est la valeur nominale maximale de la puissance de sortie de l'émetteur en watts (W), selon le fabricant, et d la distance de sécurité recommandée en mètres (m).</p> <p>Les intensités de champ des émetteurs RF fixes, telles que déterminées dans une étude électromagnétique sur site, doivent être inférieures au niveau de conformité dans chaque plage de fréquence.</p> <p>Des interférences peuvent se produire au voisinage d'appareils portant le symbole :</p> 
<p>Remarque 1 A 80 MHz et 800 MHz, la plage de fréquence supérieure s'applique.</p> <p>Remarque 2 Ces consignes ne s'appliquent pas obligatoirement à toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion des structures, des objets et des personnes.</p>			

- L'intensité des champs provenant d'émetteurs fixes, tels que les stations de base des postes de radiotéléphonie (cellulaire/sans fil) et des radios terrestres portables, les radio amateurs, les émissions radio à modulation d'amplitude ou modulation de fréquence et la télédiffusion, ne peut pas être précisément estimée de façon théorique.

Pour déterminer le type d'environnement électromagnétique généré par les émetteurs radioélectriques fixes, une étude électromagnétique du site doit être envisagée. Si l'intensité du champ mesurée à l'emplacement prévu pour l'échographe s'avère supérieure au niveau de conformité RF mentionné ci-dessus, il convient d'observer le système pour s'assurer de son bon fonctionnement. En cas d'anomalies, il peut être nécessaire de procéder à des ajustements, notamment en réorientant ou en déplaçant le système.


- Au-delà des plages de fréquence 150 kHz à 80 MHz, l'intensité de champ doit être inférieure à 1 V/m.

TABLEAU 4

DISTANCES DE SECURITE RECOMMANDEES ENTRE LES APPAREILS DE COMMUNICATION RF MOBILES ET PORTABLES ET L'ECHOGRAPHE			
L'échographe est conçu pour être utilisé dans un environnement électromagnétique dans lequel les perturbations radioélectriques par rayonnement sont contrôlées. L'acquéreur ou l'utilisateur du système contribuera à prévenir les perturbations électromagnétiques en veillant à respecter la distance minimale recommandée (selon la puissance de sortie maximale de l'équipement de communication) entre les équipements de communication RF portables et mobiles (émetteurs) et l'échographe.			
Puissance nominale de sortie maximale de l'émetteur (W)	Distance de sécurité en fonction de la fréquence de l'émetteur (m)		
	150 kHz à 80 MHz $d = \left[\frac{3.5}{1} \right] \sqrt{P}$	80 MHz à 800 MHz $d = \left[\frac{3.5}{3} \right] \sqrt{P}$	800 MHz à 2,5 GHz $d = \left[\frac{7}{3} \right] \sqrt{P}$
0.01	0.35	0.12	0.23
0.1	1.11	0.37	0.74
1	3.50	1.17	2.34
10	11.07	3.69	7.38
100	35.00	11.67	23.34
<p>Pour les émetteurs dont la puissance de sortie maximale n'est pas mentionnée ci-dessus, la distance de sécurité recommandée en mètres (m) peut être déterminée à l'aide de l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur, où P est la valeur nominale de puissance de sortie maximale de l'émetteur en watts (W), selon le fabricant.</p> <p>En cas de déformation de l'image, il peut s'avérer nécessaire d'éloigner le système des sources d'énergie radioélectrique conduite ou d'installer un filtre d'alimentation externe afin de les limiter à un niveau acceptable.</p> <p>Remarque 1 A 80 MHz et 800 MHz, la distance de sécurité de la plage de fréquence supérieure s'applique.</p> <p>Remarque 2 Ces consignes ne s'appliquent pas obligatoirement à toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion des structures, des objets et des personnes.</p>			

16 Maintenance du système

La maintenance de routine de l'échographe peut être effectuée par l'utilisateur. La maintenance d'entretien sera effectuée par les ingénieurs d'entretien de Mindray pendant que l'échographe est sous garantie. La maintenance de l'échographe une fois la garantie expirée incombe complètement au propriétaire/opérateur.


 **AVERTISSEMENT :**

1. Seul un ingénieur d'entretien autorisé par Mindray peut effectuer la maintenance non spécifiée dans le manuel de l'opérateur.
2. Pour garantir les performances et la sécurité de l'échographe, vous devez effectuer des inspections régulières de l'échographe.

16.1 Maintenance quotidienne

Vous êtes responsable de la maintenance quotidienne.

16.1.1 Nettoyage de l'échographe

 **AVERTISSEMENT :** Avant de nettoyer l'échographe, assurez-vous de bien le mettre hors tension et de débrancher le cordon d'alimentation de la prise. Si vous nettoyez l'échographe alors qu'il est sous tension, vous risquez une électrocution.

■ Nettoyage de la sonde

Veillez vous référer au manuel d'utilisation de chaque sonde ou à la section "12.1.5 Désinfection" pour effectuer le nettoyage et la désinfection.

■ Nettoyage du câble de la sonde

- a) Utilisez un chiffon sec et doux pour éliminer toute trace de salissure sur le câble de la sonde.
- b) Si les salissures sont tenaces, utilisez un chiffon doux imbibé d'un nettoyant non caustique, puis laissez sécher le câble à l'air.

■ Nettoyage du moniteur

A l'aide d'un chiffon doux, appliquez du produit à vitres directement sur le chiffon et essuyez l'écran vers le bas pour éliminer les marques de doigts, la poussière et les tâches. Laissez le moniteur sécher à l'air.

REMARQUE :

1. N'utilisez pas de produits pour verre hydrocarboné ou pour équipements bureautiques pour le moniteur sous peine de détériorer ce dernier.
2. Le clavier du panneau de commande doit être nettoyé régulièrement, faute de quoi les touches risquent d'être bloquées par de la poussière et des alarmes sonores peuvent retentir. Dans ce cas, les touches ne fonctionnent plus.

■ Nettoyage du panneau de commande, du couvercle et du support

Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer les surfaces externes de l'échographe. En cas de salissure importante, humectez un chiffon doux avec un détergent moyen ou neutre, puis passez-le sur l'appareil pour éliminer les taches. Utilisez un chiffon doux et sec pour retirer l'humidité et laissez les surfaces dures sécher complètement à l'air.

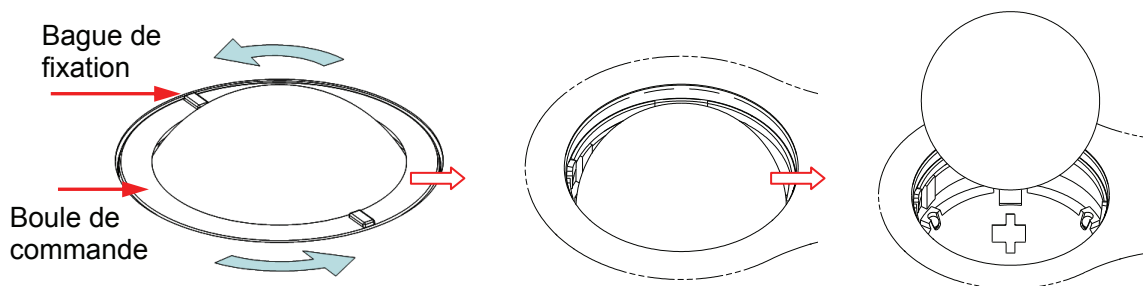
■ Nettoyage de la boule de commande

- Outil : papier de soie ou chiffon en coton sec
- Méthode :

La boule de commande du panneau de commande sert à déplacer le curseur et joue un rôle important dans la communication homme-machine. Dans la mesure où il s'agit de l'un des éléments les plus utilisés du panneau de commande, elle peut donc perdre son efficacité si des salissures pénètrent dans le module de la boule de commande.

a) Démontage de la boule de commande


Tournez la bague de fixation de la boule de commande de 35 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Lorsque la bague de fixation se soulève, retirez la bague et la boule de commande. Vous pouvez vous aider de ruban adhésif pour extraire la boule. Voir les illustrations ci-dessous.



Tournez la bague de fixation de 35 degrés Retirez la bague de fixation Sortez la boule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

b) Nettoyage

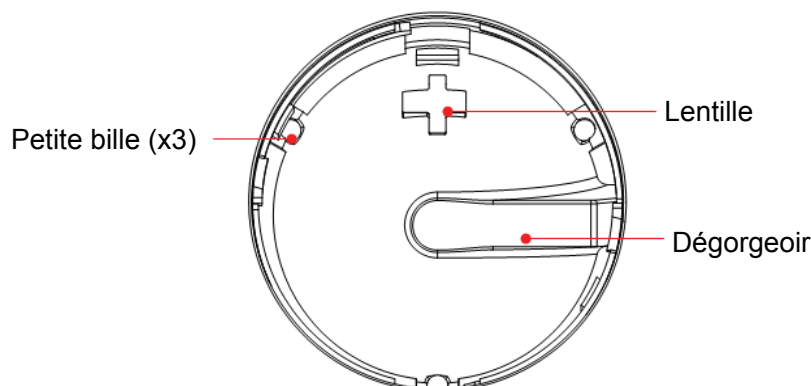
Nettoyez légèrement la lentille à l'aide du chiffon jusqu'à ce que vous ayez éliminé tous les corps étrangers. Nettoyez ensuite les autres pièces et le filtre à poussière. Veillez à exercer une force adéquate lorsque vous nettoyez la petite bille pour éviter de la faire tomber. Voir l'illustration ci-dessous. L'ensemble de la procédure de nettoyage ne nécessite pas un arrêt de l'échographe. Réinstallez la boule et la bague de fixation une fois le nettoyage terminé.



Si du liquide est vaporisé sur la boule de commande, la majeure partie de ce liquide s'évacue par le dégorgeoir. Vous pouvez terminer de sécher le dispositif à l'aide du chiffon.

c) Installation de la boule de commande

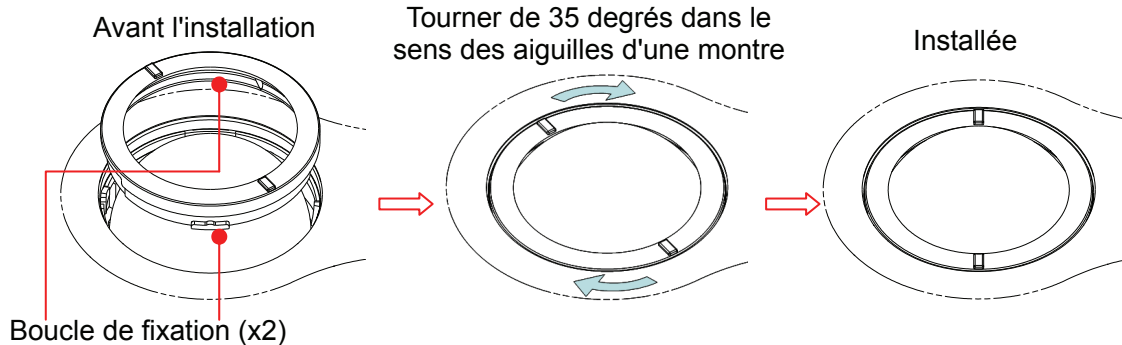Réinstallez la boule, alignez la boucle de fixation sur l'ouverture du couvercle avant, appuyez des deux mains sur la bague de fixation et faites-la tourner de 35 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre pour mettre en place la boule (un clic se fait entendre). La bague de fixation est bien en place dès lors qu'il n'est plus possible de la faire bouger. Voir l'illustration ci-dessous. Voir l'illustration ci-dessous.



16.1.2 Vérification de la sonde

Avant chaque utilisation, vérifiez que le connecteur de la sonde est exempt de fissure. N'utilisez PAS la sonde si elle présente une fissure. Une inspection minutieuse de la sonde, y compris du câble et du connecteur, est requise à chaque fois que vous nettoyez la sonde.

16.1.3 Sauvegarde du disque dur de l'échographe

Afin de prévenir toute corruption ou perte des données mémorisées sur le disque dur du système, vous devez créer régulièrement une copie de sauvegarde du disque à des intervalles réguliers.

16.2 Contrôles du technicien de maintenance

Les vérifications suivantes doivent être effectuées afin de garantir les performances et la sécurité du système. Veuillez contacter le service d'assistance au client ou le représentant commercial Mindray pour programmer et effectuer ces vérifications.

Catégorie de vérification	Élément à vérifier
Nettoyage	Intérieur de l'appareil Périphériques
Sécurité électrique	Courant de fuite du branchement à la terre Courant de fuite de l'enceinte Courant de fuite du patient Courant de fuite du patient (110 % secteur appliqué sur pièce) Courant de fuite auxiliaire du patient
Sécurité mécanique	Mécanisme de montage du moniteur Panneau de commande Mécanisme de montage des périphériques Vérification d'autres structures mécaniques Vérification de l'état extérieur de la sonde
Enregistrement des images	Images dans chaque mode Enregistrement d'images avec la sonde standard

16.3 Remplacement périodique des consommables et des pièces

Cet échographe contient des consommables et des pièces qui nécessitent un remplacement régulier.

Contactez le Service commercial ou le Service clientèle de Mindray avant de les remplacer.

16.4 Dépannage

Pour assurer un fonctionnement correct de l'échographe, il est recommandé d'établir un programme de maintenance et d'inspection pour vérifier régulièrement la sécurité de l'échographe. En cas de dysfonctionnement de l'échographe, contactez le Service commercial ou le Service clientèle de Mindray.

En cas de dysfonctionnement persistant de l'échographe, par exemple l'affichage d'un message d'erreur à l'écran, un écran d'imagerie vierge, des menus absents, veuillez consulter le tableau ci-dessous. En cas de dysfonctionnement de l'échographe, contactez le Service commercial ou le Service clientèle de Mindray.



ATTENTION :

- 1. Ne renversez pas d'eau ou autre liquide dans l'échographe pendant le nettoyage. Dans le cas contraire, vous risquez un dysfonctionnement ou une électrocution.**
- 2. Veuillez contacter le Service commercial ou le Service clientèle de Mindray pour le nettoyage des connecteurs de sondes et des curseurs TGC. En les nettoyant par vous-même, vous risquez de provoquer un dysfonctionnement ou une dégradation des performances.**

■ Tableau de dépannage

N°	Problème	Cause possible	Mesure
1	Le témoin d'alimentation ne s'allume pas lorsque l'échographe est mis sous tension.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Anomalie du système d'alimentation ou branchement incorrect du cordon d'alimentation. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vérifiez que la fiche ne s'est pas desserrée ou qu'elle n'est pas sortie de son logement à l'arrière de l'échographe.
2	Aucune image ne s'affiche lorsque le témoin d'alimentation du moniteur est allumé.	<ul style="list-style-type: none"> ■ L'intervalle de temps entre l'arrêt et le redémarrage du système est trop court ; attendez au moins 20 secondes. ■ La luminosité ou le contraste du moniteur sont peut-être mal réglés. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Eteignez l'échographe et attendez au moins 1 minute, puis redémarrez l'échographe. ■ Réglez le contraste.
3	Le moniteur affiche les caractères et les menus mais aucune image.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Les commandes CGT, de gain ou de puissance de transmission sont dérégées. ■ Vérifiez qu'une sonde est connectée et/ou qu'elle est complètement connectée. ■ Le système est en mode Figer. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Réglez les commandes CGT, de gain ou de puissance de transmission. ■ Assurez-vous que la sonde est correctement connectée. ■ Désactivez le mode Figer.
4	La qualité d'image s'est dégradée.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Le mode d'examen est inadéquat. ■ Le paramétrage du post-traitement des images est incorrect. ■ Les réglages prédéfinis pour les images sont incorrects. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sélectionnez un type d'examen approprié. ■ Réglez les paramètres de post-traitement des images ou rétablissez les valeurs de post-traitement par défaut. ■ Rétablissez les réglages d'usine par défaut
5	Le bouton ne répond pas et l'échographe bourdonne.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bouton bloqué en présence d'une quantité de salissures excessive. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Identifiez le bouton bloqué sur le panneau de commande et appuyez dessus plusieurs fois afin de le libérer. ■ Nettoyez le bouton.

