



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

NOM DU PRODUIT : INDICATEUR D'ÉMULATION DE VAPEUR DE TYPE 6 (IS2601)

DESCRIPTION DU PRODUIT : Les bandelettes indicatrices d'émulation de vapeur de type 6 PMS Steritest sont conçues pour l'utilisation dans des stérilisateur à vapeur pré-vide comme indicateurs de vérification du cycle fonctionnant à 134 °C – 3,5 min ou 121 °C – 15 min.

Après l'exposition à la stérilisation à la vapeur, l'indicateur chimique fournit une confirmation visuelle précise en changeant de couleur, signalant la présence ou l'absence des paramètres spécifiques de temps et de température pendant un cycle de stérilisation à la vapeur.

La classification de type 6 de l'indicateur d'émulation de vapeur PMS Steritest est conforme à la norme EN ISO 11140-1.


Durant l'exposition à la stérilisation à la vapeur à 134 °C ou 121 °C, la couleur de l'indicateur passe du **bleu** au **lilas**.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Placer une bande indicatrice chimique PMS Steritest dans chaque paquet, sachet pelable ou plateau à stériliser à la vapeur. Placer la bande dans la zone du paquet considérée comme la plus difficile à atteindre par la vapeur.
- Traiter le paquet comme d'habitude dans le stérilisateur à vapeur.
- Au terme du cycle de stérilisation, vérifier que l'indicateur a changé de couleur et est devenu lilas.
- Si le changement de couleur n'est pas visible ou pas uniforme, les conditions de stérilisation peuvent ne pas avoir été remplies et les articles doivent être traités à nouveau avec une bande indicatrice nouvelle/non traitée.
- Les produits stockés dans les conditions recommandées ont une durée de conservation de trois (3) ans à compter de la date de fabrication.
- Les dates de fabrication, de péremption et le numéro du lot sont imprimés sur la boîte du produit.
- Ne pas réutiliser les bandes indicatrices chimiques.

CONDITIONS DE STOCKAGE

- Stocker à une température maximum de 35 °C et une humidité relative maximum de 70 %.
- Les bandes indicatrices chimiques doivent être maintenues à l'abri de la chaleur directe, de la lumière du soleil et d'une humidité excessive.

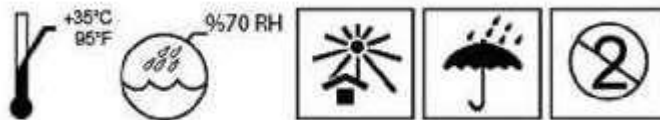

PMS Tıp Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 12. Cad. No:2

Huzurkent/Mersin/TURQUIE

Téléphone : +90 324 238 7042 | Télécopie : +90 324 238 6549

pms@pmsmedikal.com | www.pmsmedikal.com