

SHOWER STOOL WITH TRAY
SGABELLO DA DOCCIA CON VASSOIO
TABOURET DE DOUCHE AVEC TABLETTE
DUSCHHOCKER MIT TABLETT
TABURETE DE DUCHA CON BANDEJA
BANQUETA DE CHUVEIRO COM PRATELEIRA
ΣΚΑΜΠΟΝ ΜΠΑΝΙΟΥ ΜΕ ΔΙΣΚΟ

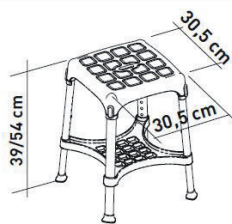

FRANÇAIS

UTILISATION PRÉVUE :

Les produits de la ligne Tabourets permettent à l'utilisateur de prendre leur douche de manière plus autonome et plus dépendante pour leur hygiène personnelle quotidienne en réduisant la fatigue musculaire due à la position debout, ainsi que les risques de glisser et de se blesser. Les versions équipées de pieds en caoutchouc antidérapants garantissent une meilleure adhérence au sol et les modèles avec pieds réglages en hauteur permettent aux utilisateurs de changer facilement la hauteur totale du tabouret en fonction de leurs exigences. Les versions dotés d'un disque pivotant garantissent une plus grande liberté de mouvement, sans qu'il ne soit nécessaire de se lever du tabouret. Grâce également à leur flexibilité, il est possible de positionner les tabourets sur des sols irréguliers, typiques de nombreux receveurs de douche. Les tabourets sont disponibles dans trois formes différentes. Les tabourets sont faciles à déplacer grâce à leur poids léger. Les tabourets peuvent être dotés d'un coussin souple pour une assise plus confortable. Les coussins souples et les disques pivotants sont vendus séparément, comme accessoires.

INDICATIONS ET CONTRE-INDICATIONS :

Les produits de la gamme Tabourets constituent une aide précieuse pour les personnes âgées, les personnes en fauteuil roulant, les personnes à mobilité réduite au niveau du bas du dos, des genoux et des hanches, ainsi que pour toute personne ayant des difficultés à se maintenir en position verticale lors de l'hygiène corporelle quotidienne sous la douche. L'utilisateur doit avoir un équilibre autonome lors des mouvements nécessaires pour passer de la position assise à la position debout, ainsi qu'une capacité suffisante pour rester assis. Il est déconseillé d'utiliser les tabourets si l'utilisateur a des problèmes d'équilibre ou de perception.

POIDS MAXIMUM UTILISATEUR : 170Kg

MISES EN GARDE ET INDICATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ :

- Le poids maximum de l'utilisateur, indiqué sur ces instructions de montage, ne doit pas être dépassé.
- Avant chaque utilisation, l'utilisateur doit vérifier que le tabouret est assemblé correctement et parfaitement stable.
- Le tabouret doit être utilisé uniquement sur des surfaces libres de tout obstacles.
- Pendant le montage du produit, il est nécessaire de respecter scrupuleusement les indications du Manuel d'utilisation.
- Le risque de lésions aux doigts peut augmenter durant les phases de montage.
- Ne pas se balancer lorsque l'on utilise le tabouret ; cela pourrait le faire glisser, basculer ou faire céder ses pieds.
- Toujours maintenir le tabouret sur ses 4 pieds.
- Ne modifier en aucun cas le tabouret ni aucun de ses composants.
- Ne pas utiliser le tabouret si celui-ci est défectueux ou présente une quelconque altération.
- Après utilisation, le tabouret doit être retiré du receveur de douche afin d'éviter toute obstruction.
- Ne pas utiliser le tabouret à des fins autres que celles prévues.
- Le tabouret ne doit pas être utilisé ou stocké à l'extérieur.
- Éviter tout contact direct avec des plaies ouvertes ou des lésions cutanées afin d'éviter toute infection.

INFORMATIONS SUR L'ENTRETIEN :

L'entretien du produit consiste en des procédures de nettoyage et de désinfection. Afin de garantir une utilisation sûre et hygiénique, l'utilisateur doit effectuer ces procédures avant chaque utilisation. L'utilisateur doit vérifier l'intégrité structurelle du tabouret et de tous ses composants et contrôler le serrage des vis. Pour le nettoyage et la désinfection, il est nécessaire de respecter les procédures ci-dessous :

1. Porter des gants
2. Avant de procéder à une désinfection attentive, éliminer les salissures apparentes.
3. Pour le nettoyage, utiliser de l'eau ou des détergents non agressifs.

4. Essuyer avec un chiffon sec et propre.

Il est aussi possible de nettoyer le produit dans un lave-vaisselle domestique à température maximale. Le coussin souple doit être lavé exclusivement à la main.

CONDITIONS DE RÉUTILISATION :

Le produit peut être réutilisé par d'autres utilisateurs. Avant de pouvoir être utilisé par d'autres utilisateurs, le produit doit être nettoyé et désinfecté correctement. Avant de céder le produit à d'autres personnes, celui-ci doit être contrôlé par des revendeurs qualifiés.

PROCÉDURE D'ÉLIMINATION CORRECTE :

Ne pas jeter le produit avec les ordures ménagères ordinaires. Contactez les autorités locales pour connaître la procédure d'élimination correcte.

RAPPORTS D'ACCIDENT :


Si un accident grave survient dans le cadre de l'utilisation de ce dispositif, contactez le fabricant à l'adresse info@imglobaldesign.com ainsi que les autorités compétentes de votre pays.

REF	Code produit	LOT	Numéro de lot
	Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745		Fabricant
SN	Numéro de série		Date de fabrication
MD	Dispositif médical		Consulter les instructions d'utilisation

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.


1

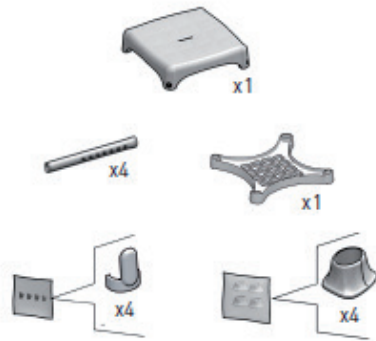

2




3

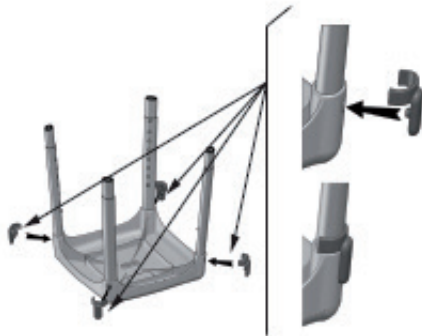


4



5

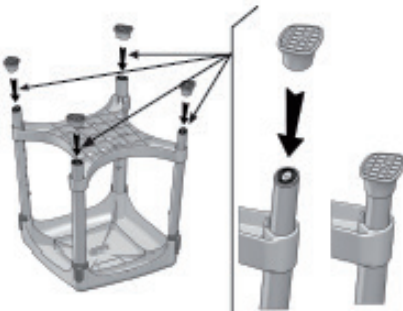

6

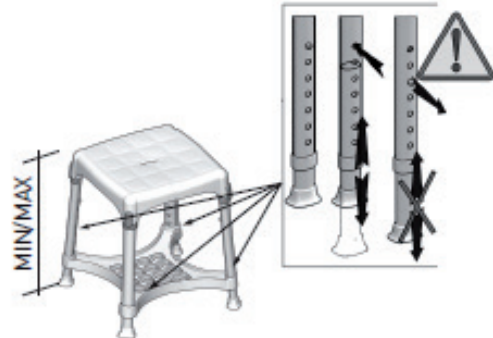

7



MAX USER WEIGH:
PESSO MASSIMO UTILIZZATORE:
POIDS MAXIMUM UTILISATEUR:
MAXIMALES BENUTZERGEWICHT:
PESSO MÁXIMO DEL USUARIO:
PESSO MÁXIMO DO UTILIZADOR
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ:

170 Kg
375 lb



LM GLOBAL DESING Ltd.
Suite 123, The Capel Building
Mary's Abbey Dublin 7, D07VY68, Ireland
Made in Italy

GIMA 42904

REF KING-STAT-74

