



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

DEAMBULATORE ASCELLARE AXILLARY WALKING FRAME DÉAMBULATEUR AXILLAIRE GEHHILFE MIT ACHSELSTÜTZE ANDADOR AXILAR ANDARILHO AUXILIAR ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΡΑΣ ΜΕ ΥΠΟΜΑΣΧΑΛΙΑ AXILÄR GÅNGRAM

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε.

Det är nödvändigt att meddela tillverkaren och de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten, om alla allvariga olyckor som inträffat i samband med den medicintekniska utrustning som levererats av oss.

REF YDL03 (GIMA 43134)



INTCO MEDICAL (HK) CO., LTD
FLAT/RM 19C, LOCKHART CENTRE, 301-307
LOCKHART ROAD, WAN CHAI, HONG KONG, P.R. China
Made in China

Importato da/Imported by/Importé par/ Eingeführt von
Importador por/Eισαγωγή από/Importerad av:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Posez le cadre plié sur le sol, vérifiez les quatre roulettes et verrouillez.


Poussez la barre d'accouplement verticale (24) dans le tube droit (23) de la partie accoudoir, puis utilisez le bouton (8) pour la verrouiller.

Poussez les deux accoudoirs de rechange avec la poignée dans le tube fixe (7) et verrouillez-les à la hauteur désirée à l'aide du bouton de réglage.

Le siège peut être facilement inséré et retiré du cadre par les 4 crochets dont il est équipé.

Pour marcher avec le déambulateur, soulevez-le et placez-le devant vous et, en vous assurant que les quatre pieds reposent fermement sur le sol, faites un pas à la fois.

Poids max : 120 kg

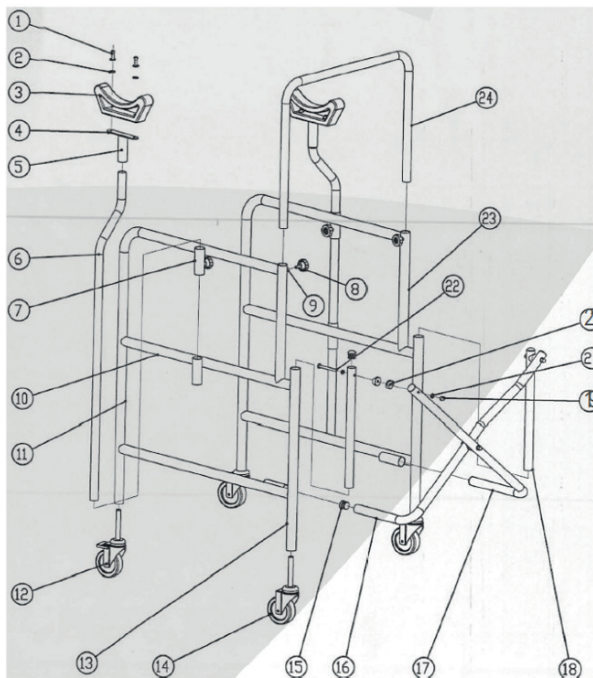

1. Rivet
2. Rondelle
3. Pièce d'appui axillaire
4. Partie fixe
5. Tube fixe pour barre transversale
6. Tube d'appui axillaire
7. Tube fixe pour support axillaire
8. Bouton de réglage
9. Écrou fixe
10. Rail fixe
11. Tube droit de la partie accoudoir
12. Roulettes verrouillables
13. Tube droit arrière
14. Roulettes non verrouillables
15. Tuyau fermé
16. Barre transversale
17. Barre transversale
18. Barre de guidage
19. Écrou borgne en plastique
20. Rondelle plate
21. Rondelle de barre transversale
22. Vis de la barre transversale
23. Tube droit de la partie accoudoir
24. Barre d'accouplement verticale

	Fabricant		À conserver dans un endroit frais et sec
	Consulter les instructions d'utilisation		À conserver à l'abri de la lumière du soleil
	Code produit		Numéro de lot
	Date de fabrication		Dispositif médical
	Représentant autorisé dans la Communauté européenne		Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements)
	Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745		

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.