



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

---

**SEDIA PER MASSAGGI PIEGHEVOLE**  
**FOLDABLE MASSAGE CHAIR**  
**CHAISE DE MASSAGE PLIANTE**  
**FALTBARER MASSAGESTUHL**  
**SILLA DE MASAJE PLEGABLE**  
**CADEIRA DE MASSAGEM DOBRÁVEL**

---

## GIMA 44050

Fabbricante/Manufacturer/Fabricant/Fabricante:

**Anji Sukar Furniture Co., Ltd.**

Tangpu Industrial Zone, Dipu Town, Anji, Zhejiang

Province, China. P.C.: 313300

peter@zjruixiang.com

**REF** MC006

Importato da/imported by/importé par/importado por

**GIMA S.p.A**

Via Marconi, 1 – 20060

Gessate (MI) – Italy

[gima@gimaitaly.com](mailto:gima@gimaitaly.com) - [export@gimaitaly.com](mailto:export@gimaitaly.com)

[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

Made in China




## PRÉCAUTIONS AVANT EMPLOI

1. Effectuer régulièrement l'entretien de la chaise. S'assurer que toutes les vis sont bien serrées et que le câble n'est ni détérioré ni effiloché. S'assurer que la structure métallique ne présente aucune fissure.
2. Ne pas surcharger la chaise au-delà de la limite de poids recommandée. Une surcharge pourrait entraîner de graves lésions à l'utilisateur. Ce produit est testé pour supporter une charge de travail maximale de 120 kg.
3. Ne pas utiliser de produits de nettoyage à base d'alcool quand on nettoie le vinyle. Ils pourraient endommager le vinyle. Utiliser de l'eau savonneuse pour le nettoyage, puis utiliser un chiffon pour sécher.
4. Quand on utilise la chaise, s'assurer que les quatre pieds sont réglés à la même hauteur. Si on utilise des pieds réglés avec différentes hauteurs, la chaise peut devenir instable ce qui pourrait provoquer des lésions.
5. Ne pas laisser les enfants monter ou démonter la chaise de massage sans votre supervision.
6. Faire attention quand on utilise des objets pointus ou tranchants car ils pourraient percer le revêtement. Tenir tout objet tranchant ou pointu à distance du revêtement de la chaise.



## INSTRUCTIONS POUR MONTAGE

Procéder comme indiqué ci-dessous:

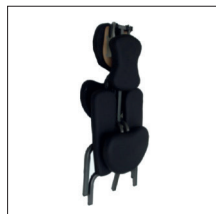

a



b



c




d




e




f

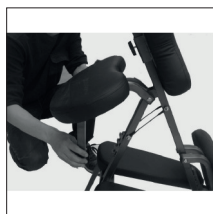


g

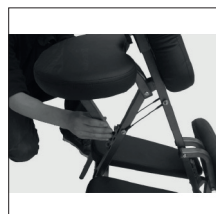


h

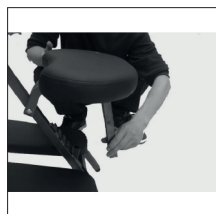

i

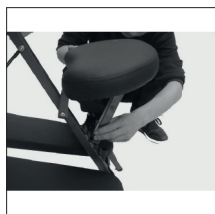

j

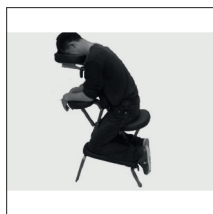

k

1. Retirer la chaise de massage de la boîte en carton comme indiqué dans l'image 1.
2. Ouvrir les quatre pieds de la chaise et s'assurer que les pieds sont bien posés au sol, au même niveau, comme indiqué dans les images b et c.
3. Régler la tête dans la direction permettant le plus grand confort pour le patient, comme indiqué dans l'image d.
4. Régler la position du coussin pour la poitrine et le fixer dans cette position à l'aide du bouton noir situé derrière le coussin pour la poitrine comme indiqué dans les images e et f.
5. Régler l'assise de manière à garantir une position confortable, avec le support de l'assise, comme montré dans les images g et h.
6. Régler le repose-mains de manière à garantir une position confortable grâce au support du repose-mains, comme montré dans les images i et j.
7. Maintenant la chaise de massage portable est prête à être utilisée.

### CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.