



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**BARELLA PROFESSIONALE DA CORZIA**  
**PROFESSIONAL STRETCHER TROLLEY**  
**CHARIOT BRANCARD PROFESSIONNEL D'URGENCE**  
**CARRO CAMILLA PROFESIONAL DE URGENCIAS**



- È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.
- All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.
- Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.
- Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

**REF**

**44760**

Gima S.p.A.  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
www.gimaitaly.com  
Made in Italy




## INTRODUCTION

Aux termes du Règlement (UE) 2017/745, le produit appartient aux DISPOSITIFS MÉDICAUX DE CLASSE I. Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d'utiliser le produit.

## DESCRIPTION

Le chariot brancard professionnel d'urgence est destiné à être utilisé dans les centres hospitaliers pour faciliter les déplacements dans le service des urgences et transférer aisément les patients des équipements de diagnostic.

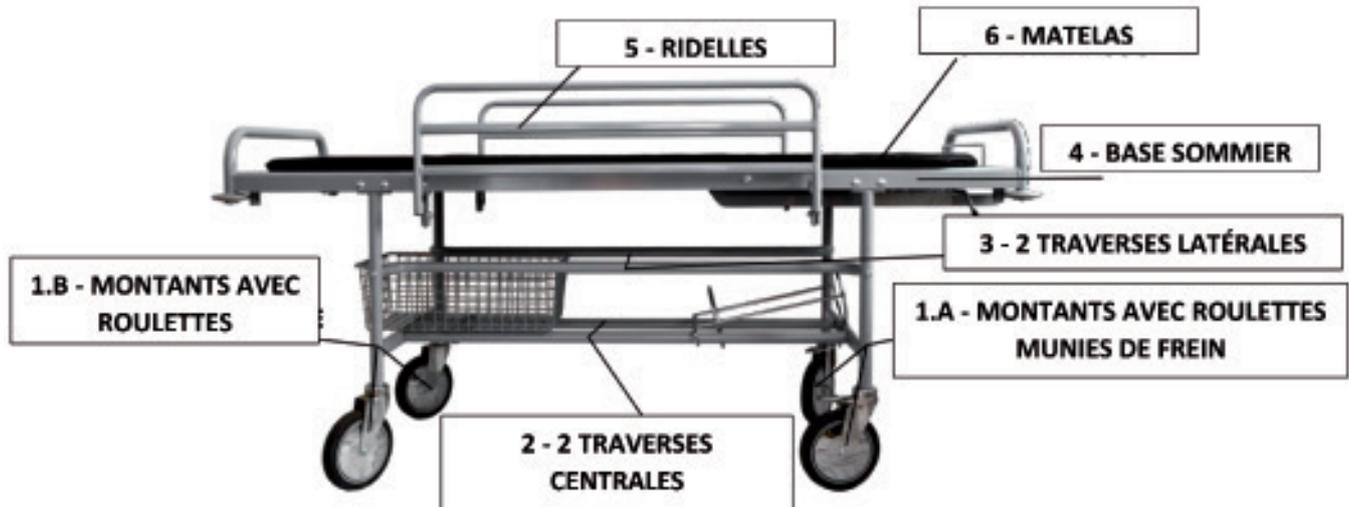

Le chariot brancard professionnel d'urgence est équipé d'un dossier réglable à l'aide d'une crémaillère automatique à 5 positions, de ridelles rabattables avec fixation automatique; les angles de sa surface sommier sont protégés par des pare-chocs en caoutchouc synthétique; ses 4 roulettes sont pivotantes et 2 d'entre elles sont munies d'un frein indépendant.

## COMPOSANTS:

Le chariot brancard est livré complètement démonté, avec les accessoires pour l'assemblage:

- 1.A** • Montants avec roulettes avant dotées de frein
- 1.B** • Montants avec roulettes arrière
- 2** • 2 traverses centrales
- 3** • 2 traverses latérales
- 4** • Base sommier avec crémaillère automatique et pare-chocs
- 5** • Paire de ridelles rabattables avec fixation automatique (Sur demande)
- 6** • Matelas noir (Sur demande)

**Accessoires sur demande:** Matelas (cod. 44765); Paire de ridelles rabattables (cod 44761); Panier (cod. 44763); Porte-bouteille (cod. 44764); Bras de perfusion pour brancard qui permet de fixer le bras directement à la structure du lit.


## Sac avec matériel de montage:

- 12 VIS TÊTE RONDE COLLET CARRÉ 8x40 + boulons et rondelles
- 4 VIS TÊTE RONDE 8x50 + rondelles
- 4 VIS TÊTE RONDE 8x40 + rondelles

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE

**Commencez la phase d'assemblage en mettant en place un plan de travail horizontal stable.**

Fixer les deux paires de montants munis de roulettes (1.A et 1.B) aux 2 traverses centrales (2) à l'aide des 4 VIS TÊTE RONDE 8x40 + rondelles.

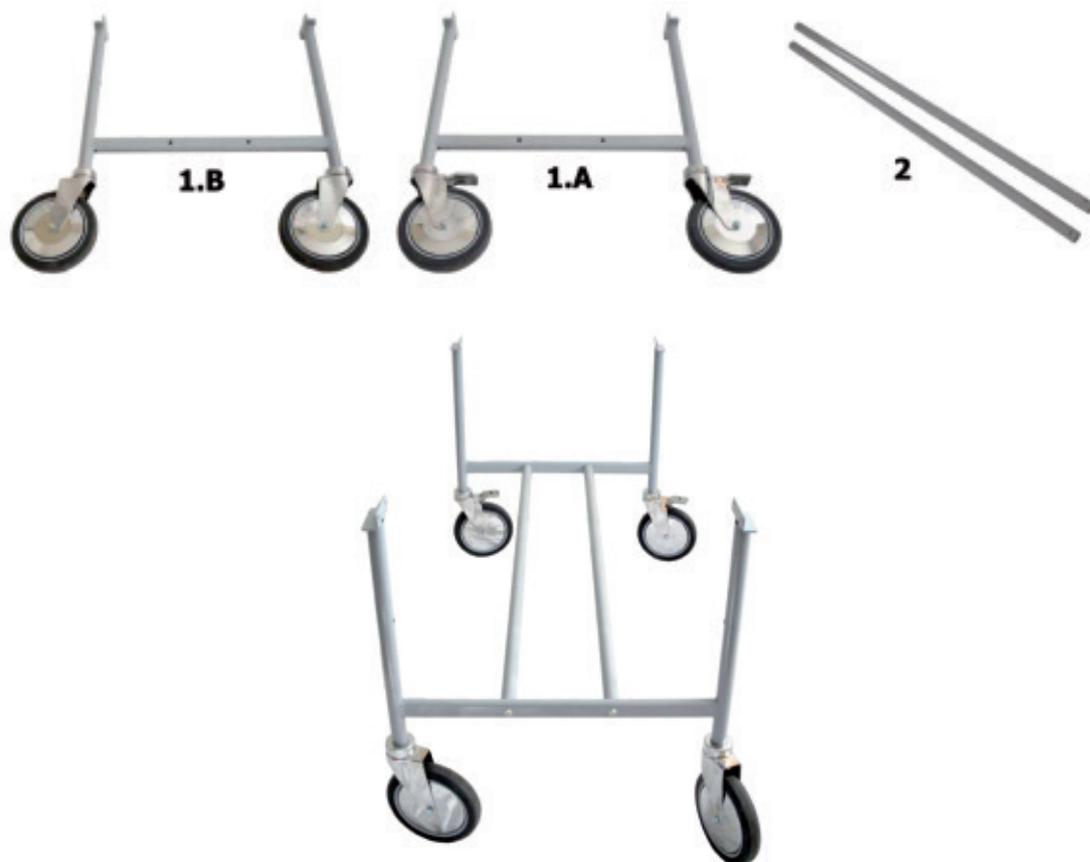

Ensuite fixer les traverses latérales (3) à la structure, toujours à l'aide des 4 VIS TÊTE RONDE 8x50 + rondelles.



Prendre la base sommier du chariot brancard (4) et la fixer à la structure inférieure à l'aide de 8 VIS TÊTE RONDE COLLET CARRÉ 8x40 + boulons et rondelles.



Si fournies, prendre les ridelles et les fixer à la structure du sommier (4) à l'aide de 4 VIS TÊTE RONDE COLLET

CARRÉ 8x40 + boulons et rondelles pour chaque ridelle (voir les détails sur l'agrandissement).



### FICHE TECHNIQUE

<b>Dimensions</b>	Civière avec pare-chocs uniquement : 202 x 71 x h 90 cm (hauteur du sommier : 78 cm). Civière avec barrières latérales : 202 x 75 x h 90 cm (hauteur du sommier : 78 cm). Boîte: cm 205 x 24 x 76h
<b>Poids</b>	40 kg 48 kg avec boîte
<b>Capacité de charge maximale</b>	135 kg

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas dépasser la capacité de charge maximale spécifiée dans les fiches techniques.
- S'assurer que les écrous de blocage sont étroitement serrés.
- Éviter le contact direct avec des blessures ouvertes.
- Ne convient pas pour l'usage en plein air.
- Lorsqu'on règle la hauteur du brancard et le dossier, vérifier que personne n'a introduit les mains, les jambes ou autre dans la région de déplacement: RISQUE D'ÉCRASEMENT!
- Déplacer le lit sans le soulever du sol.
- Si le lit est équipé de roulettes, vérifier avant tout déplacement que les roulettes ne sont pas freinées.

### ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Utiliser seulement des pièces détachées d'origine.
- Contrôler périodiquement tous les points de fixation.
- Pour une conservation optimale, il est recommandé d'éviter l'exposition prolongée aux rayons du soleil; le contact avec des milieux salins; le stockage dans des milieux très humides.
- Nettoyer les surfaces en acier inoxydable avec de l'eau savonneuse et utiliser des désinfectants spéciaux.
- Rincer avec un chiffon mouillé et sécher soigneusement.
- Ne pas verser de détergents à base de chlore ou d'ammoniaque, ni de substances grasses et huileuses, sur les surfaces.
- Ne pas utiliser d'instruments contenant fer pour le nettoyage. Si la désinfection est nécessaire, utiliser seulement des produits convenables non corrosifs.

**INDICATIONS POUR LE NETTOYAGE DU TISSU:**

Nettoyer avec un chiffon humide et savonné et bien rincer à l'eau claire. Ne pas utiliser de solvants, eau de javel ou détergents chimiques ou spray pour polir. Attention: En général les couleurs claires du similicuir ne doivent pas entrer en contact avec les colorants non fixés de certains vêtements (par exemple. jeans et similaires), pour éviter des traces ineffaçables.

	À conserver à l'abri de la lumière du soleil		Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745		À conserver dans un endroit frais et sec
	Code produit		Consulter les instructions d'utilisation		Fabricant
	Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements)		Numéro de lot		Dispositif médical
	Date de fabrication		Identifiant unique de l'appareil		

**CONDITIONS DE GARANTIE GIMA**

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.