

SCHEMA DI ASSEMBLAGGIO ASSEMBLY PLANNING SCHEMA DE MONTAGE

1—INFILARE IL PIANO SUPERIORE NELLE GAMBE ALTE E POSIZIONARE LE VITI SENZA FISSARLE

1— Enfiler le châssis du plateau supérieur dans les pieds hauts et positionner les vis, mais ne pas les fixer

1— Insert the upper shelf case into the high legs and set the screws, but don't fix them

2—INFILARE IL PIANO INFERIORE NELLE GAMBE ALTE E POSIZIONARE LE VITI SENZA FISSARLE

2— Enfiler le châssis du plateau inférieur dans les pieds hauts et positionner avec les vis, mais ne pas les fixer

2— Insert the lower shelf case into the high legs and set the screws, but don't fix them

3—INFILARE LE GAMBE BASSE E POSIZIONARE LE VITI SENZA FISSARLE

3— Enfiler les pieds bas et positionner les vis, mais ne pas les fixer

3— Insert the short legs and set the screws, but don't fix them

4—FISSARE LE VITI

4— Fixer les vis

4— Fix the screws

5—INSERIRE I TAPPI

5— Insérer les bouchons

5— Insert the plugs

6—APPLICARE LA MANIGLIA


6— Appliquer la poignée

6— Insert the handle

7—AVVITARE LE RUOTE

7— Visser les roues

7— Screw the castors

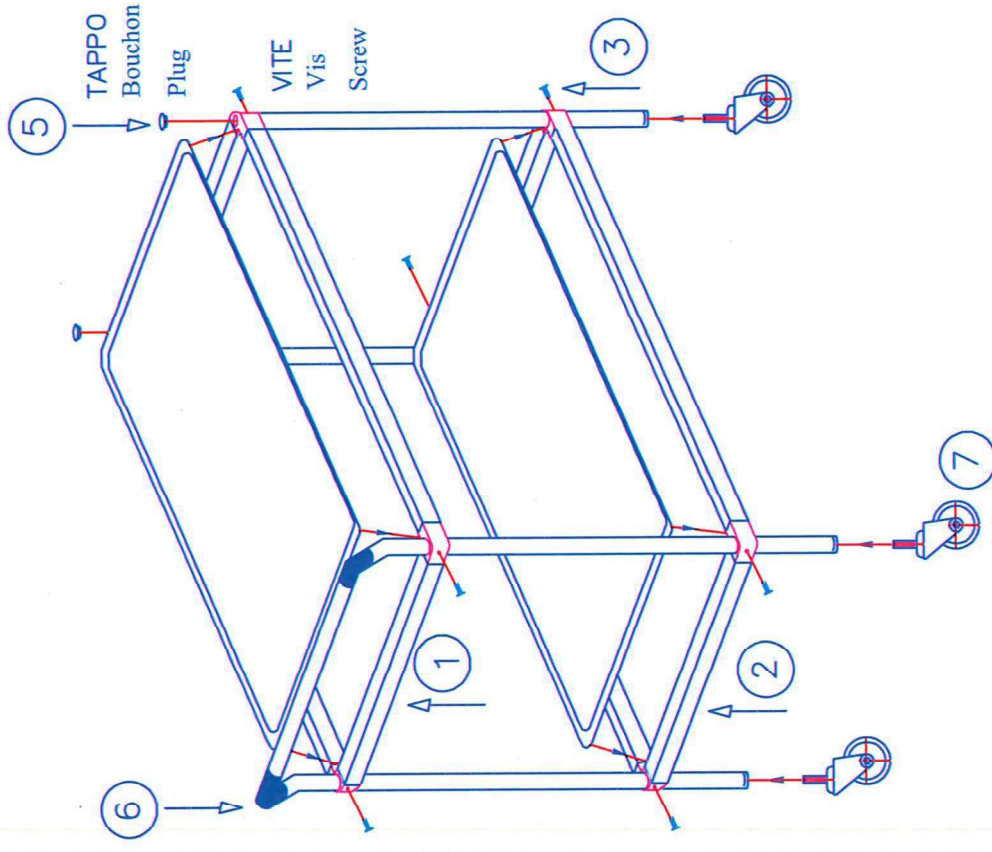

Titanox S.r.l.
www.titanox.com
MADE IN ITALY

M600878/I — M600879/I
M600878/L — M600879/L



Istruzioni per la pulizia dell'articolo e manutenzione ordinaria

Il fabbricante non sarà responsabile per il danneggiamento causato dall'utilizzo di materiali che possano deteriorare la superficie del prodotto o da corrosivi chimici utilizzati durante la pulizia.

Per pulire il prodotto, utilizzare esclusivamente un panno pulito imbevuto d'acqua ed asciugare con un panno pulito ed asciutto.

Non usare sostanze abrasive, acidi, alcol, detergenti a base di cloro, disinfettanti ed acetone, perché tali sostanze provocano l'abrasione delle parti in plastica e l'arrugginimento delle superfici metalliche.

Controllare di tanto in tanto che le viti non siano allentate ed avvitarle di conseguenza

Cleaning Notice and routine maintenance

The manufacturer company cannot be held responsible for the damage that is caused by using materials that could damage the product surface or corrosive chemicals during cleaning.

To clean the product, use only a clean cloth imbued of water and then dry with a clean and dried cloth.

Do not use abrasive substances, acids, alcohol, chlorine-based cleaners, disinfectants and acetone when cleaning, because these substances cause the abrasiveness of the plastic surfaces and rusting of metal surfaces.

Check from time to time that the screws are not loose and tighten accordingly

Notice de nettoyage et entretien ordinaire

Le fabricant ne sera pas responsable des dommages causés par l'utilisation de matériaux qui peuvent endommager la surface du produit ou des produits chimiques corrosifs utilisés pendant le nettoyage.

Pour nettoyer le produit, utilisez exclusivement un chiffon propre imbibé d'eau et sécher avec un chiffon propre et sec.

Ne pas utiliser de produits abrasifs, acides, alcools, produits de nettoyage à base de chlore, de désinfectants et de l'acétone, car ces substances provoquent l'abrasion des pièces en plastique et la rouille des surfaces métalliques.

Vérifier de temps en temps que les vis ne sont pas lâchées et serrer en conséquence