



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Gima S.p.A.  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

**STRISCIA PER TEST STREP A RAPID TEST (TAMPONE FARINGEO)  
STREP A RAPID TEST STRIP (THROAT SWAB)  
BANDELETTE TEST RAPIDE STREP A (PRÉLÈVEMENT DE GORGE)  
STREP A SCHNELLTEST-STREIFEN (HALS-/RACHENABSTRICH)  
PRUEBA RÁPIDA DE STREP A EN TIRA (FROTIS DE GARGANTA)  
TIRA PARA TESTE RÁPIDO DE ESTREPTOCOCOS A  
(COTONETE DE GARGANTA)  
ΤΑΙΝΙΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ STREP A (ΛΑΡΥΓΓΙΚΟΥ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ)**

**Manuale d'uso - User manual**

**Manuel de l'utilisateur - Gebrauchsanweisung**

**Guía de Uso - Guia para utilização - Οδηγίες χρήσης**

**PER USO PROFESSIONALE  
FOR PROFESSIONAL USE  
FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH  
PARA USO PROFESIONAL  
PARA USO PROFISSIONAL  
ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

**ATTENZIONE:** Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

**ATTENTION:** The operators must carefully read and completely understand the present manual before using the product.

**AVIS:** Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d'utiliser le produit.

**ACHTUNG:** Die Bediener müssen vorher dieses Handbuch gelesen und verstanden haben, bevor sie das Produkt benutzen.

**ATENCIÓN:** Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual antes de utilizar el producto.

**ATENÇÃO:** Os operadores devem ler e entender completamente este manual antes de usar o produto

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Οι χειριστές αυτού του προϊόντος πρέπει να διαβάσουν και να καταλάβουν πλήρως τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από την χρήση του.

**REF 24523**



**Gima S.p.A.**  
Via Marconi, 1  
20060 Gessate (MI) Italy  
Made in P.R.C.

STERILE EO



IVD





## Ταινία Ταχείας Εξέτασης Strep A (Λαρυγγικού Εκκρίματος) Ένθετο Συσκευασίας

Μια ταχεία εξέταση για τον ποιοτικό προσδιορισμό αντιγόνου Strep A σε δείγματα λαρυγγικού εκκρίματος. Για in vitro επαγγελματική διαγνωστική χρήση μόνο.



### ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Η Ταινία Ταχείας Εξέτασης Strep A (Λαρυγγικού Εκκρίματος) είναι μια ταχεία χρωματογραφική ανοσοβιολογική δοκιμασία για τον ποιοτικό προσδιορισμό του αντιγόνου Strep A από δείγματα λαρυγγικού εκκρίματος που βοηθάει στην διάγνωση Ομάδας A Στρεπτοκοκκικής λοίμωξης.

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο Πυογενής Στρεπτόκοκκος (*Streptococcus pyogenes*) είναι ένα μη κινητικό Gram θετικό κοκκίο, το οποίο περιέχει το Lancefield group A αντιγόνο που μπορεί να προκαλέσει σοβαρές λοιμώξεις όπως φαρυγγίτιδα, αναπνευστική λοίμωξη, κηρίο, ενδοκαρδίτιδα, μηνιγγίτιδα, λοχειακή σήψη και αρθρίτιδα. Χωρίς θεραπευτική αγωγή, οι λοιμώξεις αυτές μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρές επιπλοκές, συμπεριλαμβανομένων των ρευματικού πόνου και του περιαμυγδαλικού αποστήματος. Οι παραδοσιακές μέθοδοι διαπίστωσης λοιμώξεων Στρεπτόκοκκου ομάδας A εμπλέκουν την απομόνωση και αναγνώριση βιώσιμων οργανισμών με χρήση τεχνικών που απαιτούν από 24 έως 48 ώρες ή και περισσότερο.

Η Ταινία Ταχείας Εξέτασης Strep A (Λαρυγγικού Εκκρίματος) είναι μια ταχεία δοκιμασία για τον ποιοτικό προσδιορισμό της παρουσίας αντιγόνου Strep A σε δείγματα λαρυγγικού εκκρίματος, δίνοντας αποτελέσματα μέσα σε 5 λεπτά. Το τεστ κάνει χρήση εξειδικευμένων αντισωμάτων για Lancefield Group A Στρεπτόκοκκο για την επλεκτική ανίχνευση αντιγόνου Strep A σε δείγμα λαρυγγικού εκκρίματος.

### ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η Ταινία Ταχείας Εξέτασης Strep A (Λαρυγγικού Εκκρίματος) είναι μια ποιοτική, πλευρικής ροής ανοσοβιολογική εξέταση για την ανίχνευση του Strep A αντιγονικού υδατάνθρακα σε λαρυγγικό έκκριμα. Στο τεστ αυτό, εξειδικευμένο αντίσωμα σε Strep A αντιγονικό υδατάνθρακα βρίσκεται στην περιοχή της γραμμής αποτελέσματος του τεστ. Μετά την εμβάπτιση της ταινίας στο δείγμα, το δείγμα αντιδρά με το αντίσωμα σε Strep A το οποίο είναι επιχρισμένο σε σωματιδιακή μορφή. Το μίγμα μετακινείται στην μεμβράνη και αντιδρά με το αντίσωμα σε Strep A δημιουργώντας μια κόκκινη στην περιοχή εξέτασης. Η παρουσία αυτής της κόκκινης γραμμής στην περιοχή εξέτασης υποδεικνύει θετικό αποτέλεσμα ενώ η απουσία της δηλώνει αρνητικό αποτέλεσμα. Σαν μάρτυρας ελέγχου εμφανίζεται πάντοτε μια κόκκινη γραμμή στην περιοχή ελέγχου εάν το τεστ πραγματοποιηθεί σωστά. Εάν δεν εμφανισθεί αυτή η κόκκινη γραμμή, το τεστ θα πρέπει να θεωρηθεί άκυρο.

### ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ

Η ταινία περιέχει επιχρισμένα σωματίδια αντίσωμα Strep A και αντίσωμα Strep A επιχρισμένη στην μεμβράνη.

### ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ


- Για in vitro επαγγελματική διαγνωστική χρήση μόνο. Να μην χρησιμοποιείται μετά την ημερομηνία λήξης.
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε στο χώρο χειρισμού των δειγμάτων και των τεστ.
- Χειριστείτε τα δείγματα σαν να περιέχουν λοιμογόνο παράγοντα. Τηρείτε τις καθιερωμένες προφυλάξεις έναντι μικροβιολογικών κινδύνων και εφαρμόζετε τις συνήθεις διαδικασίες για την κατάλληλη διάθεση των δειγμάτων.
- Κατά την εξέταση των δειγμάτων φοράτε προστατευτική ενδυμασία, όπως γάντια μιας χρήσης, παδιά και γυαλιά ασφαλείας.
- Η αποκομιδή των χρησιμοποιημένων τεστ θαπει να γίνεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- Η υγρασία και η θερμοκρασία μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στα αποτελέσματα.
- Μην χρησιμοποιείτε το τεστ εάν η συσκευασία είναι κατεστραμμένη.
- Το αντιδραστήριο Β περιέχει ένα όξινο διάλυμα. Εάν έρθει σε επαφή με τα μάτια ή το δέρμα, ξεπλύνετε με άφθονο νερό.
- Τα θετικά και αρνητικά controls περιέχουν αζίδιο του νατρίου (NaN<sub>3</sub>) σαν συντηρητικό.
- Μην εναλλάσσετε τα πόματα των δοχείων των αντιδραστηρίων.
- Μην εναλλάσσετε τα πόματα των δοχείων των controls.

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

Αποθηκεύστε την σφραγισμένη συσκευασία σε θερμοκρασία δωματίου ή ψυγείο (2-30°C). Η ταινία παραμένει σταθερή μέχρι την ημερομηνία λήξης που είναι τυπωμένη στην σφραγισμένη συσκευασία. Η ταινία πρέπει να παραμείνει στην σφραγισμένη συσκευασία μέχρι την χρήση. ΜΗΝ ΚΑΤΑΨΥΧΕΤΕ. Μην χρησιμοποιείτε μετά την ημερομηνία λήξης.

### ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Συλλέξτε το δείγμα λαρυγγικού εκκρίματος με τον αποστειρωμένο σπειλέο που παρέχεται με το σετ.

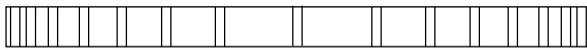

Στειλεοί μεταφοράς που περιέχουν τροποποιημένο κατά Stuart's ή Amies μέσον μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν με αυτό το προϊόν. Συλλέξτε δείγμα από τον έσω φάρυγγα, αμυγδαλές και άλλες ερεθισμένες περιοχές. Αποφύγετε την επαφή του στειλεού με την γλώσσα, παρειές και δόντια.

- Η εξέταση πρέπει να πραγματοποιείται αμέσως μετά τη συλλογή των δειγμάτων. Τα δείγματα εκκρίματος μπορούν να διατηρηθούν σε θερμοκρασία δωματίου έως τέσσερις ώρες πριν την εξέταση.
- Εάν είναι επιθυμητή η καλλιέργεια, κυλήστε ελαφρά το ρύγχος του στειλεού σε ένα Ομάδας Α επιλεκτικό (GAS) πλακίδιο με άγαρ αιματος πριν την χρήση του στειλεού στο Ταϊνία Ταχείας Εξέτασης Strep A (Λαρυγγικού Εκκρίματος).

### ΥΛΙΚΑ

#### Παρεχόμενα Υλικά

- Ταινίες εξέτασης
- Αποστειρωμένοι στειλεοί
- Βάση εργασίας
- Ένθετο συσκευασίας
- Αντιδραστήριο A (2M Νιτρώδες Νάτριο)
- Αντιδραστήριο B (0,2M Οξικό Οξύ)
- Σωληνάρια επεξεργασίας δείγματος
- Θετικό Control (Μη-βιώσιμος Strep A; 0,09% NaN3)
- Αρνητικό Control (Μη-βιώσιμος Strep C; 0,09% NaN3)



#### Απαιτούμενα Μη Παρεχόμενα Υλικά

- Χρονόμετρο

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αφήστε την ταινία, τα αντιδραστήρια, και/ή τα controls να ισορροπήσουν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (15-30°C) πριν την πραγματοποίηση της εξέτασης.

1) Φέρτε την συσκευασία σε θερμοκρασία δωματίου πριν την ανοίξετε. Βγάλτε την ταινία εξέτασης από την σφραγισμένη συσκευασία και χρησιμοποιήστε την το συντομότερο δυνατό.

2) Κρατήστε το φιαλίδιο του Αντιδραστήριου A κατακόρυφα και ρίξτε 4 πλήρεις σταγόνες (περίπου 240 μL) σε ένα σωληνάριο επεξεργασίας δείγματος. Το Αντιδραστήριο A είναι κόκκινο χρώματος. Κρατήστε το φιαλίδιο του Αντιδραστήριου B κατακόρυφα και προσθέστε 4 πλήρεις σταγόνες (περίπου 160 μL) στο σωληνάριο. Το Αντιδραστήριο B είναι άχρωμο. Αναμίξτε το διάλυμα με απλή περιστροφή του σωληναρίου. Η πρόσθεση του Αντιδραστήριου B στο Αντιδραστήριο A μεταβάλλει το χρώμα του διαλύματος από κόκκινο σε κίτρινο. Δείτε το σχήμα 1.

3) Προσθέστε αμέσως το λαρυγγικό έκκριμα στο σωληνάριο επεξεργασίας δείγματος με το κίτρινο διάλυμα. Αναδεύσατε τον στειλεό περιστροφικά για τουλάχιστον 10 φορές. Αφήστε τον στειλεό στο σωληνάριο για 1 λεπτό. Κατόπιν βγάλτε το υγρό από τον στειλεό πιέζοντάς τον στον πάτο του σωληναρίου και σφίγγοντας το σωληνάριο καθώς βγάζετε τον στειλεό. Πετάξτε τον στειλεό Δείτε το σχήμα 2.

4) Με τα βέλη προς την διεύθυνση του δείγματος, βυθίστε την ταινία εξέτασης κατακόρυφα στο διάλυμα του επεξεργασμένου δείγματος και αρχίστε την χρονομέτρηση. Εάν η διαδικασία έχει πραγματοποιηθεί σωστά, το επεξεργασμένο διάλυμα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την μέγιστη γραμμή (MAX) της ταινίας καθώς αυτή είναι βυθισμένη. Δείτε το σχήμα 3.


5) Αφήστε την ταινία στο σωληνάριο και περιμένετε μέχρι να σχηματισθούν οι κόκκινες (κόκκινη) γραμμές (γραμμή). Διαβάστε το αποτέλεσμα σε 5 λεπτά. Μην αξιολογείτε το αποτέλεσμα μετά την πάροδο 10 λεπτών.

### ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

**ΘΕΤΙΚΟ:**\* Εμφανίζονται δύο διακριτές γραμμές. Μια γραμμή πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή ελέγχου (C) και μια άλλη γραμμή στην περιοχή εξέτασης (T). Ένα θετικό αποτέλεσμα δηλώνει ότι ανιχνεύθηκε αντιγόνο Strep A στο δείγμα.

**\*ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η ένταση του κόκκινου χρώματος στην γραμμή της περιοχής εξέτασης (T) μπορεί να ποικίλει εξαρτώμενη από την συγκέντρωση του αντιγόνου Strep A του δείγματος. Για τον λόγο αυτό, οποιαδήποτε κόκκινη απόχρωση στην περιοχή εξέτασης (T) θα πρέπει να αξιολογείται σαν θετικό αποτέλεσμα.

**ΑΡΝΗΤΙΚΟ:** Μια κόκκινη γραμμή εμφανίζεται στην περιοχή ελέγχου (C). Καμία εμφανής κόκκινη ή ροζ γραμμή δεν εμφανίζεται στην περιοχή εξέτασης (T). Ένα αρνητικό αποτέλεσμα δηλώνει την απουσία αντιγόνου Strep A από το δείγμα ή την παρουσία του σε συγκέντρωση χαμηλότερη από το επίπεδο ανίχνευσης (αποκοπή) του τεστ. Το δείγμα θα πρέπει

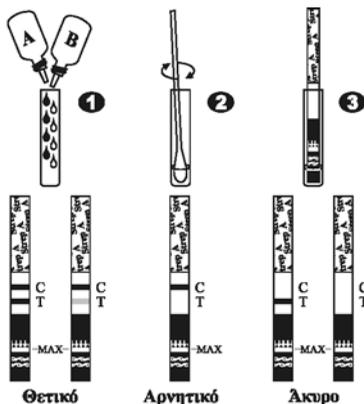



να καλλιεργηθεί για να επιβεβαιωθεί η απουσία λοίμωξης από Strep A. Εάν τα κλινικά συμπτώματα δεν συμφωνούν με τα αποτελέσματα, κάντε καλλιέργεια και δεύτερου δείγματος.

**ΑΚΥΡΟ: Δεν εμφανίζεται η γραμμή ελέγχου.** Τα πλέον πιθανά αίτια για την απουσία της γραμμής ελέγχου είναι ο ανεπαρκής όγκος δείγματος ή εσφαλμένη εκτέλεση της διαδικασίας. Μελετήστε και πάλι τη διαδικασία και επαναλάβετε την εξέταση με καινούργιο τεστ. Εάν το πρόβλημα παραμένει μην χρησιμοποιείτε πλέον την συγκεκριμένη παρτίδα και επικοινωνήστε με τον τοπικό σας διανομέα.

### ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

#### Ενσωματωμένος Ποιοτικός Έλεγχος

Στο τεστ περιλαμβάνεται Ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου της διαδικασίας. Η κόκκινη γραμμή που εμφανίζεται στην περιοχή ελέγχου (C) είναι ο θετικός μάρτυρας ελέγχου διαδικασίας. Επιβεβαιώνει την επάρκεια όγκου του δείγματος και την ορθότητα εκτέλεσης της διαδικασίας.

#### Εξωτερικός Ποιοτικός Έλεγχος

Συνίσταται να πραγματοποιείται ένα θετικό και ένα αρνητικό control κάθε 25 εξετάσεις και σαν ποιοτική απαίτηση των εσωτερικών εργαστηριακών διαδικασιών. Στο σετ παρέχονται εξωτερικά θετικά και αρνητικά controls. Εναλλακτικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλα στελέχη αναφοράς Group A και μη- Group A Στρεπτόκοκκου σαν εξωτερικά controls. Λόγω του ότι κάποια εμπορικά controls μπορεί να περιέχουν παρεμβάλλοντα συντηρητικά, δεν συνίσταται η χρήση άλλων εμπορικών controls.

#### Λαδιασμία Εξωτερικού Ποιοτικού Ελέγχου

1) Προσθέστε 4 πλήρεις σταγόνες από το Αντιδραστήριο A και 4 πλήρεις σταγόνες από το Αντιδραστήριο B στο σωληνάριο επεξεργασίας δείγματος. Αναμιζετε το υγρό χτυπώντας ελαφρά τον πάτο του σωληναρίου.  
2) Προσθέστε 1 πλήρη σταγόνα από το διάλυμα θετικού ή αρνητικού control στο σωληνάριο κρατώντας το φιαλίδιο κατακόρυφα.

3) Βάλτε ένα καθαρό στείλειδ σ' αυτό το σωληνάριο επεξεργασίας και αναδεύσατε περιστροφικά τον στείλειδο στο διάλυμα για τουλάχιστον 10 φορές. Αφήστε τον στείλειδο στο σωληνάριο επεξεργασίας για 1 λεπτό. Κατόπιν βγάλτε το υγρό από την κεφαλή του στείλειδου περιστρέφοντάς τον στο εσωτερικό του σωληναρίου και πιέζοντας το σωληνάριο καθώς βγάζετε τον στείλειδο. Πετάξτε τον στείλειδο.

4) Δείτε το Οδηγισ Χρήσης #4.

Εάν τα controls δεν δώσουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, μην χρησιμοποιήσετε τα τεστς. Επαναλάβετε την διαδικασία ή επικοινωνήστε με τον τοπικό σας διανομέα.

### ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

1) Η Ταινία Ταχείας Εξέτασης Strep A (Λαρυγγικού Εκκρίματος) προορίζεται αποκλειστικά για in vitro διαγνωστική χρήση. Το τεστ θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την ανίχνευση αντιγόνου Strep A σε λαρυγγικά εκκρίματα μόνο. Στο ποιοτικό αυτό τεστ αυτό δεν μετρείται η ποσοτική τιμή ούτε η αύξηση συγκέντρωσης του αντιγόνου Strep A.

2) Το τεστ αυτό υποδεικνύει μόνο την παρουσία αντιγόνου of Strep A στο δείγμα από βιώσιμα και μη βακτήρια Στρεπτόκοκκου Ομάδας A.

3) Ένα αρνητικό αποτέλεσμα πρέπει να επιβεβαιώνεται με καλλιέργεια. Αρνητικό αποτέλεσμα μπορεί να εμφανισθεί εάν η συγκέντρωση αντιγόνου Strep A στο δείγμα είναι ανεπαρκής ή βρίσκεται κάτω από το επίπεδο ανίχνευσης (αποκοπή) του τεστ.

4) Περίσσεια αίματος ή βλέννας στο έκκριμα μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένα θετικά αποτελέσματα. Αποφύγετε την επαφή του στείλειδ με την γλώσσα, παρειές και δόντια καθώς και κάθε αιμορραγούσης περιοχής του στόματος κατά την συλλογή του δείγματος.


5) Όπως σε όλα τα διαγνωστικά τεστς, όλα τα αποτελέσματα πρέπει να αξιολογούνται σε συνδυασμό με τα λοιπά κλινικά στοιχεία που έχει στην διάθεσή του ο ιατρός.

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΠΛΟΩΣΕΩΝ

Ευαισθησία και Εξειδίκευση

Για σκοπούς αξιολόγησης, σε τρία ιατρικά κέντρα, συλλέχθηκε ένα σύνολο 499 δειγμάτων λαρυγγικών εκκρίματων από ασθενείς που εμφάνιζαν συμπτώματα φαρυγγίτιδας. Το κάθε δείγμα τοποθετήθηκε σε πλάκα με άγερ αίματος προβάτου και κατόπιν ελέγχθηκε με Ταινία Ταχείας Εξέτασης Strep A (Λαρυγγικού Εκκρίματος). Οι πλάκες ακολούθησαν διαδικασία απομόνωσης και επωάσθηκαν στους 37°C με 5-10% CO2 και δίσκο Bacitracin για 18-24 ώρες. Οι αρνητικές πλάκες καλλιέργειας επωάσθηκαν επιπρόσθετα για 18-24 ώρες. Πιθανές αποικίες GAS υποκαλλιεργήθηκαν και επιβεβαιώθηκαν με εμπορικά διαθέσιμο κιτ συγκόλλησης latex.

Από το σύνολο των 499 δειγμάτων, 375 βρέθηκαν αρνητικά με την καλλιέργεια και 124 βρέθηκαν θετικά. Στη διάρκεια αυτής της μελέτης, δύο δείγματα Strep F έδωσαν θετικά αποτελέσματα. Ένα από αυτά

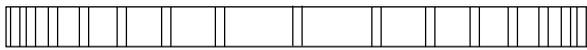

επανακαλλιεργήθηκε, επανεξετάσθηκε και έδωσε αρνητικό αποτέλεσμα. Τρία επιπλέον διαφορετικά Strep F στελέχη καλλιεργήθηκαν και ελέγχθηκαν για διασταυρούμενη αντίδραση (παρεμβολή), δίνοντας επίσης αρνητικά αποτελέσματα.

| Μέθοδος               |              | Καλλιέργεια |          | Συνολικά     |
|-----------------------|--------------|-------------|----------|--------------|
| Τεστ Strep A          | Αποτελέσματα | Θετικό      | Αρνητικό | Αποτελέσματα |
|                       | Θετικό       | 120         | 20       | 140          |
|                       | Αρνητικό     | 4           | 355      | 359          |
| Συνολικά Αποτελέσματα |              | 124         | 375      | 499          |

Σχετική Ευαισθησία: 97% (91%-99%)\*

Ακρίβεια: 95% (93%-97%)\*

Σχετική Εξειδίκευση: 95% (92%-97%)\*

\* 95% Διάστημα Βεβαιότητας

| Θετική Κατάταξη Καλλιέργειας | Τεστ Strep A/Καλλιέργεια | % Ορθότητα |
|------------------------------|--------------------------|------------|
| Ήπια                         | 10/11                    | 91%        |
| 1+                           | 9/9                      | 100%       |
| 2+                           | 17/19                    | 89%        |
| 3+                           | 36/37                    | 97%        |
| 4+                           | 48/48                    | 100%       |

#### Διασταυρούμενες Αντιδράσεις

Οι ακόλουθοι οργανισμοί δοκιμάσθηκαν σε συγκέντρωση  $1,0 \times 10^7$  ανά εξέταση και βρέθηκαν όλοι αρνητικοί με την Ταινία Ταχείας Εξέτασης Strep A (Λαρυγγικού Εκκρίματος). Δεν ελέγχθηκαν βλεννοπαράγωγα στελέχη.

Στρεπτόκοκκος Ομάδας Β

Στρεπτόκοκκος Ομάδας F

*Streptococcus pneumoniae*

*Streptococcus mutans*

*Staphylococcus aureus*

*Corynebacterium diphtheria*

*Candida albicans*

*Pseudomonas aeruginosa*

*Neisseria meningitidis*

*Neisseria sicca*

*Branhamella catarrhalis*

Στρεπτόκοκκος Ομάδας C

Στρεπτόκοκκος Ομάδας G

*Streptococcus sanguis*

*Enterococcus faecalis*

*Staphylococcus epidermidis*

*Serratia marcescens*

*Klebsiella pneumoniae*

*Bordetella pertussis*

*Neisseria gonorrhoea*

*Neisseria subflava*

*Hemophilus influenzae*



### Simbologia / Index of symbols - TEST

|  |   |
|--|---|
|  | Leggere le istruzioni per l'uso<br>Consult instructions for use               |
|  | Dispositivo medico-diagnostico in vitro<br>In vitro diagnostic medical device |
|  | Conservare tra 2 e 30°C<br>Store between 2 and 30°C                           |
|  | Conservare in luogo fresco ed asciutto<br>Keep away from sunlight             |
|  | Conservare in luogo fresco ed asciutto<br>Keep in a cool, dry place           |
|  | Contiene <math>\Sigma</math> di test<br>Contains sufficient for "n" tests     |
|  | Dispositivo monouso, non riutilizzare<br>Disposable device, do not re-use     |

|   |  |
|---|--|
|  | Data di scadenza<br>Expiration date  |
|  | Numero di lotto<br>Lot number  |
|  | Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso<br>Caution: read instructions (warnings) carefully |
|  | Rappresentante autorizzato nella Comunità europea<br>Authorized representative in the European community                           |
|  | Sterilizzato con ossido di etilene<br>Sterilized using ethylene oxide  |
|  | Dispositivo medico conforme alla Direttiva 93/42/CEE<br>Medical Device complies with Directive 93/42/EEC                           |

|   |   |
|---|---|
|  | Codice prodotto<br>Product code   |
|  | Fabbricante<br>Manufacturer   |
|  | Tossicità acuta di grado 4*<br>Tenere fuori dalla portata dei bambini. Indossare guanti e indumenti protettivi, protezione per gli occhi e viso. In caso di ingerimento consultare un medico o rivolgersi ad un centro ospedaliero. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua per diversi minuti. Rimuovere le lenti a contatto, nel caso siano presenti, e continuare a sciacquare gli occhi. Se l'irritazione dovesse persistere consultare un medico. Acute toxicity category 4<br>Keep out of the reach of children. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF SWALLOWED: Call a POISON CENTRE or doctor/physician if you feel unwell. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists, get medical advice/attention. |

**Tamponi sterili / Sterile swabs:**

 Puritan Medical Products Company LLC  
31 School Street  
Guilford, ME 04443-0149, U.S.A.

 Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP, The Hague,  
The Netherlands

 0086  

### Bibliografia / Bibliography:

- Murray, P.R., et al. Manual of Clinical Microbiology, 6th Edition, ASM Press, Washington D.C., 1995, p. 299-307.
- Webb, KH. *Does Culture Confirmation of High-sensitivity Rapid Streptococcal Tests Make Sense? A Medical Decision Analysis.* Pediatrics (Feb 1998), 101:2, 2.
- Bisno AL, Gerber MA, Gwaltney JM, Kaplan EL, Schwartz RH. *Diagnosis and Management of Group A Streptococcal Pharyngitis.* Clinical Infectious Diseases (1997), 25: 574-83.
- Needham CA, McPherson KA, Webb KH. *Streptococcal Pharyngitis: Impact of a High-sensitivity Antigen Test on Physician Outcome.* Journal of Clinical Microbiology (Dec 1998), 36: 3468-3473.
- Shea, Y.R., *Specimen Collection and Transport,* Clinical Microbiology Procedures Handbook, Isenberg, H.D., American Society of Microbiology, Washington D.C., 1.1.1-1.1.30, 1992.
- Nussinovitch, M, Finkelstein Y, Amir J, Varsano, I. *Group A beta-hemolytic streptococcal pharyngitis in preschool children aged 3 months to 5 years.* Clinical Pediatrics (June 1999), 38: 357-360.
- Woods WA, Carter CT, Stack M, Connors Jr AF, Schlager TA. *Group A Streptococcal Pharyngitis in Adults 30 to 65 years of age.* Southern Medical Journal (May 1999), 491-492.