



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS





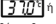

TERMOMETRO DIGITALE BL3 - AMPIO SCHERMO
BL3 DIGITAL THERMOMETER - WIDE SCREEN
DIGITAL THERMOMETRE BL3 - ÉCRAN LARGE
TERMÒMETRO DIGITAL BL3 - PANTALLA ANCHA
TERMÒMETRO DIGITAL BL3 - ECRÃ AMPLO
ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ BL3 - ΕΥΡΕΙΑΣ ΟΘΟΝΗΣ

Manuale d'uso - User manual - Manuel de l'utilisateur - Guia de uso
Guia para utilização - Οδηγίες χρήσης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εμβέλεια:	32,0–43,9 (89,6–111,1°F) Για κάτω από 32,0°C (89,6°F) δείχνει L°C (°F) Για πάνω από 43,9°C (111,1°F) δείχνει H°C (°F)
Ανάλυση:	0,1°C (°F)
Ακρίβεια:	±0,1°C (34,0°C ως 42,0°C) ±0,2°C (άλλη εμβέλεια) ±0,2°F (93,2°C ως 107,6°F) ±0,4°F (άλλη εμβέλεια)
Οθόνι:	Οθόνι γυάλινου κρυστάλλινου 3½ ψηφίων
Μπαταρία (συμπεριλαμβανόμενα):	CR2032 (3V)
Κατανάλωση ενέργειας:	0,40 μΑ/βάτ σε λειτουργία μέτρησης
Διάρκεια ζωής μπαταρίας:	Περισσότερες από 160 ώρες συνεχούς λειτουργίας
Διαστάσεις:	Περίπου 117mmx30mmx16mm
Βάρος:	Περίπου 20 γραμ. συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας
Beerer:	Ηχητικό σήμα διάρκειας περίπου 5 δευτ. μόλις καταγραφεί η μέγιστη θερμοκρασία
Μνήμη:	Ενοσωματωμένη μνήμη που επιτρέπει την προβολή προηγούμενων μετρήσεων στην οθόνι
Συνθήκες λειτουργίας:	Θερμοκρασία: 10–40°C (50–104°F) Σχετική υγρασία: 15–95% χωρίς συμπύκνωση
Συνθήκες αποθήκευσης:	Θερμοκρασία: -25–55°C (-13–131°F) Σχετική υγρασία: 15–95% χωρίς συμπύκνωση
Υγεία ποιότητας:	Ποτιστήριο ISO 13485 Συμμόρφωση με ASTM E1112, EN12470-3, EN60601-1
Κατάταξη προϊόντος:	Εξοπλισμός τύπου BF

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Αποστειρώστε (τριβόντας) τον καθεθρία με αιθυλική αλκοόλη πριν τη χρήση.
2. Πιέστε το κουμπί ON/OFF. Η οθόνι θα δείξει:  ή  →  ή 
3. Αφήστε το κουμπί λειτουργίας και η οθόνι θα δείξει L°C (L°F) με το °C (°F) να αναβοβλίνει.
4. Τοποθετήστε τον καθεθρία στην κατάλληλη θέση (από, μασάλη ή πρωκτώ).  ή 
5. Μόλις το σύμβολο των βαθμών °C (°F) σταματήσει να αναβοβλίνει στην οθόνι, θα προβληθεί η σωστή θερμοκρασία. Η αναγραφόμενη θερμοκρασία δεν θα αλλάξει όταν το °C (°F) σταματήσει να αναβοβλίνει.
6. Η συσκευή θα θβήσει αυτόματα μετά από 1 λεπτό. Ωστόσο, για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, είναι προτιμότερο να κλείσετε το θερμομετρο πιέζοντας το κουμπί ON/OFF αφού πρώτα εχετε σημειώσει τη θερμοκρασία.

Εικόνα χαρακτηριστικά:

Ήχος Κανονικής Θερμοκρασίας: Ένας ήχος θα ακουστεί όταν η μέγιστη θερμοκρασία θα έχει καταγραφεί και θα είναι έτοιμη προς προβολή. Ο ήχος «Κανονικής Θερμοκρασίας» (τέσσερα γρήγορα μπιτ ακολουθούμενα από παύση) θα επαναλαμβάνεται για περίπου 10 δευτερόλεπτα.

Ανάκληση Μνήμης Τελευταίας Θερμοκρασίας: Μόλις ανοίξετε το θερμομετρο θα ακούσετε ένα σύντομο μπιτ. Ταυτόχρονα, το θερμομετρο εκτελεί ένα δοκιμαστικό έλεγχο κατά τη διάρκεια του οποίου όλα τα ψηφιακά τμήματα εμφανίζονται στην οθόνι LCD. Στη συνέχεια, η τελευταία τιμή θα προβληθεί αυτόματα στην οθόνι LCD για 2 δευτ., καθώς και η τιμή 37,0°C (98,6°F). Η τιμή που προβλάεται θα αντικατασταθεί μόνο όταν καταγραφεί μια νέα τιμή θερμοκρασίας.

Για Μοντέλα με Ηχητικό Σήμα Πυρετού: Αν η μέτρηση της θερμοκρασίας είναι άνω των 38,0°C (100,4°F), το ηχητικό σήμα πυρετού (ένα γρήγορο μπιτ που επαναλαμβάνεται για περίπου 10 δευτ.) θα ακουστεί μόλις καταγραφεί η μέγιστη θερμοκρασία. Επίσης, το αποτέλεσμα θα παραμείνει στην οθόνι LCD έως ότου οθρήσει το θερμομετρο.

Για Μοντέλα Εναλλαγής Βαθμών Κελοίου και Φαρενάιτ: Κρατήστε πατημένο το κουμπί ON/OFF μέχρι να εμφανιστεί το °C ή το °F. Στη συνέχεια μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ του °C ή του °F. Μόλις αφήσετε το κουμπί, το θερμομετρο θα είναι σε λειτουργία μέτρησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πάντα να αποστειρώνετε το θερμομετρο πριν τη χρήση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν η θερμοκρασία διαματιού είναι μικρότερη από 32,0°C (89,6°F), αυτό θα αναγράφεται στην οθόνι αντί του L°C (ή L°F).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να τοποθετήσετε ένα προστατευτικό πλαστικό κάλυμμα στο άκρο του αισθητήρα για την πρόληψη κατά της μετάδοσης ασθενειών και μολυσμών. Η χρήση του κάλυμματος του καθεθρία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την κατά 0,1°C (0,2°F) διαφορά ως προς την πραγματική θερμοκρασία. Απομακρύνετε κάθε χρησιμοποιούμενο προστατευτικό κάλυμμα και φυλάξτε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

1. Όταν εμφανιστεί το σύμβολο , η μπαταρία πρέπει να αντικατασταθεί.



ΧΩΝΕΥΣΗ: Το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με άλλα απορρίμματα του σπιτιού. Οι χρήστες πρέπει να φροντίσουν για την χώνευση των συσκευών μεταφέροντάς τις σε ειδικούς τόπους διαχωρισμού για την ανάκυκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

REF	IT Codice prodotto GB Product code FR Code produit ES Código producto PT Código produto GR Κωδικός προϊόντος	!	IT Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso GB Caution: read instructions (warnings) carefully FR Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements) ES Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente PT Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente GR Προσοχή: διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες (ενοτάσεις)
LOT	IT Numero di lotto GB Lot number FR Numéro de lot ES Número de lote PT Número de lote GR Αριθμός παρτίδας	!	IT Seguire le istruzioni per l'uso GB Follow instructions for use FR Suivez les instructions d'utilisation ES Siga las instrucciones de uso PT Siga as instruções de uso GR Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης
!	IT Fabricatore GB Manufacturer FR Fabricant ES Fabricante PT Fabricante GR Παραγωγός	!	IT Parle applicata di tipo BF GB Type BF applied part FR Appareil de type BF ES Aparato de tipo BF PT Aparelho de tipo BF GR Συσκευή τύπου BF
!	IT Rappresentante autorizzato nella Comunità europea GB Authorized representative in the European community FR Représentant autorisé dans la Communauté européenne ES Representante autorizado en la Comunidad Europea PT Representante autorizado na União Europeia GR Εξουσιοδοτημένος αντιπροσωπός στην Ευρωπαϊκή Ένωση	!	IT Smaltimento RAEE GB WEEE disposal FR Disposition DEEE ES Disposición WEEE PT Disposição REEE GR Διάθεση WEEE
!	IT Conservare in luogo fresco ed asciutto GB Keep in a cool, dry place FR A conserver dans un endroit frais et sec ES Conservar en un lugar fresco y seco PT Armazenar em local fresco e seco GR Διατηρείται σε όρσορό και στεγνό περιβάλλον	!	IT Dispositivo medico conforme alla Direttiva 93/42/CEE GB Medical Device complies with Directive 93/42/EEC FR Dispositif médical conforme à la directive 93/42/CEE ES Dispositivo médico según la Directiva 93/42/CEE PT Dispositivo médico em conformidade com a Diretiva 93/42/CEE GR Ιατρική συσκευή σύμφωνα με την οδηγία 93/42/CEE
!	IT Conservare al riparo dalla luce solare GB Keep away from sunlight FR A conserver à l'abri de la lumière du soleil ES Conservar al amparo de la luz solar PT Guardar ao abrigo da luz solar GR Κρατήστε το μακριά από ηλιακή ακτινοβολία	!	CE
!	IT Data di fabbricazione GB Date of manufacture FR Date de fabrication ES Fecha de fabricación PT Data de fabrico GR Ημερομηνία παραγωγής	!	

REF 25554 / YD-203

Wenzhou Yosun Medical Technology Co., Ltd.,
No. 17, Shaozhong Road, Lingtong Bibibakiang Town,
Yueqing Wenzhou - 325603 Zhejiang, China,
Made in China

Lotus NL B.V. Koningin Julianaplein 10, 1e Verd,
2695AA, The Hague, Netherlands

