

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΧΑΠΙΩΝ




Κονιοποιεί χάπια κάθε μεγέθους.

- 1, Τοποθετήστε το χάπι στην διάφανη κοιλότητα
- 2, Βιδώστε το μπλέ μέρος μέχρι το τέλος
- 3, Διαλύστε το φάρμακο σε σκόνη στο γάλα, νερό ...



ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη κομματιάζετε κάψουλες προγραμματισμένες στον χρόνο, εάν αμφιβάλετε, συμβουλευτείτε τον φαρμακοποιό σας.

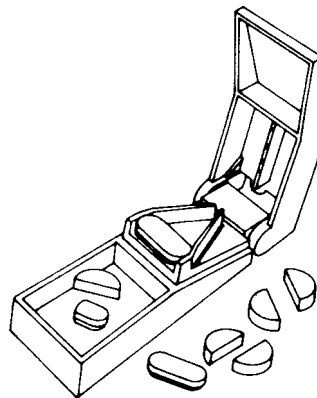

ΚΟΜΜΑΤΙΑΣΤΗΣ ΧΑΠΙΩΝ

Κομματιάζει στα δύο χάπια κάθε μεγέθους

- 1, Τοποθετήστε τον σε οποιαδήποτε επίπεδη επιφάνεια .
 - 2, Επανατοποθετήστε το χάπι στο ' V ' με τρόπο ώστε το χάπι να ακουμπάει στα δύο άκρα του ' V '.
 - 3, Χαμηλώστε μαλακά το σκέπασμα μέχρι να κλείσετε τον κομματιαστή χαπιών
- Κρατήστε τα αχρησιμοποίητα κομμάτια στον κατάλληλο χώρο.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Κοφτερή λεπίδα, κρατήστε την μακριά από τα παιδιά.



GIMA

TAGLIAPILLOLE - FRANTUMAPILLOLE
PILL SPLITTER - PILL PULVERIZER
COUPE-PILULE - BROYEUR DE PILULES
CORTAPÍLDORAS - TRITURADOR DE PÍLDORAS
CORTA-COMPRIMIDOS - QUEBRA-COMPRIMIDOS
ΚΟΜΜΑΤΙΑΣΤΗΣ ΧΑΠΙΩΝ - ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΧΑΠΙΩΝ

مكسر لأقراص الدواء - قاطع لأقراص الدواء

ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

ATTENTION: The operators must carefully read and completely understand the present manual before using the product.

AVIS: Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d'utiliser le produit.

ATENCIÓN: Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual antes de utilizar el producto.

ATENÇÃO: Os operadores devem ler e entender completamente este manual antes de usar o produto.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι χειριστές αυτού του προϊόντος πρέπει να διαβάσουν και να καταλάβουν πλήρως τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από την χρήση του.

الحذر: على العمال قراءة وفهم هذا اللليل بكامله قبل البدء باستعمال المنتج.



M25730-M-Rev.2-03.10

GIMA Spa - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) - Italia

ITALIA: Tel. 199 400 401 (8 linee r.a.) - Fax 199 400 403

E-mail: gima@gimaitaly.com - www.gimaitaly.com

INTERNATIONAL: Tel. ++39 02 953854209 - Fax ++39 02 95380056

E-mail: export@gimaitaly.com - www.gimaitaly.com